

Quick Start Guide

Signia TV Sound med Signia MaX høreapparater


Stereolyd i høj kvalitet streames direkte til dine Bluetooth-kompatible Signia-høreapparater.



Tilslut strøm til TV Sound

1. Find det medfølgende Micro USB-kabel.
2. Tilslut Micro USB-stikket til TV Sound.
3. Tilslut den anden ende til TV'ets USB-port.
4. Tænd for TV'et.


Note: Hvis dit TV ikke har en ledig USB-port, kan TV Sound tilsluttes strøm fra en stikkontakt via en USB strømadapter (minimum 150 mA/0,75 W).

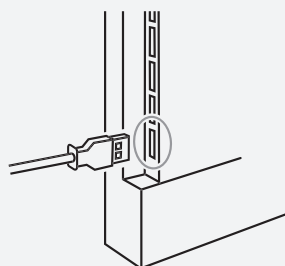

Tilslutning af lyd


Via analogt kabel

1. Tilslut det analoge lyd kabel til den lille indgang på bagsiden af TV Sound.
2. Tilslut de to analoge stik til de tilsvarende lydudgange på TV'et.
3. Tænd for TV'et for at starte lydafspilningen.

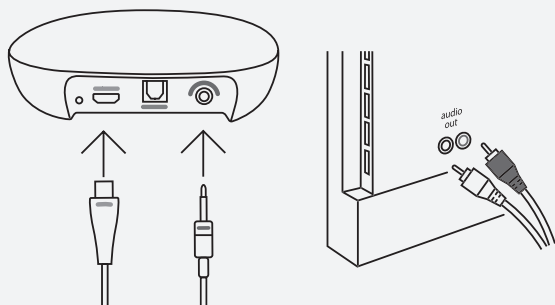

Via optisk kabel (anbefales for bedste lyd kvalitet)

1. Tilslut det optiske kabel til den blå indgang på bagsiden af TV Sound.
2. Tilslut den anden ende af kablet til TV'ets Optical OUT-udgang.
3. Tænd for TV'et for at starte lydafspilningen.

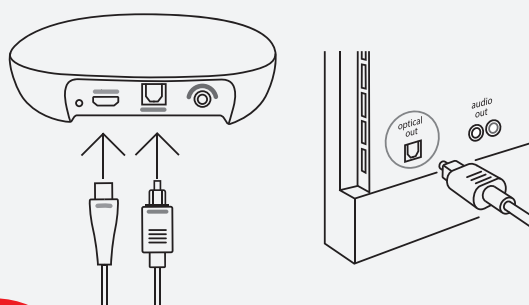

signia

Quick Start Guide

Signia TV Sound


Parring af dine høreapparater med TV Sound

1. Tænd for TV Sound.
2. Sluk høreapparaterne, og tænd dem igen ved først at placere dem i opladeren og derefter tage dem ud. Høreapparaterne vil herefter være i parringstilstand i 3 minutter.
3. Placer høreapparaterne inden for 20 cm fra TV Sound.
 - LED-indikatoren blinker blåt under parringen.
 - LED-indikatoren lyser konstant blåt i 2 sekunder og slukker derefter, når parring er gennemført.
 - LED-indikatoren lyser konstant grønt, når TV Sound modtager et lydsignal.
 - LED-indikatoren pulserer grønt, når der ikke længere modtages et lydsignal fra TV'et.

Hvis du vil parre flere sæt høreapparater, gentages samme fremgangsmåde for hvert sæt.


TIP: Hvis høreapparaterne allerede er parret med en anden enhed (f.eks. en telefon), skal du sørge for, at enheden ikke er i nærheden, eller slå Bluetooth® fra, mens høreapparaterne parres med TV Sound.

Start streaming via Signia One App

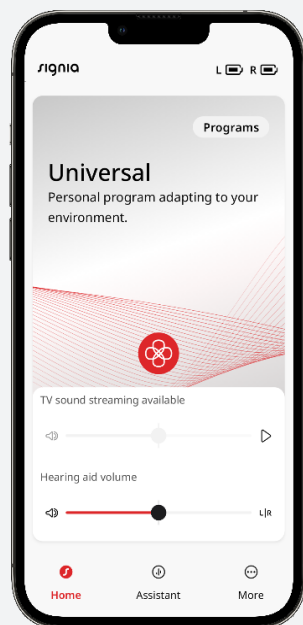

Trin 1:

- Åbn Signia One App'en.
- Når høreapparaterne er parret, vises Play-knappen til TV Sound.

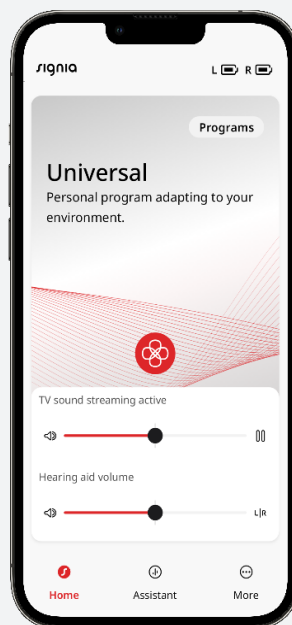

Trin 2:

1. Tryk på afspilningsknappen i højre side af TV Sound-lydstyrkebjælken for at starte streaming af TV-lyden.
2. Tryk på pause-knappen for at stoppe streamingen.
3. Juster lydstyrken ved hjælp af skyderen.

Start streaming via trykknappen på dit høreapparat

- Tryk på den nederste knap på enten venstre eller højre høreapparat i ca. 3 sekunder. Slip derefter knappen.
- Du bør nu høre TV-lyden i dine høreapparater.

Bemærk, at din hørespecialist kan ændre denne funktion under tilpasningen.

