

Quick Start Guide


Signia TV Sound med Signia MaX høreapparater

Stereolyd av høy kvalitet
strømmes direkte til dine
Bluetooth-aktiverte Signia-
høreapparater.



Strømforsyning av TV Sound

1. Ta Micro-USB-kabelen som følger med TV Sound
2. Koble Micro-USB-kontakten til TV Sound-enheten
3. Koble den andre enden av kabelen til TV-ens USB-port
4. Slå på TV-en

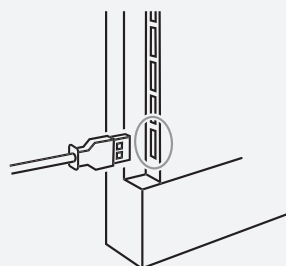


Merk: Hvis du ikke har en ledig USB-port på TV-en, kan du koble TV Sound til en stikkontakt med en USB-strømadapter (minimum 150 mA /0,75 W).

Koble til lydinngangen


Via analog kabel

1. Koble den analoge lydkabelen til baksiden av TV Sound (lilla inngang).
2. Koble de to analoge pluggene til de tilsvarende kontaktene på TV-en.
3. Slå på TV-en for å starte lyden.

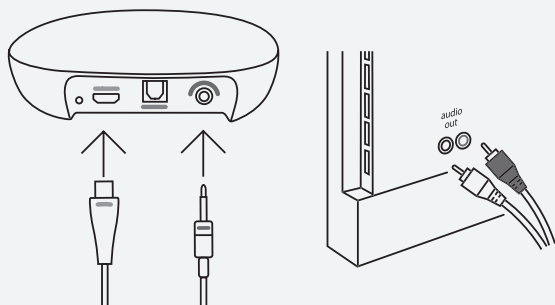

Via optisk kabel (anbefales for best lydkvalitet)

1. Koble den optiske kabelen til baksiden av TV-Sound (blå inngang).
2. Koble den andre enden av den optiske kabelen til 'Optical OUT'-kontakten på TV-en.
3. Slå på TV-en for å starte lyden.

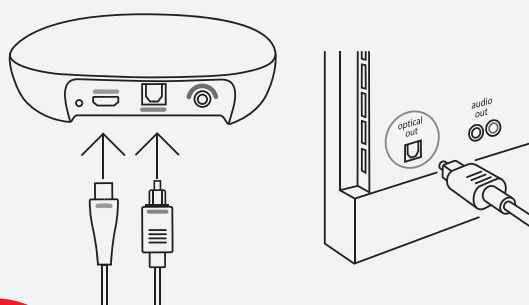

Quick Start Guide

Signia TV Sound


Paring av høreapparatene dine med TV Sound

1. Slå på TV Sound.
2. Slå høreapparatene av og på igjen ved å plassere dem i laderen og deretter ta dem ut igjen. Dette setter høreapparatene i paringsmodus i 3 minutter
3. Plasser høreapparatene innenfor 20 cm fra TV Sound.
 - LED-lampen pulserer blått under paring.
 - LED-lampen lyser konstant blått i 2 sekunder og toner deretter ut etter vellykket paring.
 - LED-lampen lyser konstant grønt når det er lydsignal fra TV-en.
 - LED-lampen pulserer grønt hvis det ikke er lydsignal fra TV-en.For å pare flere sett med høreapparater følger du ganske enkelt samme prosedyre igjen for hvert par.

TIPS: Hvis høreapparatene allerede er parett med en annen enhet (for eksempel en telefon), må du sørge for at enheten ikke er i nærheten, eller slå av Bluetooth® mens høreapparatene pares med TV Sound.




Start strømming via Signia One-App'en

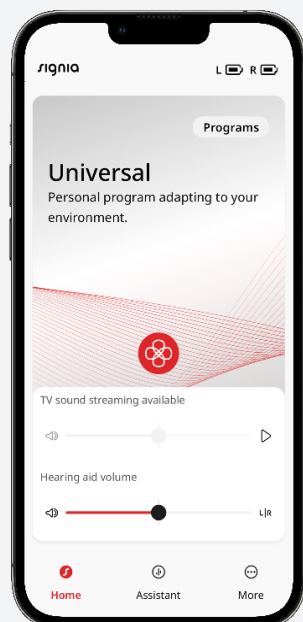

Trinn 1:

- Åpne Signia One-App'en.
- Når høreapparatene er parett, vises Play-knappen for TV Sound.

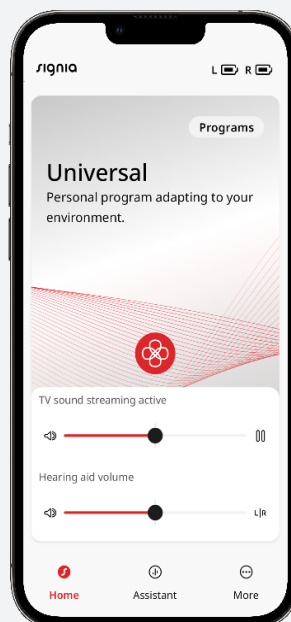

Trinn 2:

- Trykk på Play-knappen til høyre for volumglidebryteren for TV Sound for å starte strømming av TV-lyd.
- Trykk på Pause-knappen for å stoppe strømmingen.
- Juster volumet med glidebryteren.

Start strømming via trykknappen på høreapparatet ditt

- Trykk på den nederste knappen på enten venstre eller høyre høreapparat i ca. 3 sekunder. Slipp deretter knappen.
- Du skal nå høre TV-lyden i høreapparatene dine.

Merk at audiografen din kan endre denne funksjonen under tilpasningen.