

Quick Start Guide


Signia TV Sound med Signia MaX hörapparater

Stereoljud av hög kvalitet
streamas direkt till dina
Bluetooth-aktiverade
Signia-hörapparater.



Strömförsörjning av TV Sound

1. Ta den Micro-USB-kabel som medföljer TV Sound.
2. Anslut Micro-USB-kontakten till TV Sound.
3. Anslut den andra änden av kabeln till TV:ns USB-port.
4. Slå på TV:n.

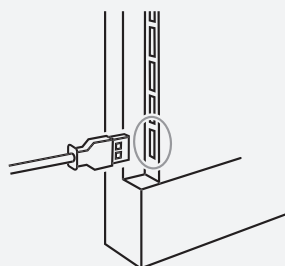


Obs! Om det inte finns någon ledig USB-port på din tv kan du ansluta TV Sound till ett vägguttag med en USB-strömadapter (minst 150 mA / 0,75 W).

Anslutning av ljudingången


Via analog kabel

1. Anslut den analoga ljudkabeln till baksidan av TV Sound (lila ingång).
2. Anslut de två analoga kontakterna till motsvarande uttag på tv:n.
3. Slå på tv:n för att starta ljudet.

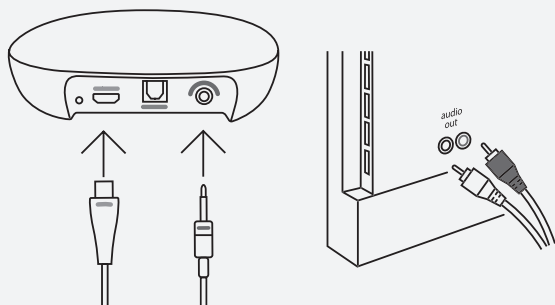

Via optisk kabel (rekommenderas för bästa ljudkvalitet)

1. Anslut den optiska kabeln till baksidan av TV Sound (blå ingång).
2. Anslut den andra änden av den optiska kabeln till uttaget 'Optical OUT' på tv:n.
3. Slå på tv:n för att starta ljudet.

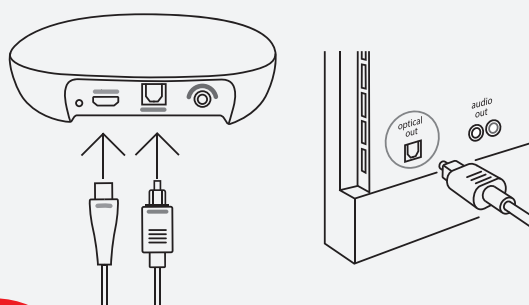

signia

Quick Start Guide

Signia TV Sound


Parring af dine høreapparater med TV Sound

1. Slå på TV Sound.
2. Stäng av hörapparaterna och slå på dem igen genom att placera dem i laddaren och sedan ta ut dem. Detta försätter hörapparaterna i parkopplingsläge i 3 minuter.
3. Placera hörapparaterna inom 20 cm från TV Sound.
 - LED-indikatoren blinker blått under parringen.
 - LED-indikatoren lyser konstant blått i 2 sekunder og slukker derefter, når parring er gennemført.
 - LED-indikatoren lyser konstant grønt, når TV Sound modtager et lydsignal.
 - LED-indikatoren pulserer grønt, når der ikke længere modtages et lydsignal fra TV'et.

Hvis du vil parre flere sæt høreapparater, gentages samme fremgangsmåde for hvert sæt.


TIPS: Om hörapparaterna redan är parkopplade med en annan enhet (t.ex. en telefon), se till att enheten inte är i närheten eller stäng av Bluetooth® medan hörapparaterna parkopplas med TV Sound.

Starta streaming via Signia One-App'en

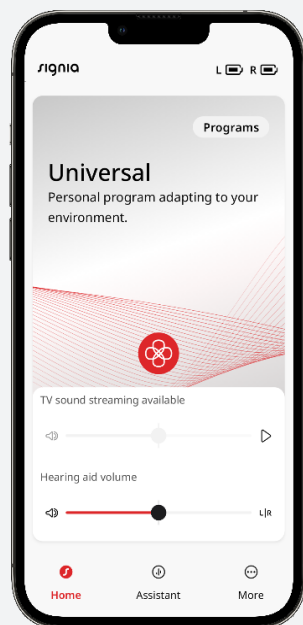

Steg 1:

- Öppna Signia One-app'en.
- När hörapparaterna har parkopplats visas Play-knappen för TV Sound.

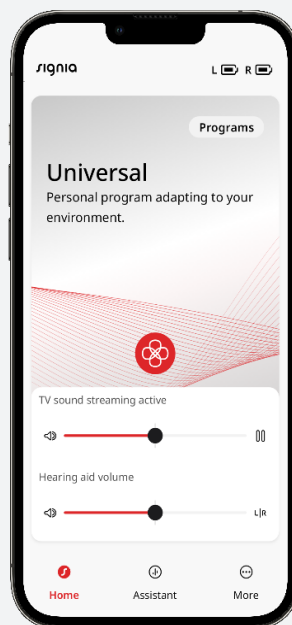

Steg 2:

- Tryck på Play-knappen till höger om volymreglaget för TV Sound för att börja streama tv-ljud.
- Tryck på Pause-knappen för att stoppa streamingen.
- Justera volymen med reglaget.

Starta streaming via tryckknappen på din hörapparat

- Tryck på den nedre knappen på antingen vänster eller höger hörapparat i cirka 3 sekunder. Släpp sedan knappen.
- Du bör nu höra tv-ljudet i dina hörapparater.

Observera att din audionom kan ändra denna funktion under anpassningen.

