



One Pager

PURE WIRD MaXIMAL INTELLIGENT

Signia denkt KI in Hörgeräten komplett neu: KI ist nicht als einzelne Funktion in Hörgeräte eingebaut, sondern die ganze Technologie von Grund auf als KI-System gedacht. Im Zentrum steht dabei das Zusammenspiel von vier DNNs, die Sprache, eigene Stimme, Umgebung und Geräusche gemeinsam analysieren und optimieren. Signia MaX steht für eine Hörtechnologie, die die gesamte Hörsituation maximal intelligent versteht. Den Auftakt der neuen Plattform macht Pure C&G MaX – Hörgeräte in unserer beliebtesten Bauform RIC.

KI „always on“

Laufzeit bis zu 30 h*

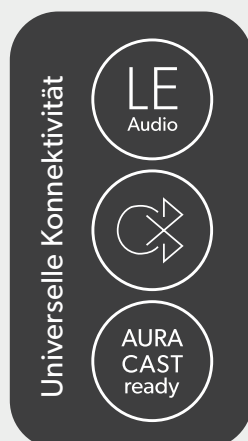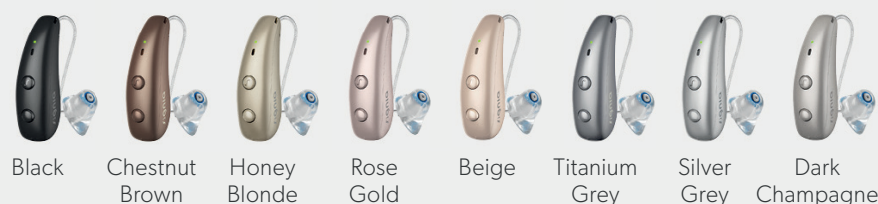

Signia One App
Signia Assistant mit KI

Beliebteste Bauform RIC mit
4 Hörertypen bis WHO4

Neu: 2-farbige LED: Grün beim Einschalten
Rot beim Ausschalten

Neu: LED-Betreuersignal in Connexx aktivierbar
(blinkt alle 5 s grün oder rot bei schwachem Akku)

Sichtfenster für Seriennummer
und Leistungsklasse
Wechselgehäuse



Desktop Charger 2.0



Portable Charger Pure 2.0



Multi-Charger



TV Sound



Remote Control

Hinweis: Die neuen Charger 2.0 sind nicht rückwärtskompatibel mit Pure Charge&Go IX. Pure C&G MaX kann nicht mit IX Chargern aufgeladen werden.

*ohne Streaming



Pure MaX – die ersten Hörgeräte mit Acoustic Intelligence™

Acoustic Intelligence™ ist das Feature zur KI-gestützten, multiadaptiven Signalverarbeitung in MaX. Zunächst trennt die Zwei-Wege-Signalverarbeitung die Eingänge der vorderen und hinteren Hemisphäre. Anschließend analysieren vier Deep Neural Networks die akustische Situation auf beiden Signalwegen und orchestrieren deren Verarbeitung in Echtzeit. In Connexx lässt sich Acoustic Intelligence™ individuell anpassen. So verbindet MaX moderne KI-Technologie mit professioneller Feinanpassung.

Programmierbar
in Connexx 10.0


54 x
mehr Leistung –
Power für 4 DNNs

75 %
mehr analysierte
Datenpunkte
pro Sekunde

2-fache
Speicherkapazität

alle 0,01s
Anpassung

Vom Sprachverstehen zum Erleben der gesamten Hörsituation

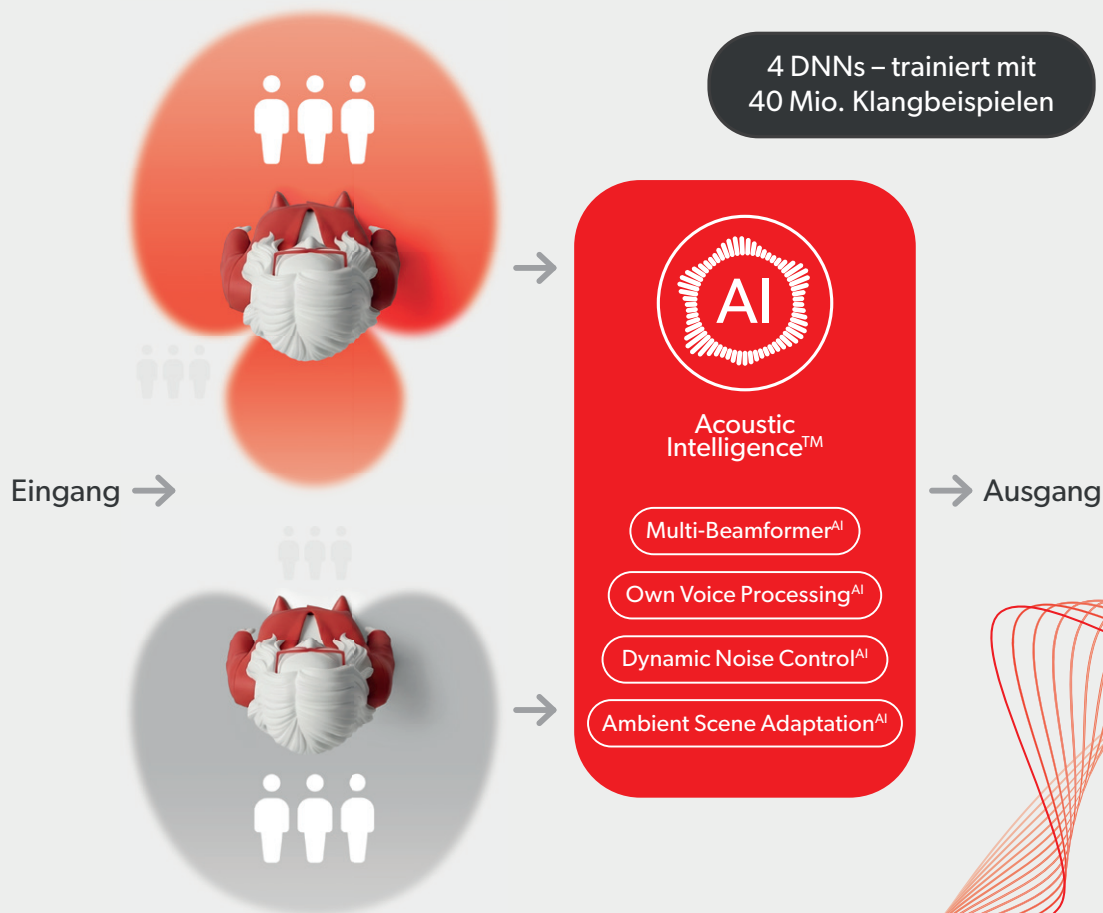

Hinweis: Für Own Voice Processing^{AI} ist kein Training in Connexx mehr notwendig, das laute Zählen entfällt.



signia

Hier geht's zum
Anpassleitfaden.

