


One Pager

Die Pure IX Modelle im Vergleich

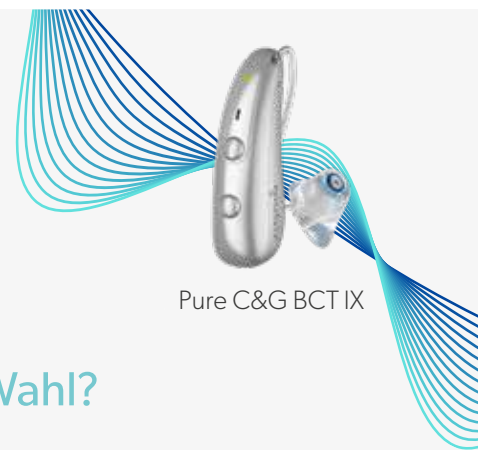

Pure C&G BCT IX

Für wen ist Pure Charge&Go BCT IX die beste Wahl?

Ihre KundInnen möchten sich keine Gedanken machen, ob sie ein Android-Smartphone oder ein iPhone kaufen sollen? Sie haben bereits ein älteres Android-Smartphone? Oder sie wollen einfach nur bestmögliche Konnektivität zu annähernd allen Bluetooth-fähigen Geräten, die es gibt? Dann Pure Charge&Go BCT IX.

Verbindung via Bluetooth Classic.

Kriterium	Typische Kundensituation/Beispiele
Maximale Streaming-Kompatibilität mit nahezu jedem Smartphone	<ul style="list-style-type: none"> • KundIn nutzt ein älteres Smartphone-Modell • Smartphone ist ein Android-Gerät ohne LE Audio • Smartphone ist ein iPhone, und KundIn möchte es einfach. Ist kein/e SpezialistIn für Apple-Geräte • KundIn nutzt keine weiteren Apple-Produkte mit MFi-Protokoll wie iPhone, iPad, Apple TV, MacBook
Freihändiges Telefonieren	<ul style="list-style-type: none"> • Telefonieren in Alltagssituationen mit den Händen frei: z. B. beim Kochen oder im Garten • Mit nahezu allen Bluetooth-fähigen Telefonen
Direktes Audio-Streaming vom PC	<ul style="list-style-type: none"> • Berufliche oder private Online-Meetings • Filme, Serien oder Musik direkt am PC hören • Einfache Nutzung von Mediatheken am Computer
Extra lange Akku-Laufzeit gewünscht	<ul style="list-style-type: none"> • Für lange Tage unterwegs: im Urlaub, auf Dienstreise oder bei ausgedehnten Freizeitaktivitäten • Neu entwickelter Akku: bis zu 54 h ohne Streaming/bis zu 36 h mit 5 h Streaming
LED-Anzeige zur Kontrolle des Betriebszustands	<ul style="list-style-type: none"> • Klar sichtbares Feedback, ob das Hörgerät gerade ein- bzw. ausschaltet • Praktisch beim Friseur, in der Arztpraxis oder beim Wechsel von Bluetooth-Quellen wie Smartphone und PC
Konnektivität zu verschiedenen Bluetooth-fähigen Geräten	<ul style="list-style-type: none"> • KundIn nutzt mehrere Bluetooth-Geräte im Alltag (z. B. Smartphone, PC, Bluetooth-fähige Telefon oder HiFi-Anlage), nicht spezialisiert auf Apple-Produkte • Die Hörgeräte können mit verschiedenen Geräten gekoppelt und die aktive Verbindung dann von einem zum anderen Gerät gewechselt werden.*



signia

*nur 1 aktive Verbindung möglich

Für wen ist Pure Charge&Go (T) IX die beste Wahl?

Ihre KundIn benötigt kein Bluetooth-Streaming von PC oder HiFi-Anlage? Er/sie nutzt Apple-Produkte mit allen Made for iPhone-Funktionen oder möchte schon heute für den neuen LE Audio Standard gerüstet sein?

Dann ist Pure Charge&Go (T) IX genau das Richtige.



Pure C&G IX Pure C&G T IX

Verbindung via Bluetooth LE (Low Energy), MFi, LE Audio, ASHA.

Kriterium	Typische Kundensituation/Beispiele
Neueres Smartphone mit LE Audio	<ul style="list-style-type: none"> • LE Audio Klangqualität überzeugt • Setzt bewusst auf die Zukunftsfähigkeit von LE Audio
Nutzung mit allen Apple-Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Pure Charge&Go (T) IX ist Made for iPhone (MFi) zertifiziert • Optimal für Apple-SpezialistInnen • Volle Nutzung aller Apple-Funktionen wie „Live-Mithören“, Steuerung über das Kontrollzentrum, getrennte Steuerung von links und rechts • Koppelbar mit allen neueren Apple-Geräten wie iPhone, iPad, Apple TV, MacBook
Schmalste Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Bei eng anliegenden Ohren oder in Kombination mit einer Brille zählt jeder Millimeter • Pure Charge&Go IX ist das schmalste Pure im Signia RIC-Portfolio
Unterschiedliche Akku-Größen und Laufzeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Der Langläufer unter den Bluetooth LE Modellen ist Pure Charge&Go T IX • T-Gerät mit bis zu 39 h ohne Streaming/ bis zu 34 h mit 5 h Streaming • Unser kleinstes: Pure Charge&Go IX bietet bis zu 28 h ohne Streaming/ bis zu 24 h mit 5 h Streaming

