




Highlights

- Maßgefertigtes Design
- AX Chip für kontrastreichen, klaren Klang
- Nachgewiesen besseres Sprachverstehen
- Integrierte Akustik-Bewegungssensorik
- Lithium-Ionen-Akkupower bis zu 24 h
- Kontaktloses Laden
- Direct Streaming für iOS & Android mit ASHA
- Signia Assistant

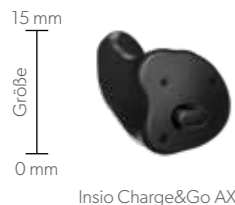

Über Signia

Signia ist eine der weltweit führenden Marken für Hörgeräte. Mit ikonischen Innovationen denken wir Hörgeräte neu. Wie sie aussehen, wirken, klingen. Unser Ziel dabei: Menschen begeistern und bewegen. Wir begreifen eine Hörminderung nicht als Einschränkung. Und Signia Hörgeräte gleichen nicht einfach nur aus. Sie ermöglichen Hörgeräte-trägern mehr zu leisten als bisher. Nicht einfach besser, sondern brillant zu sein. Und brillant zu hören. Jedes Wort, jeden Takt, jeden Atemzug.

Signia. Be Brilliant.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Nomen in dieser Broschüre die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen, und ohne vorherige Bekanntgabe abgeändert werden können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind daher im Einzelfall bei Vertragsabschluss festzulegen.

Die Bluetooth®-Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth® SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die Signia GmbH geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.

¹Jensen N.S., Hoydal E.H., Branda E., Weber J., 2021: Improving speech understanding with Signia AX and Augmented Focus (Signia White Paper, 2021)

²Jensen, Pischel, Taylor, Schulte: Performance of Signia AX in At-Home Listening Situations (Signia White Paper, 2021)

Sie finden uns unter:



signia.net



facebook.com/SigniaHearingGermany



youtube.com/SigniaHearing



instagram.com/SigniaHearing

Kontakt:

Signia GmbH
Henri-Dunant-Straße 100
91058 Erlangen

04725-99C1 | Gedruckt in Deutschland
© 09.2021 Signia GmbH



Be Brilliant™

Für alle, die das Einzigartige lieben.



Insignia Charge&Go AX



So klein kann Großartiges sein.

Insignia Charge&Go AX Hörgeräte sind kleine Wunderwerke: Sie kombinieren leistungsstarke Akkupower und modernste Bluetooth®-Konnektivität in kompakter Bauform. Hier trifft diskretes, maßgefertigtes Design auf unsere neueste Hörtechnologie Augmented Xperience.

Ergebnisse einer Studie zeigten, dass Träger von Signia AX Sprache im Störgeräusch genauso gut und manchmal sogar besser verstehen als Normalhörende. So verbesserten Hörgeräte mit Signia AX Technologie das Sprachverstehen in einem Restaurant-Szenario erheblich. In einem Party-Szenario überstieg das Sprachverstehen sogar das von Normalhörenden.¹



Augmented
Xperience



Augmented
Xperience

Kompakte Bauform, maximaler Klang

In den kleinen, kompakten Insio Charge&Go AX Hörgeräten kommt unsere hochentwickelte AX Chip-Plattform zum Einsatz. Sie eröffnet dank der getrennten Klangverarbeitung von Sprache von vorne und Umgebungsgeräuschen ein völlig neues Hörerlebnis – kontrastreich und klar wie nie. AX verbessert das Sprachverstehen selbst in anspruchsvollen, lauten Hörsituationen. Und auch in Bewegung: Ein integrierter Sensor erkennt, ob Sie sich bewegen, und passt den Klang optimal an dynamische Hörsituationen an.

Laut einer kürzlich durchgeführten Studie erleben Signia AX Träger ein um 25% besseres Sprachverstehen bei Störlärm.²



Maßgefertigtes
Design



Lithium-Ionen-
Akku


Kontaktlos laden, voll durchstarten

Klein, aber oho: Insio Charge&Go AX sind die ersten wiederaufladbaren Im-Ohr-Hörgeräte von Signia für kontaktloses Laden. Dahinter steckt innovativste Magnet-Resonanz-Ladetechnologie, die ohne sichtbare Ladkontakte auskommt.

Das heißt für Sie: Sie müssen die Hörgeräte nicht exakt im Lade-Etui positionieren. Einfach in den Charger einlegen, aufladen und los – der Lithium-Ionen-Akku liefert zuverlässig Energie mit einer Laufzeit bis zu 20 h, inkl. 5 h Streaming, ohne Streaming sogar bis zu 24 h.



Insio Charger

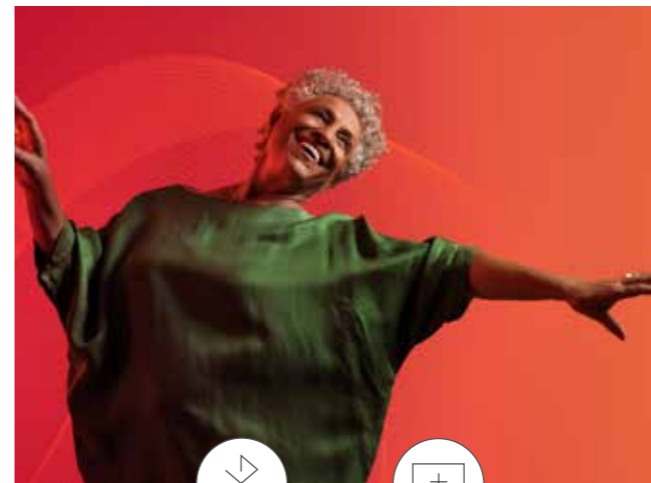

Bluetooth
iOS & Android



Kontrastreiche
Sprache

Direkt streamen, Komfort genießen

Insio Charge&Go AX bietet modernste Bluetooth-Konnektivität für iOS und ASHA-fähige Android-Geräte. So streamen Sie Telefonate, Musik und den TV-Ton direkt in Ihre Hörgeräte.

Mit dem diskreten Design erinnert Insio Charge&Go AX eher an moderne Bluetooth-Kopfhörer. Der große Unterschied zu Consumer Electronics: Die kleinen Wunderwerke sind perfekt an Ihr Ohr angepasst und bieten Hörtechnologie der Spitzenklasse.



Schwarz

Dunkelbraun


Braun



Mokka

Tan

Beige

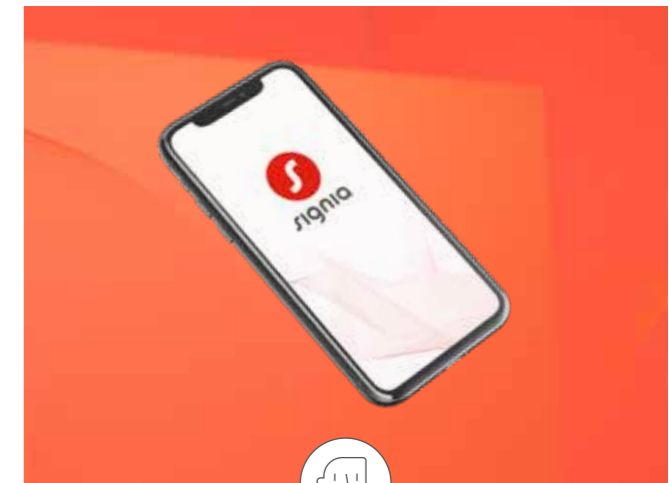

Signia
Assistant

Individuelles Hören, bester Service

Sie wollen besten Service rund um die Uhr? Verbinden Sie Insio Charge&Go AX mit der Signia App und erhalten Sie zusätzlichen Support. Mit dem Signia Assistant haben Sie dank künstlicher Intelligenz die Möglichkeit, den Klang Ihrer Hörgeräte ganz einfach auf Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Zusätzlich bietet TeleCare persönlichen Service von Ihrem Hörakustiker auch aus der Ferne. Diese praktischen Funktionen der Signia App sind die ideale Ergänzung zur Betreuung durch Ihren Hörakustiker.



Die Signia App ist kompatibel mit iOS und Android. Der Download aus dem Apple App Store oder Google Play Store ist kostenlos.

Erfahren Sie mehr unter [signia.net](https://www.signia.net)
Oder fragen Sie Ihren Hörakustiker nach Insio Charge&Go AX, nützlichem Zubehör oder der Signia App.