




Be Brilliant™

Portfolio de productos

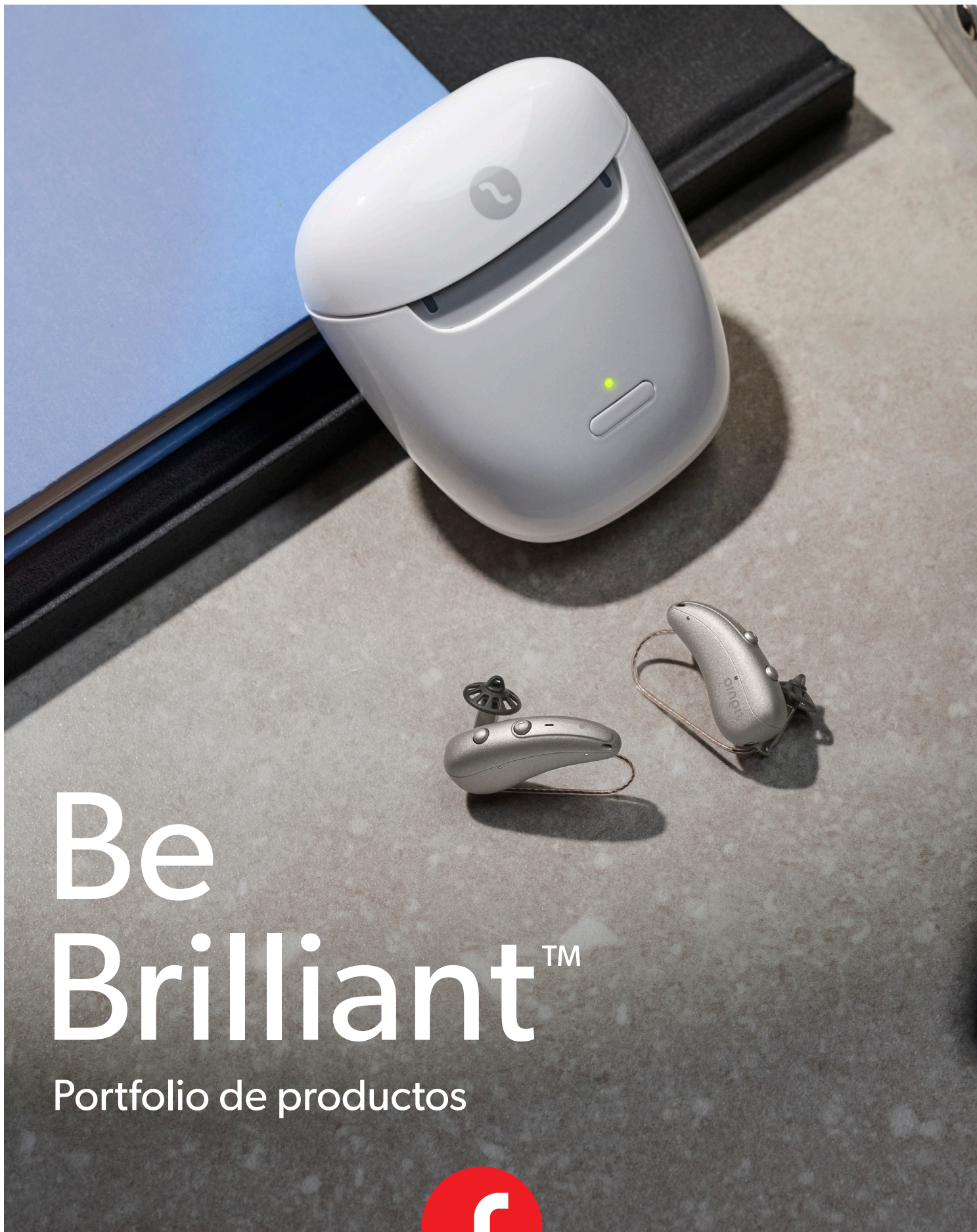

signia

A photograph of three people in a professional setting. On the left, a bald man with a grey beard and glasses, wearing a dark blue suit and a white shirt, is looking towards the center. In the middle, a woman with dark curly hair, wearing a mustard yellow blazer, is seen from the back, looking towards the right. On the right, a woman with dark hair, wearing a blue and white striped turtleneck, is smiling and looking towards the center. The background is a colorful, abstract wall with various shapes and colors like green, yellow, orange, and purple. The text 'Be Brilliant™' is overlaid on the left side of the image.

Be Brilliant™

Signia es una de las principales marcas de audífonos del mundo. Nuestro objetivo es mejorar la audición de las personas mediante innovaciones icónicas. Nos negamos a aceptar la pérdida auditiva como una limitación. No se trata de corregir una pérdida, sino de lograr un valor diferencial. No se trata solo de rendir, sino de rendir de forma brillante. No se trata solo de volver a oír, sino de oír mejor que nunca. Oír cada palabra, cada latido, cada respiración.

Con Signia, puedes ser brillante.

Contenido

Signia Integrated Xperience	
Características IX	8
Styletto IX	14
Audífonos Pure Charge&Go IX	16
Audífonos Insio IX	17
Silk Charge&Go IX	20
Audífonos Motion Charge&Go IX	22
Active Pro IX / Active IX	26
 Signia Augmented Xperience	 28
Características AX	30
Insio Charge&Go AX	32
Pure 312 AX	33
 Signia Xperience	 34
Silk X	35
 Accesorios	 36
EarWear 3.0	38
Cargadores	44
Asistencia auditiva	46
Signia App	48
My WellBeing	50
Productos de limpieza	52
Compatibilidad de programación	53
Colores	54
Nuestro equipo	56

Signia IX

Activa el poder de las conversaciones

Niveles de rendimiento

7IX

5IX

3IX

2IX

1IX

Te presentamos el primer audífono del mundo con una arquitectura multifuente capaz de identificar con precisión a varios interlocutores en movimiento que participan en una conversación en tiempo real.

Mejorar la audición supone mucho más que simplemente amplificar el sonido. Supone empoderar a las personas para que se sumerjan en su entorno, creen vínculos relevantes y aprecien cada momento de las experiencias de la vida.

Hemos aprovechado nuestro profundo conocimiento de las conversaciones dinámicas, incluidos los movimientos de cabeza del usuario y los cambios de posición de los interlocutores para crear Signia Integrated Xperience. Esta innovadora tecnología garantiza poder participar y seguir conversaciones sin interrupciones en entornos con ruido, abordando una importante dificultad a la que se enfrentan muchos usuarios de audífonos.

Nuestro compromiso es ayudar a los usuarios a llevar una vida activa, sin las limitaciones de los audífonos tradicionales y con la libertad de fomentar y participar en relaciones más plenas.



Integrated
Xperience

Signia Integrated Xperience está disponible desde el nivel de rendimiento 7 al 3 para Pure Charge&Go IX, Pure Charge&Go T IX y Silk Charge&Go IX.

Ahora, con Signia Integrated Xperience, puedes ofrecer a todos tus clientes el poder transformador de oír mejor conversaciones dinámicas en tiempo real.

SLIM-RIC



Styletto IX

RIC



Pure Charge&Go IX / T IX / BCT IX

BTE

Nuevo



Motion Charge&Go IX

ITE



Active Pro IX



Insio Charge&Go CIC IX

Nuevo



Silk Charge&Go IX



Insio IIC/CIC IX



Insio ITC IX



Insio ITE IX



RealTime Conversation Enhancement

La ciencia para no perder detalle de las conversaciones

La revolucionaria función de mejora de las conversaciones en tiempo real RealTime Conversation Enhancement de Signia Integrated Xperience analiza, aumenta y se adapta al flujo dinámico de las conversaciones. Así, los usuarios disfrutan de una experiencia auditiva más rica y fluida.



Analiza

Procesa 192 000 puntos de datos al segundo para identificar a los interlocutores y analizar la dinámica de las conversaciones, reflejando fielmente las conversaciones de la vida real.



Aumenta

Utiliza los datos recopilados para controlar múltiples fuentes de enfoque que separan y realzan de forma dinámica la voz de cada interlocutor en medio del ruido. Por su lado, la tecnología Augmented Focus[2] procesa el sonido de fondo para garantizar conversaciones cómodas e inmersivas, sin interrupciones.



Adapta

Nuestra patentada arquitectura multifuente se actualiza mil veces por segundo y combina múltiples fuentes de enfoque en un espacio auditivo dinámico que se adapta a las conversaciones en curso. Esto permite ampliar y seguir en tiempo real a varios interlocutores en movimiento, para que los usuarios puedan participar plenamente en las conversaciones en grupo.





Características generales

Audífonos Pure Charge&Go IX, Styletto IX, Active Pro IX, Audífonos Motion Charge&Go IX[†], Insio ITC^{††}/ITE IX

Características	Descripción	Niveles de rendimiento									
		Styletto IX, Audífonos Pure Charge&Go IX, Motion Charge&Go IX [†] , Insio ITC ^{††} /ITE IX					Active Pro IX				
Gestión de conversación		7 IX	5 IX	3 IX	2 IX	1 IX	Active Pro	Active			
RealTime Conversation Enhancement	Facilita la participación ininterrumpida en conversaciones en grupo ruidosas al controlar perfectamente las ubicaciones de todos los interlocutores y resaltar su voz. ¹	●●●●●	●●●●○	●●○○○			●●●●●				
Analizador de la dinámica de las conversaciones	Analiza la dinámica de la conversación, incluyendo los turnos de habla y su temporización, las ubicaciones de ruido puro sin habla, y los niveles de ruido de fondo.	✓					✓				
Analizador de fuentes de la conversación	Explora constantemente el entorno acústico para identificar el número de interlocutores y su ubicación.	✓	✓	✓			✓				
Puntos de enfoque dinámicos	Aísla y hace un seguimiento del habla por separado.	3	1				3				
Impulsor de conversación	Realza de manera dinámica a cada interlocutor individual.	●●●●●	●●●●○	●●○○○			●●●●●				
Augmented Focus	Separa el sonido objetivo (habla) de los sonidos del entorno para crear un claro contraste. ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Puntos de enfoque	Realza las señales de habla desde el hemisferio frontal.	1	1	1	1	1	1	1			
Fuente del entorno	Procesa los sonidos del entorno para seguir siendo consciente del entorno sin solapar el habla.	1	1	1	1	1	1	1			
Dynamic Soundscape Processing 3.0	Integra las entradas para una optimización precisa de los audífonos, por ejemplo (cuando estén disponibles): sensores acústicos, sensores de movimiento, OVP 2.0, detección de ruido, análisis de la relación señal-ruido y RealTime Conversation Enhancement.	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●○○○	●●○○○	●●●●●	●●○○○			
Spatial SpeechFocus	Orienta el haz direccional del micrófono hacia la fuente de habla principal (a la izquierda, a la derecha o detrás del usuario en el coche o en un programa específico de "Paseo"). ¹	✓					✓				
SpeechFocus	Dependiendo de la dirección de la fuente de voz dominante, Speech Focus orienta el haz direccional hacia la parte trasera del usuario o activa un modo de sonido envolvente para captar el habla desde ambos lados.	✓	✓				✓				
Own Voice Processing 2.0 (OVP™ 2.0) ²	Utiliza el reconocimiento de la voz del usuario en tiempo real para dar una impresión natural de la propia voz. ¹	✓	✓	✓							
Sensores de movimiento ³	Detecta si el usuario está andando, corriendo o quieto para guiar cómo optimizar el sonido.	✓	✓	✓			✓				
Direccionalidad binaural	De manera científicamente probada, ofrece una mayor comprensión del habla en situaciones con ruido. ¹	✓	✓	✓			✓				
Direccionalidad adaptativa	Mejora la relación señal-ruido en entornos ruidosos al reducir las fuentes de ruido dominantes desde la parte trasera y los lados.	✓	✓	✓	✓		✓				
Direccionalidad automática	Mejora la relación señal-ruido en entornos ruidosos al aplicar automáticamente y de manera transparente la direccionalidad en los canales de procesamiento individuales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
TruEar 360	Resalta la diferencia entre fuentes de sonido frontales y traseras para reproducir los beneficios del efecto del pabellón natural.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

1) Disponible para adaptaciones bilaterales con enlace e2e wireless
2) No está disponible en Insio ITC/ITE IX y Active Pro IX
3) No está disponible en Insio ITC/ITE IX
†) La familia Motion Charge&Go IX BTE solo está disponible en los niveles de rendimiento 7IX, 5IX y 3IX
††) Solo modelos con dos micrófonos

Signia Integrated Xperience, con Real Time Conversation Enhancement, es el alma de nuestros innovadores audífonos. Esta tecnología permite a los usuarios participar de manera dinámica en las conversaciones, asegurando que cada palabra se entienda, cada risa se aprecie y cada historia se viva plenamente.

Características	Descripción	Niveles de rendimiento						
		Styletto IX, Audífonos Pure Charge&Go IX, Motion Charge&Go IX†, Insio ITC††/ITE IX					Active Pro IX	
		7 IX	5 IX	3 IX	2 IX	1 IX	Active Pro	Active
SpeechStabilizer	Conserva la envolvente natural del habla en cualquier situación, incluidas situaciones con mucho ruido, lo que preserva los matices acústicos que son importantes para la comprensión del habla.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gestión del habla y el ruido	Reduce el esfuerzo auditivo mediante un sofisticado procesamiento de sonido.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
e2e wireless 4.0	Controla el acoplamiento, la sincronización, CROS/BiCROS y una amplia gama de funciones de sonido. ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Confort de escucha								
Ancho de banda ampliado ⁴	Ancho de banda disponible de 12 kHz para un mejor procesamiento del habla de alta frecuencia y los sonidos del entorno.	✓					✓	
Auto EchoShield	Reduce automáticamente el efecto de reverberaciones y ruidos fuertes repentinos en entornos con reverberación.	✓					✓	
Programa de reverberación	Programa específico para espacios con reverberación.	✓	✓				✓	
SoundSmoothing™	Reduce la molestia de sonidos fuertes repentinos, como al mover cristalería.	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●○○○○	●●●●●	●○○○○
eWindScreen™	Reduce la interferencia del ruido del viento cuando se está al aire libre.	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●○○○○	●○○○○	●●●●●	●○○○○
Rango dinámico ampliado	Procesamiento de 24 bits y 117 dB para una codificación digital optimizada de sonidos suaves y fuertes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cancelación de retroalimentación	Seguimiento y control a alta velocidad de la retroalimentación en los distintos canales de procesamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Empoderamiento del usuario								
Configurador espacial	Permite al usuario ajustar la dirección del haz del micrófono con la aplicación Signia. ¹	✓	✓				✓	
My WellBeing ²	Con acceso desde Signia App, los usuarios pueden obtener información sobre cuánto están usando los audífonos, su grado de interacción social, recuento diario de pasos y nivel de actividad general.	✓	✓	✓			✓	
Signia Assistant ²	Ofrece a los usuarios soluciones inmediatas, 24/7, así como ajustes personalizados del sonido en un intuitivo chat con IA. Da información detallada en Connexx para abordar las necesidades de ajuste fino de cada cliente con mayor precisión.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Signia App (iOS y Android) ³	Una aplicación para smartphones fácil de usar que habilita la realización de ajustes por control remoto, transmisión de audio, acceso a My WellBeing y asistencia con Signia Assistant y TeleCare.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volumen de transmisión adaptativo ²	Adaptación del volumen de transmisión en función de la inteligibilidad del habla y dependiendo del nivel de ruido ambiental.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TeleCare ³	Ofrece servicios remotos, como TeleCare Dashboard, Remote Fine Tuning y CareChat (cómodos mensajes de texto, llamadas telefónicas y videollamadas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Disponible para adaptaciones bilaterales con enlace e2e wireless
2) No está disponible en Insio ITC/ITE IX
3) Funciones reducidas disponibles para Insio ITC/ITE IX
4) No disponible en Motion Charge&Go SP IX
†) La familia Motion Charge&Go IX BTE solo está disponible en los niveles de rendimiento 7IX, 5IX y 3IX
††) Solo modelos con dos micrófonos

Características generales

Audífonos Pure Charge&Go IX[†], Styletto IX, Active Pro IX, Audífonos Motion Charge&Go IX[†], Insio ITC^{††}/ITE IX

Características	Descripción	Niveles tecnológicos						
		Styletto IX, Audífonos Pure Charge&Go IX, Motion Charge&Go IX [†] , Insio ITC ^{††} /ITE IX					Active Pro IX	
		7 IX	5 IX	3 IX	2 IX	1 IX	Active Pro	Active
Conectividad								
Transmisión directa de audio ²	Conectividad Bluetooth Classic disponible en Pure Charge&Go BCT IX. Conectividad MFi, LE Audio y ASHA disponible en Pure Charge&Go IX / T IX, Styletto IX, Motion Charge&Go IX (familia BTE) y Active Pro IX.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manos libres ²	Permite hacer llamadas con manos libres. El micrófono del audífono capta la voz del usuario, que se envía con gran calidad al interlocutor, mientras que el audio de la llamada se transmite directamente a los audífonos del usuario. Disponible para conexiones mediante Bluetooth Classic, MFi o LE Audio.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CallControl ²	Las llamadas se pueden responder y finalizar pulsando el botón del audífono o dando un toque sobre él, según el modelo de audífono. Disponible para conexiones mediante Bluetooth Classic, MFi o LE Audio.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-Coil	Disponible en Pure Charge&Go BCT IX, Pure Charge&Go T IX, la familia BTE Motion Charge&Go IX y como opción en Insio ITC/ITE IX. Permite la conexión directa a sistemas de bucle inductivo y señales telefónicas compatibles.	✓	✓	✓	✓	✓		
Compatibilidad con StreamLine Mic ¹	Transmisión de sonido estéreo de alta calidad directamente desde cualquier dispositivo Bluetooth (PC, dispositivos Apple antiguos, dispositivos Android sin ASHA o LE Audio, etc.). También puede utilizarse como micrófono remoto.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatibilidad con TV Sound ²	Transmisión sonido estéreo de alta calidad directamente del televisor a los audífonos mediante Bluetooth.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatibilidad con miniPocket	Opción de mando a distancia en llavero.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tinnitus								
Terapia de olas oceánicas (configuraciones predefinidas)	Señales terapéuticas que imitan el sonido del mar para proporcionar una experiencia auditiva relajante y reducir el impacto del tinnitus.	4	4	4	4		4	
Señal de terapia estática (canales / configuraciones predefinidas)	Señales terapéuticas suaves que reducen el impacto del tinnitus.	20/5	18/5	16/5	12/5		20/5	
Terapia Notch ³	La terapia de tinnitus patentada y exclusiva de Signia, que ha demostrado ser especialmente eficaz contra el tinnitus tonal.	✓	✓	✓	✓		✓	

1) No es compatible con Insio ITC/ITE IX ni con Pure Charge&Go BCT IX
2) No está disponible en Insio ITC/ITE IX
3) No está disponible en Motion Charge&Go SP IX
†) La familia Motion Charge&Go IX BTE solo está disponible en los niveles de rendimiento 7IX, 5IX y 3IX
††) Solo modelos con dos micrófonos

Características	Descripción	Niveles tecnológicos						
		Styiletto IX, Audífonos Pure Charge&Go IX, Motion Charge&Go IX†, Insio ITC††/ITE IX					Active Pro IX	
Optimización de adaptación		7 IX	5 IX	3 IX	2 IX	1 IX	Active Pro	Active
Canales de procesamiento / Controles MPO y Ganancia	Número de controles/canales de procesamiento en Connexx.	48/20	36/18	32/16	24/12	16/8	48/20	16/8
Música HD	Predefine unos programas musicales optimizados para mejorar el placer de escuchar música sin transmisión.	3	3	1	1		3	
Programas de audición	Número de programas que se pueden configurar en Connexx.	6	6	6	4	4	6	4
Compatibilidad CROS/BiCROS	Un dispositivo CROS que se lleva en un oído con pérdida auditiva sin opción de adaptar un audífono y que transmite el sonido a un audífono colocado en el oído con mejor audición.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compresión de frecuencia	Mejora la detección de los sonidos del habla por parte de usuarios con umbrales auditivos de alta frecuencia reducidos. La compresión de frecuencia se activa de forma selectiva, en función de unos criterios audiológicos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Smart Optimizer y registro de datos	Recomendaciones personalizadas de ajuste fino basadas en el registro y análisis del uso de los audífonos por parte del usuario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gestor de aclimatación	Permite al usuario aprovechar una audibilidad mejorada a largo plazo, a la vez que disfruta de una aceptación óptima del dispositivo en la adaptación inicial.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
InSituGram	Permite una medición rápida y cómoda de los umbrales auditivos con los audífonos puestos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AutoFit™	Ofrece automáticamente un entorno optimizado de ganancia de inserción en oído real (REIG) sin necesidad de hacer una adaptación manual a los objetivos, lo que permite una verificación en oído real notablemente más rápida.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Motion Charge&Go SP IX cuenta con 36 canales/18 controles
†) La familia Motion Charge&Go IX BTE solo está disponible en los niveles de rendimiento 7IX, 5IX y 3IX
††) Solo modelos con dos micrófonos

Características generales

Silk Charge&Go IX, Insio Charge&Go CIC IX, Insio IIC/CIC/ITC† IX

Características	Diseño		Descripción	Niveles de rendimiento				
	Silk	Insio		7 IX	5 IX	3 IX	2 IX	1 IX
Gestión de conversaciones								
Procesamiento dinámico del paisaje sonoro: Dynamic Soundscape Processing 3.0	✓	✓	Integra las entradas para una optimización precisa de los audífonos, por ejemplo (cuando estén disponibles): sensores acústicos, sensores de movimiento, detección de ruido y análisis de la relación señal-ruido.	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●○○○	●●○○○
Direccionalidad Binaural OneMic 2.0	✓	✓	Los micrófonos de cada audífono trabajan juntos para crear un patrón de escucha direccional que, de manera preferente, amplifica el habla procedente del frente para favorecer la audición en entornos ruidosos. ¹	✓	✓	✓		
SpeechStabilizer	✓	✓	Conserva la envolvente natural del habla en cualquier situación, incluidas situaciones con mucho ruido, lo que preserva los matices acústicos que son importantes para la comprensión del habla.	✓	✓	✓	✓	✓
Gestión del habla y el ruido	✓	✓	Gracias a un avanzado procesamiento del sonido, reduce el esfuerzo de escucha.	✓	✓	✓	✓	✓
e2e wireless 4.0	✓	✓	Controla el acoplamiento, la sincronización, CROS/BiCROS y una amplia gama de funciones de sonido. ¹	✓	✓	✓	✓	✓
Confort de escucha								
Ancho de banda ampliado	✓	✓	Ancho de banda de 12 kHz disponible para un procesamiento mejorado del habla en altas frecuencias y de los sonidos del entorno.	✓				
Auto EchoShield	✓	✓	Reduce automáticamente el efecto de reverberaciones y ruidos fuertes repentinos en entornos con reverberación.	✓				
Programa de Reverberación	✓	✓	Programa específico para espacios con reverberación.	✓	✓			
SoundSmoothing™	✓	✓	Reduce la molestia de sonidos fuertes repentinos, como al mover cristalería.	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●○○○○
eWindScreen™	✓	✓	Reduce la interferencia del ruido del viento cuando se está al aire libre.	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●○○○○	●○○○○
Rango dinámico ampliado	✓	✓	Procesamiento de 24 bits y 117 dB para una codificación digital optimizada de sonidos suaves y fuertes.	✓	✓	✓	✓	✓
Cancelación de retroalimentación	✓	✓	Seguimiento y control a alta velocidad de la retroalimentación en los distintos canales de procesamiento.	✓	✓	✓	✓	✓
Empoderamiento del usuario								
Signia App (iOS y Android)	✓	✓	La app para smartphone, fácil de usar, permite realizar ajustes a distancia y acceder a TeleCare.	✓	✓	✓	✓	✓
TeleCare	✓	✓	Ofrece servicios remotos, como TeleCare Dashboard, Remote Fine Tuning y CareChat (cómodos mensajes de texto, llamadas telefónicas y videollamadas).	✓	✓	✓	✓	✓
Compatibilidad con miniPocket	✓	✓	Opción de mando a distancia en llavero.	✓	✓	✓	✓	✓
T-Coil		✓	Disponible como opción para Insio ITC IX. Permite la conexión directa a sistemas de bucle inductivo y señales telefónicas compatibles.	✓	✓	✓	✓	✓

1) Disponible para adaptaciones bilaterales con enlace e2e wireless
†) Solo modelos con un micrófono

Características	Diseño		Descripción	Niveles de rendimiento				
	Silk	Insio		7 IX	5 IX	3 IX	2 IX	1 IX
Tinnitus								
Terapia de olas oceánicas (configuraciones predefinidas)	✓	✓	Señales terapéuticas que imitan el sonido del mar para proporcionar una experiencia auditiva relajante y reducir el impacto del tinnitus.	4	4	4	4	
Señal terapéutica estática (canales / configuraciones predefinidas)	✓	✓	Señales de terapia suaves y gentiles que reducen el impacto del tinnitus.	20/5	18/5	16/5	12/5	
Terapia Notch	✓	✓	La terapia para tinnitus única y patentada de Signia que ha demostrado ser especialmente efectiva para el tinnitus tonal.	✓	✓	✓	✓	
Optimización de adaptación								
Canales de procesamiento / Controles MPO y Ganancia	✓	✓	Número de controles/canales de procesamiento en Connexx.	48/20	36/18	32/16	24/12	16/8
Música HD	✓	✓	Predefine unos programas musicales optimizados para mejorar el placer de escuchar música sin transmisión.	3	3	1	1	
Programas de audición	✓	✓	Número de programas que se pueden configurar en Connexx.	6	6	6	4	4
Compatibilidad CROS/ BiCROS	✓	✓	Un dispositivo CROS que se lleva en un oído con pérdida auditiva sin opción de adaptar un audífono y que transmite el sonido a un audífono colocado en el oído con mejor audición. ²	✓	✓	✓	✓	✓
Comprensión de frecuencia	✓	✓	Mejora la detección de los sonidos del habla por parte de usuarios con umbrales auditivos de alta frecuencia reducidos. La compresión de frecuencia se activa de forma selectiva, en función de unos criterios audiológicos.	✓	✓	✓	✓	✓
Smart Optimizer y registro de datos	✓	✓	Recomendaciones personalizadas de ajuste fino basadas en el registro y análisis del uso de los audífonos por parte del usuario.	✓	✓	✓	✓	✓
Gestor de aclimatación	✓	✓	Permite al usuario aprovechar una audibilidad mejorada a largo plazo, a la vez que disfruta de una aceptación óptima del dispositivo en la adaptación inicial.	✓	✓	✓	✓	✓
InSituGram	✓	✓	Permite una medición rápida y cómoda de los umbrales auditivos con los audífonos puestos.	✓	✓	✓	✓	✓
AutoFit™	✓	✓	Ofrece automáticamente un entorno optimizado de ganancia de inserción en oído real (REIG) sin necesidad de hacer una adaptación manual a los objetivos, lo que permite una verificación en oído real notablemente más rápida.	✓	✓	✓	✓	✓

1) Disponible para adaptaciones bilaterales con enlace e2e wireless
2) Requiere un audífono con enlace inalámbrico e2e

El modelo más elegante



Características principales

- RealTime Conversation Enhancement
- Augmented Focus
- Procesamiento de la propia voz: OVP 2.0
- Signia Assistant
- MFi, LE Audio, ASHA
- Recargable
- Signia App
- Compatibilidad CROS
- Diseño elegante y con estilo

Niveles de rendimiento

- 7IX
- 5IX
- 3IX
- 2IX
- 1IX
- sDemo

Styletto IX

Elegantes, sofisticados y disponibles en una gama de colores distintivos, los audífonos Styletto IX combinan la tecnología superior IX con estilo. Disfruta de una gran audición y un gran aspecto, además de la conveniencia añadida de recargar sobre la marcha.

También disponible como CROS Styletto IX.

SLIM-RIC

Modelo			
Tipo de auricular	miniReceiver 3.0 S	miniReceiver 3.0 M	miniReceiver 3.0 P
Rendimiento			
Matriz (2 ccm)	46/110 dB SPL	60/119 dB SPL	65/122 dB SPL
Batería			
Tipo	Batería de iones de litio	Batería de iones de litio	Batería de iones de litio

CROS en un diseño único



Compatible con todos los niveles

7IX – 5IX – 3IX – 2IX – 1IX

Con CROS Styletto IX, puedes ampliar tu cartera para personas con pérdida auditiva unilateral que quieren un diseño elegante y moderno. La plataforma Integrated Xperience ofrece e2e wireless 4.0 para una calidad de audio aún mejor. CROS Styletto IX puede utilizarse en todos los niveles, lo que facilita la iniciación en el cuidado de la audición.

Cargadores Styletto IX



Cargador Styletto IX Dry&Clean

Los usuarios de Styletto IX pueden cuidar al máximo sus audífonos. El cargador Dry&Clean combina tres funciones: Carga, secado y desinfección con luz UV, todo en uno. Otra ventaja: el cargador Dry&Clean también admite moldes con soportes.



Cargador portátil Styletto IX

El elegante y portátil cargador Styletto, proporciona hasta cinco cargas adicionales.

La gama de colores de Styletto IX



Black /
Black Gloss



Black
Silver



Black
Graphite



Cosmic Blue
Rose Gold



Snow White
Silver



Snow White
Rose Gold



Snow White /
Snow White Gloss

Con Styletto 7IX a 3IX, tus clientes podrán elegir entre siete combinaciones de colores exclusivas. Styletto 2IX y 1IX están disponibles en dos colores: Black / Silver y Snow White / Silver.

Capta todas las partes de la conversación



Pure Charge&Go IX

Pure Charge&Go T IX

Pure Charge&Go BCT IX

Características principales

- RealTime Conversation Enhancement
- Augmented Focus
- Own Voice Processing 2.0
- Signia Assistant
- Compatible con Bluetooth Classic o MFi, LE Audio, ASHA
- Cómoda recarga
- Signia App
- Compatibilidad CROS
- Opción de T-Coil

Niveles de rendimiento

- 7IX
- 5IX
- 3IX
- 2IX
- 1IX
- sDemo

Audífonos Pure Charge&Go IX

Con la incorporación de Pure Charge&Go BCT IX a la familia Pure Charge&Go IX, ahora puedes ofrecer a todos tus clientes toda la potencia de IX independientemente de su preferencia de Bluetooth.

Pure Charge&Go BCT IX ofrece conectividad Bluetooth Classic, una telebobina integrada y un LED.

Pure Charge&Go IX / T IX ofrecen conectividad a través de MFi, ASHA y LE Audio, y Pure Charge&Go T IX también tiene una telebobina integrada.

Las tres opciones ofrecen una gran autonomía y compatibilidad con CROS.



Opciones de carga
El cargador portátil Pure permite cargar cómodamente los audífonos sobre la marcha. El cargador Pure Dry&Clean también ofrece limpieza y secado UV para mantener los audífonos en óptimas condiciones. Y el pequeño y fiable cargador estándar Pure satisface las necesidades básicas de carga de sobremesa. También es compatible con el cargador Multi-Charger.

RIC

Modelo				
Tipo de auricular	miniReceiver 3.0 S	miniReceiver 3.0 M	miniReceiver 3.0 P	miniReceiver 3.0 HP
Rendimiento				
Matriz (2 ccm)	46/110 dB SPL	60/119 dB SPL	65/122 dB SPL	75/131 dB SPL
Batería				
Tipo	Batería de iones de litio	Batería de iones de litio	Batería de iones de litio	Batería de iones de litio

Diseñado para conversaciones sin límites

Características principales: modelos con dos micrófonos

-  RealTime Conversation Enhancement
-  Augmented Focus
-  Ajuste a medida
-  Signia App
-  Compatibilidad CROS



Niveles de rendimiento

- 7IX
- 5IX
- 3IX
- 2IX
- 1IX

Insio IX ITC/ITE

Con la opción de dos micrófonos, Insio IX ITC* e ITE ofrecen todas las ventajas de la innovadora tecnología de mejora de la conversación en tiempo real de Signia en un cómodo diseño personalizado.

Custom ITE

Modelo

ITC S

ITC M /ITE M

ITC P / ITE P



Rendimiento

Matriz (2 ccm)

50/113 dB SPL

55/118 dB SPL

60/124 dB SPL

Batería

Tamaño

13

13

13

Consumo de energía

1.0 mA**

1.1 mA**

1.1 mA**

*) Insio IX ITC también está disponible en una versión de un solo micrófono, que proporciona Direccionalidad Binaural OneMic en lugar de RealTime Conversation Enhancement.
**) Valores máximos

Poder invisible



Características principales: modelos con un solo micrófonos

-  Direccionalidad Binaural OneMic
-  Recarga sobre la marcha
-  Ajuste a medida
-  Ajuste CIC discreto
-  Signia App
-  Compatibilidad CROS

Niveles de rendimiento

- 7IX
- 5IX
- 3IX
- sDemo

Insio Charge&Go CIC IX

Gracias a su amplio ancho de banda y a la velocidad del e2e 4.0, Insio Charge&Go CIC IX se centra con precisión en la voz que el usuario tiene delante, incluso en entornos ruidosos. Es nuestro audífono recargable a medida más discreto hasta ahora, con hasta 35 horas de autonomía. Además, su cargador portátil facilita la recarga en cualquier momento y lugar.



Cargador portátil Insio CIC
Cargador portátil con batería integrada que puede proporcionar hasta tres cargas completas para un par de audífonos. Se puede cargar de forma inalámbrica.

CIC

Modelo			
			
Rendimiento			
Matriz (2 ccm)	50/113 dB SPL	55/118 dB SPL	60/124 dB SPL
Batería			
Tipo	Batería de iones de litio	Batería de iones de litio	Batería de iones de litio

Preparado para tener conversaciones reales

Características principales

- Direccionalidad Binaural OneMic
- Ajuste a medida
- Diseño discreto
- Signia App
- Compatibilidad CROS



Niveles de rendimiento

- 7IX
- 5IX
- 3IX
- 2IX
- 1IX

Insio IX IIC/CIC

Con un nuevo diseño y basados en nuestra tecnología IX, nuestros populares modelos Insio IICs y CICs son mejores que nunca. Insio IX es el único audífono personalizado con un micrófono que ofrece direccionalidad binaural para conversaciones en grupo, incluso en entornos ruidosos.

Los dispositivos Insio IX IIC / CIC con e2e wireless son compatibles con CROS Silk Charge&Go IX.

Custom ITE

Modelo				
	IIC / CIC S	CIC M	CIC P	
	I3*	I3*	I3*	T5**
				
Rendimiento				
Matriz (2 ccm)	50/113 dB SPL	55/118 dB SPL	60/124 dB SPL	
Pila				
Tamaño	10A	10A	10A	
Consumo de energía	1.0 mA***	1.0 mA***	1.0 mA***	

*) El faceplate I3 está disponible para IIC y CIC en versiones con y sin e2e wireless. Las versiones no inalámbricas se programan con el Adaptador I3, las inalámbricas se pueden programar con ConnexxAir.

**) El faceplate T5 está disponible si se prefiere el botón de presión. Las versiones no inalámbricas se programan con el Conector Flex. Las versiones inalámbricas se pueden programar con ConnexxAir.


***) Valores máximos.

Audición perfecta y discreta



Características principales

-  Direccionalidad Binaural OneMic
-  Cárgalos sobre la marcha
-  Ajuste instantáneo
-  Diseño discreto
-  Signia App
-  Compatibilidad CROS

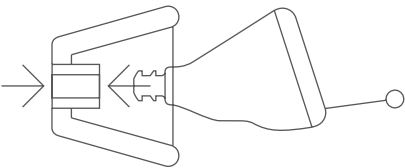

Un toque y listo.
Las fundas EarWear 3.0 vienen en cuatro tamaños diferentes y dos estilos (versiones con diseño cerrado y abierto) aptos para prácticamente cualquier forma del oído o necesidad de audición.

Nota importante: Silk Charge&Go IX se programa exclusivamente con ConnexxAir.

Niveles de rendimiento

- 7IX
- 5IX
- 3IX
- 2IX
- 1IX
- sDemo

Silk Charge&Go IX

Cómodo y discreto, este pequeño audífono ofrece la ventaja de poder cargarlo sobre la marcha. Cuenta con un sinfín de funciones de sonido avanzadas para ayudarte en cualquier entorno como su Direccionalidad Binaural OneMic única que, para un audífono de este tamaño, ofrece un apoyo inigualable en conversaciones en ambientes ruidosos.

También disponible como CROS Silk Charge&Go IX.



	Click ITE
Modelo	Click CIC
	
Rendimiento	
Matriz (2 ccm)	50/114 dB SPL
Batería	
Tipo	Batería de iones de litio

CROS casi invisible - con batería recargable




Compatible con todos los niveles

7IX – 5IX – 3IX – 2IX – 1IX

Muchos usuarios de audífonos están muy interesados en una adaptación que sea especialmente discreta de llevar. Silk Charge&Go IX y su dispositivo de micrófono CROS ofrecen una discreción inigualable. Gracias a la plataforma IX y a la conexión inalámbrica entre ambos dispositivos, e2e wireless 4.0, que se ha ido perfeccionando a lo largo de los años, es posible una transmisión fiable del dispositivo de micrófono CROS al audífono.

Cargador Silk IX

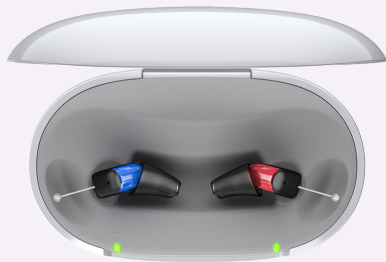

Con carga sin contacto, los usuarios se limitan a colocar los audífonos Silk Charge&Go IX en el cargador, sin tener que preocuparse por alinear ningún contacto de carga. Los audífonos se encienden automáticamente cuando se sacan del cargador y se apagan de nuevo cuando se vuelven a colocar.

Moldes para Silk Charge&Go IX



¿Tus clientes quieren audífonos casi invisibles Instant Fit con pila recargable, pero no quieren prescindir de una adaptación personalizada? Hay dos materiales disponibles: Acrílico duro o silicona blanda con dureza 40 Shore.

WaxGuard Nanocare



Silk Charge&Go IX ya está bien protegido contra la penetración del cerumen con las fundas 3.0. Pero para estar seguros, también insertamos el WaxGuard Nanocare 3.0 en la boquilla del auricular. Cualquier cerumen que penetre puede eliminarse fácilmente sustituyendo el pequeño filtro blanco.

Las conversaciones sin barreras



Características principales

-  RealTime Conversation Enhancement
-  Augmented Focus
-  Own Voice Processing 2.0
-  Signia Assistant
-  MFi, LE Audio, ASHA
-  Cómoda recarga
-  Signia App
-  Compatibilidad CROS
-  T-Coil

Niveles de rendimiento

- 7IX
- 5IX
- 3IX
- sDemo

Motion Charge&Go M IX

Con la familia Motion Charge&Go IX BTE, presentamos la gama BTE más amplia con tecnología probada para mejorar la comprensión del habla en entornos ruidosos: RealTime Conversation Enhancement.

	BTE		
Modelo	Codo (Earhook)	ThinTube 3.0	ThinTube 3.0 P
			
Rendimiento			
Matriz (2 ccm)	60/133 dB SPL	60/125 dB SPL	63/126 dB SPL
Batería			
Tipo	Batería de iones de litio	Batería de iones de litio	Batería de iones de litio

Conéctate a la conversación



Características principales

-  RealTime Conversation Enhancement
-  Augmented Focus
-  Own Voice Processing 2.0
-  Signia Assistant
-  MFi, LE Audio, ASHA
-  Cómoda recarga
-  Signia App
-  Compatibilidad CROS
-  T-Coil

Niveles de rendimiento

- 7IX
- 5IX
- 3IX
- sDemo

Motion Charge&Go P IX

La familia Motion Charge&Go BTE IX refleja nuestra firme creencia de que todos deben poder participar activamente en cualquier conversación. Por eso, incorporamos RealTime Conversation Enhancement, nuestra exclusiva tecnología para mejorar el habla en entornos ruidosos, en todos los modelos BTE y para todos los niveles de pérdida auditiva.

	BTE		
Modelo	Codo (Earhook)	ThinTube 3.0	ThinTube 3.0 P
			
Rendimiento			
Matriz (2 ccm)	77/135 dB SPL	66/130 dB SPL	70/131 dB SPL
Batería			
Tipo	Batería de iones de litio	Batería de iones de litio	Batería de iones de litio

Potencia tu audición



Características principales

-  RealTime Conversation Enhancement
-  Augmented Focus
-  Own Voice Processing 2.0
-  Signia Assistant
-  MFi, LE Audio, ASHA
-  Cómoda recarga
-  Signia App
-  Compatibilidad CROS
-  T-Coil

Niveles de rendimiento

7IX

5IX

3IX

sDemo

Motion Charge&Go SP IX

Todos tus clientes – incluso aquellos que necesitan la máxima amplificación – pueden beneficiarse de nuestra innovadora función para mejorar las conversaciones: RealTime Conversation Enhancement. El audífono recargable más potente del mundo ofrece hasta 82 dB de amplificación y una autonomía inigualable de hasta 65 horas con una sola carga.

BTE

Modelo

Codo (Earhook)



Rendimiento

Matriz (2 ccm)

82/140 dB SPL

Batería

Tipo

Batería de iones de litio

CROS superpotente



Compatible con los niveles:

7IX – 5IX – 3IX

CROS Motion Charge&Go IX está diseñado para personas con pérdida auditiva que necesitan una solución potente y fiable. Su formato BTE robusto y su rendimiento superior lo convierten en la opción ideal. Gracias a la función RealTime Conversation Enhancement, ofrece una experiencia de escucha equilibrada y envolvente, incluso en conversaciones en grupo.

Cargadores Motion Charge&Go IX



Cargador Motion Dry&Clean
El cargador para audífonos que seca y limpia los moldes al mismo tiempo con luz ultravioleta (en solo 15 minutos) presenta una opción adicional muy popular entre los usuarios. **Disponible para Motion Charge&Go P IX y Motion Charge&Go SP IX.**



Cargador Motion C&G SP IX
Las opciones de carga incluyen el cargador de mesa Motion SP, el Dry&Clean Motion SP, que además seca y desinfecta los audífonos, y el Multi-Charger.



Cargador Motion C&G M IX
Compatible con el cargador de mesa Motion M, un pequeño cargador de sobremesa con indicadores LED de estado de carga, así como con el Multi-Charger.



Cargador Motion C&G P IX
Las opciones de carga incluyen el cargador de mesa Motion P, el Dry&Clean Motion P y el Multi-Charger.

La nueva gama de colores de Motion Charge&Go IX



Galactic Blue Sporty Red Turquoise Blue Pear Pink



Black Graphite Dark Champagne Silver Pearl White Fine Gold Deep Brown Sandy Brown Rose Gold Beige

Siente las conversaciones



Características principales

-  RealTime Conversation Enhancement
-  Augmented Focus
-  Signia Assistant
-  Conectividad con Android y iPhone
-  Recargable
-  Signia App
-  Compatibilidad CROS
-  Auricular Instant fit

Niveles de rendimiento

- Active IX Pro
- Active IX
- sDemo

Active Pro IX / Active IX

Una nueva era de la audición con Signia Active Pro IX: un auricular por fuera, con la innovadora tecnología Integrated Xperience por dentro, incluyendo la mejora de conversaciones en tiempo real. Se adapta al instante, permite llamadas manos libres y streaming y es resistente al sudor y al polvo.

También disponible como CROS Active IX.

Instant Fit ITE

Modelo	
	
Rendimiento	
Matriz (2 ccm)	47/117 dB SPL
Batería	
Tipo	Batería de iones de litio

CROS en el diseño de auriculares

Compatible con todos los niveles

7IX – 5IX – 3IX – 2IX – 1IX



Las personas con audífonos CROS o BiCROS también quieren audífonos que no se parezcan a ellos. Suele tratarse de clientes más jóvenes con pérdida unilateral y, por tanto, prefieren audífonos con diseños elegantes. En estos casos, pide Active Pro/Active como dispositivo único, un dispositivo de micrófono CROS Active y el cargador portátil Active.

Cargador Active IX



Signia Active Pro IX / Active IX viene en un cargador portátil de tamaño de bolsillo con una batería integrada que puede cargar un par de dispositivos tres veces antes de necesitar ser recargado. El cargador se puede cargar de forma inalámbrica o mediante un cable USB-C.

Colores para todos los gustos



White




Rose Gold



Black



Beige

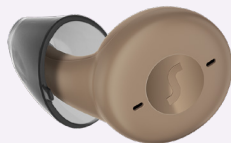

Mocha



Brown

Signia AX

Revolucionario procesamiento por separado

Niveles de rendimiento

7AX

5AX

3AX

2AX

1AX

Oír no siempre resulta fácil. Un gran grupo de gente hablando al mismo tiempo, personas que hablan en voz baja, demasiado ruido de fondo... A veces los sonidos se mezclan, haciendo imposible centrar la atención en lo que se quiere oír.

Augmented Xperience cambia el modo de oír el mundo para tus clientes. En lugar de tener que esforzarse por distinguir las palabras del ruido de fondo, nuestra nueva plataforma utiliza la tecnología propia Augmented Focus™ para procesar ambos por separado y crear un contraste claro. Luego, vuelve a combinarlos para conseguir que el habla tenga una excepcional claridad en un paisaje sonoro totalmente inmersivo.

Así, por ejemplo, el 100% de los participantes en un reciente estudio² afirmó haber entendido excepcionalmente bien el discurso hablado en el entorno familiar gracias a esta tecnología.



Augmented
Xperience

Augmented Xperience está disponible en todos los niveles de rendimiento, del 7 al 1, para que puedas ofrecer a todos tus clientes una claridad del habla excepcional en un entorno envolvente.

ITE



Insio Charge&Go AX

RIC



Pure 312 AX



Características generales de Augmented Xperience

Nuestra pionera plataforma Augmented Xperience ofrece una excepcional claridad en la percepción del habla en un entorno inmersivo, así como conectividad para los dispositivos Android¹ e iOS e inteligencia artificial (IA) para brindar asistencia remota en tiempo real.

Características	Información	Niveles de rendimiento				
		7AX	5AX	3AX	2AX	1AX
Dynamic Soundscape Processing 2.0	El “procesamiento del paisaje sonoro” eleva el procesamiento del sonido a un nivel más preciso mediante la inclusión de datos de movimiento, lo que proporciona un sonido más realista adaptado a la vida diaria.	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●○○
Augmented Focus™	Separa el sonido destacado (el habla) del entorno, creando un contraste claro entre ambos, lo cual hace más fácil seguir las conversaciones.	✓	✓	✓	✓	✓
Sensores acústicos	Los sensores acústicos rediseñados pueden detectar más variables de sonido que nunca, con lo que aportan información más precisa sobre el entorno.	✓	✓	✓	✓	✓
e2e Wireless 4.0	Acoplamiento de control, sincronización, direccionalidad binaural, Spatial Speech Focus, CROS/ BiCROS	✓	✓	✓	✓	✓
Sensor de movimiento	Un sensor de movimiento integrado detecta si el usuario está caminando, corriendo o sentado. Estos datos de movimiento complementan los datos acústicos para optimizar el Dynamic Soundscape Processing 2.0.	✓	✓	✓		
OVP™ (procesamiento de la propia voz) ³	El procesamiento de la propia voz (OVP™) utiliza el reconocimiento en tiempo real de la voz del usuario para ofrecer una impresión natural de la propia voz. Disponible para dispositivos RIC/BTE con e2e wireless en adaptaciones binaurales.	✓	✓	✓		
Sound Clarity	Sound Clarity proporciona sonido real que cubre el abanico completo de situaciones de uso.	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●●○○	●●○○○
Procesamiento de señal / Ganancia y MPO	Canales/controles en Connexx. Para Signia AX, los canales son por cada cadena de procesamiento (Sonido destacado/Entorno).	48/20	32/16	24/12	16/8	16/8
Programas de audición	Número de programas configurable en Connexx.	6	6	6	4	4
Intervalo dinámico ampliado	Procesamiento de 24 bits y 117 dB para una codificación digital mejorada de sonidos suaves y fuertes.	✓	✓	✓	✓	✓
Gestión del habla y del ruido	Reduce el esfuerzo de escucha mediante un sofisticado procesamiento del sonido.	✓	✓	✓	✓	✓
SoundSmoothing™	Reduce la molestia del sonido de golpes fuertes y repentinos, como al manipular objetos de cristal.	✓	✓	✓	✓	
Cancelación de retroalimentación	Vigilancia y control de alta velocidad de la retroalimentación en los distintos canales de procesamiento.	✓	✓	✓	✓	✓
Música en HD	Programas predefinidos para mayor disfrute de la música no transmitida.	3	3	1	1	
eWindScreen	Reduce la molestia del ruido del viento al aire libre.	✓	✓	✓	✓	
Ancho de banda ampliado	Ancho de banda de 12 kHz para un mejor procesamiento de los sonidos ambientales y del habla de alta frecuencia.	✓				
EchoShield	Programa específico para entornos reverberantes.	✓	✓			
Speech Quality	Speech Quality permite una mejor comprensión del habla y facilidad de comunicación con ruido.	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●●○○	●●●○○
Direccionalidad binaural	La direccionalidad proporciona una mejor comprensión del habla con ruido demostrada científicamente. Disponible para adaptaciones bilaterales con micrófonos direccionales y conexión inalámbrica e2e.	✓	✓	✓		
CROS/BiCROS inalámbrico	Requiere transmisores CROS.	✓	✓	✓	✓	✓
Compresión de frecuencia	Mejora la detección de sonidos del habla para usuarios con un umbral reducido de audición de alta frecuencia. La compresión de frecuencia se activa de forma selectiva en función de criterios audiológicos.	✓	✓	✓	✓	✓

Características	Información	Niveles de rendimiento				
		7AX	5AX	3AX	2AX	1AX
Spatial SpeechFocus	Dependiendo de la dirección de la fuente predominante del habla, Spatial SpeechFocus dirige automáticamente el haz direccional a la izquierda, a la derecha o detrás del usuario, ya sea en el coche o en un programa específico de "paseo". Disponible para adaptaciones bilaterales con micrófonos direccionales y conexión inalámbrica e2e.	✓ ¹⁾	✓ ²⁾			
Interacción del usuario	Los usuarios con inquietudes técnicas quizás agradezcan la posibilidad de disponer de más funciones de control sobre sus audífonos. Los audífonos Signia Augmented Xperience ofrecen a estos usuarios una gran variedad de opciones de ajuste en la aplicación Signia.	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Signia Assistant	Signia Assistant ofrece a los usuarios asistencia en todo momento y resolución de problemas día y noche. Aporta información detallada en Connexx para responder a las necesidades de ajuste de cada cliente con más precisión.	✓	✓	✓	✓	✓
Signia App (iOS y Android)	La nueva aplicación Signia combina todas las funciones de aplicaciones anteriores (aplicación touchControl, myControl, myHearing). Las funciones ofrecidas en la aplicación se personalizan automáticamente dependiendo del audífono conectado.	✓	✓	✓	✓	✓
Volumen de transmisión adaptativo	Adaptación del volumen de transmisión en función de la inteligibilidad del habla y dependiendo del ruido ambiental.	✓	✓	✓	✓	✓
Configurador Espacial	El Configurador Espacial forma parte de Signia App y permite al usuario ajustar la dirección del haz del micrófono.	✓	✓			
Transmisión directa para iOS	Los audífonos Signia Augmented Xperience se pueden conectar directamente a dispositivos Apple para realizar llamadas telefónicas y transmisiones de audio, sin necesitar otros accesorios.	✓	✓	✓	✓	✓
Transmisión directa para Android	Transmisión de audio directa desde dispositivos Android compatibles con ASHA a audífonos Augmented Xperience equipados con Bluetooth.	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorio StreamLine TV	Transmita sonido estéreo de alta calidad directamente desde un televisor a audífonos Augmented Xperience equipados con Bluetooth.	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorio StreamLine Mic	Transmita sonido estéreo de alta calidad directamente desde cualquier dispositivo Bluetooth (dispositivos Android, dispositivos Apple más antiguos, otros smartphones, PC, ordenadores portátiles, etc.) a audífonos Augmented Xperience equipados con Bluetooth.	✓	✓	✓	✓	✓
Tinnitus	Una selección de tratamientos para el tinnitus basada en la terapia Notch ampliada o sonidos terapéuticos tradicionales. También es posible combinar ambos métodos.	✓	✓	✓	✓	
Terapia de atenuación	Una innovadora terapia para el tinnitus aplicada a través de la amplificación diaria.	✓	✓	✓	✓	
Smart Optimizer y registro de datos	Smart Optimizer (dentro del registro de datos) ofrece recomendaciones de ajuste fino a medida basadas en un análisis del uso del audífono por cada usuario.	✓	✓	✓	✓	✓
Gestor de aclimatación	Permite al usuario conseguir una audibilidad mejorada a largo plazo, disfrutando al mismo tiempo de una aceptación óptima del dispositivo en la adaptación inicial.	✓	✓	✓	✓	✓
InSituGram	Permite rápidos y prácticos audiogramas de control, así como comprobación de los umbrales mientras se utilizan los audífonos.	✓	✓	✓	✓	✓
AutoFit	Proporciona automáticamente un entorno optimizado de ganancia de inserción en oído real (REIG) sin necesidad de emparejar manualmente los objetivos. La nueva norma IMC2 amplía la gama de equipos REM que admiten AutoFit con Connexx y Noah 4.5.1 o superior.	✓	✓	✓	✓	✓
TeleCare	TeleCare proporciona servicios a distancia, incluidas herramientas adicionales para el seguimiento de los pacientes. Además, la implicación y autonomía del usuario pueden aumentar a través de Signia App.	✓	✓	✓	✓	✓
Servicios a distancia	Incluyen TeleCare Dashboard, Ajuste Fino Remoto, CareChat (incluidos mensajes de texto, llamadas telefónicas y videollamadas), seguimiento virtual.	✓	✓	✓	✓	✓

1) En el programa Universal: haz de micrófono automático hacia la derecha / izquierda / atrás.

2) En el programa Universal: haz de micrófono automático hacia atrás, modo envolvente para habla lateral.
 En programas manuales: haz de micrófono hacia la derecha / izquierda / atrás.

3) No disponible para Insio C&G AX

Los primeros audífonos personalizados con carga sin contacto y Bluetooth

ACOUSTIC
MOTION
SENSORS
AMS

DYNAMIC
SOUNDSCAPE
PROCESSING
DSP

INALÁMBRICO
4.0
E2E



Niveles de rendimiento

- 7AX
- 5AX
- 3AX
- 2AX
- 1AX

Insio Charge&Go AX

Nuestro audífono Insio Charge&Go AX define lo que los audífonos personalizados pueden ofrecer a los usuarios experimentados. Su reducido diseño ofrece un nivel de adaptación más elevado que en dispositivos precedentes y una mayor comodidad durante todo el día. Asimismo, con nuestra plataforma Augmented Xperience, el habla se percibe con excepcional claridad en entornos inmersivos. Los audífonos personalizados incluyen un sensor de movimiento que optimiza la adaptación del sonido a la situación del usuario, detectando si este se está desplazando o no.

Características principales

- Augmented Focus
- Signia Assistant
- Conectividad con Android y iPhone
- Carga sin contacto
- Ajuste instantáneo
- Diseño premiado



Cargador Insio
Estos son los primeros audífonos personalizados con sistema de carga de iones de litio sin contacto. Los usuarios no tienen que hacer nada más que colocar los audífonos Insio Charge&Go AX en el cargador Insio sin preocuparse de que el contacto sea perfecto.

	ITC/HS ITE	ITC/HS ITE	ITC/HS
Modelo			
Rendimiento			
Matriz (2 cc)	124/65	118/55	113/50
Batería			
Tipo	Batería de iones de litio		

* Premiado en los CES Innovation Awards 2022 y ganador del iF Design Award 2022 por Insio Charge&Go AX.

RIC para una excelente claridad del habla

ACOUSTIC MOTION SENSORS
AMS

DYNAMIC SOUNDSCAPE PROCESSING
DSP

OWN VOICE PROCESSING
OVP

INALÁMBRICO
4.0
E2E



- Características principales
- Augmented Focus
 - Own Voice Processing 2.0
 - Signia Assistant
 - Conectividad con Android y iPhone
 - Compatibilidad CROS

Niveles de rendimiento

- 7AX
- 5AX
- 3AX
- 2AX
- 1AX
- sDemo

Pure 312 AX

Dotados de todas las ventajas de nuestra plataforma Augmented Xperience para percibir con excelente claridad el habla, los audífonos Pure 312 AX y CROS Pure 312 AX atraen la atención de los usuarios por la originalidad de su diseño fino y elegante. A pesar de su discreta forma, estos pequeños audífonos ofrecen una completa conectividad Bluetooth, lo que permite disfrutar al máximo de la música, las llamadas o el audio de TV transmitido desde los dispositivos Android y iOS, además de contar con todas las ventajas de nuestro Signia Assistant. La batería de zinc-aire de los audífonos Pure 312 AX proporciona una autonomía de unos 4 días.*

RIC

Modelo				
Tipo de auricular	miniReceiver 3.0	miniReceiver 3.0 M	miniReceiver 3.0 P	miniReceiver 3.0 HP
Rendimiento				
Matriz (2 cc)	44dB/108dB	58dB/116 dB	62 dB/119 dB	74 dB/128 dB
Batería				
Tamaño	312	312	312	312
Consumo de energía	1,5mA	1,7mA	1,7mA	1,7mA

*Cálculo correspondiente a 17 horas de uso diarias que incluyen 5 horas de transmisión de contenidos de audio.

Signia Xperience

Ayuda a la gente a oír lo que importa

Niveles de rendimiento



Características	Información
Tecnología YourSound	Los sensores acústicos rediseñados más un sensor de movimiento integrado aportan información detallada sobre dónde se encuentran los usuarios y lo que están haciendo. El procesamiento dinámico del paisaje sonoro y el procesamiento de la propia voz (OVP™) procesan esta información para ofrecer el sonido más nítido y personalizado.
Sensores acústicos	Detecta más variables de sonido que nunca, con lo que aporta información más precisa sobre el entorno.
Procesamiento del paisaje sonoro	Aprovecha las funciones Sound Clarity y Sound Quality para aportar una percepción natural del sonido y las palabras en todas las situaciones desde cualquier dirección, incluso en movimiento.
Sensor de movimiento ^A	Detecta si el usuario corre, camina o está parado. Esta información se usa para el procesamiento dinámico del paisaje sonoro.
OVP™ (procesamiento de la propia voz) ^A	Utiliza el reconocimiento en tiempo real de la voz del usuario para ofrecer una impresión natural de la propia voz.
Procesamiento de señal / Ganancia y MPO	Canales/controles en Connexx.
Signia Assistant ^A	Ofrece a los usuarios asistencia en todo momento y resolución de problemas día y noche. Aporta información detallada en Connexx para responder a las necesidades de ajuste de cada cliente con más precisión.
TeleCare	Facilita consultas virtuales, ajustes finos en remoto, actualizaciones de progreso, lecciones sobre audición y valoraciones de satisfacción diarias.
Tinnitus	Una selección de tratamientos para el tinnitus basada en la terapia Notch ampliada o sonidos terapéuticos tradicionales. También es posible combinar ambos métodos.
eWindScreen™	Reduce la molestia del ruido del viento incluso al aire libre, con lo que mejora el confort acústico. eWindScreen binaural precisa una conexión inalámbrica e2e.
Direccionalidad binaural OneMic 2.0	Ofrece una comprensión del habla en ruido muy avanzada. Disponible para Silk X.
Spatial SpeechFocus	Detecta la voz más sonora del entorno y enfoca el haz direccional hacia esa voz (es decir, hacia delante, hacia detrás o hacia los laterales). Disponible para adaptaciones bilaterales con micrófonos direccionales y conexión inalámbrica e2e.
Ancho de banda ampliado	Ancho de banda de 12 kHz para un mejor procesamiento de los sonidos ambientales y del habla de alta frecuencia.
EchoShield	Programa específico para entornos con reverberación.

Niveles de rendimiento				
7X	5X	3X	2X	1X
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●○○
✓	✓	✓	✓	✓
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●○○
✓	✓	✓		
●●●●●	●●●●●	●●●●●		
48/20 ^B	32/16	24/12	16/8	16/8
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	
Binaural ^A automático en el programa Universal	Binaural ^A manual	Monoaural	Monoaural	
✓	✓	✓		
✓	✓			
delante / detrás / derecha / izquierda ^C	delante / detrás / omni ^D			
✓				
✓				

A) No está disponible con Silk X

Discreción garantizada



Características principales


- Casi invisible en el oído, para una discreción total
- Tecnología Signia Xperience, para una experiencia auditiva superior
- Click Sleeves, para un ajuste sencillo e instantáneo
- Control remoto
- TeleCare



Con la aplicación Signia



Compatible con un dispositivo CROS para personas con pérdida de audición sin posibilidad de adaptar un audífono en un lado

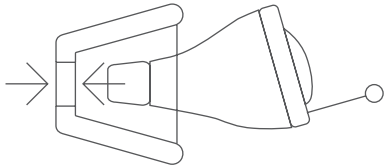

Niveles de rendimiento

- 7X
- 5X
- 3X
- 2X
- 1X
- sDemo

Silk X

Silk X es la solución perfecta para quienes valoran la discreción. El CIC listo para usar disponible en la plataforma Signia Xperience brinda una gran comprensión del habla en un tamaño extraordinariamente discreto con adaptación instantánea. Hecho a medida, sin esperas: tus clientes pueden entrar en tu centro, probar Silk X y salir por la puerta con su nuevo CIC ya puesto, sin tener que esperar a que les preparen un dispositivo personalizado. Gracias a sus fundas flexibles de silicona Click Sleeves, Silk X se acomoda perfectamente al oído y ofrece una adaptación extraordinaria al momento.

Un clic y listo.
Las fundas vienen en cuatro tamaños diferentes y dos estilos (versiones con diseño cerrado y abierto) aptos para prácticamente cualquier forma del oído o necesidad de audición.

Click ITE

Modelo

Click CIC



Rendimiento

Matriz (2 cc)

50/114 dB SPL

Batería

Tamaño

10

Consumo de energía

1.2 mA

App, accesorios y compatibilidad de audífonos

En esta visión general se muestran las aplicaciones y los accesorios que funcionan con nuestros audífonos. Siempre de acuerdo con la solución elegida, tus clientes podrán mejorar todavía más su experiencia auditiva y su nivel de comodidad con este catálogo de compatibilidades.

Audífonos	Signia App	CROS/ BiCROS	Streamers y transmisores		Controles remotos	Cargadores portátiles	Cargadores de mesa	Cargador Dry&Clean	Multi Charger
									
Styletto IX	●	● ^A	●	●	●	●	-	●	-
Audífonos Pure Charge&Go IX	●	● ^B	●	● ^F	●	●	●	●	●
Active Pro IX	●	● ^C	●	●	●	●	-	-	-
Motion Charge&Go IX	●	● ^D	●	●	●	-	●	●	●
Silk Charge&Go IX	●	● ^E	-	-	●	●	-	-	-
Audífonos Insio IX	●	● ^E	-	-	●	● ^G	-	-	-
Insio Charge&Go AX	●	● ^{I,J}	●	●	●	-	●	-	-
Pure 312 AX	●	● ^{I,J}	●	●	●	-	-	-	-
Silk X	●	● ^L	-	-	●	-	-	-	-

- A) Compatible con CROS Styletto IX

B) Pure Charge&Go IX / T IX son compatibles con CROS Pure Charge&Go IX; Pure Charge&Go BCT IX es compatible con CROS Pure Charge&Go BCT IX

C) Compatible con CROS Active IX

D) Compatible con CROS Pure Charge&Go IX
- E) Compatible con CROS Silk Charge&Go IX

F) No es compatible con Pure Charge&Go BCT IX

G) Solo para Insio Charge&Go CIC IX

H) Compatible con CROS Pure 312 AX

I) Compatible con CROS Silk X

J) Excluyendo PL 4.0

K) Compatible con Insio Nx ITC/ITE con Bluetooth

Vista general de los accesorios

Transmisores de audio



El transmisor TV Sound proporciona una conectividad perfecta, con sonido estéreo de calidad para una experiencia de audio envolvente. Emparejamiento sin esfuerzo, indicadores LED intuitivos, funcionalidad de conexión automática y compatibilidad con todos los audífonos Signia con conectividad.



StreamLine Mic transforma los dispositivos Signia equipados con Bluetooth en algo más que unos audífonos de última generación. Se convierten también en auriculares manos libres de teléfono móvil y en auriculares estéreo inalámbricos capaces de recibir audio de la mayor calidad en ambos oídos desde cualquier dispositivo Bluetooth. Con Signia App, los usuarios pueden incluso ajustar el volumen de la transmisión de audio de forma individualizada.



Tan pequeño que puede llevarse en un llavero, el miniPocket es la solución perfecta para quienes buscan un control cómodo y discreto de sus audífonos, sin necesidad de smartphones ni enormes mandos a distancia.

CROS / BiCROS



Para personas con pérdida de audición total en un lado, los dispositivos CROS de Signia reciben sonido en ese lado y lo transmiten a un audífono colocado en el otro lado.

EarWear 3.0

Discreto. Seguro. Cómodo.

EarWear 3.0 ofrece una comodidad y un ajuste excepcional. Su diseño pequeño y discreto garantiza una presencia segura que apenas se nota.

Con Eartips y Sleeves 3.0 fáciles de cambiar, y compatibilidad con moldes personalizados, brinda a tus clientes una experiencia auditiva óptima.

Las ventajas de EarWear 3.0 de un vistazo:

Gran ajuste físico

La combinación de pequeñas secciones transversales en el auricular, adaptadores suaves que dan al auricular una superficie frontal estrecha, y una geometría del cable cuidadosamente diseñada en una variedad de longitudes ofrece un buen ajuste para casi todos los oídos.

Amplio abanico de opciones de acoplamiento acústico

Los adaptadores y fundas están disponibles en una variedad de estilos, tamaños y opciones de ventilación para garantizar la comodidad y un buen acoplamiento acústico.

Buena sujeción

La geometría del cable está diseñada para fijar la colocación del auricular en el canal auditivo sin desplazamiento lateral, con lo que se reduce la necesidad de filamentos de sujeción.

Atractivo estético

La inteligente forma del cable y la colocación en el oído aseguran un buen ajuste en el oído y consiguen que sea menos visible.

Comodidad para los usuarios

Los usuarios pueden cambiar fácilmente los adaptadores y fundas cuando sea necesario.


Duradero e hipoalergénico

El miniReceiver 3.0 incluye una salida de cable reforzada que da una mayor durabilidad, y una carcasa de titanio para uso hipoalergénico.




EarWear 3.0

miniReceiver 3.0

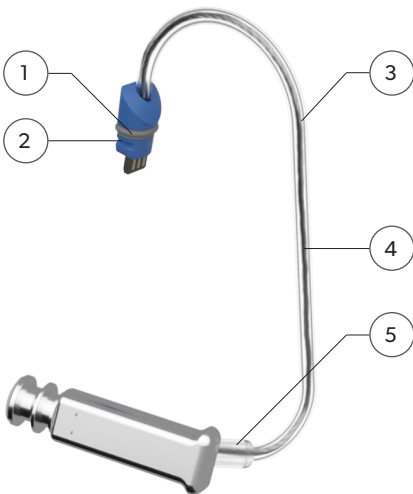

- 1) Sistema de empujar/tirar, no necesita herramientas
- 2) La Detección Inteligente del Auricular evita el uso incorrecto
- 3) La curvatura única garantiza una buena sujeción y queda pegada a la cabeza, para una estética más atractiva
- 4) Cinco longitudes 0-4
- 5) Salida de cable reforzada para una mayor durabilidad
- 6) Protección anticerumen mejorada
- 7) Eartip 3.0 y Sleeve 3.0, compatibles con miniReceiver 3.0 y ThinTube 3.0
- 8) WaxGuard 3.0 NanoCare
- 9) La interfaz permite cambiar fácilmente los Eartip 3.0 y Sleeve 3.0, ofreciendo al mismo tiempo una alta seguridad
- 10) La pequeña interfaz facilita un cómodo ajuste en canales auditivos pequeños
- 11) Carcasa de titanio para uso hipoalergénico

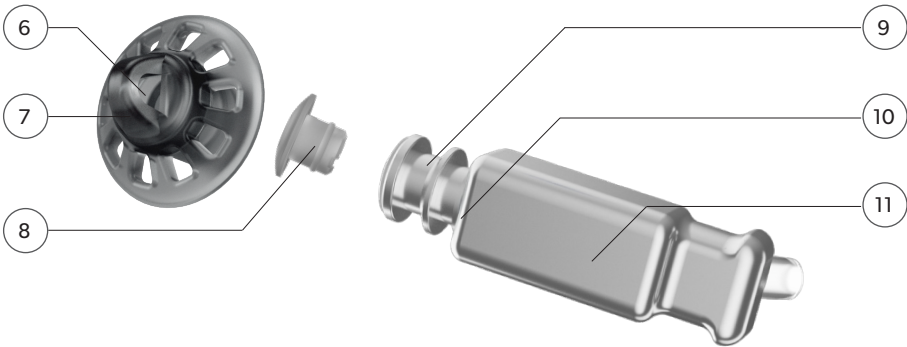

miniReceiver 3.0 disponible en cuatro niveles de potencia: S, M, P y HP

	S		M		P		HP	
	Acoplador de 2 cc ³	Simulador de oído	Acoplador de 2 cc ³	Simulador de oído	Acoplador de 2 cc ³	Simulador de oído	Acoplador de 2 cc ³	Simulador de oído
OSPL 90 (Máximo)	110 dB SPL	120 dB SPL	119 dB SPL	129 dB SPL	122 dB SPL	131 dB SPL	131 dB SPL	138 dB SPL
138 dB SPL	46 dB	57 dB	60 dB	70 dB	65 dB	75 dB	75 dB	83 dB


EarWear 3.0

ThinTube 3.0

La opción de dos diámetros diferentes brinda una solución de gran atractivo estético para una pérdida auditiva de moderada a severa

ThinTube 3.0 | 0.9 mm
Pérdida auditiva de leve a moderada

ThinTube 3.0 P | 1.4 mm
Pérdida auditiva severa

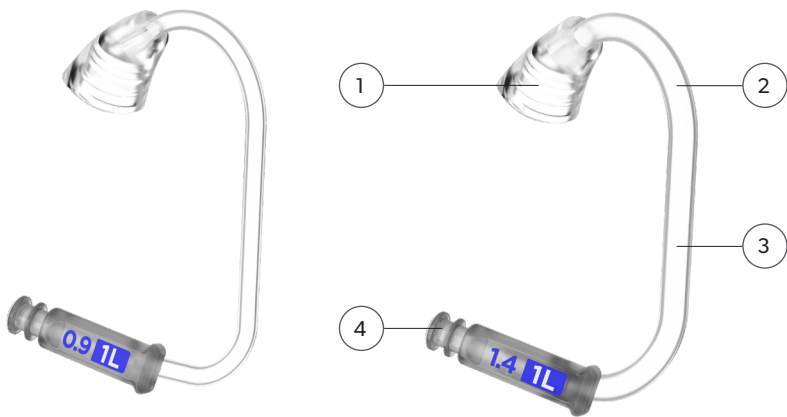

- 1) ThinTube 3.0 de una sola pieza
- 2) Cinco longitudes 0-4
- 3) 0,9 mm para pérdidas de leves a moderadas y 1,4 mm para pérdidas severas
- 4) La interfaz permite cambiar fácilmente los Eartip 3.0 y Sleeve 3.0, ofreciendo al mismo tiempo una alta seguridad

Eartips 3.0 y Sleeves 3.0


Esta nueva y versátil gama es adecuada para la inmensa mayoría de las anatomías del oído y necesidades de audición

La punta blanda de los adaptadores y fundas permite una inserción profunda más cómoda, también en canales auditivos pequeños.

El diseño, seguro y probado, permite a los usuarios cambiarlos mucho más fácilmente.

El Power Sleeve 3.0 amplía las fundas de alta fiabilidad acústica para ofrecer también una opción completamente cerrada.


Todos los artículos Earwear 3.0 se pueden usar juntos.

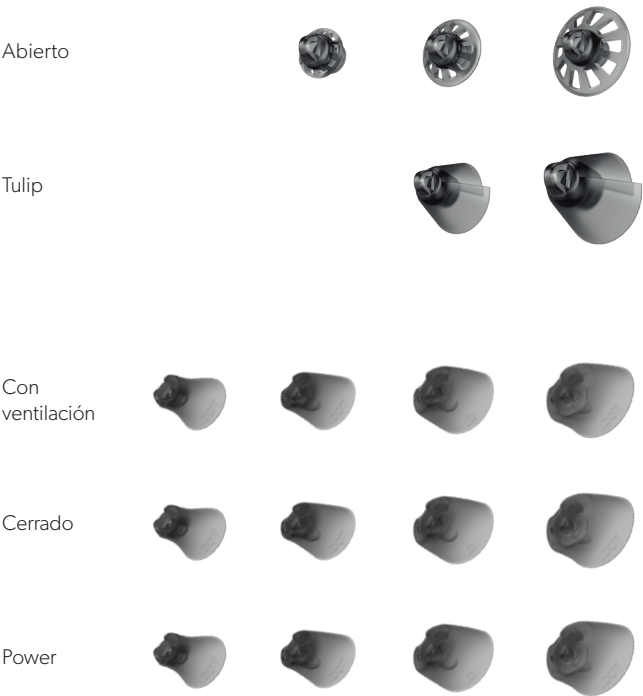

EarWear 3.0

Earmolds 3.0

Compatible con miniReceiver 3.0 y ThinTube 3.0

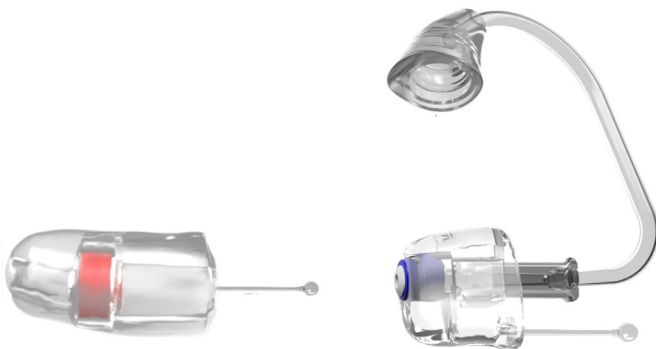


Earmold 3.0 está disponible en dos versiones: una larga y otra corta.

El Earmold 3.0 largo incluye:

- WaxGuard 3.0 NanoCare
- Protector anticerumen QuickGuard

Concha Lock Sleeve 3.0

Concha Lock Sleeve 3.0 opcional, disponible en tres tamaños

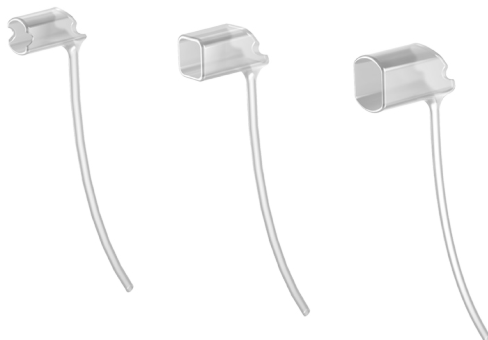

Concha Lock Sleeve 3.0 S – se adapta al miniReceiver 3.0 S y tanto al ThinTube 3.0 como al ThinTube 3.0 P

Concha Lock Sleeve 3.0 M – se adapta al miniReceiver 3.0 M

Concha Lock Sleeve 3.0 P – se adapta al miniReceiver 3.0 P

EarWear 3.0

Herramientas y kits de inicio

Hay kits de inicio disponibles para cada solución: Eartips 3.0, ThinTube 3.0 y miniReceiver 3.0.

Cada kit incluye los artículos específicos necesarios para ese tipo de EarWear 3.0.

Estos incluyen:


- Dispositivo de medición para garantizar una correspondencia perfecta para miniReceivers 3.0 y ThinTubes 3.0
- Estuche con ocho protectores anticerumen WaxGuard 3.0 NanoCare
- Paquete de diez nuevos filamentos de sujeción Concha Locks 3.0 de tamaño único
- Herramienta opcional para cambiar los adaptadores
- Herramienta para extraer el auricular de un adaptador personalizado

También recibirás manuales de instrucciones sobre cómo usar EarWear 3.0, con información de todo tipo: sobre adaptadores y fundas, sobre cómo colocar o retirar los ThinTubes 3.0 o miniReceivers 3.0, o cómo cambiar los moldes auriculares o protectores anticerumen.


Herramienta de extracción 3.0




Contenido de Eartips 3.0 de los kits de inicio

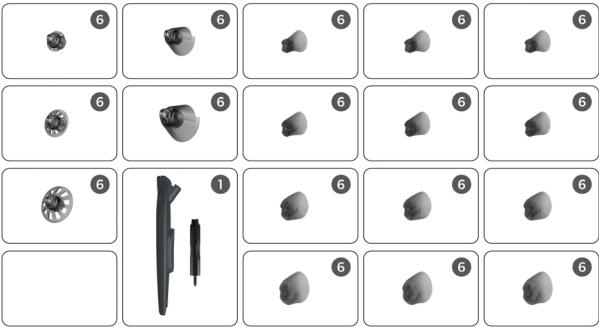

Contenido de ThinTube 3.0 de los kits de inicio

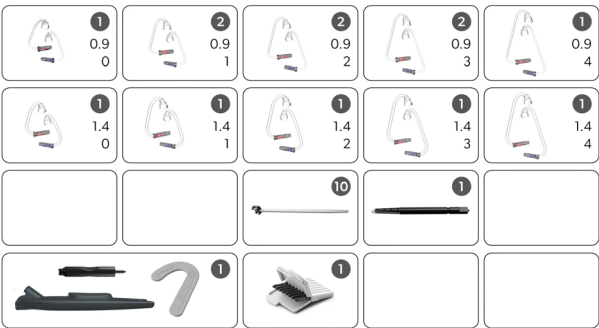

Contenido de miniReceiver 3.0 de los kits de inicio

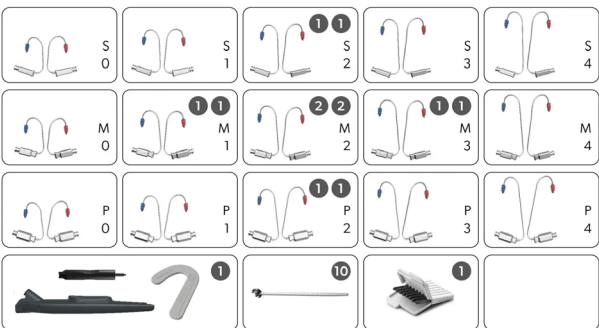

EarWear 3.0

Tabla de compatibilidad de EarWear

Los últimos productos de Signia utilizan EarWear 3.0, mientras que productos más antiguos usan EarWear 2.0

	ThinTube 3.0	miniReceiver 3.0	Eartips 3.0 y Sleeves 3.0	Earmold 3.0	miniReceiver 2.0	Click Domes y Click Sleeves	Click Mold
Serie Pure IX	-	●	●	●	-	-	-
Serie Styletto IX	-	●	●	●	-	-	-
Serie Active Pro IX	-	-	●	-	-	-	-
Motion Charge&Go IX	● ***	-	●	●	-	-	-
Serie Silk IX	-	-	● *	● **	-	-	-
Serie Silk X	-	-	-	-	-	●	-

* Silk Charge&Go IX compatible solo con Sleeve 3.0
** Los moldes a medida para la serie Silk IX no son intercambiables con los moldes estándar Earmold 3.0
*** Motion SP IX no son compatibles con ThinTube



Un mundo de posibilidades de carga

Cargadores portátiles



Cargador Styletto

Cargador portátil con batería integrada, capaz de cargar completamente un par de audífonos hasta cinco veces antes de necesitar recargarse. Además, permite la carga inalámbrica.

Versiones específicas disponibles para Styletto IX.



Cargador portátil Pure

Cargador de bolsillo con batería integrada, capaz de cargar un par de audífonos hasta tres veces antes de necesitar recargarse.

Compatible con los tres modelos de la familia Pure Charge&Go IX.



Cargador Silk

Cargador portátil con batería integrada, capaz de proporcionar hasta tres cargas completas antes de necesitar recargarse. Permite la carga inalámbrica.

Compatible con Silk Charge&Go IX.



Cargador Active IX

Cargador de bolsillo con batería integrada, capaz de proporcionar hasta tres cargas completas antes de necesitar recargarse. Compatible con carga inalámbrica.



Cargador portátil Insio CIC

Cargador con batería integrada, capaz de proporcionar hasta tres cargas completas para un par de audífonos. Compatible con carga inalámbrica.

Uso con: Insio Charge&Go CIC IX.

Cargadores de mesa



Cargador Dry&Clean

Más que un cargador: limpia y seca los audífonos para garantizar un rendimiento óptimo. Realiza un ciclo completo de limpieza con luz UVC en solo 15 minutos.

Versiones específicas disponibles para: Styletto IX, familia Pure Charge&Go IX, Styletto AX, Pure Charge&Go AX / T AX, Motion Charge&Go P X, Motion Charge&Go SP X, Motion Charge&Go P IX y Motion Charge&Go SP IX.



Cargadores de mesa

Cargadores de mesa compactos con indicadores LED del estado de carga.

Versiones específicas disponibles para: familia Pure Charge&Go IX, Pure Charge&Go AX / T AX, Motion Charge&Go P X, Motion Charge&Go SP X, Motion Charge&Go P IX y Motion Charge&Go SP IX.



Cargador de mesa Insio AX

La carga sin contacto permite colocar los audífonos en el cargador sin necesidad de colocarlos de forma precisa.

Compatible con Insio Charge&Go AX.



Multi Charger

Un solo cargador, compatible de forma práctica con los siguientes audífonos:

Pure Charge&Go IX (todos los modelos), Pure Charge&Go AX / T AX, Motion Charge&Go P X, Motion Charge&Go SP X, Motion Charge&Go M IX, Motion Charge&Go P IX y Motion Charge&Go SP IX.



Cargador Inductivo II

También incluye función de secado.

Compatible con Motion Charge&Go X.




Cargador Inductivo E

Para Motion Charge&Go X (niveles de rendimiento 2X y 1X).

Para satisfacer todas sus necesidades

Asistencia auditiva

Cada día se procura satisfacer e incluso superar las expectativas y necesidades de audición de tus clientes. Con Signia tienen un compañero que le apoya sin reservas. El amplio espectro que cubre nuestro asesoramiento, que abarca desde componentes de audición hasta recomendaciones, realización de pruebas y herramientas de adaptación, mejora tu flujo de trabajo y te proporciona todo lo que necesitas para encontrar la solución individualizada más apropiada para tus clientes.

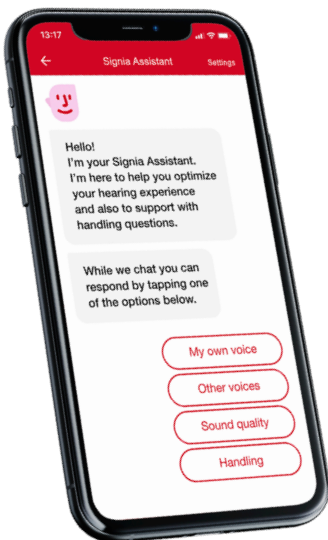

Signia Assistant

Con su red neuronal de inteligencia artificial en tiempo real, Signia Assistant garantiza al usuario la mejor solución posible en una situación determinada, siempre ajustada a sus necesidades y preferencias específicas.

Proporciona a tus clientes respuestas sencillas a todas las preguntas sobre el uso de los audífonos, incluso dentro de la aplicación les muestra vídeos útiles y relevantes para su dispositivo concreto. De este modo, los usuarios obtienen la asistencia que necesitan durante todo el proceso de iniciación, y puedes así mejorar la eficiencia de cada visita en tu consulta.



TeleCare

Signia TeleCare te permite prestar asistencia a tus clientes de forma remota, para que estos reciban tu ayuda en situaciones de la vida real siempre que lo necesiten. Puedes atender consultas virtuales por teléfono o videollamada y ajustar la configuración del audífono a distancia con el software de adaptación Connexx.

Menor esfuerzo, mayor satisfacción

Servicio para asesoramiento, adaptaciones y pruebas



Software de adaptación Connexx



Unity™ 4
Sistema de ajuste

Signia te ofrece una amplia gama de apoyo en asesoramiento y ajuste, desde software de programación y herramientas hasta unidades de ajuste móviles, audífonos para demostración y herramientas de asesoramiento. Esto mejora tu flujo de trabajo y hace que las pruebas y las adaptaciones sean más fluidas y agradables para tus clientes.

Adaptaciones de Integrated Xperience en Connexx

Connexx, nuestro software de ajuste, te empodera con conocimientos del mundo real para ofrecer un soporte excepcional a cada paciente de manera personalizada.

En Connexx, el ajuste inicial configura los audífonos Signia IX para que el usuario pueda escuchar lo que considera importante. Estos ajustes han sido meticulosamente afinados para ofrecer una excelente base de partida a cada usuario.

El control de Procesamiento del Paisaje Sonoro Dinámico (DSP) en Connexx, ofrece un deslizador para adaptarse a las preferencias individuales de tus clientes. Este deslizador cuenta ahora con una potencia sin precedentes gracias a nuestra innovadora tecnología Augmented Focus™.

Unidad de evaluación auditiva y ajuste Unity 4

La unidad de ajuste Unity 4 presume de un tamaño físico reducido. Aprovecha la combinación perfecta de funcionalidad y elegancia que ahorra espacio.

Mejora la experiencia del cliente, agiliza el proceso de trabajo y brinda atención superior.

Todas las necesidades de tu cliente, juntas


Signia App

Mayor comodidad

Más sencilla y cómoda para todos, la aplicación Signia combina todas las aplicaciones de Signia ya existentes en un solo entorno unificado para atender todas las necesidades del usuario. Y, como incluye TeleCare, se integra a la perfección en su proceso de adaptación, por lo que a los clientes les resulta más sencillo mantenerse en contacto contigo cuando no están en tus instalaciones. Compatible con todos los audífonos Signia, su ingeniosa interfaz solo muestra al usuario las funciones aplicables a su dispositivo.



Compatible con Android y iOS.
La aplicación es gratuita.

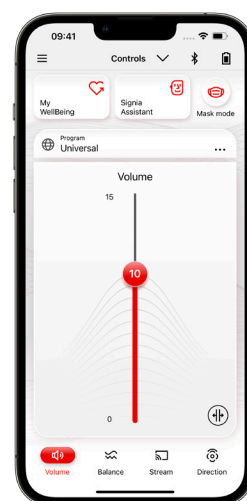

TeleCare

Mantén un contacto más cercano con tus clientes:

- Contacto en tiempo real mediante mensajes de texto, llamadas de voz o videollamadas
- Monitorización intuitiva de la satisfacción diaria de tus clientes
- Concertación virtual de citas para ajustar con precisión los audífonos de forma remota

Control remoto

Personaliza todavía más la experiencia auditiva de tus clientes:

- Control del programa y el volumen de audición
- Ajuste del balance de sonido
- Configurador espacial de 360° para un ajuste individualizado de la direccionalidad
- Continua monitorización de la conexión de los audífonos y del estado de la batería

Conectividad y transmisión de audio

- Fácil gestión de los accesorios de transmisión de audio (como StreamLine TV o StreamLine Mic), así como de los dispositivos CROS
- Control del nivel de volumen durante las transmisiones de audio
- Volumen de transmisión adaptativo



TeleCare



Control Remoto



Conectividad y transmisión de audio



Signia Assistant



Signia Assistant

La nueva e inteligente manera de atender mejor las necesidades de tus clientes



¿Te imaginas poder ayudar a tus clientes, fuera de tu centro, a ser brillantes en cada etapa de su viaje hacia una audición mejor? Ahora puedes hacerlo con el revolucionario Signia Assistant.

La primera red neuronal en tiempo real del mundo destinada a los audífonos

Este asistente de fácil uso ofrece pequeños ajustes de sonido cuando es necesario, así como tutoriales en vídeo para dar respuesta a las dudas de utilización. Gracias a su red neuronal de inteligencia artificial en tiempo real, el asistente da la mejor solución posible a tus clientes cuando surge algún problema entre una cita presencial y otra.

Ve cada detalle con Connexx

Con el software de adaptación Connexx, podrás ver todos los cambios efectuados por el asistente y comprender así los problemas principales que le surgen a cada paciente. Se trata de una ingeniosa solución que aumenta la eficiencia de las consultas y las adaptaciones, así como la satisfacción de los clientes.

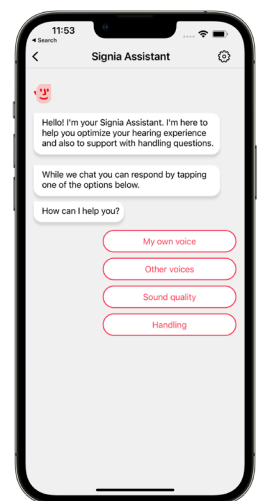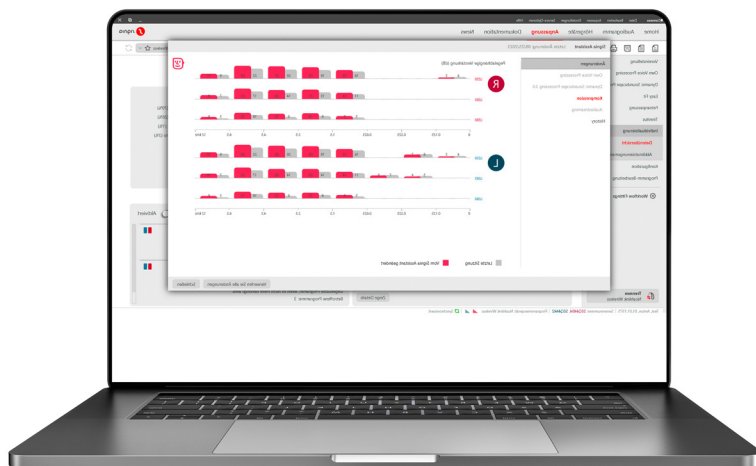

Con Signia Assistant puedes:

- Ofrecer a tus clientes la tranquilidad de tener asistencia en todo momento.
- Aumentar el nivel de satisfacción de los clientes y que un número mayor se decida a usar audífonos, al poder atender con mayor precisión las necesidades de cada usuario.
- Aumentar la calidad de las consultas de seguimiento con niveles nunca vistos de información de uso real.
- Realizar ajustes con facilidad, al ver exactamente cómo personalizan tus clientes su experiencia auditiva.

My WellBeing – El medidor de tu actividad

Escuchar activamente, vivir activamente

Con My Wellbeing en la aplicación Signia y audífonos en los niveles de rendimiento 7 a 3, las plataformas de audífonos IX y AX se vuelven aún más atractivas para tus clientes. Se ha demostrado científicamente que medir los indicadores de salud ayuda a mantener y mejorar la actividad física. Si se está en forma y sano, se entrena la audición siendo más activo en la vida diaria.


Los audífonos envían los datos de uso individuales a la aplicación Signia. Por lo tanto, solo pueden ser consultados por los propios clientes. Al tocar la función correspondiente, se accede a la vista general del día/semana/mes/año y al intervalo de ajuste de objetivos. Los resultados se actualizan en la aplicación Signia cada 15 minutos.

Activo en la vida cotidiana

En «My WellBeing», tus clientes encontrarán «Pasos» y «Actividades». Esto les permite realizar un seguimiento de sus movimientos diarios sin necesidad de un accesorio y fijarse objetivos.

Motivación para una audición brillante


My WellBeing también incluye la medición del «tiempo de uso» y las «conversaciones». Esto proporciona al usuario más transparencia sobre su propio comportamiento de uso y familiarización. OVP 2.0 registra la cantidad de conversaciones. Esto permite a los usuarios sacar información sobre sus actividades sociales.

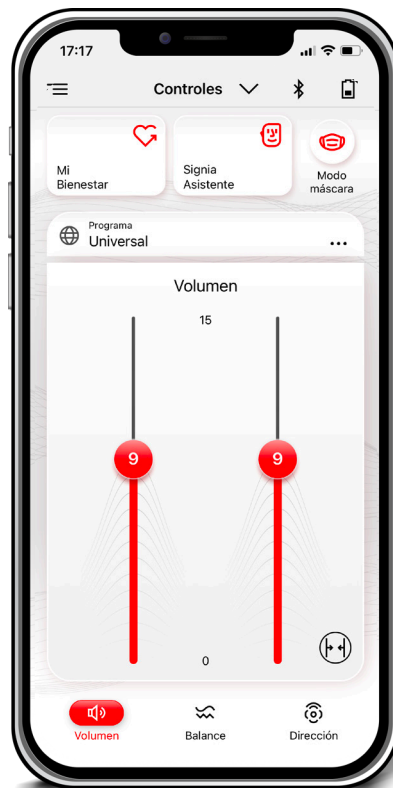

Un símbolo de corazón conduce a las funciones de My WellBeing




Todas las funciones de My WellBeing

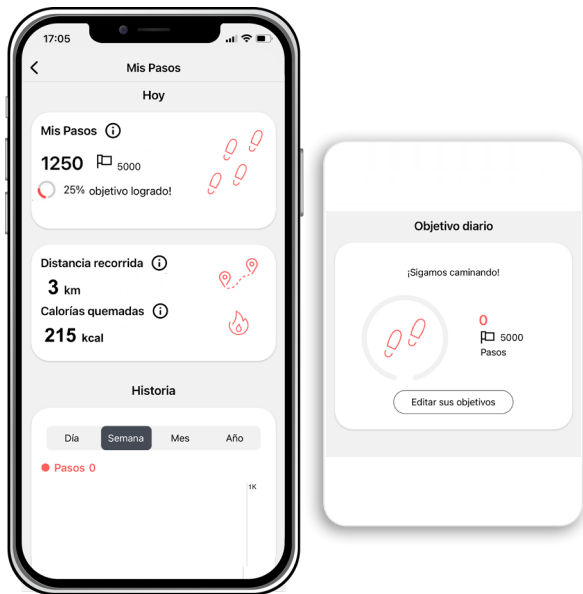


Pasos

Además del uso audiológico, los sensores de movimiento registran el número de pasos. Esto anima a hacer más ejercicio.

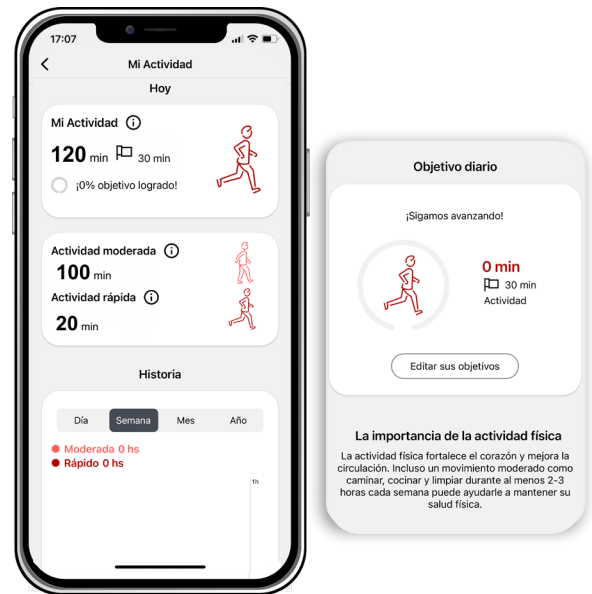

Actividades

«Actividades» comprende tres categorías: Actividad total, a la que también se refiere el objetivo diario, así como actividad moderada y actividad rápida. El objetivo preestablecido, que puede personalizarse en cualquier momento, se basa en las recomendaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

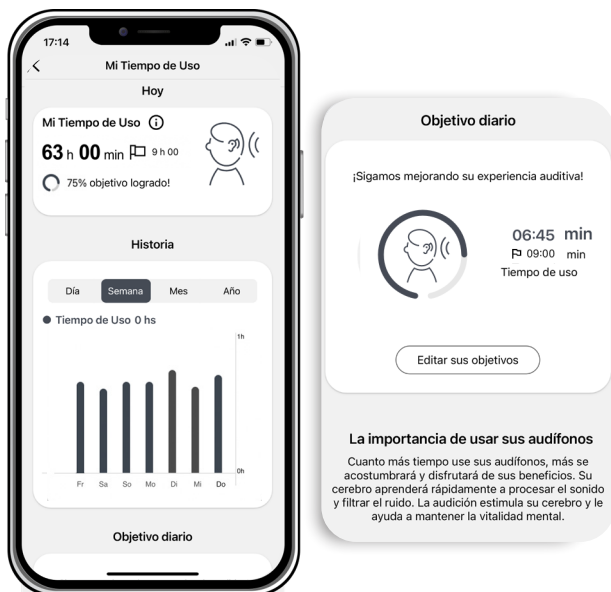

Tiempo de uso

El tiempo de uso es un parámetro de datos conocido que ya está disponible en Connexx. Ahora los usuarios de audífonos también pueden acceder a él por sí mismos.




Conversaciones

OVP 2.0 registra tu propia actividad de habla y, por tanto, la proporción de conversaciones a lo largo del día. Las personas que vuelven a entender a la otra persona disfrutan más de las conversaciones y, por tanto, socializan más. Aumentan sus actividades comunicativas y mejoran así su actitud ante la vida.

Productos de limpieza e higiene

Ofrece a tus clientes no sólo audífonos y accesorios Signia, sino también productos de cuidado de alta calidad.

Productos de limpieza y cuidado Signia

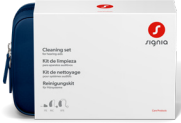		Kit de limpieza (bolsa, 3 paños de limpieza, spray de limpieza, 1 cápsula de secado, vaso de secado)
Kit de limpieza	Vaso de limpieza	Spray de limpieza (30 ml)
		Toallitas de limpieza (pack de 30 toallitas)
Spray de limpieza	Toallitas de limpieza	Pastillas secantes (pack de 4 uds)
		Vaso de secado
Pastillas limpiadoras	Pera insufladora	Pastillas limpiadoras (20 unidades - 5 paquetes de 4)
		Vaso de limpieza
Vaso de secado	Pastillas secantes	Pera insufladora

Compatibilidad de la interfaz de programación

Audífonos	Noahlink Wireless	Connexx Air	Adaptador I3	Flex Connector
Styletto IX	●			
Active Pro IX / Active IX	●			
Motion Charge&Go IX	●			
Audífonos Pure Charge&Go IX	●			
Silk Charge&Go IX		●		
Audífonos Insio IX		● ¹	● ²	● ³
Insio Charge&Go AX	●			
Pure 312 AX	●			
Silk X		●		●

1 Solo versiones con tecnología e2e wireless
2 Insio IIC/CIC IX con placa frontal I3, necesaria para las versiones sin conexión inalámbrica y compatible con las versiones con tecnología e2e
3 Insio CIC IX con T5 faceplate e Insio ITC/ITE IX, necesarias para las versiones sin conexión inalámbrica y compatibles con las versiones con tecnología e2e

Interfaces de programación para Connexx

	NoahLink Wireless 2: para adaptar audífonos con Bluetooth
	ConnexxAir: para adaptar audífonos sin Bluetooth, pero con e2e wireless
	HI-Pro 2 Interfaz USB para PC: Conexión del HI-Pro 2 a través del puerto USB del PC

Tabla de colores para dispositivos SLIM-RIC, RIC y BTE

Productos	Colores												
	Beige	Granite	Grey	Brown	Black	Silver	Pearl White	Sandy Brown	Dark Champagne	Dark Granite	Deep Brown	White	Rose Gold
													
Stylecto IX					•							•	
Motion Charge&Go IX	•				•	•	•	•	•		•		•
Audífonos Pure Charge&Go IX	•				•	•	•	•	•		•		•
Pure 312 AX	•				•	•	•	•	•		•		•

Vista general de colores de Instant Fit ITEs

Descripción	Active Pro IX	Silk IX	Silk X
 Blue/Mocha		•	•
 Red/Mocha		•	•
 Blue/Black		•	•
 Red/Black		•	•
 Mocha/Beige			
 Tan/Beige			
 Black	•		
 Snow White	•		
 Rose Gold	•		
 Beige	•		
 Brown	•		
 Mocha	•		



Dark Brown	Black/ Silver	Cosmic Blue/ Rose Gold	Snow White/ Rose Gold	Black/ Graphite	Black/ Fine Gold	Cosmic Blue/ Silver	Snow White/ Silver	Snow white/ Fine Gold	Graphite	Fine Gold	Cosmic blue/ Fine Gold	Turquoise Blue	Galactic Blue	Pearl Pink	Sporty Red	Kit de conversión de color
																
	•	•	•	•			•									
									•	•		•	•	•	•	•
									•	•						•
									•	•						•

Tabla de colores de dispositivos ITE

Descripción	Insio Charge- &Go CIC IX	Insio ITC/ITE IX	Insio IIC/CIC IX	Insio C&G AX ITC/ITE
 Beige		•		•
 Tan		•		•
 Mocha	•	•	•	•
 Brown		•		•
 Dark Brown	•	•	•	•
 Black	•	•	•	•



Muestrario de colores
Con los colores de los audífonos RIC, BTE e ITE y la vista general de los colores disponibles para cada producto.



Nuestro equipo

Equipo Signia

Para contactar con el equipo de Signia, puedes hacerlo a través de los siguientes teléfonos o mails:

- **Teléfono oficina:** 916 26 60 74
- **Audiología: Soporte técnico**
audiologia.spain@wsa.com (Extensión 1)
- **Administración: Facturación y finanzas**
administracion@wsa.com (Extensión 2)
- **Logística y Pedidos: Atención al cliente y estado de pedidos**
clientes@wsa.com (Extensión 3)
- **Marketing: Solicitud de materiales de marketing, acciones de marketing y marketing digital**
marketingiberica@wsa.com (Extensión 4)

Nos apasiona encontrar soluciones eficientes para los desafíos más complejos.

"El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día."

Nuestros delegados comerciales

Delegados comerciales

Contamos con delegados comerciales en toda España, podrás contactar con ellos a través de los siguientes teléfonos o mails:

**Alejandro Díaz**

- alejandro.diaz@wsa.com
- 608 85 21 99

**Daniel Coloma**

- daniel.coloma@wsa.com
- 644 48 69 17

**Víctor Álvarez**


- victor.alvarez@wsa.com
- 648 56 40 50

**Norberto Martín**

- norberto.martin@wsa.com
- 649 46 78 92

**Álvaro Martín**

- alvaro.martin@wsa.com
- 630 78 82 53

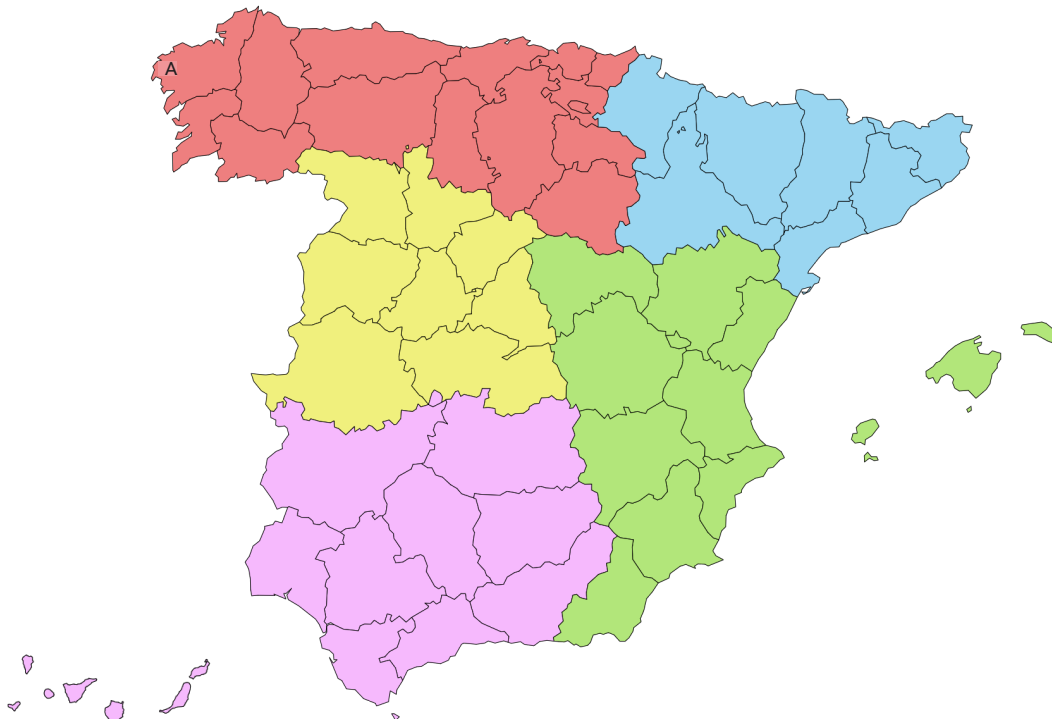

Notas

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

Notas

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Acerca de Signia

Signia es una de las principales marcas de audífonos del mundo. Nuestro objetivo es mejorar la audición de las personas mediante innovaciones icónicas. Nos negamos a aceptar la pérdida auditiva como una limitación. No se trata de corregir una pérdida, sino de lograr un valor diferencial. No se trata solo de rendir, sino de rendir de forma brillante. No se trata solo de volver a oír, sino de oír mejor que nunca. Oír cada palabra, cada latido, cada respiración.

Signia. Be Brilliant.

Puedes conocernos mejor en signia-pro.com

O, si lo prefieres, puedes pedir a tu especialista en audición más información sobre audífonos Signia, sus prácticos accesorios y la aplicación Signia.



Compatible con Android y iOS. La aplicación es gratuita.

La información plasmada en este documento contiene descripciones generales de las opciones técnicas disponibles, que no tienen que estar presentes en todos los casos particulares y están sujetas a cambio sin previo aviso.

Los logotipos y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso de dichas marcas por parte de WSAUD A/S se realiza con licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

El símbolo "Qi" es una marca comercial de Wireless Power Consortium.

©09.2023 WSAUD A/S



Más información en:



signia-pro.com



facebook.com/signiahearingSpain



youtube.com/signiahearingSpain



instagram.com/signiaspain