

# シグニア補聴器

おすすめカタログ **2025年11月版**

(プレミアム・アドバンス・スタンダード)




signia

Be  
Brilliant™



## 加齢による聴力低下

- 難聴は年を重ねるにつれ、誰にでも起こりうるもの。
- 聴力の低下は30代からすでに始まっている。
- 難聴が進むと高い音から聞きづらくなり、聞こえる音が減っていく。
- 加齢性難聴は自分では気づきにくい。

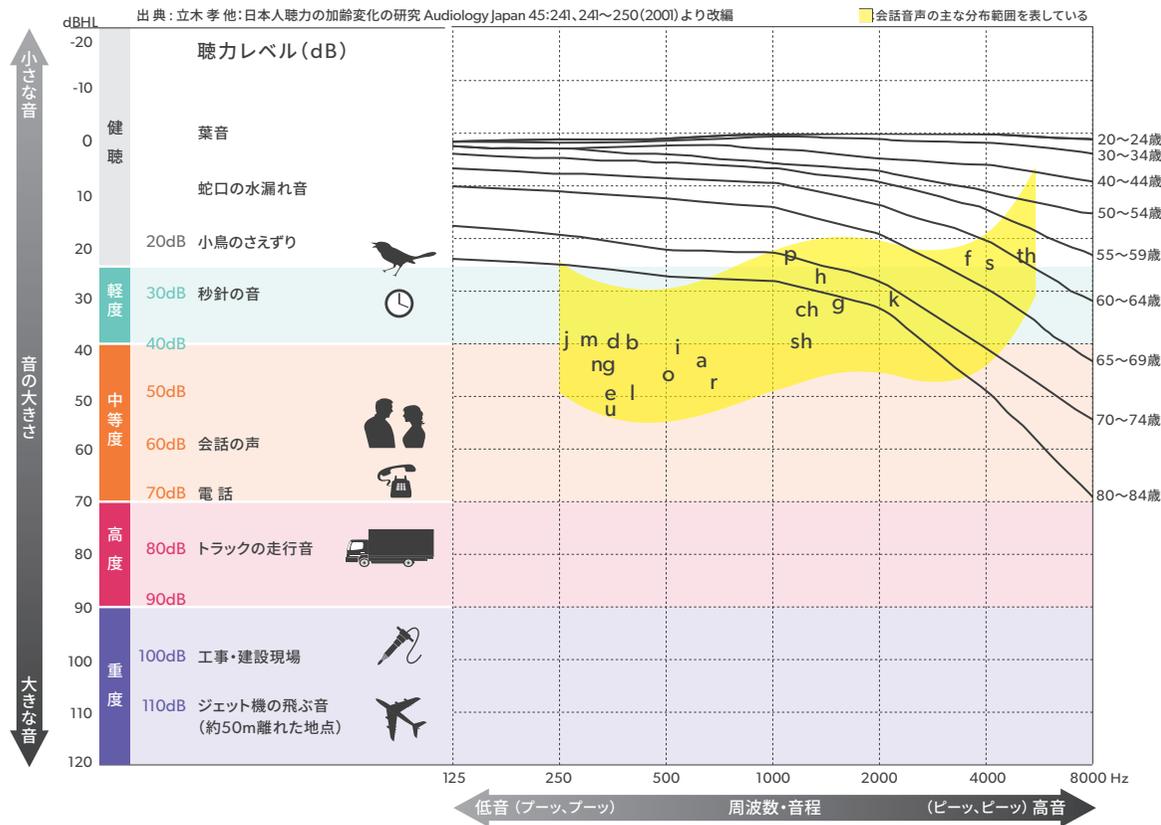

## 補聴器はなぜ必要？

難聴の場合、早いタイミングで適切な補聴器をつけると、いろいろなメリットがある。

### ● より良いコミュニケーション

音がよく聞こえるようになると、家族や友人と話をすることが楽しくなる。



### ● 人間関係と心の健康

人生100年時代。コミュニケーション不足によって人間関係が疎遠になるのを防ぎ、あなたの新しい挑戦を応援する。



### ● 生活上の危険の回避

音で周囲の状況を把握し、危険を未然に防ぐのを助けてくれる。



### ● 音で脳に良い刺激を与える

聴覚刺激を増やすことで、「楽しい」「うれしい」などの情動を引き起こし脳機能を活性化できるといわれている。




## 両耳装用のすすめ



両耳装用は**満足度が高い**という調査結果があります。

	満足度	平均使用時間/日	全く使用しない
両耳装用	54%	8.9	2%
片耳装用	45%	6.7	12%

「日本補聴器工業会ホームページ JapanTrak」より

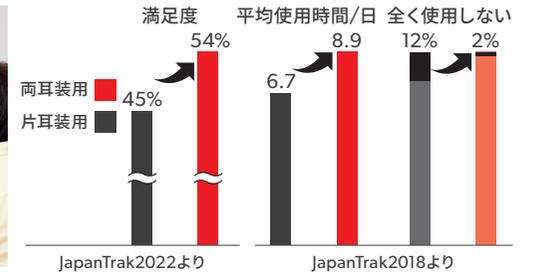

## 両耳に補聴器をつけると良いとされている理由

- POINT 1** 左右両方の脳の働きを活かす
- POINT 2** 疲れにくいからより長く使える
- POINT 3** 方向感や距離感をよりつかみやすい
- POINT 4** 騒音下での聞き取りが良い

## 使いこなすにはトレーニングと調整が重要

- 聞こえないでいた脳が再び音に慣れるのは時間がかかる。
- 最初の数ヶ月間<sup>※</sup>は聞こえ方が変化。
- 毎日つけてトレーニングすることが大事。音読や追唱も有効。
- 定期的にお店に通い、その時の聞こえに一番合うように調整してもらう。



※3~6ヶ月が目安



**IX** Signia IX シグニア IX

**世界初** \*1 ロックオン機能搭載補聴器。  
複数の相手  
を追いかけ、会話の言葉の  
すみずみ  
までより正確に再現します。



\*7 会話が聞き取りにくい環境をご存知ですか。  
騒がしい中での数人との会話だと言われています。  
シグニアだけの3つの技術で、  
騒がしい所でもよりストレスのない会話へ。

毎秒  
**1,000回**  
音を分析

データ  
**192,000個**  
を収集\*2

聞き取り  
**25%**  
向上\*3



BIGイノベーション・アワード2024受賞  
革新的な方法で新しいアイデアを実現している  
製品を表彰する世界的なビジネスアワード

**言葉のすみずみまで余さず取り込む  
言葉明瞭化**  
(ワードロックオン)

対応器種: ツインマイク シングルマイク

言葉の手掛かりになる細かい部分もしっかり再現。通常聞き取りにくいとされる「さしすせそ」などの子音や話し始めがより聞き取りやすい。

**機能なし**      **機能あり**

さとうさん      さとうさん

手掛かりになる細かい音が減って言い出しや輪郭がぼやけて、聞き取りにくくなります。

取りこぼしがちな話し始めや子音等もより正確に再現し、よりくっきり明瞭な聞こえを実現。

実際の声

SATO? KATO?      SATOだね

**両耳**

小さくても騒音下でよりクリアに聞こえる  
**前方会話集中**  
(ワンマイク指向性2.0)

対応器種: シングルマイク

世界唯一\*4の「ワンマイク指向性」機能がさらにパワーアップ!



一般的な1つのマイクを搭載した小型補聴器は、前方の聞きたい音を強調し、それ以外の雑音を抑える処理が難しい。シグニアなら、1つのマイクでも、両耳の補聴器が高速通信し合うことで、騒がしい環境でも雑音を抑えて正面の音声をよりクリアに、「小型」と「静か」の両方を実現。

**機能なし**      **機能あり**


騒音下での正面の  
音声より聞きやすい\*5

**両耳**

動いても、何人でも、声を追いかける  
**会話捕捉**\*6  
(スピーチロックオン)

対応器種: ツインマイク

声に集中して、相手全員の「会話」を自動で捕捉する。  
会話相手以外の余計な音は抑えるから、楽に会話が続けやすい。

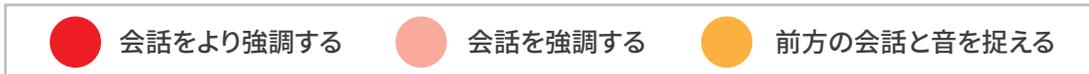

聞き漏らしたくない方、  
3人以上で外出が多い方(会合、旅行など)



社交的な方、3人以上の会話  
が頻繁な方(食事会、通院など)



3人以上でお話することが  
ある方(家族、ご夫婦とテレビなど)




\*8 画像は聞こえのイメージです

\*1 2023年9月、WSオーディオロジーグループ調べ \*2 Signia IXシリーズ7クラスの場合 \*3 騒音下ロックオン機能の有無で比較した場合(出典: Signia IX White Paper) \*4 2025年 6月、WSオーディオロジーグループ調べ \*5 2025年8月、WSオーディオロジーグループ調べ。騒音下ワンマイク指向性2.0機能有無で比較した場合 \*6 RIC型・耳かけ型とInsio IXツインマイク器種(ワイヤレス機能あり)の7/5/3クラス、両耳装着時に「スピーチロックオン」対応 \*7 2025年8月、WSオーディオロジーグループ調べ



世界初※「ロックオン」機能搭載  
RIC型の定番、高機能な充電式補聴器  
※2023年9月、WSオーディオロジーグループ調べ

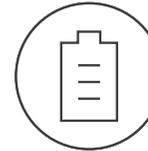

コンパクトな充電ケースで  
外出先でも充電可能



New ピュア チャージ&ゴー ピーシーティー  
Pure Charge&Go BCT IX サインマイク



1回の充電で最長  
**54時間**  
使用可能\*7



充電  
軽 中 高 重  
S:~60dB M:~75dB  
P:~90dB HP:~100dB

Bluetooth® Connectivity Transformed 99%のスマホにつながる、\*6  
Bluetooth Classic対応。

世界最小&最長電池寿命\*6の  
Bluetooth Classic対応RIC型補聴器。

LEDで補聴器の状態をお知らせ、  
周りの人もサポートしやすい。



共通 機能



複数人の声を追いかけて、言  
騒がしい環境でも、一人ひ  
葉のすみずみまでより正確に再現。  
とりの声が常に聞き取りやすく。



取り扱いが簡単な充電式。乾燥・除菌機能付きの  
ドライ&クリーン充電器も 選択可能。



テレビ\*2・スマートフォン\*3 の音が補聴器に直接届く。  
スマホを手を持たずに、 補聴器をさわるだけで通話可能。\*4



Signia app対応、スマート フォンが補聴器のリモコンに。  
補聴器利用をさらに便利 にする サポート機能が充実。\*5

ピュア チャージ&ゴー  
Pure Charge&Go IX サインマイク

1回の充電で最長  
**28時間**  
使用可能\*7



充電  
軽 中 高 重  
S:~60dB M:~75dB  
P:~90dB HP:~100dB



よりコンパクト、より軽量、  
耳の後ろにぴったりフィット。



フル充電で28時間使用可能、  
一日中電池切れの心配なし。



Apple社のMFi規格対応。iPhoneの  
音声を補聴器で聞いたり通話できる。

自分で簡単に補聴器の音を調節

テレビの音を楽しむ

【無料スマホアプリ】



Signia app

【リモコン】



ミニポケット  
miniPocket  
¥22,000 (税込)

【周辺機器】



TVサウンド  
TV Sound  
¥33,880 (税込)



蓄電機能  
付き

ポータブル充電ケース

選べる  
充電器



UV除菌  
乾燥

ドライ&クリーン充電器



お使いの  
スマートフォン等との  
接続可否はこちら



【カラー バリエーション】



ベージュ ブラック パールホワイト サンドブラウン ダークシャンパン  
ディープブラウン ローズゴールド シルバーヒーロー グラファイト ファインゴールド

※写真はPure Charge&Go IXです


\*1 HPレシーバーは別途費用がかかります \*2 TV視聴は別途TV Soundが必要 \*3 スマートフォンとの接続は20ページをご確認ください \*4 ハンズフリー通話機能は20ページをご確認ください \*5 詳細は20ページをご確認ください \*6 2025年4月、WSオーディオロジーグループ調べ \*7 使用時間は目安です。電池寿命は使用状況によって変わります



シグニアを代表するスタイリッシュ補聴器  
もっとおしゃれに、もっと楽しく



シグニア最先端技術 IX Signia IX シグニア IX 搭載  
110dBの重度難聴にも対応する  
スーパーパワータイプが登場!

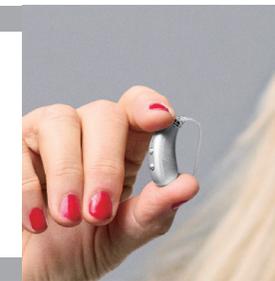

スタイレット  
Styレット IX



充電

軽 中 高

S:~60dB M:~75dB P:~90dB

使用可能時間の目安	充電時間	使用可能時間
	4時間フル充電	約20時間



聴覚業界の優れた革新的技術を称える  
ヒアリングテクノロジー  
イノベーターアワード 2024 受賞。



受賞歴のある洗練されたデザインを継承、  
スリムなボディはメガネとの相性抜群。



シグニア最小の充電ケースはQi規格対応。  
Qi充電パッドに置くだけでケースごと充電可能。\*4

共通




複数人の声を追いかけて、言葉のすみずみまで  
より正確に再現。騒がしい環境でも、  
一人ひとりの声が常に聞き取りやすく。



取り扱いが簡単な充電式。  
1日中充電切れの心配なし。

軽 中 高 重

あらゆる聴覚ニーズを考慮し、  
幅広い聴力に対応。

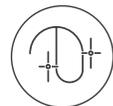


洗練された形状は耳の後ろにぴったりフィット。  
エレガントな6色展開。



LEDで補聴器の状態をお知らせ、  
周りの人もサポートしやすい。

機能

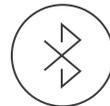

テレビ\*1・スマートフォン\*2の音が補聴器に  
直接届く。スマホを手を持たずに、補聴器を  
さわるだけで通話可能。\*3



Signia app対応、スマートフォンが補聴器の  
リモコンに。補聴器利用をさらに便利にする  
サポート機能が充実。\*5

New モーション チャージ&ゴー  
Motion Charge&Go IX



充電

軽 中 高

チューブ:~70dB  
イヤフック:~90dB

充電

中 高 重

チューブ:~80dB  
イヤフック:~100dB

充電

中 高 重

イヤフック:~110dB

使用可能時間の目安	M		P		SP	
	充電時間	使用可能時間	充電時間	使用可能時間	充電時間	使用可能時間
	4時間フル充電	約36時間	4時間フル充電	約35時間	4時間フル充電	約70時間

選べる充電器



Qi規格対応ポータブル充電ケース



ドライ&クリーン充電器

UV除菌  
乾燥



お使いの  
スマートフォン等との  
接続可否はこちら



自分で簡単に補聴器の音を調節

テレビの音を楽しむ

【無料スマホアプリ】



Signia app

【リモコン】



miniPocket  
¥22,000 (税込)

【周辺機器】



TVサウンド  
TV Sound  
¥33,880 (税込)

対応充電器



M用シンプル充電器



P,SP用ドライ&クリーン充電器

※充電器の詳細は15ページをご確認ください

【カラー バリエーション】



ブラック/グラファイト

スノーホワイト/ローズゴールド

ブラック/シルバー

スノーホワイト/シルバー

【カラー バリエーション】



ベージュ

ブラック

サンディブラウン

ローズゴールド

グラファイト

シルバーヒーロー

※写真はMotion Charge&Go M IXです

\*1 TV視聴は別途TV Soundが必要 \*2 スマートフォンとの接続は20ページをご確認ください \*3 ハンズフリー通話機能は20ページをご確認ください \*4 市販のQi規格対応 充電パッドをご使用ください \*5 詳細は20ページをご確認ください



## 世界初※、超小型充電式耳あな型補聴器 Silk Charge&Go IX登場!

※ 2023年8月、WSオーディオロジグループ調べ(医療機器認証を受けた補聴器として)



電池交換不要で  
手間いらず  
●わずらわしい電池交換が不要  
●電池の買い忘れ心配なし



小さく、軽く、快適なつけ心地  
おしゃれな充電ケースで  
どこでも安心充電



### シルク チャージ&ゴー Silk Charge&Go IX シングルマイク



充電  
軽 中

ノーマル: 114/50 ~70dB



CES 2024 ベスト・オブ・イノベーション賞受賞  
本賞は優れた先端技術と製品を表彰する国際的な賞です。CES 2024では3000件以上の審査対象から、最高の評価を得た製品36件のみを受賞。



世界三大デザイン賞の一つである  
レッドドット・デザイン賞2024受賞

reddot winner 2024

### 充電耳あな型最小クラス



世界最小クラスのコンパクトサイズ、  
「見えない補聴器」を求める方に最適。

### 小さくても使いやすさを追求した充電式



電池を扱う必要がないので、どなたでも使いやすい。  
一回の充電で28時間使用、  
外出先でも充電ケースだけで充電可能。



補聴器をケースに入れて、  
ケースごとQi規格充電パッドに置くだけで充電可能。\*1  
もちろんUSB充電も使える。

#### ポータブル充電ケースへの蓄電



充電ケースの蓄電量だけで、両耳5回分のフル充電が可能



### 自然なつけ心地



耳あなとの自然な隙間で通気性抜群、  
既製耳あな型ならではの快適なつけ心地を実現。




### どんな耳でもフィットしやすい



柔らかい既製耳せんでシルクのような装着感、  
耳せんは豊富な種類から選べる。



### より手軽に、よりスマートに扱える

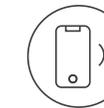

スマートフォンでもリモコンでも操作可能。

【無料スマートフォンアプリ】



シグニア アプリ  
Signia app

【リモコン】



ミニポケット  
miniPocket  
¥22,000 (税込)

【カラー バリエーション】  
フェイスプレート



ブラック

モカ

シェルカラー  
左右色違いで識別しやすい



左耳用: スケルトンブルー

右耳用: スケルトンレッド

\*1 市販のQi規格対応充電パッドをご使用ください。充電パッドをご使用の場合、ケースの充電時間の目安は6時間ですが、ご使用の充電パッドの種類により異なる場合があります



あなたの耳にあわせて丁寧に製作、  
オーダーメイドだから抜群のフィット感。



電池交換不要で手間いらず

- わずらわしい電池交換が不要
- 電池の買い忘れ心配なし



汗水に安心

- 高い防水性と防塵性
  - 国際保護等級最高位のIP68
- ※完全防水ではありません

シグニア エーエックス  
Signia AX



New インシオ チャージ&ゴー  
Insio Charge&Go IX シングルマイク



耳あなに隠れて気付かれにくいコンパクトサイズ、  
小さいのにパワフル、高度難聴まで対応可能。



シグニア最新技術Signia IXテクノロジー搭載、  
騒がしい環境でもより聞きやすく。



世界唯一のワンマイク指向性機能搭載、  
両耳間の高速通信でより会話に集中できる。



補聴器をケースに入れて、ケースごと  
Qi規格充電パッドに置くだけで充電可能。<sup>\*4</sup>  
もちろんUSB充電も使える。



扱いやすいサイズでつけ外し簡単。  
マスクやメガネの邪魔にもなりにくい。



本体の操作だけでテレビの音声を聞いたり、<sup>\*1</sup>  
プログラム切替ができるので便利。



iPhoneもAndroidスマートフォンも、通話・音楽が  
直接補聴器に届いて聞ける。<sup>\*2</sup> iPhoneは電話を  
持たずにハンズフリーで通話できる。<sup>\*3</sup>



充電器にポンと置いたら充電できる  
ワイヤレス充電で扱いがらくらく。

インシオ チャージ&ゴー  
Insio Charge&Go AX ツインマイク



ワイヤレス充電ITC  
●軽 ●中 ●高  
ノーマル: 113 / 50 ~70dB  
パワー: 118 / 55 ~80dB  
ハイパワー: 124 / 60 ~90dB

ワイヤレス充電ITE  
●軽 ●中 ●高  
ノーマル: 113 / 50 ~70dB  
パワー: 118 / 55 ~80dB  
ハイパワー: 124 / 65 ~90dB

オプション



HS(ハーフサイズ)  
ITEを可能な範囲で  
小さく製作

[カラー バリエーション]



ブラック

ベージュ



充電CIC

●軽 ●中 ●高


ノーマル: 113 / 50 ~70dB  
パワー: 118 / 55 ~80dB  
ハイパワー: 124 / 60 ~90dB

[カラー バリエーション]



ブラック

モカ

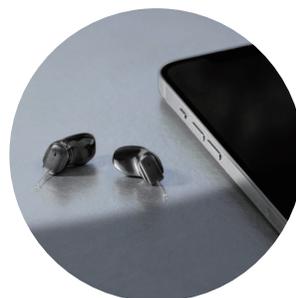

自分で簡単に補聴器の音を調節

【無料スマホアプリ】



シグニア アプリ  
Signia app

【リモコン】



ミニポケット  
miniPocket  
¥22,000 (税込)

テレビの音を楽しむ

※Insio Charge&go AXのみ対応

【周辺機器】



TVサウンド  
TV Sound  
¥33,880 (税込)

お使いの  
スマートフォン等との  
接続可否はこちら



耳の形状によっては  
仕上がりが大きく  
なる場合があります



使用可能 時間の目安	充電時間	使用可能時間
	4時間フル充電	約34時間

対応充電器



Qi規格対応ポータブル充電ケース



使用可能 時間の目安	充電時間	使用可能時間
	4時間フル充電	約28時間

対応充電器



充電器



※写真はITC装着時のイメージ



\*1 TV視聴は別途TV Soundが必要 \*2 スマートフォンとの接続は20ページをご確認ください \*3 ハンズフリー通話機能は20ページをご確認ください \*4 Qi充電パッドは 市販品をご使用ください

**シグニア最新技術 IX** Signia IX シグニアIX **搭載**  
 ぴったりフィット、オーダーメイド電池式耳あな型補聴器

豊富な製品ラインナップから  
 あなたの聞こえに合わせて自由にカスタマイズ



インシオ  
**Insio IX** 電池

**IIC** シングル  
 マイク



10A 軽 中  
 ノーマル: 113/50 ~70dB

**CIC** シングル  
 マイク



10A 軽 中 高  
 ノーマル: 113/50 ~70dB  
 パワー: 118/55 ~80dB  
 ハイパワー: 124/60 ~90dB

**New ITC** シングル  
 マイク



312 軽 中 高  
 ノーマル: 113/50 ~70dB  
 パワー: 118/55 ~80dB  
 ハイパワー: 124/60 ~90dB

**New ITC TWIN** ツイン  
 マイク



312 軽 中 高  
 ノーマル: 113/50 ~70dB  
 パワー: 118/55 ~80dB  
 ハイパワー: 124/60 ~90dB

**New ITE TWIN** ツイン  
 マイク



312 軽 中 高  
 パワー: 118/55 ~80dB  
 ハイパワー: 124/60 ~90dB

耳の奥深く収まるように巧みに設計され、  
 横からみてもほぼ見えない**極小サイズ**。

高度難聴まで対応の小型サイズ。  
 環境スイッチが標準装備。

耳あな型補聴器の標準的なサイズ。  
 扱いやすく、つけ外し簡単。

耳あな型補聴器の標準的なサイズ。  
 より大きく耳にしっかり収まるサイズ。  
 2つの集音マイクで「ロックオン」フル対応。騒音下のグループ会話もより聞き取りやすく。

[カラー バリエーション]



[カラー バリエーション]



[カラー バリエーション]




※写真はInsio IX ITCです

**共通機能**

あなたの耳に合わせて丁寧に製作、  
 ぴったり耳あなに収まり、抜群のフィット感。



オーダーメイドならではの  
 オプションでさらに簡単・便利に。

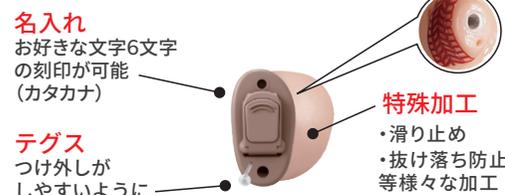

スマートフォンでもリモコンでも操作可能。  
 よりスマートに扱える。



# 充電器



ピュア チャージ&ゴー ビーシーティー Pure Charge&Go BCT IX  
ピュア チャージ&ゴー Pure Charge&Go IX

## 選べる充電器

持ち運び  
タイプ



ポータブル充電ケース  
(幅66mm×奥行33mm×高さ76mm)

据え置き  
タイプ



ドライ&クリーン充電器  
(幅83mm×奥行82mm×高さ88mm)



持ち運び  
タイプ



Qi規格対応ポータブル充電ケース  
(幅50mm×奥行30mm×高さ71mm)

据え置き  
タイプ



ドライ&クリーン充電器  
(幅83mm×奥行82mm×高さ88mm)



モーション チャージ&ゴー Motion Charge&Go IX

据え置き  
タイプ



M用シンプル充電器  
(幅62mm×奥行32mm×高さ44mm)

据え置き  
タイプ



P,SP用ドライ&クリーン充電器  
(幅83mm×奥行82mm×高さ88mm)



持ち運び  
タイプ



Qi規格対応ポータブル充電ケース  
(幅82mm×奥行48mm×高さ29mm)



インシオ チャージ&ゴー Insio Charge&Go IX

持ち運び  
タイプ



Qi規格対応ポータブル充電ケース  
(幅72mm×奥行34mm×高さ54mm)



ワイヤレス充電ITE ワイヤレス充電ITC  
インシオ チャージ&ゴー Insio Charge&Go AX

据え置き  
タイプ



充電器  
(幅118mm×奥行79mm×高さ45mm)



# 補聴器の クラスと機能

## クラス

シグニア補聴器は、性能と搭載機能の違いにより複数のクラスに分かれています。高いクラスほど性能が良く、活用できる場面が広がります。保証も手厚くなります。


	7 プレミアム シグニア補聴器の最上位クラス	5 アドバンス ワンランク上の聞こえを実感	3 スタンダード テレビや電話もクリアに聞こえる
保証	3年 修理保証 2年 紛失保証	3年 修理保証 2年 紛失保証	2年 修理保証 1年 紛失保証
チャンネル	48ch*	36ch	32ch
搭載機能			

\* Motion Charge&Go SP IXの7クラスは36ch

※Signia IXの場合、各クラスの機能差のイメージ

## チャンネル

「チャンネル」は性能を表す重要な指標の一つです。シグニアの補聴器はマイクに入ってきた音を高さ(周波数)ごとに分割し別々に処理を行い、最適な音量・音質で耳に届けます。チャンネル数が多いほど、音が細かく分割され、きめ細かい処理ができ、より生音に近い静かでハッキリとした音質に近づきます。

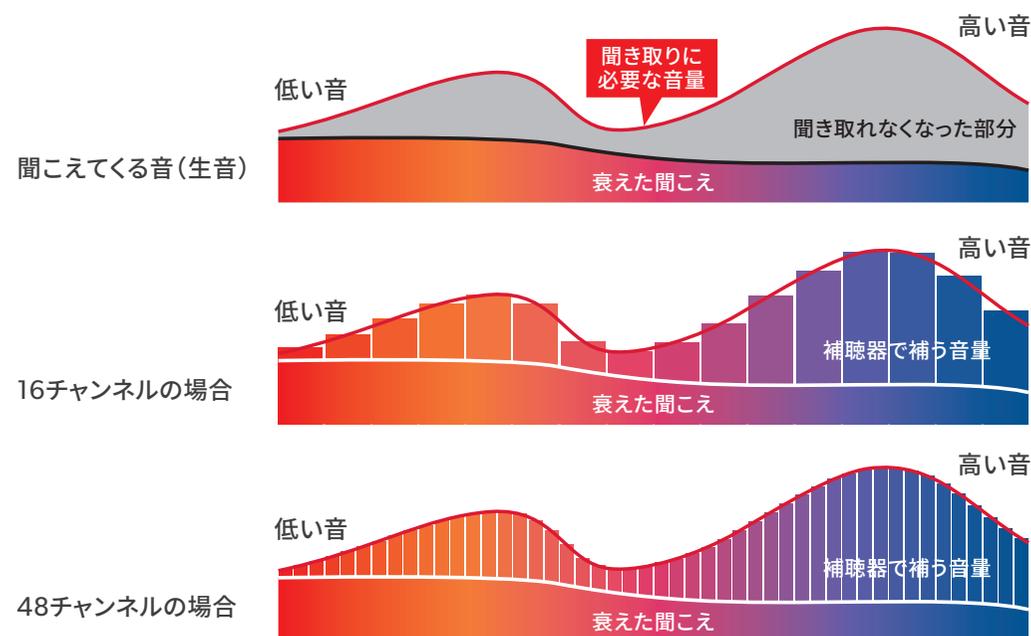

※画像はイメージです。装用者の聞こえの状態によっては、効果が異なる場合があります

# 機能一覧

各シリーズの対応クラス	故障や紛失時に	きめ細かい聞こえ	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋外	屋内・集会所	IX Signia IX シグニア IX のみ搭載	騒がしい場所での複数人の会話	騒がしい場所での複数人の会話	買い物・リハビリ施設	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	デイサービス・病院	車・電車	超高音質
IX Signia IX シグニア IX	保証*1	チャンネル*2	ダブルプロセッサー*4	ライブサウンド*5	Xセンサー超広角センサー	風雑音抑制	突発音抑制	ロックオン	ワードロックオン	スピーチロックオン*3	Xセンサーモーションセンサー*6	OVP2.0*7	ビーム指向性*8	パワーエンハンス*9	スピーチフォーカス*4	反響音抑制*10	スピーチフォーカス360°*8	12kHz帯域*11
Signia AX			2x									OWN VOICE PROCESSING OVP 2.0 両耳						12 kHz
7 プレミアム	3年修理保証 2年紛失保証	48ch		プラス				SATOだね										
5 アドバンス	3年修理保証 2年紛失保証	IX 36ch AX 32ch		プラス				SATOだね										
3 スタンダード	2年修理保証 1年紛失保証	IX 32ch AX 24ch		プラス				SATOだね										

## 搭載機能

ロックオン機能の詳細は3、4ページをご確認ください。12kHz帯域対応、反響音抑制、モーションセンサーの詳細は19ページをご確認ください



**ダブルプロセッサー**

2つのプロセッサーが言葉と環境音を別々に処理。賢さ2倍でよりくっきり、すっきり聞こえる。



**ライブサウンド プラス**

シグニアの様々な革新的な技術がさらに進化し、まるで生音のような、人間の耳に近い明瞭で自然な聞こえを実現。



**超広角センサー**

周囲 360°の声や物音を常に分析し、最適な音質に変化。



**風雑音抑制**

風が補聴器のマイクに当たって生じる雑音を抑え、風の強い室外でも聞き取りやすくする。



**突発音抑制**

突然の大きな音を抑えるから、食器の音も気にならず、会話に集中できる。



**OVP2.0**

自分の声を判別して抑制するから、自然な会話を楽しめる。



**ビーム指向性 両耳**

両耳装用で正面の音だけフォーカスし、騒音下でも会話をしっかり聞き取れる。



**パワーエンハンス**

後ろからの雑音を抑えて、正面の声を強調するから、どんな場所でもクリアな聞こえで会話を楽しめる。



**スピーチフォーカス**

前後から聞こえてくる人の声に自動でピントを合わせるから、会話がより聞き取りやすくなる。



**スピーチフォーカス360° 両耳**

自動で前後左右からの声にピントを合わせるから、車やバスの中でも聞き取りやすい。

\*1 詳しくは裏表紙に記載 \*2 Signia IXシリーズの5/3クラスはチャンネル数が向上 \*3 詳細は3、4ページをご確認ください。RIC型・耳かけ型とInsio IXツインマイク器種(ワイヤレス機能 Insio Charge&Go IX、Insio IXは非対応 \*7 耳あな型はOVP機能非対応 \*8 Silk Charge&Go IX、Insio Charge&Go IX非対応。Insio IXのシングルマイク器種または、ノンワイヤレスを選択した場合非対応 \*10 7クラスは、反響音抑制機能が自動で働く。5クラスは手動でプログラム切替が必要 \*11 Motion Charge&Go SP IXの7クラスは36ch、12kHz帯域非対応

あり)の7/5/3クラス、両耳装用時に「スピーチロックオン」対応 \*4 シングルマイク器種非対応 \*5 器種/クラスによって機能に差が出る場合があります \*6 Silk Charge&Go IX、択した場合非対応 \*9 Silk Charge&Go IX、Insio Charge&Go IXは両耳装用で対応。Insio IXのシングルマイク器種はワイヤレス機能あり(標準)の場合両耳装用で対応、ノンワイヤレス

# 価格一覧

シリーズ	IX Signia IX シグニア IX			シグニア エーエックス Signia AX
器種	Pure Charge&Go BCT IX	Pure Charge&Go IX Stylecto IX Silk Charge&Go IX Insio Charge&Go IX Motion Charge&Go IX	Insio IX	Insio Charge&Go AX
クラス	価格*	価格*	価格	価格*
7	両耳 ¥1,304,000 片耳 ¥674,000	両耳 ¥1,264,000 片耳 ¥654,000	両耳 ¥1,220,000 片耳 ¥610,000	両耳 ¥1,204,000 片耳 ¥624,000
5	両耳 ¥884,000 片耳 ¥464,000	両耳 ¥864,000 片耳 ¥454,000	両耳 ¥820,000 片耳 ¥410,000	両耳 ¥824,000 片耳 ¥434,000
3	両耳 ¥604,000 片耳 ¥324,000	両耳 ¥584,000 片耳 ¥314,000	両耳 ¥540,000 片耳 ¥270,000	両耳 ¥564,000 片耳 ¥304,000

\*補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります

## クラス選びのヒント

### こんなことはありませんか？

もっと自然な音で、楽に使いたい



12 kHz

### 12kHz帯域対応\*1

高周波数音をしっかり収集し、音楽も、自然の音も、もっと高音質で楽しめる。

場所によって声が反響して聞き取りづらい



### 反響音抑制

病院やデイサービス等の広い場所でも会話が響かず、いろいろな場所でもより快適に会話を楽しめる。

動いている時に隣の会話や後ろの音が聞きにくく感じる



### モーションセンサー\*2

ユーザーの動きを分析し、動いている時も、隣同士の会話や、車の通る音をはっきりわかるように自動調整。

7 プレミアム

5 アドバンス

3 スタンダード

\*1 Motion Charge&Go SP IX非対応 \*2 Silk Charge&Go IX、Insio Charge&Go IX、Insio IXは非対応



## スマートフォン用アプリ Signia app

無料のスマートフォンアプリで、補聴器を簡単操作。音量・音質調節や電池残量確認、プログラム変更等が可能。

### Signia appのインストール方法

- お使いのスマートフォンでApp Store/Playストアを開く
- 検索窓に「シグニア」または「signia」と入力
- アプリをインストール

### ご注意

必要なOSバージョンやスマートフォンの要件は各ストアのアプリインストールページの説明をご確認ください

※端末・OS要件を満たしていても、組み合わせによっては本アプリが正常に動作しない場合があります

※特にAndroid端末に関しては、端末の種類やOSバージョンなどによっては本アプリが正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください

※アプリの機能、画面デザインは予告なく変更されることがあります。新しい機能が追加されることがありますので、アプリを定期的にアップデートしてください

Available on the iPhone

ANDROID APP ON Google play

## スマートフォンとの連携機能

Bluetooth搭載有無	シリーズ	iPhone		Androidスマートフォン			
		iPhone 11以上かつiOS 15.2以上	Bluetooth LE Audio対応	ASHA対応かつAndroid OS 11以上	その他		
Bluetooth搭載有	IX Signia IX シグニアIX Pure Charge&Go BCT IX	●	●	●	●	●	●
Bluetooth搭載有	IX Signia IX シグニアIX その他	●	●	●	●	●	StreamLine Micが必要
Bluetooth搭載有	Signia AX	●	7/5/3クラスのみ	●	●	●	StreamLine Micが必要
Bluetooth非搭載有	全シリーズ	—	—	—	—	—	—

## 耳あな型補聴器のオプション

	フェイスプレートカラー	シェルカラー	ノンワイヤレス(小型優先)	名入れ	シェルグリップ	カナルロック	テグス	シェルマーキング
Insio Charge&Go IX	ブラックモカ	スケルトンブルー スケルトンレッド ブラック	両耳間で通信する「ワイヤレス機能」をなくすことで小型化	最大6文字カタカナを刻印可能	耳の中でずれにくくする加工	耳から抜けられないようにするためのストッパー	補聴器を取り出しやすくするテグス	両耳装用の場合、左右が分かりやすいようにシェルにマーク
Insio IX	IIC	ブラックモカ	○	○	○	—	○	○
	CIC	ブラックモカ	○	○	○	○	○	○
	ITC	スケルトンブルー スケルトンレッド ブラック	○	○	○	○	○	○
	ITC TWIN	ブラックベージュ	○	○	○	○	○	○
ITE TWIN	ブラックベージュ	○	○	○	○	○	○	
Insio Charge&Go AX	ブラックベージュ	—	—	○	○	—	○	○

## 性能一覧

※このデータはJIS C 5512:2015(2cmカプラで測定)で表示しています ※仕様は予告なく変更される場合があります ※数値は代表的な仕様によるものです

形式	タイプ	性能			使用電池	電池寿命*2(連続使用)(h)
		最大音響利得(dB)	90dB入力最大出力音圧レベル(dB)	最大値(+3dB以下)		
Pure Charge&Go BCT IX(S/M/P/HP)		38 / 51 / 61 / 69	110 / 119 / 122 / 131	60 / 75 / 90 / 100	充電	約54
Pure Charge&Go IX(S/M/P/HP)		38 / 51 / 61 / 69	110 / 119 / 122 / 131	60 / 75 / 90 / 100	充電	約28
Stylecto IX(S/M/P)		38 / 51 / 61	110 / 119 / 122	60 / 75 / 90	充電	約20
Motion Charge&Go IX	M	53(50)*1	133(125)*1	90(70)*1	充電	約36
	P	71(56)*1	135(131)*1	100(80)*1	充電	約35
	SP	73	140	110	充電	約70
Silk Charge&Go IX		45 / — / —	114 / — / —	70 / — / —	充電	約28
Insio Charge&Go IX	充電CIC	45 / 50 / 57	113 / 118 / 124	70 / 80 / 90	充電	約34
Insio Charge&Go AX	ワイヤレス充電ITC	46 / 44 / 60	113 / 118 / 124	70 / 80 / 90	充電	約28
	ワイヤレス充電ITE	— / 47 / 60	— / 118 / 124	— / 80 / 90	充電	約28
Insio IX	IIC	44 / — / —	113 / — / —	70 / — / —	10A	約90
	CIC	45 / 50 / 57	113 / 118 / 124	70 / 80 / 90	10A	約90
	ITC	46 / 50 / 55	113 / 118 / 124	70 / 80 / 90	312	約145
	ITC TWIN	45 / 48 / 55	113 / 118 / 124	70 / 80 / 90	312	約145
	ITE TWIN	— / 49 / 56	— / 118 / 124	— / 80 / 90	312	約145

\*1 ( )はThinチューブでの数値です \*2 電池寿命は使用状況によって変わります

# シグニア補聴器の安心保証とスマートリペア



+



## ① 保証期間内は無料で修理 補聴器本体に自然故障\*が生じた場合

\*取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合  
 \*紛失および過失による故障(シェル破損や水没など)は保証対象外です。修理可能な場合はスマートリペアの価格でご対応いたします(全損は対象外)  
 \*電池やイヤチップなどのアクセサリ類は、保証およびスマートリペアの対象外です

## ② さらに修理保証期間が過ぎた後も修理は定額のスマートリペア

\*「スマートリペア」は入金などの費用が一切からず、修理は定額  
 \*耳あな型のシェル再作、修正は別途費用がかかります  
 \*故障部位および購入年数によって各種規定があります

## ③ 購入後の無料再作(耳あな型オーダーメイド補聴器)

耳あな型オーダーメイド補聴器の形に耳に合わない場合、お買い上げの日から1年あるいは2年以内(機種によって異なる)の再作を無料でを行います(その他、詳しい保証規定は添付の保証書によります)

### ● 修理保証

	1年目	2年目	3年目	4年目以降～
Signia 7IX/5IX Signia 7AX/5AX	3年無料修理保証			スマートリペア 定額修理期間
Signia 3IX Signia 3AX	2年無料修理保証		スマートリペア 定額修理期間	

### ● 紛失保証

	1年目	2年目
Signia 7IX/5IX Signia 7AX/5AX	2年保証 1回に限り無料	
Signia 3IX Signia 3AX	1年保証 1回に限り無料	

## シグニア補聴器

神奈川県大和市中央林間7丁目10番1号 三機大和ビル6F

■ 一般のお客様専用窓口

電話:0800-888-0303/直通:046-289-0303

FAX:046-407-1133



シグニア補聴器

お問い合わせ・公式SNS


[www.signia.net/ja-jp/local/ja-jp/signia-info/](http://www.signia.net/ja-jp/local/ja-jp/signia-info/)



シグニア補聴器のご相談・ご用命は当店へ



シグニア補聴器の装用方法、  
お手入れ方法と充電器使用方法是  
こちらの動画をご確認ください。

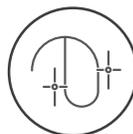

製品のカラーは動画で  
ご確認いただけます  
※一部器種を除く



補聴器の装用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察をお勧めします。補聴器は個々に合わせた適切なフィッティング(調整)により効果が発揮されます。しかし、装用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。カタログに掲載されている製品の色や見え方は、印刷等により実際の製品と異なる場合があります。

価格はメーカー希望小売価格です。補聴器は薬機法で定められた医療機器のため非課税対象商品です(アクセサリ・周辺機器を除く)。

カタログに記載されている会社名やロゴおよび製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。  
 本カタログの内容は2025年11月時点のものです。価格や仕様は予告なく変更されることがあります。25.11.JP.17001476

製造販売元:WSオーディオロジージャパン株式会社 医療機器製造販売業許可番号 14B2X00018



6月6日は補聴器の日