

シグニア補聴器

〒242-0007
神奈川県大和市中央林間7丁目10番1号 三機大和ビル6F

■ 販売店様専用窓口

電話:0800-222-4133/直通:046-409-4133
FAX:0800-888-4133/直通:046-407-1133
販促物注文専用FAX:050-3730-5795



シグニア補聴器
お問い合わせ・公式SNS

www.signia.net/ja-jp/local/ja-jp/signia-info/



聞こえと補聴器の
情報サイト「きこえナビ」

www.kikoe-navi.jp



販売店様向けサイトでは、チャットボットがご質問にお答えします。



シグニア補聴器販売店様
向けサイトにアクセス



画面の右側にある
赤いタブをクリック



お問合せ内容を選択するか、
質問内容を入力して送信

※チャットボットはPCとスマートフォン、どちらでもご利用になれます。販売店様向けWEBサイトに初めてアクセスする場合、クッキー設定の関係で、「お問い合わせはこちら」のタブが表示されないことがあります。クッキーを許可していただければ、ご利用いただけます。

シグニア補聴器

アクセサリ・補修パーツカタログ

2026年2月版

販売店様専用



signia

カタログに掲載されている製品の色や見え方は、印刷等により実際の製品と異なる場合があります。
価格はメーカー希望小売価格です。

カタログに記載されている会社名やロゴおよび製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

本カタログの内容は2026年2月時点のものです。価格や仕様は予告なく変更されることがあります。26.2.JP.17001482P

製造販売元 WSオーディオロジージャパン株式会社
医療機器製造販売業許可番号 14B2X00018



6月6日は補聴器の日

Be
Brilliant™



RIC型補聴器
の取り扱い方
動画はこちら



RIC型用 (Signia IX、Signia AXシリーズ用)

Styletto IX Pure Charge&Go BCT IX Pure Charge&Go IX Styletto AX Pure Charge&Go AX Pure 312 AX



1	レシーバー商品	3.0 ミニレシーバー-S 1L-4L 1R-4R ¥12,650 (コンチャロック付属)	3.0 ミニレシーバー-M 1L-4L 1R-4R ¥12,650 (コンチャロック付属)	3.0 ミニレシーバー-P 1L-4L 1R-4R ¥12,650 (コンチャロック付属) ※クリックモールド3.0をオススメします	モールド付きHPレシーバー-3 1L-4L 1R-4R ¥27,000 (非課税) ※レシーバーとモールドが一体となっているためレシーバーのみの販売はしていません。 ※Stylettoシリーズ非対応 ※補聴器と同時注文時のみ ¥15,000 (非課税)		
	コンチャロック3.0(S/M/P)	チューブセクター 3.0 10991403 ¥550 (1本入り)		Life チューブセクターとメモリー間隔が違うため購入時ご注意ください ※0~4それぞれのレシーバーの長さは従来のミニレシーバーと異なります。こちらのツールで長さを測ってください			
2	イヤチップ3.0	10993678 5mm オープン	10993680 7mm オープン	10993681 10mm オープン	10993682 8mm チューリップ	10993683 12mm チューリップ	イヤチップ3.0 ¥2,420 (6個入り)
	スリーブ3.0	XS 6~11mm	S 6~12mm	M 10~15mm	L 11~16mm		スリーブ3.0 ¥2,420 (6個入り)
	ウェイクスガード3.0 ナノケア	10993607 ¥1,210 (8個入り/交換ツール入り)					
	セルストップ WG3.0 XL	10999334 ¥550 (8個入り/交換ツール入り)					
	クリックモールド3.0	¥10,500 (非課税)	クリックモールド3.0シリコン	¥10,500 (非課税)	モールド3.0付け外しツール	¥1,100	

ご参考 チューブセクターの使用法



正確なレシーバーの長さを選ぶには耳介の頂点から耳道の入り口の頂点の長さをお測りください。



正
チューブの長さを正しく測ると、装着時にチューブが耳道の上部に来ます。

チューブセクター3.0の出荷時にシールが付属されております。シールの記載に沿って貼り付けた上でご使用ください

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年2月現在のものです

▶ チップ・ドームの詳細については14ページへ

RIC型用 (Signia IX、Signia AXシリーズ以外)

Intuis3 RIC

Styletto X* Pure Charge&Go X* Pure 312 X*
Pure 312 Nx* Styletto Nx* Pure Charge&Go Nx* Pure 10 Nx* Pure 13 Nx*
Cellion px* Ace px* Pure px*

*補聴器本体は販売を終了しております



1	レシーバー商品	2.0 ミニレシーバー-S OL-3L OR-3R ¥12,650 (コンチャロック付属)	2.0 ミニレシーバー-M OL-4L OR-4R ¥12,650 (コンチャロック付属) ※4L, 4RはStyletto X非対応	2.0 ミニレシーバー-P OL-3L OR-3R ¥12,650 (コンチャロック付属) ※クリックモールド2.0をオススメします	モールド付きHPレシーバー-2 OL-3L OR-3R ¥27,000 (非課税) ※レシーバーとモールドが一体となっているためレシーバーのみの販売はしていません。 ※Stylettoシリーズ非対応 ※補聴器と同時注文時のみ ¥15,000 (非課税)							
	コンチャロック	S:10426987 ¥110 (1本入り)	M2:10937826 ¥1,100 (同サイズ10本入り)	P2:10668991 ¥110 (1本入り)	10674370 2.0 ミニレシーバー 取り外しツール ¥330							
2	穴あり	10951152 (XS) 4~10mm	10951146 (S) 7~12mm	10951148 (M) 9~14mm	10951150 (L) 11~16mm	10426016 4mm (穴あり)	10426017 6mm (穴なし)	10426014 8mm (穴あり)	10426012 8mm (穴なし)	10426015 10mm (穴あり)	10426013 10mm (穴なし)	10670790 チューリップドーム (穴なし) (フリーサイズ12mm)
	穴なし	10951153 (XS) 4~10mm	10951147 (S) 7~12mm	10951149 (M) 9~14mm	10951151 (L) 11~16mm	ミニレシーバー用クリックドーム ¥2,420 (同サイズ6個入り)						
	ミニレシーバー用クリックスリーブ2.0	¥2,420 (同サイズ6個入り) ※クリックスリーブ穴なしには通気ペントが空いています					10426018 8~10mm	10426019 10~12mm	ミニレシーバー用クリックダブルドーム ¥2,420 (同サイズ6個入り)			
クイックガード	10962504 ¥1,210 (8個入り)				10962332	ミニレシーバー用 ウェイクスガード2 ¥1,760 (8個入り)						
クリックモールド2.0	¥10,500 (非課税)				10597930	クリックモールド サービスセット (クリックモールド2.0用) ¥1,100						

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年2月現在のものです

▶ チップ・ドームの詳細については14ページへ

■耳かけ型用(イヤフック用)

耳かけ型補聴器
の取り扱い方
動画はこちら



Motion Charge&Go M IX	Motion Charge&Go P IX	Motion Charge&Go SP IX
Intuis4 M	Intuis4 P	Intuis4 SP
Prompt MP	Fun	Stretta Aya HP
		Stretta Aya UP
2026年3月末販売終了予定		
Motion Charge&Go X	Motion Charge&Go P X	Motion Charge&Go SP X
Prompt S	Intuis3 ミニ耳かけ型 S	
Motion 13 Nx*	Motion 13P Nx*	Motion Charge&Go Nx*
Motion SA px*	Motion P px*	Motion SP px*
		Motion S px*

*補聴器本体の販売は終了しております ※RICを除く

<p>イヤフック(各種) スモールイヤフック(各種) ¥550 (1本入り) (一部¥1,100(10本入り)があります。 対象器種は下記参照) ※ご注文の際は器種名をお知らせください。</p>	<p>フックピース 10948789 (Motion SA px bx) ¥550</p>	<p>リムーバル H2770 (イヤフックの取付けピン外し) 10600047 価格は12ページをご確認ください</p>
<p>03188869 4700Ω 在庫僅少 ノウルスタンパー大型(各種) ¥330</p>	<p>10149923 680Ω 07232729 1000Ω 07242717 1500Ω ノウルスタンパー小型(各種) ¥330</p>	
<p>10954531 標準 02749588 高度 サウンドチューブ (標準) ¥440/m (高度) ¥550/m</p>	<p>10674284 ポップフィット用チューブ3.6 スタンダード用 価格は12ページをご確認ください ※10本単位でのご注文をお願いします</p>	<p>10829208 ポップフィット用チューブ3.3 カナル/ハーフシェル用 価格は12ページをご確認ください ※10本単位でのご注文をお願いします</p>

<p>10951037 SS 10951035 S 10951036 M 10951038 MM 10951039 L 10951040 楕円 イヤチップ (SS/S/M/MM/L) ¥220 (1個入り) (楕円) ¥330 (1個入り)</p>	<p>エルボー 10954052 ¥165 (1個入り)</p>	<p>イヤモールド (特注耳せん) 10937494 5ページの価格表を ご覧ください</p>	<p>耳せん Funセット(Fun用) 10937494 ¥550 (1セット入り)</p>
---	--	---	--

イヤフック10本入対象器種(全てスモールイヤフックとなります)		
Intuis2 S/M/P Intuis3 S/M/P Prompt S	Motion SX Motion P mi Motion S px	Teneo HP/M+

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年2月現在のものです

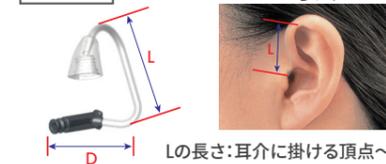
■耳かけ型用(Thinチューブ用)

Motion Charge&Go MIX	Motion Charge&Go P IX	Intuis4 M	Intuis4 P	2026年3月末販売終了予定	Motion Charge&Go X	Motion Charge&Go P X
----------------------	-----------------------	-----------	-----------	----------------	--------------------	----------------------



<p>1 Thinチューブ3.0 Thinチューブ3.0 サイズ:0.9mm (長さ:S0~S4 左右各1本入り) ¥1,100</p>	<p>Thinチューブ3.0 サイズ:1.4mm (長さ:S0-P~S4-P 左右各1本入り) ¥1,100</p>	<p>10991403 チューブセクター 3.0 ¥550 (1本入り) ※Life チューブセクターとメモリ間隔が 違うため購入時ご注意ください</p>	<p>コンチャロック3.0(S) 21024885 ¥1,100 (10本入り)</p>
<p>10993678 5mm オープン 10993680 7mm オープン 10993681 10mm オープン 10993682 8mm チューリップ 10993683 12mm チューリップ イヤチップ3.0 ¥2,420 (6個入り)</p>	<p>Thinチューブ3.0用 モールド ¥10,500 (非課税)</p>		
<p>XS 6~11mm S 6~12mm M 10~15mm L 11~16mm 上から見た図 ベント 穴2個 10992863 10992864 10992865 10992866 クローズ 穴1個 10992867 10992868 10992869 10992870 パワー 穴なし 10997192 10997193 10997194 10997195 スリーブ3.0 ¥2,420 (6個入り)</p>	<p>10993607 ワックスガード 3.0 ナノケア ¥1,210 (8個入り/交換ツール入り)</p>		
<p>10967340 モールド3.0 付け外しツール ¥1,100</p>			

ご参考 Thinチューブ3.0寸法



Lの長さ: 耳介に掛ける頂点~耳道入り口

	0	1	2	3	4
D	約17mm				
L	約20mm	約24mm	約28mm	約32mm	約36mm

■その他従来製品用(Lifeチューブ、Thinチューブ向け)

<p>1L-4L 1R-4R S-Lifeチューブ (Motion P mi/ Motion PX+ bx) ¥3,300 (同サイズ10本入り)</p>	<p>1L-3L 1R-3R ※4L-6L, 4R-6Rは 在庫僅少 Lifeチューブ (Motion P-Motion SX mi/Aquaris/ Orion/Orion2/Sirion/Sirion2/ Intuis2/Motion S px/prompt S/ Intuis3 S/Intuis3 M) ¥3,300 (同サイズ10本入り)</p>	<p>1L-4L 1R-4R Thinチューブ (Motion 13 Nx/Motion SA px/ Motion 13P Nx/Motion C&Go Nx/ Contrast HP S/ Motion SA bx/Motion P px) ¥1,650 (同サイズ5本入り)</p>	<p>フックピース (Motion SA px bx/Contrast S) 10948789 (Motion 13 Nx /13P Nx) 10947303 (Motion Charge&Go Nx) 10958343 ¥550</p>	<p>Lifeチューブセクター 10054711 ¥220 ※チューブセクター3.0とメモリ間隔が 異なるため、購入時にご確認ください</p>
<p>10169328 4mm 10169329 6mm 10169330 8mm (穴なし) 10054916 8mm 10054917 10mm 10962754 チューリップチップ (ワリサイズ12mm) Lifeチップ ¥2,420 (同サイズ10個入り)</p>	<p>10175566 8~10mm 10175715 10~12mm Lifeダブルチップ ¥2,420 (同サイズ10個入り)</p>			

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年2月現在のものです

■イヤフォーム

名称	RIC型用			耳かけ型用				適応聴力	特徴
	3.0ミニレシーバー用 2.0ミニレシーバー用 (K, AXのみ対応)	3.0ミニレシーバー用 (K, AXのみ対応)	レシーバーとモールドが 一体となっている	Thinチューブ3.0用	イヤフック用				
名称	クリックモールド	クリックモールド 3.0シリコン	HPモールド3 HPモールド2	Thinチューブ3.0 モールド	硬質アクリル	軟質アクリル	ポップフィット		
素材	アクリル製	シリコン製	アクリル製	アクリル製	アクリル製	アクリル製	シリコン製		
色	クリア	クリア	ベージュ	クリア	クリア	クリア	17色		
形状	クリック/ カナル	クリック	クリック	クリック	カナル	カナル	カナル	軽 中	最小サイズ、外から見える部分 が少ない
カナルロック								軽 中	クリック/カナルにストッパーが付いたもの クリック/カナルでは外れやすい人向け
COOL								軽 中	当社オリジナルのつけ心地重視 モデル
ハーフシェル								軽 中	外から見える部分をなるべく小さくし、 薄く削ったもの(旧カナルサイズ)
スケルトン								軽 中 高	安定感に目立たなさをプラス
スタンダード								軽 中 高 重	安定感重視でハウリングしにくく、 高度以上の方に標準の形状
イヤフォーム本体	¥10,500 (非課税)		¥27,000* (非課税)	¥10,500 (非課税)	¥9,500 (非課税)				
テグス加工料金	テグス標準装備 追加料金なし	テグス非対応	テグス標準装備 追加料金なし	テグス標準装備 追加料金なし	¥1,000 (非課税)	テグス非対応			

その他の加工料金 (非課税)

シェルマーキング	¥500 (1個) ※軟質アクリル、ポップフィット、 クリックモールド3.0シリコンは非対応	型起こしで イヤフォーム製作	¥1,000 (1個) ※耳型なしの場合、お持ちのイヤフォーム・補聴器 から型を起こして製作可能
----------	--	-------------------	--

●RIC型用クリックモールド*
Thinチューブ3.0モールド
(クリアのみ)

●クリックモールド
3.0シリコン
(クリアのみ)

●イヤフック用アクリル製
イヤフォーム (クリアのみ)

●イヤフック用ポップフィット (17色)

クリアカラー ビビッドカラー

クリア ローズ ベージュ ブルー グリーン パープル

ブラウン トランスブルー トランスグリーン ピンク レッド オレンジ

トランスパープル トランスピンク イエロー ホワイト ブラック

■モールド類の対応アクセサリ

※「クリックモールド3.0/Thinチューブ3.0モールド」と「クリックモールド2.0」は互換性がないため、注文時に対応アクセサリが正しくなっているかをご確認ください

クリックモールド3.0シリコン

10993607
ワックスガード3.0 ナノケア
¥1,210 (8個入り/交換ツール入り)

クリックモールド
3.0シリコンの先端
はワックスガードを
付ける必要は
ありません

3.0ミニレシーバー

クリックモールド3.0
Thinチューブ3.0モールド

10993607
ワックスガード3.0 ナノケア
¥1,210 (8個入り/交換ツール入り)

Thinチューブ3.0

クリックモールド2.0

10962504 クイックガード
(オーダーメイド耳あな型・HPモールド・
クリックモールド用/交換ツール入り)
¥1,210 (8個入り)

2.0ミニレシーバー

10962332
ミニレシーバー用ワックスガード2
¥1,760 (8個入り)

モールド付きHPレシーバー3

10999334
セルストップ WG3.0 XL
(HPモールド3用)
¥550 (8個入り/交換ツール入り)

モールド付きHPレシーバー2

10962504 クイックガード
(オーダーメイド耳あな型・HPモールド・
クリックモールド用/交換ツール入り)
¥1,210 (8個入り)

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年2月現在のものです

■その他耳かけ型用パーツ・アクセサリ

電池誤飲防止バッテリードア用
追加ピン
Intuis4 M, P/Stretta Aya HP用
21015786
¥550 (1本入り)

電池誤飲防止バッテリードア
Intuis4 SP/Stretta Aya UP用
(色:グレーのみ)
21022517
¥1,100 (1個入り)*1

チャイルドロックディセーブラー
Motion mi M, P/Octiv SP用
10675457
¥1,100 (10本入り)

(共通) ロッカースイッチカバー
Motion SP px/Nitro mi/Orion SP/
Contrast SP+/Octiv SP+
¥330

ダークグラナイト	10821632	グレー	10821629
ベージュ	10821625	ブラウン	10821630
グラナイト	10821631	ブラック	10821628
ディープブラウン (Motion SPのみ)			10944535

オーディオシュー (各種) ¥1,400 (非課税)

オーディオシューキット Motion P px/Motion SA px•bx/
Carat bx/Contrast HP+/Contrast S+用 ¥4,000 (非課税)*1

オーディオシューキット Intuis3 SP用 ¥4,000 (非課税)

オーディオシューキット Motion SP/Nitro mi/Orion SP/
Contrast SP+/Octiv SP用 (子供用バッテリーロッカー含む) ¥6,000 (非課税)*1

オーディオシューキット Intuis3 P/Prompt MP用 ¥4,000 (非課税)

オーディオシューキット Motion P mi/Orion2 M, P/Orion M, P/Sirion2 M, P/Sirion M, P/
Intuis3 M/Prompt MP/Octiv P/Teneo M, HP用 Motion PX binax: オーディオシュー非対応 ¥4,000 (非課税)*1

子供用バッテリーロッカー Orion M, P/Sirion M, P用 ¥600 (非課税)*1

子供用バッテリーロッカー
Motion SP/Nitro mi/Orion SP/Contrast SP+/Octiv SP用 ¥2,000 (非課税)*1

テレコイル入りバッテリーロッカー
Pure 13 Nx[T]/Motion 13 Nx/Motion 13P Nx ¥6,000 (非課税)*1

■CROS (補聴器と一緒に使用)

Silk Charge&Go IX用

Insio Charge&Go IX用

選べる充電器

ポータブル充電ケース ドライ&クリーン充電器

CROS Pure Charge&Go IX
¥110,000*2 (充電器を除く)
対象機種: Pure Charge&Go IX
Motion Charge&Go M IX
Motion Charge&Go P IX
Motion Charge&Go SP IX
対応クラス: 7IX 5IX 3IX
Pure Charge&Go BCT IXは非対応

選べる充電器

ポータブル充電ケース ドライ&クリーン充電器

CROS Pure Charge&Go AX
¥110,000*2 (充電器を除く)
対象機種: Pure Charge&Go AX
Pure 312 AX
Insio Charge&Go AX
Intuis4
対応クラス: 7AX 5AX 3AX 2AX 1AX
Intuis4.2 Intuis4.1
Intuis4.0は非対応

CROS Pure 312 AX
¥99,000
対象機種: Pure Charge&Go AX
Pure 312 AX
Insio Charge&Go AX
Intuis4
対応クラス: 7AX 5AX 3AX 2AX 1AX
Intuis4.2 Intuis4.1
Intuis4.0は非対応

フェイスプレート	シェル				
左	ブラック	スケルトンブルー	21025451	21026187	21000854
右	ブラック	スケルトンレッド	21025450	21026188	21000855
左	モカ	スケルトンブルー	21025449	21026189	21000856
右	モカ	スケルトンレッド	21025448	21026190	21000857
				21026191	21000858
				21026192	21000859
				21026193	21000860
				21026194	21000861
				21026195	21000862
				21026196	21000863

CROS Pure Charge&Go X
¥110,000*2 (充電器を除く)

2026年3月末販売終了予定
対象機種: Motion Charge&Go X
Motion Charge&Go P X
Motion Charge&Go SP X
Pure Charge&Go X*
Pure 312 X*
*補聴器本体は販売終了しております

対応クラス: 7X 5X 3X

CROS Pure 312 X
¥99,000

2026年3月末販売終了予定
対象機種: Motion Charge&Go X
Motion Charge&Go P X
Motion Charge&Go SP X
Pure Charge&Go X*
Pure 312 X*
*補聴器本体は販売終了しております

対応クラス: 7X 5X 3X

ベージュ	10968168	サンディブラウン	10968172	ベージュ	10977675	サンディブラウン	10977683
グラナイト	10968176	ダークシャンパン	10968174	グラナイト	10977679	ダークシャンパン	10977678
グレー	10968867	ディープブラウン	10968169	グレー	10977680	ディープブラウン	10977677
ブラック	10968171	ローズゴールド	10968175	ブラック	10977676	ローズゴールド	10977682
パールホワイト	10968173	シルバーヒーロー	10968170	パールホワイト	10977681	シルバーヒーロー	10977684

*1 別途取付加工費6,000円(非課税)が必要です。補聴器注文と同時に取付時は無料
*2 別売の充電器¥44,000が必要です *3 CROS Silk Charge&Go IXは
Insio Charge&Go IXと一緒にInsio Charge&Go IX用ポータブル充電ケースで
充電可能です *4 ノンワイヤレス選択時は非対応

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年2月現在のものです
※CROS各機種保証期間は1年です

■既製耳あな型

Signia Active Pro IX/Signia Active IX

Silk Charge&Go IX

Silk X*

Signia Active Pro/Signia Active*

*補聴器本体は販売を終了しております
※バッテリーロッカーの販売はしていません



Signia Active Pro IX
Signia Active IX
Silk Charge&Go IX

※本体注文時スリーブ3.0はS(クローズ)、S(ベント)、XS(クローズ)、XS(ベント)が標準で付属します



Silk X



Signia Active Pro
Signia Active



イヤチップ3.0 ¥2,420 (6個入り)

上から見た図 XS 6~11mm S 6~12mm M 10~15mm L 11~16mm



スリーブ3.0 ¥2,420 (6個入り)



ミニレシーバー用クリックスリーブ2.0 ¥2,420 (同サイズ6個入り)

※クリックスリーブ穴なしには通気ベントが空いています



ミニレシーバー用クリックドーム ¥2,420 (同サイズ6個入り)



ミニレシーバー用クリックダブルドーム ¥2,420 (同サイズ6個入り)



10993607
ワックスガード 3.0ナノケア
¥1,210 (8個入り/交換ツール入り)



10993607
ウインドスクリーンSILK
¥3,300 (20個入り/交換ツール入り)
ブラック 10970960
モカ 10970959



10962332
ミニレシーバー用
ワックスガード2
¥1,760 (8個入り)

■その他の既製耳あな型用

バッテリーロッカーの販売はしていません



デジミミ3 イヤチップ ¥2,420 (同サイズ6個入り)
※RICのクリックドームと共通

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年2月現在のものです

耳あな型補聴器
の取り扱い方
動画はこちら



■オーダーメイド耳あな型用

2026年3月末販売終了予定

Insio Charge&Go IX

Insio IX

Insio Charge&Go AX

Intuis3

Insio Nx/px

Orion2*

Sirion2*

Intuis2*

Motion*

Nitro*

*補聴器本体は販売を終了しております

2026年3月末
販売終了予定



IIC (インビジブルインカナル) CIC (コンプリートインカナル) 充電CIC (マイクロカナル) MC (カナルタイプ) ITC (フルサイズ) ITE TWIN (フルサイズ) ワイヤレス充電ITC (Insio Charge&Go AX) ワイヤレス充電ITE (Insio Charge&Go AX) COOL (クール)

クイックガード
¥1,210 (8個入り/交換ツール入り)
10962504
※HF4で作成した補聴器・イヤモールドに使用可能

クリネット
ダイヤルパック (HF3) :φ3.0mm
(赤:10827378 / 青:10827377)
¥2,200 (16個入り/交換ツール入り)
※Insio IX ITC/ITEとInsio Charge&Go IX CICは使用不可

ノーワックス
¥1,210 10951928
(6個入り/交換ツール入り)
※レシーバーチューブの色が黒の場合のみ使用可能

ウインドスクリーン(マイクカバー)MF1 モカ
(Insio IX IIC/CIC、Insio Charge&Go AX、
Insio Nx CIC/ITC TWIN BT/ITE TWIN BT用)
¥2,200 (10個入り/パック/MF1用交換ツール入り) 10947542

ウインドスクリーン(マイクカバー)MF1 ブラック
(Insio IX IIC/CIC、Insio Charge&Go AX用)
¥2,200 (10個入り/MF1用交換ツール入り) 21016200

※Insio IX ITC/ITC TWIN/ITE TWINには対応していません

ウインドスクリーン
MF1用交換ツール
価格は12ページをご確認ください
(1本入り) 10147702

ベントチップ
¥550 07200764

バッテリーロッカー 	Insio IX IIC 用ブラック (左)	10996332	¥1,100
	Insio IX IIC 用ブラック (右)	10996334	¥1,100
	Insio IX IIC 用モカ (左)	10996331	¥1,100
	Insio IX IIC 用モカ (右)	10996333	¥1,100
	Insio IX CIC/ Insio Nx CIC 用ブラック (左右共通)	21037766	¥1,100
	Insio IX CIC/ Insio Nx CIC 用モカ (左右共通)	10945838	¥1,100

※本カタログ未掲載ですが、他にも各オーダーメイド耳あな型器種向けのバッテリーロッカーを販売しています。

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年2月現在のものです

■補聴器用充電器

<p>Styletto IX</p>  <p>21031110 Styletto IX用 Qi規格対応ポータブル充電ケース ¥44,000</p>	<p>Pure Charge&Go IX Pure Charge&Go AX Pure Charge&Go BCT IX</p>  <p>10993123 Pure Charge&Go IX/ BCT IX/ AX用ポータブル充電ケース ¥44,000</p>	<p>Styletto AX</p>  <p>21003216 Styletto AX用 Qi規格対応ポータブル充電ケース ¥44,000</p>	
<p>Signia Active Pro IX/Signia Active IX</p>  <p>21028356 Signia Active Pro IX/Signia Active IX用 Qi規格対応ポータブル充電ケース ¥44,000</p>	<p>Silk Charge&Go IX</p>  <p>21025473 Silk Charge&Go IX用 Qi規格対応ポータブル充電ケース ¥44,000</p>	<p>Insio Charge&Go IX</p>  <p>21048779 Insio Charge&Go IX用 Qi規格対応ポータブル充電ケース ¥44,000</p>	<p>Insio Charge&Go AX</p>  <p>21025145 Insio Charge&Go AX用充電器 ¥44,000</p>
<p>Motion Charge&Go P IX Motion Charge&Go SP IX Styletto IX Pure Charge&Go IX Pure Charge&Go BCT IX Styletto AX 2026年3月末販売終了予定</p>  <p>21007598 Styletto IX/AX用 10991655 Pure Charge&Go IX/BCT IX/AX用 10991643 Motion Charge&Go P IX/X用 10991649 Motion Charge&Go SP IX/X用 ドライ&クリーン充電器 充電・除菌・乾燥機能付き ¥44,000</p>	<p>Motion Charge&Go M IX</p>  <p>21040842 M用シンプル充電器(充電機能のみ) (Motion Charge&Go M IX用) ¥44,000</p>	<p>Motion Charge&Go P IX Motion Charge&Go P X 2026年3月末販売終了予定</p>  <p>10996338 P用シンプル充電器(充電機能のみ) (Motion Charge&Go P IX/X用) ¥44,000</p> <p>Motion Charge&Go SP IX Motion Charge&Go SP X 2026年3月末販売終了予定</p>  <p>10996343 SP用シンプル充電器(充電機能のみ) (Motion Charge&Go SP IX/X用) ¥44,000</p>	
<p>Motion Charge&Go X Pure Charge&Go X*</p> <p>2026年3月末販売終了予定</p>  <p>10976047 ワイヤレス充電器2 (Motion Charge&Go X, Pure Charge&Go X* の7X/5X/3X用) ¥44,000</p> <p>*補聴器本体は販売を終了しております</p>	<p>Motion Charge&Go X Pure Charge&Go X*</p> <p>2026年3月末販売終了予定</p>  <p>10991804 ワイヤレス充電器E (Motion Charge&Go X, Pure Charge&Go X* の2X/1X用) ¥44,000</p> <p>*補聴器本体は販売を終了しております</p>		

※すべての充電器には充電ケーブル(アダプター)が付属します。別途購入する必要はありません
※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年2月現在のものです

■充電器用アクセサリ

※故障や事故を避けるため、充電するには必ず当社提供の純正充電器・ケーブル・アダプターをご使用ください

<p>USB-タイプC</p>  <p>USB-タイプCケーブル ¥1,100 21023081 (ケーブル100cm)</p>	<p>USB-タイプCケーブル 使用可能</p>  <p>USBアダプター ¥2,200 10971756</p> <p>※アダプターの形状や色は写真と異なる場合があります。</p>
<p>対応補聴器充電器</p>  <p>販売終了</p>	<p>対応補聴器充電器</p>  <p>販売終了</p>
<p>Micro USB-タイプB</p>  <p>ワイヤレス充電器2 電源ケーブルセット ¥3,300 10980299 (ケーブル120cm・アダプターとのセット、それぞれの単品販売なし) USBタイプにはお使いいただけません</p>	<p>Micro USB-タイプB</p>  <p>easyTek 電源ケーブルセット ¥3,300 10824346 (ケーブル120cm・海外対応ACプラグ付き)</p>
<p>対応補聴器充電器</p>  <p>2026年3月末販売終了予定</p> <p>販売終了</p>	<p>対応機器</p>  <p>パーフェクトドライラックス パーフェクトドライクイックエア</p>
<p>Smart Connect easyTek TV Transmitter TV Sound StreamLine TV StreamLine Mic</p>	<p>対応補聴器充電器</p>  <p>2026年3月末販売終了予定</p> <p>販売終了</p> <p>販売終了</p>

■補聴器用電池

<p>PR536 (10) 無水銀</p>  <p>10943082</p>	<p>PR41 (312) 無水銀</p>  <p>10943094</p>	<p>PR48 (13) 無水銀</p>  <p>10943095</p>	<p>PR44 (675) 無水銀</p>  <p>10943096</p>
---	---	--	---

※冬場における空気電池の使用上の注意
空気電池は、使用環境の乾燥状態と二酸化炭素によって電池寿命が短くなります。これは空気が乾燥する冬場に、開放型の石油ストーブやガスストーブなどの暖房機で、換気を十分に行わない場合に起こることがあります
※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年2月現在のものです

充電器・電池
イヤホン・その他
耳あな型・ポケット型
ケアソリューション・周辺機器
販売店向けツール
耳せんの選び方
充電器の使い方



■ケアソリューションシリーズ

 <p>ドライキャップ UV2.1 本体サイズ: W127×H115×D127 (mm) 10997993 ¥8,800</p>	 <p>パーフェクトドライラックス 本体サイズ: W93×H48×D76 (mm) 10941021 ¥9,900</p>	 <p>パーフェクトドライ クイックエア 本体サイズ: W125×H47.5×D75 (mm) 10941020 ¥5,500</p>
<p>対応ケーブル USB-タイプCケーブル</p>	<p>対応ケーブル ワイヤレス充電器2 電源ケーブルセット</p>	
 <p>クリーニングスプレー 容量: 30ml ¥990 10941016</p>	 <p>補聴器乾燥カップ シリカゲル入 (詰め替え用乾燥剤1個付) ¥990 10941022</p>	 <p>クリーニングカップ (1個入り) ¥330 10941019</p>
 <p>クリーニングシート (30枚入り、個包装) ¥990 10941014</p>	 <p>詰め替え用乾燥 シリカゲル (2個入り) ¥1,100 10941023</p>	 <p>スターターセット クリーニングシート: 5枚入り 補聴器乾燥カップ: 1個入り 乾燥シリカゲル(サイズ小): 2個入り 掃除用ブラシ: 2種類 各1本入り ¥2,200 10941013</p>
 <p>エアプロアー (1個入り) ¥990 10941017</p>	 <p>クリーニングタブレット (20個入り) ¥770 10941018</p>	

■クリーニンググッズ

 <p>マグネット付き 掃除ブラシ ¥550 10939339</p>	 <p>掃除ブラシ ¥176 10940436</p>	 <p>Lifeクリーニング ワイヤー (30本入り) ¥660 10054970</p>	 <p>シグニア バッテリー チェッカー ¥880 10954470</p>
 <p>化粧ケース Signia SQUARE 白 縦 7cm×横 6.8cm×高さ 1.9cm ¥2,200 21014461</p>			

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年2月現在のものです

■リモコン・周辺機器

 <p>ミニポケット miniPocket (SAFE) 10939860 ¥22,000</p>	 <p>スマートリモート Smart Remote 10827154 ¥22,000</p>	 <p>ストリームラインマイク StreamLine Mic 10945013 ¥55,000</p>	 <p>TVサウンド TV Sound 21043000 ¥33,880</p>
--	---	--	---

■リモコン・周辺機器用アクセサリ

 <p>Smart Connect easyTek TV Transmitter TV Sound StreamLine TV StreamLine Mic</p> <p>easyTek 電源ケーブルセット ¥3,300 10824346 (ケーブル120cm・海外対応ACプラグ付き)</p>	 <p>TV Transmitter TV Sound StreamLine TV</p> <p>光ケーブル ¥1,650 10944812 (ケーブル200cm)</p>		
 <p>TV Sound StreamLine TV</p> <p>赤白ケーブル ¥1,650 10944811 (ケーブル100cm)</p>	 <p>Smart Connect easyTek</p> <p>easyTek用 耐水スリーブ ¥550 10937496</p>	 <p>Smart Connect easyTek</p> <p>easyTek用 ネックループ ¥1,650 10824276 (ケーブル70cm)</p>	 <p>miniPocket</p> <p>miniPocket (SAFE) 用 ツール ¥550 10991205</p>

販売店様向けツール

■パーツ交換用ツール

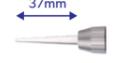
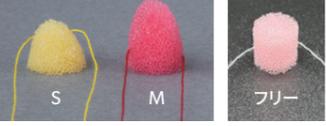
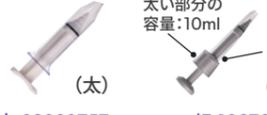
 <p>リムーバル H2770 (イヤフックの取付けピン外し) 10600047 ¥550</p>	 <p>10674284 ポップフィット用チューブ3.6 スタンダード用 ¥550 (1本) ※10本単位でのご注文をお願い致します</p>	 <p>10829208 ポップフィット用チューブ3.3 カナル/ハーフサイズ用 ¥550 (1本) ※10本単位でのご注文をお願い致します</p>	 <p>ウインドスクリーン MF1用交換ツール ¥550 (1本入り) 10147702</p>
--	---	---	---

■その他 備品

 <p>ヒヤリング チューブ 10417798 ¥2,750</p>	 <p>ステトクリップ 10541796 ¥4,950 ※在庫僅少。無くなり次第、商品の色と形状が変わります(機能と使い方は同等)</p>	 <p>ウルトラバック バキューム チップセット (6種入り) 02749596 ¥5,500</p>	 <p>ウルトラバック 乾燥用カップ 10951168 ¥5,500</p>	 <p>オートフォン用 マグネット 10147344 ¥550</p>
---	--	--	---	--

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年2月現在のものです

■ [オーダーメイド補聴器用] 耳型採型

 <p>標準</p> <p>デタックス A2グリーン ショア40 べたつかない2液混合タイプの印象材 大:10951033 中:10951031 小:10951032 ¥24,200 ¥9,900 ¥6,600 大/各1.5kg (3kg)、中/各500g (1kg)、小/各300g (600g)</p>	 <p>やわらかめ 硬化時間短め</p> <p>オトフォルム (AK X) A+B ショア30 ・極小オーダーメイドIIC/CICに最適 ・両耳採取もスピーディーでお待たせしません 10933801 ¥6,600 オトフォルム A・B 各300g (600g)</p>
<p>ミニオトスコープ3000 10676353 外耳道チェック用ツール(単三電池2本) 旧:電球タイプ 新:LEDタイプ</p>  <p>¥22,000 ※在庫僅少、無くなり次第LEDタイプに切り替えます</p> <p>ミニオトスコープ3000 交換用電球 ¥4,400 10676359</p>	<p>LEDアクリル棒ユニット ¥5,500 10243609</p>  <p>37mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ・LEDライトとアクリル棒が一体化になった交換用ユニット(それぞれを分離することはできません) ・オトペンライト MINI Cの本体に取り付けてお使いいただくこともできます ※オトペンライト MINI Eとオトペンライト MINI Cの本体部分が同じ設計・構造のため <p>オトペンライト MINI Cの交換用パーツ オトペンライト MINI C 交換用電球 ¥3,520 01007939 オトペンライト MINI C 交換用ペン先 ¥2,200 10946910</p>
<p>印象材ストッパー (S・M・フリー*)</p>  <p>お客様の耳に合わせてサイズを選ぶスポンジ製ストッパー (各100個入り)</p> <p>S/円錐: 直径10mm 高さ約10mm 10825530 ¥2,200 M/円錐: 直径10mm 高さ約13mm 10825529 ¥2,200 フリー/円柱: 直径10mm 高さ約10mm 10541142 ¥3,300</p> <p>※取り出し用糸付き ※各色別売 ※出荷時期によって色が異なります</p>	<p>印象材注入器 容量:22ml 印象材を注入する耳型採取用シリンジ ¥5,500</p>  <p>太い部分の容量:10ml 細い部分の容量:12ml (細)</p> <p>太:02909757 細:10676362</p> <p>インプレッション箱 ¥0</p>

■ 補聴器接続ケーブル&アダプター

<p>Inσιο IX IIC用調整ケーブル</p>  <p>21001501 21001502</p> <p>Inσιο IX IIC調整ケーブル(青・赤)2m ¥3,850 ※色をご指定ください。青=左、赤=右となっております</p>	<p>ケーブルから補聴器に繋げる部品 (耳かけ型補聴器用)</p>  <p>PR41:10824469 PR48:10824470 PR536:10824471 ¥2,200</p> <p>プログラミングアダプター (PR41用、PR48用、PR536用) ※一本単位での販売となります</p>  <p>10939489 プログラミングシュー Sirion2 SP Intuis2 SP Intuis3 SP ¥2,200</p>  <p>10933080 プログラミングシュー Prompt MP Intuis3 P ¥2,200</p>
<p>HI-PRO・Noahlinkから補聴器へ繋げるケーブル類</p>  <p>07784916 07784908 58cm Noahlinkケーブル(赤・青) ¥11,000 ※色をご指定ください。便宜上、赤=右、青=左となっております</p>	<p>ケーブルから補聴器に繋げる部品 (耳あな型補聴器用)</p>  <p>フレックスコネクタ2キット HI-PROケーブル1本入り、アダプタ付ストリップ2本入り、クリップ×1個入り 10604509 ¥13,200</p>  <p>アダプター付フレックスストリップ (2本入り) 10604510 ¥4,400</p>

※非課税と記載している価格以外はすべて税込価格。記載内容は2026年2月現在のものです

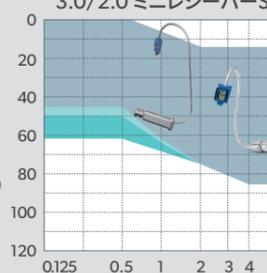
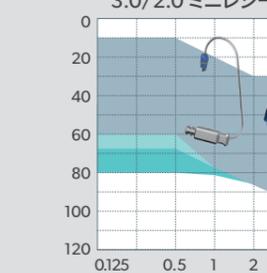
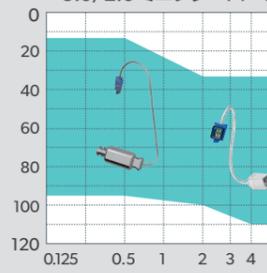
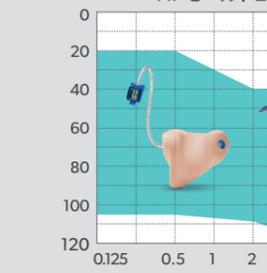
■ 装用効果をも高めるスリーブ・ドームを選ぶ

豊富な種類のスリーブとドームで、さまざまな聴力に対応可能

 <p>クリックドーム 穴あり</p>  <p>イヤチップ3.0 オープン</p>  <p>スリーブ3.0 ベント(穴2個あり)</p>	 <p>チュアリップドーム</p>  <p>クリックドーム 穴なし</p>  <p>クリックスリーブ 穴あり</p>  <p>スリーブ3.0 クローズ(穴1個あり)</p>	 <p>クリックスリーブ 穴なし</p>  <p>ダブルドーム</p>  <p>クリックモールド 2.0/3.0</p>  <p>スリーブ3.0 パワー(穴なし)</p>
---	--	---

Pure10 Nx / Ace px を除く 全てのRIC型補聴器

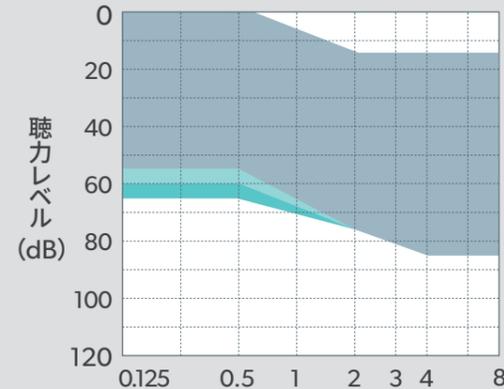


<p>3.0/2.0 ミニレシーバーS</p>  <p>聴力レベル (dB) vs 周波数 (kHz)</p>	<p>3.0/2.0 ミニレシーバーM</p>  <p>聴力レベル (dB) vs 周波数 (kHz)</p>
<p>3.0/2.0 ミニレシーバーP</p>  <p>聴力レベル (dB) vs 周波数 (kHz)</p>	<p>HPモード2/3</p>  <p>聴力レベル (dB) vs 周波数 (kHz)</p>

※クリックモールドをおすすめします ※クリックスリーブも使えます

※Stylettoシリーズ非対応

Signia Active Pro IX/Signia Active IX Silk Charge&Go IX

聴力レベル (dB) vs 周波数 (kHz)

※既製耳あな型はクリックモールド非対応



■ 充電式補聴器の充電ケース・充電器使用方法

● ポータブル充電ケース

補聴器	対応充電ケース	充電ケースの使い方	充電状態の確認										
IX Signia IX シグニアIX ピュア チャージ&ゴー ビーシーティー Pure Charge&Go BCT IX	 ピュア チャージ&ゴー Pure Charge&Go BCT IX	 ①充電スロット ②補聴器 充電ステータスLED ③充電ケース用 充電ステータスLED ④ボタン	補聴器の状態の確認方法 フタを開けると、 数秒間光ります										
IX Signia IX シグニアIX ピュア チャージ&ゴー Pure Charge&Go IX	 ピュア チャージ&ゴー Pure Charge&Go IX	充電方法 ①左右を間違えないように充電スロットに補聴器を入れます *補聴器充電ステータスLEDが数秒光ります。*奥までしっかりと挿してください。*レシーバー部分は充電スロット奥の空洞に入れます。 *補聴器の電源が自動的に切れます。*フタを閉めなくても充電できます ②充電ケースをUSBケーブルで電源に接続すると、充電が始まります *充電ケース用充電ステータスLEDが数秒光ります	補聴器の状態の確認方法 フタを開けると、 数秒間光ります										
AX Signia AX シグニアAX ピュア チャージ&ゴー Pure Charge&Go AX	 ピュア チャージ&ゴー Pure Charge&Go AX	電源 On/Off ● 充電ケースの電源On/Off ボタンを5秒間長押ししてOn/Offが切り替わります ● 補聴器の電源On/Off 充電ケースに入れると自動的にOffになり、充電ケースから出すと自動的にOnになります ● 電源Offのままケースから取り出したい場合 ①補聴器を充電ケースに入れます ②充電ケースを電源から外します ③充電ケースのボタンを5秒間長押しします ④充電ケース用充電ステータスLEDの点滅が消えたら、補聴器を取り出します	充電ケースの状態の確認方法 ボタンを押すと、 数秒間光ります										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>電源に接続して充電中の場合</th> <th>電源に接続していない時充電ケースの電池残量確認方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>充電ケースの内蔵充電電池を充電中 ● 緑に点滅</td> <td>充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量があります ● 緑に点灯</td> </tr> <tr> <td>充電ケースの内蔵充電電池が満充電 ● 緑に点灯</td> <td>充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量がありません ● 橙に点灯</td> </tr> <tr> <td>充電ケースの電源がオフになっている ● LEDが消灯</td> <td>充電ケースの内蔵充電電池は空です。補聴器を充電することはできません ● 橙に点滅</td> </tr> <tr> <td>問題発生(取扱説明書をご確認ください) ● 赤に点滅</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	電源に接続して充電中の場合	電源に接続していない時充電ケースの電池残量確認方法	充電ケースの内蔵充電電池を充電中 ● 緑に点滅	充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量があります ● 緑に点灯	充電ケースの内蔵充電電池が満充電 ● 緑に点灯	充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量がありません ● 橙に点灯	充電ケースの電源がオフになっている ● LEDが消灯	充電ケースの内蔵充電電池は空です。補聴器を充電することはできません ● 橙に点滅	問題発生(取扱説明書をご確認ください) ● 赤に点滅		
電源に接続して充電中の場合	電源に接続していない時充電ケースの電池残量確認方法												
充電ケースの内蔵充電電池を充電中 ● 緑に点滅	充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量があります ● 緑に点灯												
充電ケースの内蔵充電電池が満充電 ● 緑に点灯	充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量がありません ● 橙に点灯												
充電ケースの電源がオフになっている ● LEDが消灯	充電ケースの内蔵充電電池は空です。補聴器を充電することはできません ● 橙に点滅												
問題発生(取扱説明書をご確認ください) ● 赤に点滅													

メモ欄

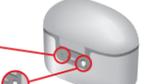
補聴器	対応充電ケース	充電ケースの使い方	充電状態の確認												
IX Signia IX シグニアIX スタイレット Styletto IX	 スタイレット IX用 Qi規格対応 ポータブル充電ケース	 ①充電スロット ②補聴器 充電ステータスLED ③充電ケース用 充電ステータスLED ④ボタン	補聴器の状態の確認方法 フタを開けると、 数秒間光ります												
AX Signia AX シグニアAX スタイレット Styletto AX	 スタイレット AX用 Qi規格対応 ポータブル充電ケース	充電方法 ①左右を間違えないように充電スロットに補聴器を入れます *補聴器充電ステータスLEDが数秒光ります。*奥までしっかりと挿してください。*レシーバー部分は充電スロット奥の空洞に入れます。*補聴器の電源が自動的に切れます。 *フタを閉めなくても充電できます ②充電ケースをUSBケーブルで電源に接続すると、充電が始まります *充電ケース用充電ステータスLEDが数秒光ります	補聴器の状態の確認方法 フタを開けると、 数秒間光ります												
AX Signia Xperience シグニアXperience スタイレット Styletto X	 スタイレット X用 Qi規格対応 ポータブル充電ケース	電源 On/Off ● 充電ケースの電源On/Off ボタンを5秒間長押ししてOn/Offが切り替わります ● 補聴器の電源On/Off 充電ケースに入れると自動的にOffになり、充電ケースから出すと自動的にOnになります ● 電源Offのままケースから取り出したい場合 ①補聴器を充電ケースに入れます ②充電ケースを電源から外します ③充電ケースのボタンを5秒間長押しします ④充電ケース用充電ステータスLEDの点滅が消えたら、補聴器を取り出します	充電ケースの状態の確認方法 ボタンを押すと、 数秒間光ります												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>電源に接続して充電中の場合</th> <th>電源に接続していない時充電ケースの電池残量確認方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>充電ケースの内蔵充電電池を充電中 ● 緑に点滅</td> <td>充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量があります ● 緑に点灯</td> </tr> <tr> <td>充電ケースの内蔵充電電池が満充電 ● 緑に点灯</td> <td>充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量がありません ● 橙に点灯</td> </tr> <tr> <td>充電ケースの電源がオフになっている ● LEDが消灯</td> <td>充電ケースの内蔵充電電池は空です。補聴器を充電することはできません ● 橙に点滅</td> </tr> <tr> <td>冷却作動中(冷却中は充電中止) ● 橙に点滅</td> <td>充電ケースの内蔵充電電池は空です。補聴器を充電することはできません ● 橙に点滅</td> </tr> <tr> <td>問題発生(取扱説明書をご確認ください) ● 赤に点滅</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	電源に接続して充電中の場合	電源に接続していない時充電ケースの電池残量確認方法	充電ケースの内蔵充電電池を充電中 ● 緑に点滅	充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量があります ● 緑に点灯	充電ケースの内蔵充電電池が満充電 ● 緑に点灯	充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量がありません ● 橙に点灯	充電ケースの電源がオフになっている ● LEDが消灯	充電ケースの内蔵充電電池は空です。補聴器を充電することはできません ● 橙に点滅	冷却作動中(冷却中は充電中止) ● 橙に点滅	充電ケースの内蔵充電電池は空です。補聴器を充電することはできません ● 橙に点滅	問題発生(取扱説明書をご確認ください) ● 赤に点滅		
電源に接続して充電中の場合	電源に接続していない時充電ケースの電池残量確認方法														
充電ケースの内蔵充電電池を充電中 ● 緑に点滅	充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量があります ● 緑に点灯														
充電ケースの内蔵充電電池が満充電 ● 緑に点灯	充電ケースの内蔵充電電池は2台の補聴器を満充電させるのに十分な残量がありません ● 橙に点灯														
充電ケースの電源がオフになっている ● LEDが消灯	充電ケースの内蔵充電電池は空です。補聴器を充電することはできません ● 橙に点滅														
冷却作動中(冷却中は充電中止) ● 橙に点滅	充電ケースの内蔵充電電池は空です。補聴器を充電することはできません ● 橙に点滅														
問題発生(取扱説明書をご確認ください) ● 赤に点滅															

メモ欄

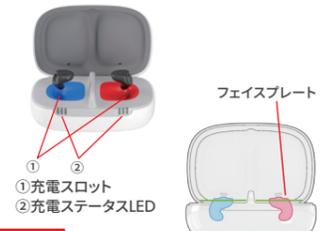
充電式補聴器の充電ケース・充電器使用方法

●ポータブル充電ケース

補聴器	対応充電ケース	充電ケースの使い方	充電状態の確認
IX Signia IX シグニアIX  シグニア アクティブプロ Signia Active Pro IX/ シグニア アクティブ Signia Active IX  Silk Charge&Go IX用 Qi規格対応ポータブル充電ケース  Silk Charge&Go IX用 Qi規格対応ポータブル充電ケース 販売終了  Signia Active Pro/ Signia Active用 Qi規格対応ポータブル充電ケース	充電方法  ①充電ケースを電源につないで充電ケースを充電してください ②充電スロットに左右を間違えないように補聴器を入れてください 充電ケースに「L」と刻印された側に左耳用の補聴器(Lの識別表示)、充電ケースに「R」と刻印された側に右耳用の補聴器(Rの識別表示)を入れます 充電ケース用ステータスLED Qiワイヤレス充電器 USBタイプCケーブルでも充電可能	補聴器の状態の確認方法  フタを開けると、数秒間光ります 補聴器を充電中 補聴器が満充電 冷却作動中(冷却中は充電中止) 問題発生(取扱説明書をご確認ください) 補聴器が充電ケースに正しく入っていない。または充電ケースの電源がオフになっている 充電ケースの状態の確認方法  ボタンを押すと、数秒間光ります	充電状態の確認 充電ケースの内蔵充電電池を充電中 充電ケースの内蔵充電電池が満充電 充電ケースの電源がオフになっている。または、充電が完了(ワイヤレス充電時) 冷却作動中(冷却中は充電中止) 問題発生(取扱説明書をご確認ください)
電源 On/Off ●充電ケースの電源On/Off ボタンを5秒間長押ししてOn/Offが切り替わります ●補聴器の電源On/Off 充電ケースに入れると自動的にOffになり、充電ケースから出すと自動的にOnになります ●電源Offのままケースから取り出したい場合 ①補聴器を充電ケースに入れます ②充電ケースを電源から外します ③充電ケースのボタンを5秒間長押しします ④充電ケース用充電ステータスLEDの点滅が消えたら、補聴器を取り出します ●Qiワイヤレス充電パッドで充電する場合 ①Qiワイヤレス充電パッドの中央に充電ケースを置いてください ②数秒後、中央下部の「充電ケース用充電ステータスLED」ランプが緑色に点滅すると、充電開始の合図です ③ランプが点滅しない場合、充電ケースを持ちあげ、Qiワイヤレス充電パッドのランプが消えた後、再度置いてください	電源に接続して充電中の場合 電源に接続していない時 充電ケースの電池残量確認方法 充電ケースの内蔵充電電池を充電中 充電ケースの内蔵充電電池が満充電 充電ケースの電源がオフになっている。または、充電が完了(ワイヤレス充電時) 冷却作動中(冷却中は充電中止) 問題発生(取扱説明書をご確認ください)		

補聴器	対応充電ケース	充電ケースの使い方	充電状態の確認
IX Signia IX シグニアIX  充電CIC インシオチャージ&ゴー Insio Charge&Go IX CIC 	充電方法  ①充電ケースを電源につないで充電ケースを充電してください ②充電スロットに左右を間違えないように補聴器を入れてください 充電ケースに「L」と刻印された側に左耳用の補聴器(Lの識別表示)、充電ケースに「R」と刻印された側に右耳用の補聴器(Rの識別表示)を入れます USBタイプCケーブルでも充電可能 Qiワイヤレス充電器 充電ケース用ステータスLED	補聴器の状態の確認方法  フタを開けると、数秒間光ります 補聴器を充電中 補聴器が満充電 冷却作動中(冷却中は充電中止) 問題発生(取扱説明書をご確認ください) 補聴器が充電ケースに正しく入っていない。または充電ケースの電源がオフになっている LEDが消灯 充電ケースの状態の確認方法  ボタンを押すと、数秒間光ります	充電状態の確認 充電ケースの内蔵充電電池を充電中 充電ケースの内蔵充電電池が満充電 充電ケースの電源がオフになっている。または、充電が完了(ワイヤレス充電時) 冷却作動中(冷却中は充電中止) 問題発生(取扱説明書をご確認ください)
電源 On/Off ●充電ケースの電源On/Off ボタンを5秒間長押ししてOn/Offが切り替わります ●補聴器の電源On/Off 充電ケースに入れると自動的にOffになり、充電ケースから出すと自動的にOnになります ●電源Offのままケースから取り出したい場合 ①補聴器を充電ケースに入れます ②充電ケースを電源から外します ③充電ケースのボタンを5秒間長押しします ④充電ケース用充電ステータスLEDの点滅が消えたら、補聴器を取り出します ●Qiワイヤレス充電パッドで充電する場合 ①Qiワイヤレス充電パッドの中央に充電ケースを置いてください ②数秒後、中央下部の「充電ケース用充電ステータスLED」ランプが緑色に点滅すると、充電開始の合図です ③ランプが点滅しない場合、充電ケースを持ちあげ、Qiワイヤレス充電パッドのランプが消えた後、再度置いてください	電源に接続して充電中の場合 電源に接続していない時 充電ケースの電池残量確認方法 充電ケースの内蔵充電電池を充電中 充電ケースの内蔵充電電池が満充電 充電ケースの電源がオフになっている。または、充電が完了(ワイヤレス充電時) 冷却作動中(冷却中は充電中止) 問題発生(取扱説明書をご確認ください)		

●据え置き型充電器

補聴器	対応充電器	充電器の使い方	充電状態の確認
Signia AX  ワイヤレス充電ITC  ワイヤレス充電ITE インシオチャージ&ゴー Insio Charge&Go AX		 ①充電スロット ②充電ステータスLED 充電方法 ①USBケーブルを充電器に接続します。 ②左右を間違えないように充電スロットに補聴器を入れます。フェイスプレート(耳の外側に来る部分)を上向きにして水平になるように、補聴器を充電スロットの奥までしっかりと挿してください。 ③フタを閉めなくても充電は始まりますが、フタを開けたほうが、フェイスプレートが押されてより安定して充電できます。 注意点 ●充電時、補聴器のフェイスプレートが水平になるように正しく設置してください。水平でない場合、充電されないことがあります。 補聴器の電源On/Off 充電器に入れると自動的にOffになり、充電器から出すと自動的にOnになります	 フタを開けると、数秒間光ります 充電器の電源が入っていません 充電器に電源が入りました 充電率：0~33% 充電率：34~66% 充電率：67~99% 補聴器は完全に充電されました(100%) 充電器の温度が上がりすぎた為、冷却しています。冷却後(約5分)に充電が再開されます 問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください

補聴器	対応充電器	充電器の使い方	充電状態の確認
IX Signia IX シグニアIX  スタイルレット Styletto IX  スタイルレット Styletto AX ピュアチャージ&ゴー ビューティー ピュアチャージ&ゴー Pure Charge&Go BCT IX Pure Charge&Go IX Signia AX  ピュアチャージ&ゴー Pure Charge&Go AX IX Signia IX シグニアIX  モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go P IX Motion Charge&Go P X IX Signia IX シグニアIX  モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go SP IX Motion Charge&Go SP X	 ドライ&クリーン充電器 ※ドライ&クリーン充電器は対応機種によって充電スロット、端子の位置が異なります。ご注文・ご使用前に一度ご確認ください	①充電ランプ ②UV除菌ランプ ③充電スロット 充電方法 ①USBケーブルを充電器に接続します ②左右を間違えないように充電スロットに補聴器を入れます ※補聴器充電ステータスLEDが数秒光ります ※奥までしっかりと挿してください ※レシーバー部分は充電スロット奥の空洞に入れます ※補聴器の電源が自動的に切れます ※フタを閉めなくても充電できます 除菌・乾燥機能 ●補聴器をセットしフタを閉めた後、約15分間UV除菌します。 除菌中は②のUV除菌ランプがゆっくり点滅します ●乾燥は充電開始後約4時間運転します 電源 On/Off 充電器に入れると自動的にOffになり、充電器から出すと自動的にOnになります 注意点 ●補聴器本体および充電器の充電端子の汚れや付着物を取り除いてから充電スロットに入れてください ●充電器に電源が入っていれば、補聴器の充電が完了した後は充電が停止し補聴器の電源が切れたままになります ●充電器の電源が切れると、補聴器の電源が入り、充電電池の容量を消費してしまい、補聴器のご使用時に動作しない場合があります。充電器の電源が切れないように注意してください	 フタを開けると、数秒間光ります 充電器の電源が入っていません 充電器に電源が入りました 補聴器が正しく設置されました。充電が開始されます 充電率：0~33% 充電率：34~66% 充電率：67~99% 補聴器は完全に充電されました。(100%) 充電器の温度が上がりすぎた為、冷却しています。冷却後(約30分)に充電が再開されます 問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください

穴タイプ
耳かけ型用
イヤーマールド・その他・

耳あな型・ポケット型

充電器・電池

ケアリユージョン・周辺機器

販売店向けツール・耳せんへの選び方

充電器の使い方

■ 充電式補聴器の充電ケース・充電器使用方法

補聴器	対応充電器	充電器の使い方	充電状態の確認
IX Signia IX シグニアIX モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go M IX	M IX用 シンプル充電器	① 充電ステータスLED ② 充電スロット 	 P用 シンプル充電器 SP用 シンプル充電器 充電器の電源が入っていません ●未点灯 充電器に電源が入りました ●緑色3回点滅 充電中 ●緑色の点滅 補聴器は完全に充電されました。(100%) ●緑色が点灯 問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください ●赤色が3回点滅
IX Signia IX シグニアIX モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go PIX モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go PX	2026年3月末 販売終了予定 Signia Xperience P用 シンプル充電器	① ケーブルを電源に接続します ② 補聴器とレシーバーは左の図と同じ向きになるように、正しく設置してください 充電方法 ● 充電スロットの奥までしっかりと挿してください ● 接点の汚れや付着物を取り除いてから充電スロットに入れてください 電源 On/Off 充電器に入ると自動的にOffになり、充電器から出すと自動的にOnになります	 P用 シンプル充電器 SP用 シンプル充電器 充電器の電源が入っていません ●未点灯 充電器に電源が入りました ●緑色3回点滅 充電中 ●緑色の点滅 補聴器は完全に充電されました。(100%) ●緑色が点灯 問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください ●赤色が3回点滅
IX Signia IX シグニアIX モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go SPIX モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go SPX	2026年3月末 販売終了予定 Signia Xperience SP用 シンプル充電器	① レシーバー部分が中央にくるように置きます ② レシーバー部分が充電器の上にくるように置きます 	 充電CIC インシオチャージ&ゴー Insio Charge&Go IX CIC 充電器の電源が入っていません ●未点灯 充電器に電源が入りました ●緑色が順番に点灯後に消灯 充電器が補聴器の電池残量を読み取っています ●オレンジ色の点滅 充電率: 0~33% ●オレンジが1つ点灯 充電率: 34~66% ●緑色が1つ点灯 充電率: 67~99% ●緑色が2つ点灯 補聴器は完全に充電されました。(100%) ●緑色が3つ点灯 充電器の温度が上がりすぎた為、冷却しています。冷却後(約30分)に充電が再開されます ●オレンジが順番に点灯 問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください ●赤色の点滅
Signia Xperience 販売終了 2026年3月末 販売終了予定 ピュアチャージ&ゴー Pure Charge&Go X モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go X 7X/5X/3X	2026年3月末 販売終了予定 ワイヤレス充電器2	充電時の注意点(2種類の充電器共通) ※補聴器は仮充電の状態でお荷しています。ご購入後は始めに満充電にしてください ① レシーバー部分が中央にくるように置きます ② レシーバー部分が充電器の上にくるように置きます 	 ワイヤレス充電器2 充電器の電源が入っていません ●未点灯 充電器に電源が入りました ●緑色が1つ点灯 充電器が補聴器の電池残量を読み取っています ●緑色の点滅 充電率: 0~33% ●オレンジが1つ点灯 充電率: 34~66% ●オレンジが2つ点灯 充電率: 67~99% ●オレンジが3つ点灯 補聴器は完全に充電されました。(100%) ●緑色が3つ点灯 充電器の温度が上がりすぎた為、冷却しています。冷却後(約30分)に充電が再開されます ●オレンジが3つ点滅 問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください ●赤色の点灯又は点滅
Signia Xperience 販売終了 2026年3月末 販売終了予定 ピュアチャージ&ゴー Pure Charge&Go X モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go X 2X/1X	2026年3月末 販売終了予定 ワイヤレス充電器E	補聴器の電源On/Off(2種類の充電器共通) 充電器に補聴器を入れると、自動的に電源が切れて充電が始まります。充電器から補聴器を取り出すと、自動的に電源が入ります 	 ワイヤレス充電器E 充電器の電源が入っていません ●未点灯 充電器に電源が入りました ●緑色が1つ点灯 充電器が補聴器の電池残量を読み取っています ●緑色の点滅 充電率: 0~33% ●オレンジが1つ点灯 充電率: 34~66% ●オレンジが2つ点灯 充電率: 67~99% ●オレンジが3つ点灯 補聴器は完全に充電されました。(100%) ●緑色が3つ点灯 充電器の温度が上がりすぎた為、冷却しています。冷却後(約30分)に充電が再開されます ●オレンジが3つ点滅 問題が発生しました。取扱説明書をご覧ください ●赤色の点灯又は点滅

■ 充電式補聴器の充電時間と使用時間目安*1

補聴器	対応充電ケース・充電器	補聴器充電時間と使用時間目安	ポータブル充電ケースへの蓄電
モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go M IX	M IX用 シンプル充電器	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 6時間 36時間	
モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go PIX	P IX用 シンプル充電器 ドライ&クリーン充電器	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 6時間 35時間	
モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go SP IX	SP IX用 シンプル充電器 ドライ&クリーン充電器	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 6時間 70時間	
充電CIC インシオチャージ&ゴー Insio Charge&Go IX CIC	Insio Charge&Go IX用 Qi規格対応ポータブル充電ケース	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 9時間 34時間	USB充電 4時間 ワイヤレス充電 6時間*2 充電ケースの補聴器充電回数 補聴器2台を3回フル充電可能 (補聴器1台の場合6回フル充電)
ピュアチャージ&ゴー Pure Charge&Go BCT IX	Pure Charge&Go IX/BCT IX/AX用 ポータブル充電ケース	充電時間 30分 スピード充電 4時間30分 フル充電 使用可能時間 6時間 54時間	USB充電 4時間 充電ケースの補聴器充電回数 補聴器2台を3回フル充電可能 (補聴器1台の場合6回フル充電)
ピュアチャージ&ゴー Pure Charge&Go IX	Pure Charge&Go IX/BCT IX/AX用 ドライ&クリーン充電器	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 6時間 28時間	USB充電 4時間 充電ケースの補聴器充電回数 補聴器2台を4回フル充電可能 (補聴器1台の場合8回フル充電)
ピュアチャージ&ゴー Pure Charge&Go AX	Pure Charge&Go IX/BCT IX/AX用 ドライ&クリーン充電器	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 6時間 28時間	USB充電 4時間 充電ケースの補聴器充電回数 補聴器2台を4回フル充電可能 (補聴器1台の場合8回フル充電)

*1 Bluetooth機能を利用して音楽等を聞く場合(ストリーミング)、使用可能時間はより短くなります
*2 市販のQi規格対応の充電パッドをご使用ください。充電パッドをご使用の場合、ケースの充電時間は目安です。ご使用の充電パッドの種類により異なる場合があります

IC型用
耳かけ型用
イヤモデルド・その他・CROS
耳あな型・ポケット型
充電器・電池
ケアソリューション・周辺機器
販売店向けツール・耳せんの選び方
充電器の使い方

■ 充電式補聴器の充電時間と使用時間目安*1

補聴器	対応充電ケース・充電器	補聴器充電時間と使用時間目安	ポータブル充電ケースへの蓄電
 スタイルレット Styletto IX	 Styletto IX用 Qi規格対応ポータブル充電ケース Styletto IX用 ドライ&クリーン充電器	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 5時間 20時間	 USB充電 3時間  ワイヤレス充電 6時間*2 充電ケースの補聴器充電回数 補聴器2台を5回フル充電可能 (補聴器1台の場合10回フル充電)
 シグニア アクティブプロ シグニア アクティブ Signia Active Pro IX/Signia Active IX	 Signia Active Pro IX/Signia Active IX用 Qi規格対応ポータブル充電ケース	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 8時間 34時間	 USB充電 3時間  ワイヤレス充電 6時間*2 充電ケースの補聴器充電回数 補聴器2台を3回フル充電可能 (補聴器1台の場合6回フル充電)
 シルク チャージ&ゴー Silk Charge&Go IX	 Silk Charge&Go IX用 Qi規格対応ポータブル充電ケース	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 6時間 28時間	 USB充電 4時間  ワイヤレス充電 6時間*2 充電ケースの補聴器充電回数 補聴器2台を4回フル充電可能 (補聴器1台の場合8回フル充電)
 スタイルレット Styletto AX	 Styletto AX用 Qi規格対応ポータブル充電ケース Styletto AX用 ドライ&クリーン充電器	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 5.5時間 20時間	 USB充電 3時間  ワイヤレス充電 6時間*2 充電ケースの補聴器充電回数 補聴器2台を4回フル充電可能 (補聴器1台の場合8回フル充電)
 ワイヤレス充電ITC ワイヤレス充電ITE インシオ チャージ&ゴー Insio Charge&Go AX	 Insio Charge&Go AX用充電器	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 6時間 28時間	

補聴器	対応充電ケース・充電器	補聴器充電時間と使用時間目安	ポータブル充電ケースへの蓄電
2026年3月末販売終了予定  モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go X	2026年3月末販売終了予定  7X/5X/3X ワイヤレス充電器2 2X/1X ワイヤレス充電器E	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 6時間 24時間	
2026年3月末販売終了予定  モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go P X	 Motion Charge&Go P X用 ドライ&クリーン充電器 P用 シンプル充電器	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 7時間 30時間	
2026年3月末販売終了予定  モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go SP X	 Motion Charge&Go SP X用 ドライ&クリーン充電器 SP用 シンプル充電器	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 4時間 61時間	
販売終了  スタイルレット Styletto X	販売終了  Styletto X用 Qi規格対応ポータブル充電ケース	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 5時間 19時間	 USB充電 3時間  ワイヤレス充電 5時間*2 充電ケースの補聴器充電回数 補聴器2台を3回フル充電可能 (補聴器1台の場合6回フル充電)
販売終了  シグニア アクティブプロ シグニア アクティブ Signia Active Pro/Signia Active	販売終了  Signia Active Pro/Signia Active用 Qi規格対応ポータブル充電ケース	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 5時間 26時間	 USB充電 3時間  ワイヤレス充電 5時間*2 充電ケースの補聴器充電回数 補聴器2台を3回フル充電可能 (補聴器1台の場合6回フル充電)
販売終了  ピュアチャージ&ゴー Pure Charge&Go X	2026年3月末販売終了予定  7X/5X/3X ワイヤレス充電器2 2X/1X ワイヤレス充電器E	充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 6時間 23時間	

*1 Bluetooth機能を利用して音楽等を聞く場合(ストリーミング)、使用可能時間はより短くなります
 *2 市販のQi規格対応の充電パッドをご使用ください。充電パッドをご使用の場合、ケースの充電時間は目安です。ご使用の充電パッドの種類により異なる場合があります