

シグニア補聴器

総合カタログ 2026年2月版



signia

Be
Brilliant™

Be Brilliant™

シグニアは、世界をリードする補聴器ブランドのひとつ。
 私たちが目指すこと、それは補聴器の常識を変える技術革新で、
 人間のパフォーマンスを向上させること。
 難聴だから人生が制限される、そんなことがないように。
 Be Brilliant. シグニアで、もっと鮮やかに。



The succession of 140 years

1878
 Phonophor
 ベルナー・フォン・シーメンスが
 難聴者向けの特別な
 電話受信器を發明



1913
 Phonophor Alpha
 真空管アンプを使用した
 ポケットサイズの補聴器



1951
 Auriculina 326
 シーメンス初の
 耳かけ型補聴器



1966
 Siretta 339
 シーメンス初の
 耳あな型補聴器



2011
 Aquaris
 シーメンス初の
 防水・防塵補聴器



SIEMENS COOL
 補聴器の
 新しいカタチ



2016
 プライマックス
primax

ワイヤレス充電式補聴器
Cellion
 リチウムイオン充電電池の
 Cellionの登場で、
 充電式補聴器が
 一気にメインストリームに。



2018
 シグニア エヌエックス
Signia Nx
Stylettoシリーズ
 もう補聴器と呼ばない。
 数々のデザイン賞を受賞した
 革新的なスリム充電式登場。



2020
 シグニア エクスぺリエンス
Signia Xperience
Motion Charge&Go SP X
 世界初^{*}、重度難聴対応の
 スーパーパワータイプ
 充電式耳かけ型補聴器。
※2021年1月、WSオーディオロジー
 グループ調べ



2022
 シグニア エーエックス
Signia AX
Insio Charge&Go AX
 シグニア初の
 充電式オーダーメイド
 耳あな型補聴器。
 ワイヤレス充電で取り扱い簡単。



シグニア補聴器は、
 「騒がしい場所でもしっかり聞こえる」
 ことを目指すブランドです。

最新

IX Signia IX
 シグニア IX

世界初^{*}、ロックオン機能搭載補聴器。
 複数の相手を追いかけて、会話の言葉の
 すみずみまでより正確に再現します。
※2023年9月、WSオーディオロジー
 グループ調べ

豊富なラインナップから、
 きっとあなたの1台が見つかる



BIGイノベーション
 アワード2024受賞

シグニア補聴器公式
 YouTubeチャンネル
 お役立ち動画はこちら



INDEX

- 補聴器を選ぶ前に
 - 140年以上の歴史 1
 - 聞こえること・難聴のこと 3
 - 補聴器のこと 5
 - 補聴器の種類 7
 - 補聴器のシリーズとクラス 9
 - 補聴器の機能 11
 - クラス選びのヒント 13
- おすすめ補聴器
 - おすすめ充電式補聴器 15
 - Pure Charge&Go IX ファミリー 17
 - Styletto IXとMotion Charge&Go IX 19
 - Silk Charge&Go IX 21
 - Insio Charge&Go IX/AX 23
 - Insio IX 25
- Signia IX
 - Signia IX テクノロジー 27
 - Signia IX 7IX/5IX/3IX 31
 - Signia IX 2IX/1IX 33
- Signia AX
 - Signia AX テクノロジー 35
 - Signia AXとIntuis4 37
- Signia IX、Signia AX用充電器 39
- その他の補聴器
 - Signia Xperience/Signia Nx/primax 41
 - Intuis3/Prompt/Fun 43
 - CROS・BiCROS補聴システム 44
- アクセサリー・アプリ等
 - アクセサリー・補修パーツ 45
 - RIC型・耳かけ型用イヤモールド 47
 - ケアソリューション 48
 - アプリ・リモコン・周辺機器 49
- カラーバリエーション・性能一覧
 - カラーバリエーション 51
 - RIC型・耳かけ型性能一覧 53
 - オーダーメイド耳あな型オプション・性能一覧 55
 - 機能比較表 57

補聴器を選ぶ前に

おすすめの補聴器

Signia IX

Signia AX

IX AX用充電器

その他の補聴器

アクセサリー・アプリ等

カラーバリエーション・性能一覧

聞こえのこと 難聴のこと

聞こえのチェック

● こんなことはありませんか？


- 自動車の中での話が、よく聞き取れない
- 人の話し声が小さいように感じる
- 周りの人から、テレビの音が大きいと言われる
- 携帯電話の呼び出し音に気付かないことがある
- 人と会話をするのが面倒に感じる

● こんな聞き間違いありませんか？

- しじじ(7時) ←→ いじじ(1時)
- しろい(白い) ←→ ひろい(広い)
- たかな(高菜) ←→ さかな(魚)

該当する場合は
聴力が低下しているかもしれません


耳の構造と役割

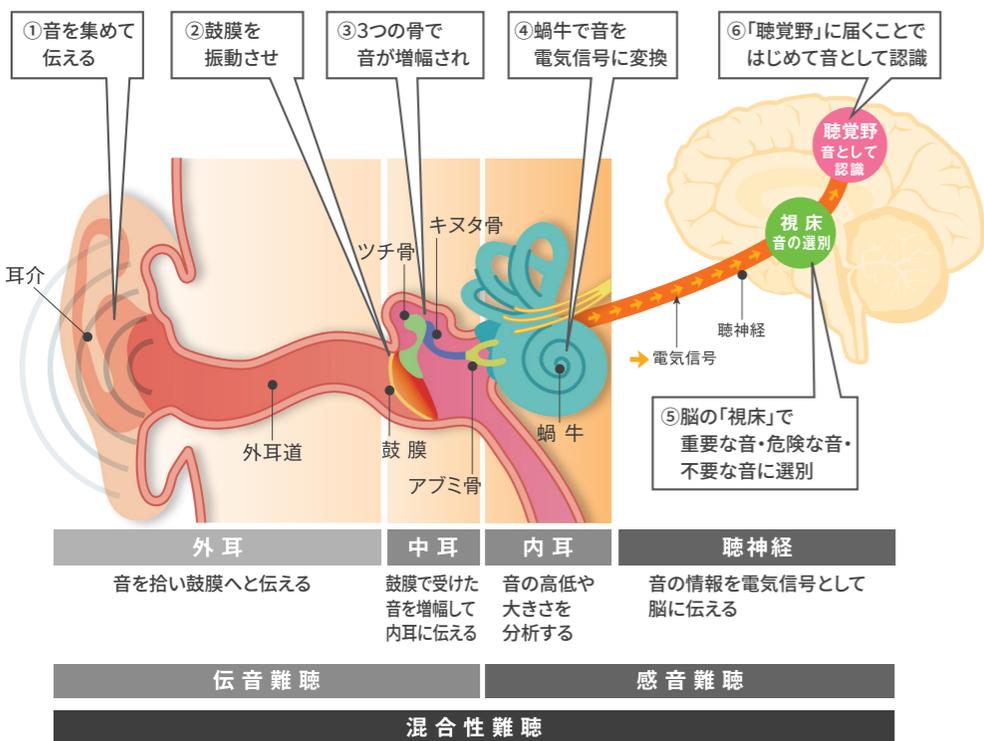

難聴の種類	解説
伝音難聴	中耳炎や鼓膜の損傷・病気などが原因で、音が伝わりにくくなることによる難聴。 医学的に治療できるケースも。難聴が残る場合は補聴器を使う事もある。
感音難聴	加齢や病気、長時間騒音下にいることなどが原因の難聴。 医学的治療では治らず、補聴器を使うケースも。難聴レベルや周りの状況によっては、補聴器を装着しても聞き取りが困難なケースもある。
混合性難聴	伝音難聴と感音難聴の両方が同時に起こる難聴。

加齢による聴力低下

- 難聴は年を重ねるにつれ、誰にでも起こりうるもの。
- 聴力の低下は30代からすでに始まっている。
- 難聴が進むと高い音から聞きづらくなり、聞こえる音が減っていく。
- 加齢性難聴は自分では気づきにくい。

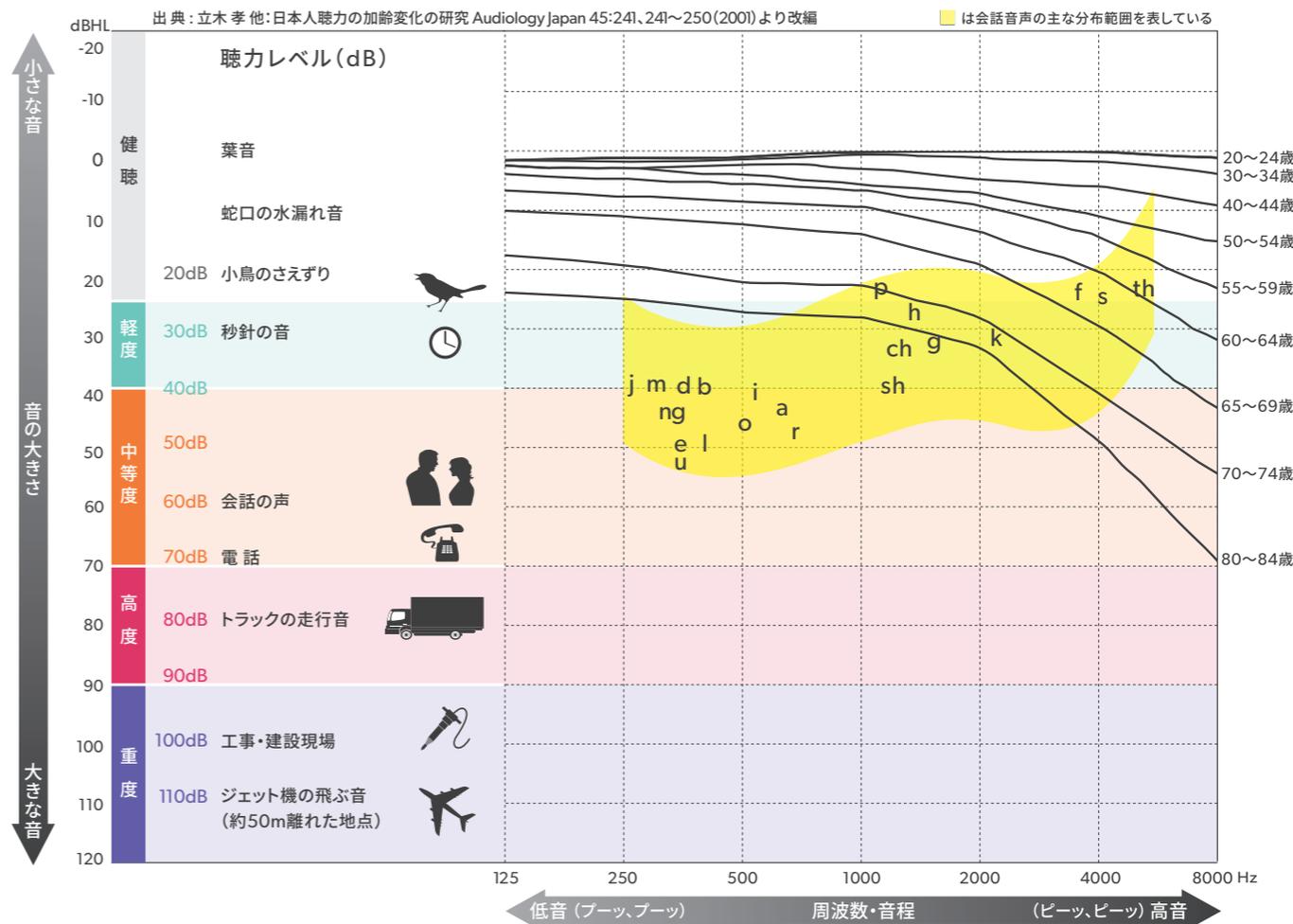

聞こえの目安

軽度難聴 25dBHL~40dBHL	中等度難聴 40dBHL~70dBHL	高度難聴 70dBHL~90dBHL	重度難聴 90dBHL以上
<ul style="list-style-type: none"> ・小さな声やささやき声が聞き取りにくい ・テレビの音が大きいと言われる 	<ul style="list-style-type: none"> ・普通の会話が聞きづらい ・自動車がそばに来て初めて気づく 	<ul style="list-style-type: none"> ・大きな声でも聞きづらい ・大きな声でも聞き間違いが多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・耳元での大きな声も聞きづらい

聞こえの仕組み、難聴補聴器購入の流れについての動画はこちら



補聴器を選ぶ前に

おすすすめ補聴器

IX
シグニフィック

IX
シグニフィック

IX
AX用

補聴器

アクセサリ！
アプリ等

カラーバリエーション
性能一覧

補聴器はなぜ必要？

難聴の場合、早いタイミングで適切な補聴器をつけると、いろいろなメリットがある。

● より良いコミュニケーション

音がよく聞こえるようになると、家族や友人と話をすることが楽しくなる。



● 人間関係と心の健康

人生100年時代。コミュニケーション不足によって人間関係が疎遠になるのを防ぎ、あなたの新しい挑戦を応援する。



● 生活上の危険の回避

音で周囲の状況を把握し、危険を未然に防ぐのを助けてくれる。




● 音で脳に良い刺激を与える

聴覚刺激を増やすことで、「楽しい」「うれしい」などの情動を引き起こし脳機能を活性化できるといわれている。



補聴器購入の流れ

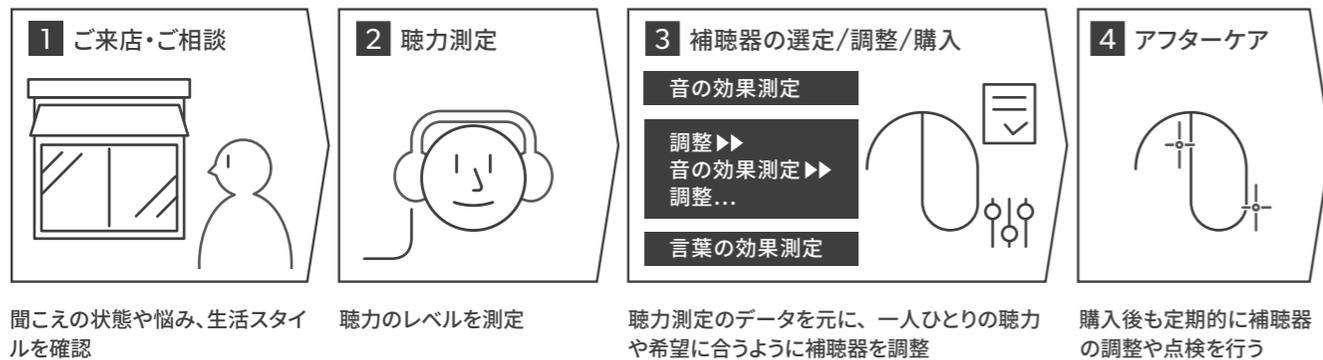

両耳装用のすすめ


- POINT 1** 左右両方の脳の働きを活かす
- POINT 2** 疲れにくいからより長く使える
- POINT 3** 方向感や距離感をよりつかみやすい
- POINT 4** 騒音下での聞き取りが良い



両耳装用は満足度が高いという調査結果があります。

	満足度	平均使用時間/日	全く使用しない
両耳装用	54%	8.9	2%
片耳装用	45%	6.7	12%

「日本補聴器工業会ホームページ JapanTrak」より

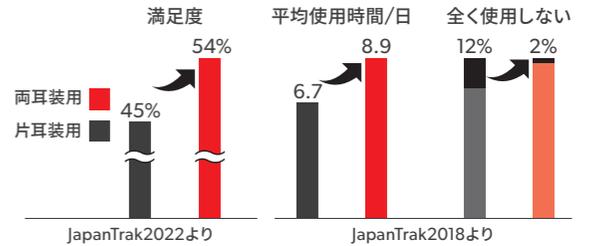

使いこなすにはトレーニングと調整が重要

- 聞こえないでいた脳が再び音に慣れるのは時間がかかる。
- 最初の数ヶ月間は聞こえ方が変化。
- 毎日つけてトレーニングすることが大事。音読や追唱も有効。
- 定期的にお店に通い、その時の聞こえに一番合うように調整してもらう。



補聴器を選ぶ前に

おすすめ補聴器

IX AXF用

IX AXF用

IX AXF用

その他

アクセサリ!

性能一覧

カラーバリエーション

補聴器のシリーズとクラス

Signia IXの
最先端音声技術の
解説はこちら



シグニア補聴器は「騒がしい場所でもしっかり聞こえる」ことを目指すブランドです。

シリーズ

補聴器の心臓部である、音声を処理するプロセッサーは、技術進歩につれてどんどん進化しています。シグニア補聴器は、その「シリーズ」ごとに違うプロセッサーを搭載しています。新しいシリーズほど、プロセッサーの処理能力がパワフルで、多くの機能が搭載され、より高度な音声処理ができます。

最新

Signia IX
シグニア IX

世界初※、ロックオン機能搭載補聴器。複数の相手を追いかけて、会話の言葉のすみずみまでより正確に再現します。

※2023年9月、WSオーディオロジーグループ調べ

毎秒
1,000回
音を分析

データ
192,000個
を収集

聞き取り
25%
向上

さらに他のシリーズに比べ、5/3/2クラスはチャンネル数が向上

192,000個

25%

192,000個

25%

2022年

Signia AX
シグニア エーエックス

世界初※、2つの頭脳で言葉と環境音を別々に処理するダブルプロセッサー補聴器。

※2021年4月、WSオーディオロジーグループ調べ

言葉

環境音

言葉がよりくっきり

環境音がよりすっきり

ダブルプロセッサー

2020年

Signia X Experience
シグニア エクスぺリエンス

世界初※、Xセンサー搭載補聴器。100シーン自動対応。どこにいても、何をしても、最適な音をあなたに。

※2019年10月、WSオーディオロジーグループ(旧シバントスグループ)調べ

超広角センサー

周囲360°の声や物音を常に分析、400パターンの中から最適な音質に自動で変化。

モーションセンサー

座れば前方フォーカス、散歩中はワイドに、聞こえを自動で最大化。

周りの環境

100シーン自動対応

あなたの動き

クラス

シグニア補聴器は、性能と搭載機能の違いにより下記5つのクラスに分かれています。より上位のクラスほど性能が良く、活用できる場面が広がります。保証も手厚くなります。


	7 プレミアム シグニア補聴器の最上位クラス	5 アドバンス ワンランク上の聞こえを実感	3 スタンダード テレビや電話もクリアに聞こえる	2 ベーシック 屋内外の快適さを重視	1 バリュー 基本性能を搭載
保証	3年修理保証 2年紛失保証	3年修理保証 2年紛失保証	2年修理保証 1年紛失保証	2年修理保証	2年修理保証
チャンネル	48ch*	36ch	32ch	24ch	16ch
搭載機能	多い				少ない

* Motion Charge&Go SP IXは36ch

※Signia IXの場合の、各クラスの機能差のイメージ

●チャンネルとは

「チャンネル」は性能を表す重要な指標の一つです。シグニアの補聴器はマイクに入ってきた音を高さ(周波数)ごとに分割し別々に処理を行い、最適な音量・音質で耳に届けます。チャンネル数が多いほど、音が細かく分割され、きめ細かい処理ができ、より生音に近い静かでハッキリとした音質に近づきます。

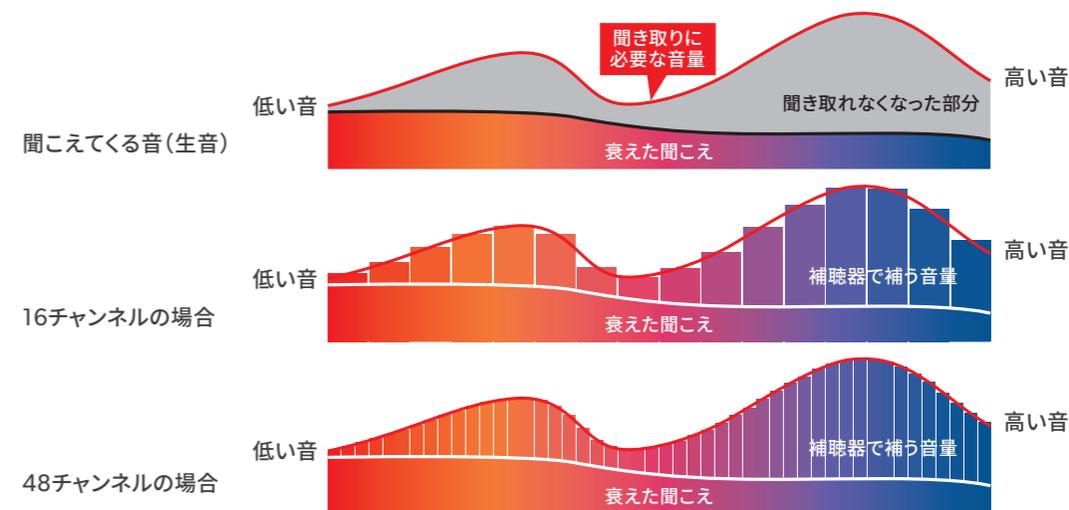

※画像はイメージです。装着者の聞こえの状態によっては、効果が異なる場合があります

補聴器を選ぶ前に

おすすめ補聴器

IX

シグニア

シグニア

シグニア

シグニア

IX AX

充電式

補聴器

その他

アクセサリ

アプリ等

性能一覧

カラーバリエーション

補聴器の機能

クラスごとのチャンネル数、保証と機能

各シリーズの対応クラス	故障や紛失時に	きめ細かい聞こえ	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋外	屋内・集会所	騒がしい場所での複数人の会話	騒がしい場所での複数人の会話	買い物・リハビリ施設	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	デイサービス・病院	車・電車	超高音質
IX Signia IX シグニア IX	保証*1	チャンネル*2	ダブルプロセッサー*3	ライブサウンド*4	Xセンサー超広角センサー	風雑音抑制	突発音抑制	ワードロックオン	スピーチロックオン*5	Xセンサーモーションセンサー*6	OVP2.0*7	ビーム指向性*8	パワーエンハンス*9	スピーチフォーカス*3	反響音抑制*10	スピーチフォーカス360°*8	12kHz帯域対応*11
			2x														
7 プレミアム シグニア補聴器の最上位クラス	3年修理保証 2年紛失保証	48ch															
5 アドバンス ワンランク上の聞こえを実感	3年修理保証 2年紛失保証	IX 36ch AX 32ch															
3 スタンダード テレビや電話もクリアに聞こえる	2年修理保証 1年紛失保証	IX 32ch AX 24ch															
2 ベーシック 屋内外の快適さを重視	2年修理保証	IX 24ch AX 16ch															
1 バリュー 基本性能を搭載	2年修理保証	16ch															

※各機能の詳細は巻末の機能比較表をご参照ください

*1 詳しくは裏表紙に記載 *2 Signia IXシリーズの5/3/2クラスはチャンネル数が向上 *3 シングルマイク器種非対応 *4 7/5/3クラスは、より進化したライブサウンドプラスを搭載。詳しくは35ページをご確認ください
Silk Charge&Go IX、Insio IXは非対応 *7 耳あな型はOVP機能非対応 *8 Insio Charge&Go IX、Silk Charge&Go IX非対応。Insio IXのシングルマイク器種またはノンワイヤレスを選択した場合非対応
反響音抑制機能が自動で働く。5クラスは手動でプログラム切替が必要 *11 Motion Charge&Go SP IXの7クラスは36ch、12kHz帯域非対応

IX Signia IX シグニア IX のみ搭載
IXの1クラスのみ対応
*5 詳細は29、30ページをご確認ください。RIC型・耳かけ型とInsio IXツインマイク器種(ワイヤレス機能あり)の7/5/3クラス、両耳装着時に「スピーチロックオン」対応 *6 Insio Charge&Go IX、
*9 Insio Charge&Go IX、Silk Charge&Go IXは両耳装着で対応。Insio IXのシングルマイク器種はワイヤレス機能あり(標準)の場合両耳装着で対応、ノンワイヤレスを選択した場合非対応 *10 7クラスは、

補聴器を選ぶ前に

おすすめる補聴器

IX シグニア IX

Signia AX

充電器 IX AX用

補聴器 その他

アクセサリ！
アプリ等

カラーバリエーション
性能一覧

クラス選びのヒント

「チャンネル数」や「搭載機能」、「保証」等の違いによって、より上位のクラスほど、より快適に安心して補聴器を使えるサポートが充実しています。生活スタイル、利用シーンに合わせてクラスをお選びください。

クラス

7

プレミアム
シグニア補聴器の最上位クラス

5

アドバンス
ワンランク上の聞こえを実感

3

スタンダード
テレビや電話もクリアに聞こえる

2

ベーシック
屋内外の快適さを重視

1

バリュー
基本性能を搭載

こんな方におすすめ

旅行や習い事など様々な場面で快適に使用したい方



大人数での会話やお出かけ先でも楽に使用したい方



外食や騒がしい場所での会話も楽しみたい方



外出先でも快適に使用したい方








自宅中心で使用する方



6つの要素

グラフでの数値が高いほど、性能が良く、より快適に使える

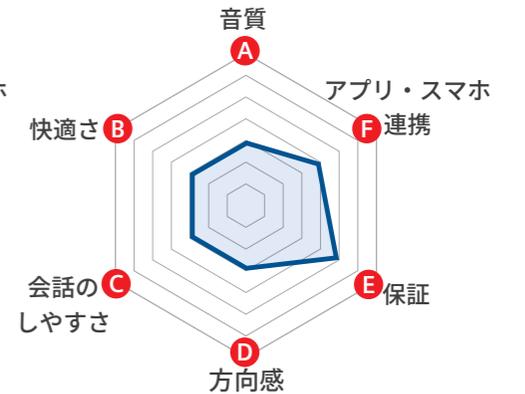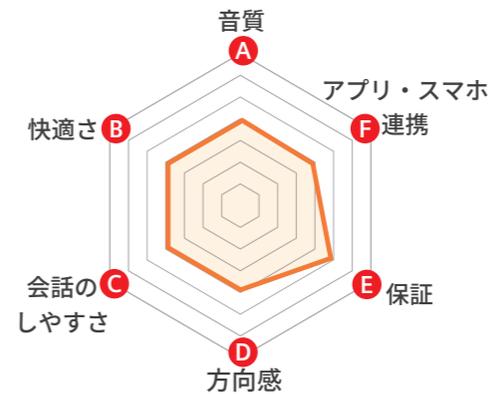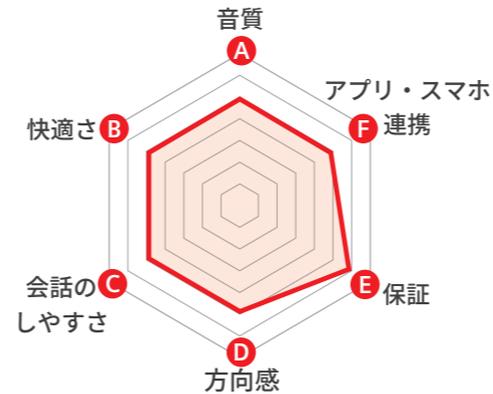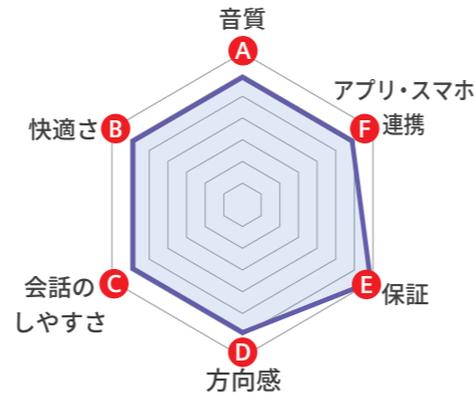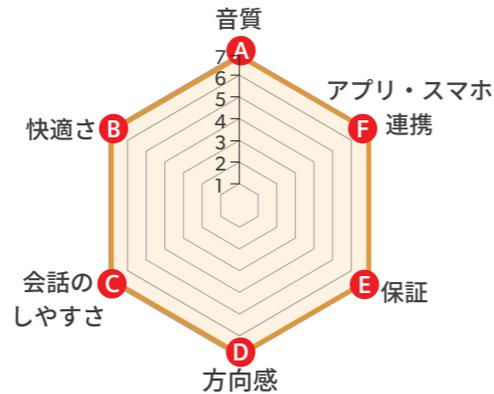

各要素を支える機能やサービス

A 音質

音がより自然に聞こえる。会話だけではなく、音楽や環境音にも影響。



B 快適さ

雑音や突発音等、耳障りな音を抑える力。外出の際には特に活躍。



C 会話のしやすさ

様々な環境でも人の声をしっかり聞き取る力。会話がスムーズになる。



D 方向感

聞きたい方向の声をしっかりとらえ、その他の雑音を抑える力。




E 保証

安心につながる修理の保証期間と、紛失した場合の保証の有無。



F アプリ・スマホ連携

スマホアプリで音量等の調節、電話の声が直接補聴器から聞こえる機能の有無。

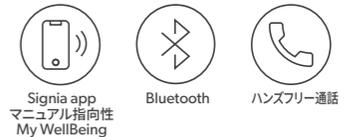

※Signia IXの場合の各クラスの性能差のイメージ

シグニアのおすすめ充電式補聴器

2016年、世界初*1のワイヤレス充電式補聴器を発売して以来、シグニアは進化を続け、今や充電式ラインナップは業界トップクラスの豊富さ！利便性と高性能を両立した補聴器で、あなたの「聞こえ」をトータルサポート。

スタイリッシュ

幅広い聴力対応

詳細は19ページ▶

スタイレット
Styletto IX



スリム充電式

UV除菌
乾燥

詳細は17ページ▶

ピュア チャージ&ゴー ビーシーティアー
Pure Charge&Go BCT IX
ピュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go IX



補聴器の定番

UV除菌
乾燥

詳細は20ページ▶

モーション チャージ&ゴー
Motion Charge&Go IX



110dBまでの重度難聴対応の器種も

UV除菌
乾燥

詳細は21ページ▶

シルク チャージ&ゴー
Silk Charge&Go IX



ほぼ見えない既製充電式

詳細は23ページ▶

インシオ チャージ&ゴー
Insio Charge&Go IX



小型充電式オーダーメイド

詳細は24ページ▶

インシオ チャージ&ゴー
Insio Charge&Go AX



充電式フルスペックオーダーメイド



耳かけ型



耳あな型

自然なつけ心地

しっかりフィット

電池交換不要で手間いらず
小型でも取り扱い簡単

コンパクトな充電ケースで
外出先でも充電可能

Qi対応充電パッドに置くだけで
ケースごと充電可能な器種も

UV除菌
乾燥
お手入れを楽にする除菌・乾燥機能
付き充電器を選ぶ器種も

*1 2016年10月 WSオーディオロジーグループ(旧シバントスグループ)調べ



世界初*「ロックオン」機能搭載
RIC型の定番、高機能な充電式補聴器
※2023年9月、WSオーディオロジーグループ調べ



コンパクトな充電ケースで
外出先でも充電可能



New ピュア チャージ&ゴー ビーシーティー
Pure Charge&Go BCT IX ツインマイク

LED
28.4mm
2.6g

1回の充電で最長
54時間
使用可能*4

フル充電できる
3回フル充電できる

軽 中 高 重
S: ~60dB M: ~75dB
P: ~90dB HP: ~100dB*6

Bluetooth® Connectivity Transformed 99%のスマホにつながる*1、Bluetooth Classic対応。

世界最小&最長電池寿命*1の Bluetooth Classic対応RIC型補聴器。

LEDで補聴器の状態をお知らせ、周りの人もサポートしやすい。



共通 機能



複数人の声を追いかけて、言葉のすみずみまでより正確に再現。騒がしい環境でも、一人ひとりの声が常に聞き取りやすく。



取り扱いが簡単な充電式。乾燥・除菌機能付きのドライ&クリーン充電器も選択可能。



テレビ*2・スマートフォンの音が補聴器に直接届く。スマホを手に持たずに、補聴器をさわるだけで通話可能。*5



Signia app対応、スマートフォンが補聴器のリモコンに。補聴器利用をさらに便利にするサポート機能が充実。*5

蓄電機能付き

選べる充電器

UV除菌乾燥

ポータブル充電ケース

ドライ&クリーン充電器

※充電器の詳細は39、40ページをご確認ください

【カラー バリエーション】



自分で簡単に補聴器の音を調節 テレビの音を楽しむ

【無料スマホアプリ】 Signia app

【リモコン】 ミニポケット miniPocket ¥22,000 (税込)

【周辺機器】 TVサウンド TV Sound ¥33,880 (税込)

ピュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go IX ツインマイク

1回の充電で最長
28時間
使用可能*4

フル充電できる
4回フル充電できる

25.5mm
2.2g

軽 中 高 重
S: ~60dB M: ~75dB
P: ~90dB HP: ~100dB*6

よりコンパクト、より軽量、耳の後ろにぴったりフィット。

フル充電で28時間使用可能、一日中電池切れの心配なし。

Apple社のMFi規格対応。iPhoneの音声を補聴器で聞いたり通話できる。

クラス	保証	チャンネル	機能														
			Bluetooth*2	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー超広角センサー	風雑音抑制	突発音抑制	ロックオン*3	Xセンサーモーションセンサー	OVP2.0	ビーム指向性	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360°	12kHz帯域対応
7IX	3年保証 2年保証	48ch	●	●	● プラス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5IX	3年保証 2年保証	36ch	●	●	● プラス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3IX	2年保証 1年保証	32ch	●	●	● プラス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2IX	2年保証	24ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1IX	2年保証	16ch	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●

*1 2025年4月、WSオーディオロジーグループ調べ *2 TV視聴は別途TV Soundが必要。詳しくは50ページをご確認ください *3 詳しくは29、30ページをご確認ください *4 使用時間は目安です。電池寿命は使用状況によって変わります *5 詳細は49、50ページをご確認ください *6 モールド付きHPLシーバーは別途費用がかかります
(販売名)補聴器 IXシリーズ

補聴器を選ぶ前に
Signia IX シグニアIX
Signia AX
IX AX用充電器
その他
アクセサリ！
性能一覧
カラーバリエーション

おすすめ
補聴器



シグニアを代表するスタイリッシュ補聴器
もっとおしゃれに、もっと楽しく

IX Signia IX
シグニア IX

スタイレット
Styiletto IX ツインマイク



軽 中 高
S:~60dB M:~75dB P:~90dB

使用可能時間の目安	充電時間	使用可能時間
4時間フル充電		約20時間



聴覚業界の優れた革新的技術を称える
ヒアリングテクノロジー
イノベーターアワード 2024 受賞。



受賞歴のある洗練されたデザインを継承、
スリムなボディはメガネとの相性抜群。



シグニア最小の充電ケースはQi規格対応。
Qi充電パッドに置くだけでケースごと充電可能。

[カラー バリエーション]



ブラック/グラファイト スノーホワイト/ローズゴールド ブラック/シルバー スノーホワイト/シルバー ※Qi充電パッドは市販品をご使用ください

選べる充電器



Qi規格対応ポータブル充電ケース ※充電器の詳細は39、40ページをご確認ください



UV除菌
乾燥

共通 機能



複数人の声を追いかけて、言葉のすみずみまでより正確に再現。
騒がしい環境でも、一人ひとりの声が常に聞き取りやすく。



取り扱いが簡単な充電式。
1日中充電切れの心配なし。


IX

シグニア最先端技術 IX Signia IX シグニア IX 搭載充電式耳かけ型補聴器
110dBの重度難聴にも対応するスーパーパワータイプが登場!



軽 中 高 重

あらゆる聴覚ニーズを考慮し、
幅広い聴力に対応。

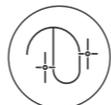

洗練された形状は耳の後ろにぴったりフィット。
エレガントな6色展開。



LEDで補聴器の状態をお知らせ、
周りの人もサポートしやすい。

[カラー バリエーション]



ベージュ ブラック サンドイブラウン ローズゴールド グラファイト シルバーヒーロー

New モーション
Motion Charge&Go IX ツインマイク



軽 中 高 重
チューブ:~70dB イヤフック:~90dB
中 高 重
チューブ:~80dB イヤフック:~100dB
中 高 重
イヤフック:~110dB

使用可能時間の目安	M		P		SP	
	充電時間	使用可能時間	充電時間	使用可能時間	充電時間	使用可能時間
4時間フル充電	4時間フル充電	約36時間	4時間フル充電	約35時間	4時間フル充電	約70時間

対応充電器



M用シンプル充電器 P,SP用ドライ&クリーン充電器 ※充電器の詳細は39、40ページをご確認ください

クラス	保証	チャンネル	機能														
			Bluetooth *1,*2	ダブルプロセッサ	ライブサウンド	Xセンサー超広角センサー	風雑音抑制	突発音抑制	ロックオン*3	Xセンサーモーションセンサー	OVP2.0	ビーム指向性	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチ*3フォーカス360°	12kHz帯域対応
7IX	3年保証 2年保証	48ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5IX	3年保証 2年保証	36ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3IX	2年保証 1年保証	32ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2IX	2年保証	24ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1IX	2年保証	16ch	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*1 TV視聴は別途TV Soundが必要 *2 詳しくは49、50ページをご確認ください *3 詳しくは29、30ページをご確認ください *4 Motion Charge&Go SPIXの7クラスは36ch *5 Motion Charge&Go SPIXの7クラスは36ch *6 チューブは別途費用がかかります



〈販売名〉補聴器 IXシリーズ

補聴器を選ぶ前に

あなたに合った補聴器

IX
シグニア IX

IX AX
シグニア IX AX

IX AX
充電式補聴器

その他
補聴器

アクセサリ！
アプリ等

カラーバリエーション
性能一覧

おすすめ
補聴器



IX 世界初*1、超小型充電式耳あな型補聴器
Silk Charge&Go IX



電池交換不要で手間いらず
●わずらわしい電池交換が不要
●電池の買い忘れ心配なし



小さく、軽く、快適なつけ心地
おしゃれな充電ケースでどこでも安心充電

IX Signia IX
シングニアIX

シルク チャージ&ゴー
Silk Charge&Go IX シングル
マイク



軽 中

ノーマル: 114/50 ~70dB



CES 2024ベスト・オブ・イノベーション賞受賞
本賞は優れた先端技術と製品を表彰する国際的な賞です。CES 2024では3000件以上の審査対象から、最高の評価を得た製品36件のみが受賞。



世界三大デザイン賞の一つである
レッドドット・デザイン賞2024受賞

reddot winner 2024



充電耳あな型最小クラス
世界最小クラスのコンパクトサイズ、
「見えない補聴器」を求める方に最適。



小さくても使いやすさを追求した充電式
電池を扱う必要がないので、どなたでも使いやすい。
一回の充電で28時間使え、
外出先でも充電ケースだけで充電可能。



補聴器をケースに入れて、
ケースごとQi規格充電パッドに置くだけで充電可能。
もちろんUSB充電も使える。

使用可能時間の目安	充電時間	使用可能時間
	4時間フル充電	約28時間

対応充電器



Qi規格対応ポータブル充電ケース
※充電器の詳細は39、40ページをご確認ください。Qi充電パッドは市販品をご使用ください



【カラーバリエーション】
フェイスプレート



ブラック



モカ

シェルカラー



左耳用: スケルトンブルー



右耳用: スケルトンレッド

左右色違いで識別しやすい



自然なつけ心地
耳あなの自然な隙間で通気性抜群、
既製耳あな型ならではの快適なつけ心地を実現。



どんな耳でもフィットしやすい
柔らかい既製耳せんでシルクのような装用感、
耳せんは豊富な種類から選べる。



スマートフォンでもリモコンでも操作可能、
より手軽に、よりスマートに扱える。

【無料スマートフォンアプリ】



シングニア アプリ
Signia app

【リモコン】



ミニポケット
miniPocket
¥22,000 (税込)



Signia IXシングルマイク器種用機能表

クラス	保証	チャンネル	機能									
			Bluetooth	ライブサウンド	Xセンサー超広角センサー	風雑音抑制	突発音抑制	ワードロックオン	ワンマイク指向性2.0*	パワーエンハンス*	反響音抑制	12kHz帯域対応
7IX	3年保証 2年延長保証	48ch	—	● プラス	●	●	●	●	●	●	● 自動	●
5IX	3年保証 2年延長保証	36ch	—	● プラス	●	●	●	●	●	●	●	—
3IX	2年保証 1年延長保証	32ch	—	● プラス	●	●	●	●	●	—	—	—
2IX	2年保証	24ch	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—
1IX	2年保証	16ch	—	●	●	●	○	●	—	—	—	—

*2 OVP機能非対応 *3 詳細は29、30ページをご確認ください。ワードロックオン機能のみ対応 *4 Insignia IXはワイヤレス機能あり(標準)の場合両耳装着で対応、ノンワイヤレスを選択した場合非対応。詳しくは30ページをご確認ください

*1 2023年8月、WS オーディオロジーグループ調べ(医療機器認証を受けた補聴器として)

おすすめ
補聴器



IX Signia IX
シングニア IX



あなたの耳にあわせて丁寧に製作、
オーダーメイドだから抜群のフィット感。



電池交換不要で手間いらず
●わずらわしい電池交換が不要
●電池の買い忘れ心配なし



汗水に安心
●高い防水性と防塵性
●国際保護等級最高位のIP68
※完全防水ではありません

シングニア エーエックス
Signia AX



New インシオ チャージ&ゴー
Insio Charge&Go IX シングルマイク



充電CIC

軽 中 高

ノーマル: 113/50 ~70dB
パワー: 118/55 ~80dB
ハイパワー: 124/60 ~90dB



耳の形状によっては
仕上がりが大きくなる場合があります

[カラーバリエーション]



ブラック



モカ



耳あなに隠れて気付かれにくいコンパクトサイズ、
小さいのにパワフル、高度難聴まで対応可能。



シングニア最新技術Signia IXテクノロジー搭載、
騒がしい環境でもより聞きやすく。



世界唯一のワンマイク指向性機能搭載、
両耳間の高速通信でより会話に集中できる。



補聴器をケースに入れて、ケースごとQi規格充電パッドに
置くだけで充電可能。もちろんUSB充電も使える。

使用可能時間の目安	充電時間	使用可能時間
	4時間フル充電	約34時間

対応充電器



Qi規格対応ポータブル充電ケース ※充電器の詳細は39、40ページをご確認ください。Qi充電パッドは市販品をご使用ください

クラス	保証	チャンネル	機能										
			Bluetooth	ライブサウンド	Xセンサー超広角センサー	風雑音抑制	突発音抑制	ワードロックオン	ワンマイク指向性2.0	パワーエンハンス	反響音抑制	12kHz帯域対応	
7IX	3年保証 2年保証	48ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5IX	3年保証 2年保証	36ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3IX	2年保証 1年保証	32ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2IX	2年保証	24ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1IX	2年保証	16ch	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	

*1 OVP機能非対応 *2 詳細は29、30ページをご確認ください。ワードロックオン機能のみ対応



扱いやすいサイズでつけ外し簡単。
マスクやメガネの邪魔にもなりにくい。



本体の操作だけでテレビの音声を聞いたり、*3
プログラム切替ができるので便利。



iPhoneもAndroidスマートフォンも、
通話・音楽が直接補聴器に届いて聞ける。
iPhoneは電話を持たずにハンズフリーで
通話できる。*4



充電器にポンと置いたら充電できる
ワイヤレス充電で扱いがらくらく。

使用可能時間の目安	充電時間	使用可能時間
	4時間フル充電	約28時間

対応充電器



充電器



※充電器の詳細は39、40ページをご確認ください

クラス	保証	チャンネル	機能													
			Bluetooth	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー超広角センサー	風雑音抑制	突発音抑制	Xセンサーモーションセンサー	ビーム指向性	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360°	12kHz帯域対応	
7AX	3年保証 2年保証	48ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5AX	3年保証 2年保証	32ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3AX	2年保証 1年保証	24ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2AX	2年保証	16ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1AX	2年保証	16ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

*3 TV視聴は別途TV Soundが必要 *4 詳しくは49、50ページをご確認ください

〈販売名〉補聴器 IXシリーズ カスタム、補聴器 AXシリーズ カスタム

補聴器を選ぶ前に

自分に合った補聴器

IX シングニア

Signia AX

充電器用 IX AX用

補聴器 その他

アクセサリ！
アプリ等

性能一覧
カラーバリエーション



IIC シングルマイク



10A 軽 中

ノーマル: 113/50 ~70dB



耳の奥深く収まるように巧みに設計され、横からみてもほぼ見えない**極小サイズ**。

フェイスプレート



ブラック



モカ

シェルカラー



スケルトンレッド



スケルトンブルー



ブラック

CIC シングルマイク



10A 軽 中 高

ノーマル: 113/50 ~70dB
パワー: 118/55 ~80dB
ハイパワー: 124/60 ~90dB



高度難聴まで対応の小型サイズ。環境スイッチが標準装備。

フェイスプレート



ブラック



モカ

シェルカラー



スケルトンレッド



スケルトンブルー



ベージュ

ブラック

New ITC シングルマイク



312 軽 中 高

ノーマル: 113/50 ~70dB
パワー: 118/55 ~80dB
ハイパワー: 124/60 ~90dB



耳あな型補聴器の標準的なサイズ。扱いやすく、つけ外し簡単。

フェイスプレート



ブラック



ベージュ

New ITC TWIN ツインマイク



312 軽 中 高

ノーマル: 113/50 ~70dB
パワー: 118/55 ~80dB
ハイパワー: 124/60 ~90dB



耳あな型補聴器の標準的なサイズ。

2つの集音マイクで「ロックオン」フル対応。騒音下のグループ会話もより聞き取りやすく*1

シェルカラー



スケルトンレッド



スケルトンブルー



ベージュ



ブラック

New ITE TWIN ツインマイク



312 軽 中 高

パワー: 118/55 ~80dB
ハイパワー: 124/60 ~90dB

より大きく耳にしっかり収まるサイズ。

Signia IX耳あな型ツインマイク 器種用機能表

*シングルマイク器種用機能表は22ページをご確認ください

クラス	保証	チャンネル	機能												
			Bluetooth	ダブルプロセッサー ^{*5}	ライブサウンド ^{*3}	Xセンサー超広角センサー	風雑音抑制	突発音抑制	ロックオン ワードロックオン	ロックオン スピーチロックオン ^{*1}	ビーム指向性 ^{*2}	パワーエンハンス ^{*4}	スピーチフォーカス ^{*5}	反響音抑制	スピーチフォーカス360° ^{*2}
7IX	3年保証 2年保証	48ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5IX	3年保証 2年保証	36ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3IX	2年保証 1年保証	32ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2IX	2年保証	24ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1IX	2年保証	16ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

スマートフォンでも
リモコンでも操作可能。

【無料スマートフォンアプリ】



【リモコン】




ミニポケット
miniPocket
¥22,000 (税込)

オーダーメイドならではの
オプションでさらに簡単・便利に。

名入れ
好きな文字6文字
の刻印が可能
(カタカナ)

テグス
つけ外しが
しやすいように

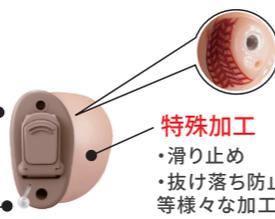

特殊加工
・滑り止め
・抜け落ち防止
等様々な加工

*1 詳細は29、30ページをご確認ください。Insio IXのツインマイク器種(ワイヤレス機能あり)7/5/3クラスは両耳装着時に「ワードロックオン」と「スピーチロックオン」両方対応。それ以外は「ワードロックオン」機能のみ対応 *2 シングルマイク器種またはノンワイヤレスを選択した場合非対応 *3 OVP機能非対応 *4 Insio IXのシングルマイク器種はワイヤレス機能あり(標準)の場合両耳装着で対応、ノンワイヤレスを選択した場合非対応 *5 シングルマイク器種非対応

IX

Signia IX
シグニアIX

世界初 *1 ロックオン機能搭載補聴器。
複数の相手を追いかけて、会話の言葉の
すみずみまでより正確に再現します。



BIGイノベーション・アワード2024受賞
革新的な方法で新しいアイデアを実現している
製品を表彰する世界的なビジネスアワード



Signia IX、10万台の信頼

日本国内で発売から2年、累計販売台数が10万台突破。*4
聞こえの進化を、もっと身近に。
世界が認めた補聴器の革新が、
あなたの日常を変える。



90%



1対1での会話シミュレーションで
参加者の90%の音声理解が向上*4

95%



グループでの会話シミュレーションで
参加者の95%の音声理解が向上*4

豊富なラインナップで聞こえをサポート。あなたの1台がきっと見つかる



Signia IXの
最先端音声技術の
解説はこちら



*4 2025年8月、WSオーディオロジーグループ調べ。

*1 2023年9月、WSオーディオロジーグループ調べ *2 Signia IXシリーズアクリルクラスの場合 *3 騒音下ロックオン機能の有無で比較した場合

IX
 会話が聞き取りにくい環境をご存知ですか。
 騒がしい中での数人との会話だと言われています。

出典：日本補聴器工業会の国内補聴器市場調査「JapanTrak 2022」より

旅行、レストラン、ショッピング・・・
 大事な一言を聞き逃してしまう経験はありませんか？
 シグニアだけの3つの技術で、
 騒がしい所でもよりストレスのない会話へ。



IX
 言葉のすみずみまで余さず取り込む
言葉明瞭化
 (ワードロックオン)
 対応クラス: 7IX 5IX 3IX 2IX 1IX
 対応器種: ツインマイク シングルマイク

言葉の手掛かりになる細かい部分もしっかり再現。
 通常聞き取りにくいとされる「さしすせそ」などの子音や
 話し始めがより聞き取りやすい。

機能なし	機能あり
<p>さとうさん</p> <p>手掛かりになる細かい音が減って言い出しや輪郭がぼやけて、聞き取りにくくなります。</p> <p>実際の声</p> <p>SATO? KATO?</p>	<p>さとうさん</p> <p>取りこぼしがちな話し始めや子音等もより正確に再現し、よりくっきり明瞭な聞こえを実現。</p> <p>SATOだね</p>

IX
 小さくても騒音下でよりクリアに聞こえる
前方会話集中
 (ワンマイク指向性2.0)
 対応クラス: 7IX 5IX 3IX
 対応器種: シングルマイク

世界唯一*2の「ワンマイク指向性」
 機能がさらにパワーアップ!

IX
 前方の声に集中
 高速通信

一般的な1つのマイクを搭載した小型補聴器は、前方の聞きたい音を強調し、それ以外の雑音を抑える処理が難しい。シグニアなら、1つのマイクでも、両耳の補聴器が高速通信し合うことで、騒がしい環境でも雑音を抑えて正面の音声をよりクリアに、「小型」と「静か」の両方を実現。

機能なし	機能あり
<p>騒音下での正面の音声が聞き取りにくい</p>	<p>騒音下での正面の音声がより聞きやすい*3</p>

IX
 動いても、何人でも、声を追いかける
会話捕捉*1
 (スピーチロックオン)
 対応クラス: 7IX 5IX 3IX
 対応器種: ツインマイク

声に集中して、相手全員の「会話」を自動で捕捉する。
 会話相手以外の余計な音は抑えるから、楽に会話が続けやすい。

- 会話をより強調する
- 会話を強調する
- 前方の会話と音を捉える



聞き漏らしたくない方、
 3人以上で外出が多い方(会合、旅行など)



社交的な方、3人以上の会話
 が頻繁な方(食事会、通院など)



3人以上でお話することが
 ある方(家族、ご夫婦とテレビなど)



*1 RIC型・耳かけ型とInsio IXツインマイク器種(ワイヤレス機能あり)の7/5/3クラス、両耳装着時に「スピーチロックオン」対応

*2 2025年6月、WSオーディオロジーグループ調べ *3 2025年8月、WSオーディオロジーグループ調べ。騒音下ワンマイク指向性2.0機能有無で比較した場合

*画像は聞こえのイメージです

こんな方におすすめ
旅行や習い事など様々な場面で
快適に使用したい方



大人数での会話やお出かけ先
でも楽に使用したい方




外食や騒がしい場所での
会話も楽しみたい方



※充電器/充電ケースは39、40ページ、カラーは51、52ページをご覧ください ※補聴器は非課税です **TRI** は38ページをご覧ください

タイプ	充電式										
	RIC型		耳かけ型		既製耳あな型	オーダーメイド耳あな型					
器種	ピュア チャージ&ゴー ビーシーティー Pure Charge&Go BCT IX NEW		ピュア チャージ&ゴー Pure Charge&Go IX		スタイレット Styletto IX	モーション チャージ&ゴー Motion Charge&Go IX NEW	シルク チャージ&ゴー Silk Charge&Go IX	インシオ チャージ&ゴー Insio Charge&Go IX NEW			
使用時間	約54時間		約28時間		約20時間	約36時間	約35時間	約70時間	約28時間	約34時間	
適応聴力	S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB		S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB		S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB ※モールド付きHPLシーバー非対応	チューブ: ~70dB イヤフック: ~90dB	チューブ: ~80dB イヤフック: ~100dB	イヤフック: ~110dB	軽 中 ノーマル: 114/50 ~70dB	軽 中 高 ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/60 ~90dB	
販売名と 認証番号	補聴器 IXシリーズ 認証番号: 305AABZX00049000		補聴器 IXシリーズ 認証番号: 305AABZX00049000		補聴器 IXシリーズ 認証番号: 305AABZX00049000	補聴器 Silk IX 認証番号: 305AABZX00043000	補聴器 IXシリーズ カスタム 認証番号: 306AABZX00015000	補聴器 IXシリーズ カスタム 認証番号: 306AABZX00015000	補聴器 IXシリーズ カスタム 認証番号: 306AABZX00015000	補聴器 IXシリーズ カスタム 認証番号: 306AABZX00015000	
7IX	両耳 ¥1,304,000*2	片耳 ¥674,000*2	両耳 ¥1,264,000*2		片耳 ¥654,000*2	両耳 ¥864,000*2		片耳 ¥454,000*2	両耳 ¥1,220,000		片耳 ¥610,000
5IX	両耳 ¥884,000*2	片耳 ¥464,000*2	両耳 ¥864,000*2		片耳 ¥454,000*2	両耳 ¥584,000*2		片耳 ¥314,000*2	両耳 ¥820,000		片耳 ¥410,000
3IX	両耳 ¥604,000*2	片耳 ¥324,000*2	両耳 ¥584,000*2		片耳 ¥314,000*2	両耳 ¥540,000		片耳 ¥270,000	両耳 ¥540,000		片耳 ¥270,000

電池式					
オーダーメイド耳あな型					
インシオ Insio IX					
極小 アイアイシー IIC	小型 シーアイシー CIC	標準のサイズ アイティーシー ITC	標準のサイズ・多機能 アイティーシー ツイン ITC TWIN	大きめ・多機能 アイティーイー ツイン ITE TWIN	
10A 約90時間		312 約145時間			
軽 中 ノーマル: 113/50 ~70dB	軽 中 高 ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/60 ~90dB	軽 中 高 ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/60 ~90dB	軽 中 高 ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/60 ~90dB	軽 中 高 パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/60 ~90dB	
補聴器 IXシリーズ カスタム 認証番号: 306AABZX00015000					
両耳 ¥1,220,000		片耳 ¥610,000			
両耳 ¥820,000		片耳 ¥410,000			
両耳 ¥540,000		片耳 ¥270,000			

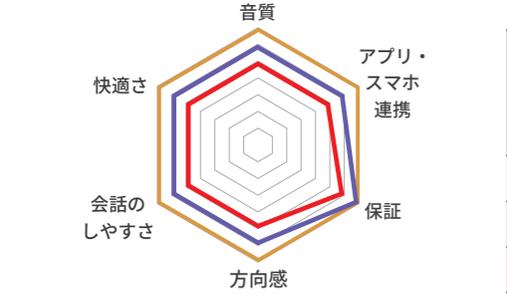

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋外	屋内・集会所	騒がしい場所での複数人の会話	買い物・リハビリ施設	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	デイサービス・病院	車・電車	超高音質
	チャンネル	Bluetooth	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー 超広角センサー	風雑音抑制	突発音抑制	ロックオン*7 ワードロックオン	Xセンサー モーションセンサー	OVP2.0 (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス	12kHz帯域対応
7IX	48ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5IX	36ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3IX	32ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

コーティング

防水・防塵 IP68

ナノコートで撥水

ナノコートで清潔

安心保証

7IX/5IX

3年修理保証

スマートリペア

2年紛失保証

3IX

2年修理保証

スマートリペア

1年紛失保証

詳しくは裏表紙に記載

*1 モールド付きHPLシーバー、チューブは別途費用がかかります。詳しくは45ページをご覧ください *2 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器はご確認ください *7 詳細は29、30ページをご覧ください *8 Insio Charge&Go IX、Silk Charge&Go IX非対応。Insio IXのシングルマイク器種またはノンワイヤレスを選択した場合非対応 *9 Silk Charge&Go IX、Insio Charge&Go IXは両耳装着で対応。Insio IXのシングルマイク器種はワイヤレス機能あり(標準)の場合両耳装着で対応、ノンワイヤレスを選択した場合非対応 *10 シングルマイク器種非対応 *11 7クラスは、反響音抑制機能が自動で働く。5クラスは手動でプログラム切替が必要 *12 Motion Charge&Go SP IX非対応 *13 Motion Charge&Go SP IXの7クラスは36ch

こんな方におすすめ
外出先でも快適に使用したい方

自宅中心で使用する方

コーティング

防水・防塵 IP68
RIC型・耳かけ型

ナノコートで撥水
防水・防塵 IP68
充電式耳あな型

ナノコートで清潔
防水・防塵 IP68
電池式耳あな型

安心保証

2年修理保証 + スマートリペア
保証期間以降も安心

詳しくは裏表紙に記載


TRT は38ページをご覧ください

※充電器/充電ケースは39、40ページ、カラーは51、52ページをご覧ください ※補聴器は非課税です TRT は38ページをご覧ください

タイプ	充電式													
器種	RIC型		耳かけ型			既製耳あな型	オーダーメイド耳あな型							
	Pure Charge&Go BCT IX ピュア チャージ&ゴー ビーシーティー NEW		Pure Charge&Go IX ピュア チャージ&ゴー		Styletto IX スタイルレット		Motion Charge&Go IX モーション チャージ&ゴー NEW		Silk Charge&Go IX シルク チャージ&ゴー		Insio Charge&Go IX インシオ チャージ&ゴー NEW			
使用時間	約54時間		約28時間		約20時間		約36時間		約35時間		約70時間			
適応聴力	軽 中 高 重 S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB		軽 中 高 重 S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB		軽 中 高 S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB ※モールド付きHPLシーバー非対応		軽 中 高 チューブ: ~70dB イヤフック: ~90dB		中 高 重 チューブ: ~80dB イヤフック: ~100dB		軽 中 ノーマル: 114/50 ~70dB		軽 中 高 ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/60 ~90dB	
販売名と認証番号			補聴器 IXシリーズ 認証番号: 305AABZX00049000					補聴器 Silk IX 認証番号: 305AABZX00043000		補聴器 IXシリーズ カスタム 認証番号: 306AABZX00015000				

電池式				
オーダーメイド耳あな型				
Insio IX インシオ				
極小 アイアイシー IIC	小型 シーアイシー CIC	標準的サイズ アイティーシー ITC	標準的サイズ・多機能 アイティーシー ツイン ITC TWIN	大きめ・多機能 アイティーイー ツイン ITE TWIN
10A 約90時間		312 約145時間		
軽 中 ノーマル: 113/50 ~70dB	軽 中 高 ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/60 ~90dB	軽 中 高 ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/60 ~90dB	軽 中 高 ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/60 ~90dB	軽 中 高 パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/60 ~90dB
補聴器 IXシリーズ カスタム 認証番号: 306AABZX00015000				

2IX	両耳 ¥504,000*2	片耳 ¥274,000*2	両耳 ¥484,000*2	片耳 ¥264,000*2
1IX	両耳 ¥404,000*2	片耳 ¥224,000*2	両耳 ¥384,000*2	片耳 ¥214,000*2

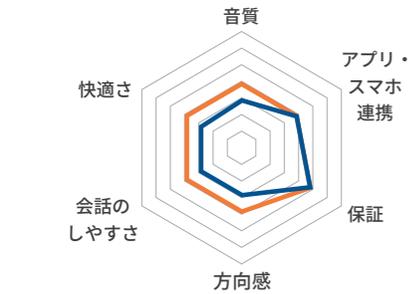

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋外	屋内・集会所	騒がしい場所での複数人の会話	買い物・リハビリ施設	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	デイサービス・病院	車・電車	超高音質
	チャンネル	*3*4*5 Bluetooth	*5*6 ダブルプロセッサー	*6 ライブサウンド	Xセンサー 超広角センサー	風雑音抑制	突発音抑制	ロックオン*7	Xセンサー	OVP (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応
2IX	24ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1IX	16ch	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

自分で簡単に補聴器の音を調節

【無料スマートフォンアプリ】

【リモコン】

miniPocket ¥22,000 (税込)

Signia app

※詳細は49、50ページをご確認ください

テレビや電話の音を楽しむ


【音声ストリーミング用周辺機器】

TVサウンド ¥33,880 (税込)

StreamLine Mic ¥55,000 (税込)

*1 モールド付きHPLシーバー、チューブは別途費用がかかります。詳しくは45ページをご確認ください *2 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります *3 TV視聴は別途TV Soundが必要 *4 スマートフォンとの接続は49、50ページをご確認ください *5 Silk Charge&Go IX、Insio Charge&Go IX、Insio IX非対応 *6 詳細は35、36ページをご確認ください *7 詳細は29、30ページをご確認ください

補聴器を選ぶ前に
ぜひおためし補聴器
IX シグニア
充電器
IX AXE
補聴器
その他
アプリ等
アクセサリ！
性能一覧
カラーバリエーション

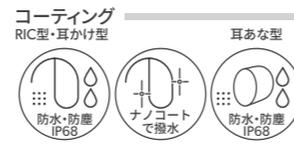

コーティング

安心保証



※充電器は 39、40ページ、カラーは51、52ページをご覧ください ※補聴器は非課税です


タイプ	充電式 RIC型	
器種	ピュア チャージ&ゴー Pure Charge&Go AX 	スタイルット Styletetto AX
使用時間	約28時間	約20時間
適応聴力	軽 中 高 重 S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB	軽 中 高 S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB ※モールド付きHPLシーバー非対応
販売名と認証番号	補聴器 AXシリーズ 認証番号: 303AABZX00052000	
7AX	両耳 ¥1,204,000*2 片耳 ¥624,000*2	
5AX	両耳 ¥824,000*2 片耳 ¥434,000*2	
3AX	両耳 ¥564,000*2 片耳 ¥304,000*2	
2AX	両耳 ¥464,000*2 片耳 ¥254,000*2	
1AX	両耳 ¥364,000*2 片耳 ¥204,000*2	

タイプ	電池式 RIC型
器種	ピュア Pure 312 AX
使用時間	312 約90~105時間
適応聴力	軽 中 高 重 S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB
販売名と認証番号	補聴器 AXシリーズ カスタム 認証番号: 303AABZX00075000
7AX	両耳 ¥1,160,000 片耳 ¥580,000
5AX	両耳 ¥780,000 片耳 ¥390,000
3AX	両耳 ¥520,000 片耳 ¥260,000
2AX	両耳 ¥420,000 片耳 ¥210,000
1AX	両耳 ¥320,000 片耳 ¥160,000

タイプ	充電式 オーダーメイド耳あな型	
器種	インシオ チャージ&ゴー Insio Charge&Go AX 	
使用時間	約28時間	約28時間
適応聴力	軽 中 高 ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/65 ~90dB	軽 中 高 パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/65 ~90dB
販売名と認証番号	補聴器 AXシリーズ カスタム 認証番号: 303AABZX00075000	
7AX	両耳 ¥1,204,000*2 片耳 ¥624,000*2	
5AX	両耳 ¥824,000*2 片耳 ¥434,000*2	
3AX	両耳 ¥564,000*2 片耳 ¥304,000*2	
2AX	両耳 ¥464,000*2 片耳 ¥254,000*2	
1AX	両耳 ¥364,000*2 片耳 ¥204,000*2	

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋外	屋内・集会所	騒がしい場所での複数人の会話	買い物・リハビリ施設	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	デイサービス・病院	車・電車	超高音質
	チャンネル	Bluetooth	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー	風雑音抑制	突発音抑制	ロックオン	Xセンサー	OVP	ビーム指向性	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360°	12kHz帯域対応
7AX	48ch	●	●	● プラス	●	●	●	—	—	●	●	●	●	● 自動	—	●
5AX	32ch	●	●	● プラス	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—
3AX	24ch	●	●	● プラス	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—
2AX	16ch	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1AX	16ch	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 モールド付きHPLシーバー、チューブは別途費用がかかります。詳しくは45ページをご確認ください *2 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります *3 Bluetooth搭載器種のTV視聴は別途TV Soundが必要 *4 スマートフォンとの接続について、詳しくは49、50ページをご確認ください *5 7/5/3クラスは、より進化したライブサウンドプラスを搭載。詳しくは35ページをご確認ください *6 Insio Charge&Go AXはOVP機能非対応

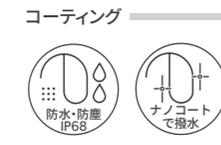

安心保証



詳しくは裏表紙に記載

タイプ	電池式 耳かけ型		
器種	インテイス Intuis4 M 	インテイス Intuis4 P 	インテイス Intuis4 SP
使用時間	13 約160時間	13 約135時間	675 約285時間
適応聴力	軽 中 高 チューブ: ~70dB イヤフック: ~90dB	中 高 重 チューブ: ~80dB イヤフック: ~100dB	中 高 重 イヤフック: ~110dB
販売名と認証番号	補聴器 Intuis4 認証番号: 305AABZX00001000		
Intuis4.2	両耳 ¥420,000 片耳 ¥210,000		
Intuis4.1	両耳 ¥320,000 片耳 ¥160,000		
Intuis4.0	両耳 ¥220,000 片耳 ¥110,000		

搭載機能	きめ細かい聞こえ	グループ活動	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	テレビ・スマホ	屋外	屋内・集会所
	チャンネル	Xセンサー	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Bluetooth	風雑音抑制	突発音抑制
Intuis4.2	16ch	★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★
Intuis4.1	16ch	★★	★★	★★	★★★	—	—
Intuis4.0	12ch	★	★	★	—	—	—

*7 Intuis 4.2/4.1 は Signia AXシリーズ 2AX/1AXと同じ性能・機能を有しています *8 Intuis4.2/4.1のみBluetooth搭載。Bluetooth搭載器種のTV視聴は別途TV Soundが必要。スマートフォンとの接続について、詳しくは49、50ページをご確認ください

TRT IX Signia IX、Signia AX、
Signia Xperience、Signia Nx

primax、Intuis4は耳鳴り治療器機能を搭載
※各シリーズの1クラスはTRT機能非搭載、Intuis4は4.2のみTRT機能搭載

8割の方に効果があつたと報告されている* TRT(耳鳴り再訓練法)用の治療音(音響的ノイズ)を発生させることができます。
※耳鳴りの治療及び本機能の使用については、必ず先に耳鼻科専門医にご相談ください。
※TRT: Tinnitus Retraining Therapy
* 関谷芳正、松田太志、高橋真理子他、耳鳴りに対する新しい治療法・TRT(療法)耳鼻臨床95:6;639~646、2002

補聴器を遠く前に

充電器

IX AX用

充電器

補聴器

アクセサリ!

性能一覧 カラーバリエーション



充電器の使い方は
シグニア公式YouTube
チャンネルの動画を
ご確認ください



充電器の種類	選べる充電器		選べる充電器		選べる充電器		選べる充電器		選べる充電器	
	<p>持ち運びタイプ</p> <p>ポータブル充電ケース (幅66mm×奥行33mm×高さ76mm)</p>	<p>据え置きタイプ</p> <p>ドライ&クリーン充電器 (幅83mm×奥行82mm×高さ88mm)</p>	<p>持ち運びタイプ</p> <p>Qi規格対応ポータブル充電ケース (幅50mm×奥行30mm×高さ71mm)</p>	<p>据え置きタイプ</p> <p>ドライ&クリーン充電器 (幅83mm×奥行82mm×高さ88mm)</p>	<p>据え置きタイプ</p> <p>M用シンプル充電器 (幅62mm×奥行32mm×高さ44mm)</p>	<p>据え置きタイプ</p> <p>P,SP用ドライ&クリーン充電器 (幅83mm×奥行82mm×高さ88mm)</p>	<p>持ち運びタイプ</p> <p>Qi規格対応ポータブル充電ケース (幅82mm×奥行48mm×高さ29mm)</p>	<p>持ち運びタイプ</p> <p>Qi規格対応ポータブル充電ケース (幅72mm×奥行34mm×高さ54mm)</p>	<p>据え置きタイプ</p> <p>充電器 (幅118mm×奥行79mm×高さ45mm)</p>	<p>据え置きタイプ</p> <p>充電器 (幅118mm×奥行79mm×高さ45mm)</p>

イヤーマールド収納	△	○	△	○	○	—	—	—
<p>クリックモールド(アクリル製)の クリックサイズのみ対応 HPモールド、クリックモールド3.0 シリコンは非対応</p>	<p>イヤーマールド全サイズに対応</p>	<p>クリックモールド(アクリル製)の クリックサイズのみ対応 クリックモールド3.0シリコンは非対応</p>	<p>イヤーマールド全サイズに対応</p>	<p>イヤーマールド全サイズに対応</p>	<p>イヤーマールド全サイズに対応</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>

充電・使用時間の目安*1	ポータブル充電ケースの充電			ポータブル充電ケースの充電			補聴器の充電			ポータブル充電ケースの充電			ポータブル充電ケースの充電			補聴器の充電				
	器種	充電所要時間*2	充電可能回数	器種	USB充電所要時間	ワイヤレス充電所要時間*2	充電可能回数	器種	30分スピード充電使用可能時間	フル充電所要時間	フル充電使用可能時間	USB充電所要時間	ワイヤレス充電所要時間*2	充電可能回数	USB充電所要時間	ワイヤレス充電所要時間*2	充電可能回数	30分スピード充電使用可能時間	フル充電所要時間	フル充電使用可能時間
	Pure Charge&Go BCT IX	4時間	両耳3回充電可能	Styletto IX	3時間	6時間	両耳5回充電可能	M	6時間	4時間	36時間	4時間	6時間	両耳4回充電可能	4時間	6時間	両耳3回充電可能	6時間	4時間	28時間
	Pure Charge&Go IX	4時間	両耳4回充電可能	Styletto AX	3時間	6時間	両耳4回充電可能	P	6時間	4時間	35時間	30分スピード充電使用可能時間	フル充電所要時間	フル充電使用可能時間	30分スピード充電使用可能時間	フル充電所要時間	フル充電使用可能時間	9時間	4時間	34時間
Pure Charge&Go AX	4時間	両耳4回充電可能					SP	6時間	4時間	70時間	6時間	4時間	28時間	9時間	4時間	34時間				

*1 Bluetooth機能を利用して音楽等を聞く場合(ストリーミング)、使用可能時間はより短くなります
*2 市販のQi規格対応の充電パッドをご使用ください。充電パッドをご使用の場合、ケースの充電時間の目安は6時間ですが、ご使用の充電パッドの種類により異なる場合があります

※故障や事故を避けるため、充電する際には必ず当社提供の純正充電器・ケーブル・アダプターをご使用ください

補聴器を選ぶ前に
必ずお読みください
IX AX
充電器
補聴器
その他
アプリ等
アクセサリ！
性能一覧
カラーバリエーション

その他の補聴器

コーティング

Signia Xperience Signia Nx primax TRT

防水・防塵 IP68 ナノコートで撥水 ナノコートで清潔 8COLORS

防水・防塵 IP57 ナノコートで清潔 8COLORS

詳しくは38ページをご覧ください

安心保証

Signia Xperience Signia Nx 7クラス 5クラス 3年 修理保証 + スマートリペア 保証期間以降も安心 2年 紛失保証

3クラス 2クラス 1クラス 2年 修理保証 + スマートリペア 保証期間以降も安心 1年 紛失保証

primax 2年 修理保証 + スマートリペア 保証期間以降も安心 1年 紛失保証

詳しくは裏表紙に記載

Signia Xperience 2026年3月末販売終了予定

補聴器 Xシリーズ 認証番号:302ABBZX00067000

7/5/3クラス対応 充電式耳かけ型 モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go X

2/1クラス対応 充電式パワータイプ モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go PX

充電式スーパーパワー モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go SP X

適応聴力	軽 中 高 チューブ: ~70dB イヤフック: ~90dB	中 高 重 チューブ: ~80dB イヤフック: ~100dB	中 高 重 イヤフック: ~110dB
------	--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋外	屋内・集会所	騒がしい場所での複数人の会話		買い物・リハビリ施設	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	デイサービス・病院	車・電車	超高音質	価格		
								ロックオン	Xセンサー									両耳	片耳	
チャンネル	Bluetooth	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー 超広角センサー	風雑音抑制	突発音抑制	ワードロックオン	スピーチロックオン	モーションセンサー	OVP (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応	両耳	片耳		
7X	48ch ^{*3}	●	—	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	両耳 ¥1,064,000 ^{*2} 片耳 ¥554,000 ^{*2}
5X	32ch	●	—	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	両耳 ¥764,000 ^{*2} 片耳 ¥404,000 ^{*2}
3X	24ch	●	—	—	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	両耳 ¥544,000 ^{*2} 片耳 ¥294,000 ^{*2}
2X	16ch	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	両耳 ¥444,000 ^{*2} 片耳 ¥244,000 ^{*2}
1X	16ch	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	両耳 ¥304,000 ^{*2} 片耳 ¥174,000 ^{*2}

*1 Bluetooth搭載機種のみ対応。TV視聴には別途TV Soundが必要になります。 iPhoneは直接音声ストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは別途StreamLine Micが必要になります *2 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時購入の場合は、充電器は1台となります *3 Motion Charge&Go SP Xの7クラスは34ch *4 Motion Charge&Go SP Xの7クラスは非対応 *5 チューブは別途費用がかかります。詳しくは45ページをご覧ください

Signia Nx 2026年3月末販売終了予定

インシオ 補聴器 Nxシリーズ カスタム 認証番号:230ABBZX00058000

最小 アイアイシー IIC

小型 シーアイシー CIC

スタイリッシュ耳あな型 クール COOL

耳あな型の定番 アイティーシー ITC

耳あな型の定番 アイティーシー ツイン ITC TWIN

大きめに耳に収まる アイティーイー ツイン ITE TWIN

適応聴力	軽 中 高 ノーマル:113/50~70dB	軽 中 高 ノーマル:113/50~70dB パワー:118/55~80dB ハイパワー:124/65~90dB	軽 中 高 ノーマル:113/50~70dB パワー:118/55~80dB	軽 中 高 ノーマル:113/50~70dB パワー:118/55~80dB ハイパワー:124/65~90dB	軽 中 高 ノーマル:118/55~80dB ハイパワー:124/65~90dB
------	---------------------------	---	--	---	--

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋外	屋内・集会所	騒がしい場所での複数人の会話		買い物・リハビリ施設	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	デイサービス・病院	車・電車	超高音質	価格		
								ロックオン	Xセンサー									両耳	片耳	
チャンネル	Bluetooth	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー 超広角センサー	風雑音抑制	突発音抑制	ワードロックオン	スピーチロックオン	モーションセンサー	OVP (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応	両耳	片耳		
7Nx	48ch	●	—	—	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	両耳 ¥1,020,000 片耳 ¥510,000	
5Nx	32ch	●	—	—	●	●	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	両耳 ¥580,000 片耳 ¥290,000
3Nx	24ch	●	—	—	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	両耳 ¥440,000 片耳 ¥220,000
2Nx	16ch	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	両耳 ¥360,000 片耳 ¥180,000
1Nx	16ch	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	両耳 ¥240,000 片耳 ¥120,000

*1 Bluetooth搭載機種のみ対応。TV視聴には別途TV Soundが必要になります。 iPhoneは直接音声ストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは別途StreamLine Micが必要 *2 ITC TWIN, ITE TWINに対応 *3 ITC TWIN, ITE TWINに対応。IIC, CIC, COOL, ITCは両耳装着で対応

primax 2026年3月末販売終了予定

インシオ 補聴器 primaxシリーズ カスタム 認証番号:228ABBZX00060000

小型 シーアイシー CIC / CIC 312

幅広い聴力に対応 エムシー MC / MC 312

スタイリッシュ耳あな型 クール COOL / COOL 13

耳あな型の定番 アイティーイー ITC / ITC TWIN

大きめに電池長持ち アイティーイー ITE / ITE TWIN

適応聴力	軽 中 高 ノーマル:113/50~70dB	軽 中 高 ノーマル:113/50~70dB パワー:118/55~80dB ハイパワー:124/65~90dB	軽 中 高 ノーマル:113/50~70dB パワー:118/55~80dB	軽 中 高 ノーマル:113/50~70dB パワー:118/55~80dB ハイパワー:124/65~90dB	軽 中 高 ノーマル:118/55~80dB ハイパワー:124/65~90dB
------	---------------------------	---	--	---	--

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	グループ活動	屋外	屋内・集会所	騒がしい場所での複数人の会話		買い物・リハビリ施設	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	デイサービス・病院	車・電車	超高音質	価格		
								ロックオン	Xセンサー									両耳	片耳	
チャンネル	Bluetooth	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	Xセンサー 超広角センサー	風雑音抑制	突発音抑制	ワードロックオン	スピーチロックオン	モーションセンサー	OVP (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応	両耳	片耳		
7px	48ch	—	—	—	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	両耳 ¥1,020,000 片耳 ¥510,000	
5px	32ch	—	—	—	●	●	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	両耳 ¥620,000 片耳 ¥310,000
3px	24ch	—	—	—	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	両耳 ¥440,000 片耳 ¥220,000
2px	16ch	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	両耳 ¥360,000 片耳 ¥180,000
1px	16ch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	両耳 ¥280,000 片耳 ¥140,000

*1 ITC TWIN, ITE TWINに対応 *2 MC/MC 312(クラス両耳装着)、ITC TWIN, ITE TWINに対応 *3 シングルマイク機種には非搭載 *4 COOL13はパワーのみ対応

補聴器を選ぶ前に

必ずお読みください

Signia Nx

Signia X

充電式補聴器

その他

アクセサリ

カラーバリエーション

その他の補聴器

インテイス Intuis3



製品名	適応聴力	チャンネル数	価格	電池
RIC型	S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP*:~100dB	12ch	両耳 ¥180,000 片耳 ¥90,000	312
ミニ耳かけ型S	チューブ*:~50dB イヤフック:~65dB			13
耳かけ型M	チューブ*:~65dB イヤフック:~85dB			13
耳かけ型P	イヤフック:~100dB			675
耳かけ型SP	イヤフック:~110dB		¥220,000 ¥110,000	13
販売名	補聴器 Intuis3 認証番号:229ABBZX0070000			
製品名	適応聴力	チャンネル数	価格	電池
CIC	ノーマル:113/50~70dB	12ch	両耳 ¥220,000 片耳 ¥110,000	10A
CIC 312	ノーマル:113/50~70dB			312
MC	ノーマル:113/50~70dB			10A
MC 312	ノーマル:113/50~70dB パワー:118/55~80dB			312
ITE	ハイパワー:124/65~90dB			13
販売名	補聴器 Intuis3 カスタム 認証番号:229ABBZX0092000			

2026年3月末販売終了予定

機能 — 安心保証

2年修理保証 + スマートリペア

Signia app ※詳しくは裏表紙に記載

コーティング・カラー

防水・防塵 IP67

ナノコートで撥水

ナノコートで清潔

SCOLORS

(P・SP除く)

CROS・BiCROS 補聴システム


CROS・BiCROS システムの仕組み

CROS・BiCROSシステムは一側性難聴の方をサポート。聞き取りができない耳にCROSを装着すると、聞こえる耳に装着した補聴器で左右両側の音を聞くことが可能。

CROS送信器なし



CROS送信器あり

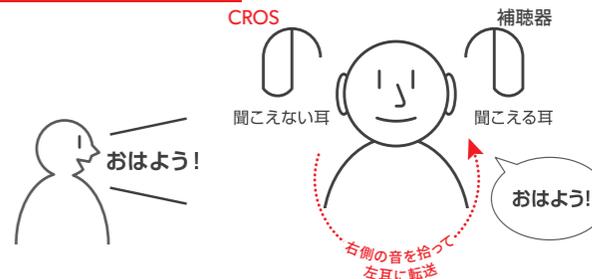

※CROS・BiCROSシステムを使用する場合、スピーチブーストとSignia Assistantは利用不可

器種	IX Signia IX シグニアIX	IX Signia IX シグニアIX	Signia AX
対象器種	Silk Charge&Go IX Insio Charge&Go IX Insio IX (IIC/CIC/ITC/ITC TWIN/ITE TWIN)	Pure Charge&Go IX Motion Charge&Go M IX Motion Charge&Go P IX Motion Charge&Go SP IX Pure Charge&Go BCT IX非対応	Pure Charge&Go AX Pure 312 AX Insio Charge&Go AX Intuis4 Intuis4.2 Intuis4.1 Intuis4.0はCROS非対応
対応クラス	7IX 5IX 3IX 2IX 1IX	7IX 5IX 3IX 2IX 1IX	7AX 5AX 3AX 2AX 1AX
販売名	CROS Silk Charge&Go IX	CROS Pure Charge&Go IX	CROS Pure Charge&Go AX
価格(税込)	¥110,000 ^{*1} (充電器を除く)	¥110,000 ^{*1} (充電器を除く)	¥110,000 ^{*1} (充電器を除く)
使用電池 電池寿命(連続使用)	充電 約28時間	充電 約28時間	充電 約28時間

プロンプト Prompt 基本性能を備えた補聴器

機能 — コーティング・カラー — 安心保証

2年修理保証 + スマートリペア

Signia app (Sのみ)

Lifeチューブ (Sのみ)(別売) ● ツインマイク

● プッシュボタン ● ボリューム付 (MPのみ)

2026年3月末販売終了予定

製品名	適応聴力	チャンネル数	価格	電池
S	チューブ:~50dB イヤフック:~65dB	8ch	両耳 ¥100,000 片耳 ¥50,000	312
MP	~100dB			13
販売名	補聴器 Prompt 認証番号:228ABBZX00126000			

*Prompt MPの本体刻印はPrompt Pです

カラーバリエーション	ベージュ	グレー	ブラウン	ディープブラウン
プロンプト Prompt S		*1	*1	—
プロンプト Prompt MP			—	

MPのみ、ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です。
*1 ダークグラナイトとの2トーンカラーとなります

ファン Fun 簡易デジタル補聴器

コーティング・カラー — 安心保証

2年修理保証 + スマートリペア

ナノコートで撥水

● ボリューム付 ● 4つのプリセットプログラム

● ピーピーしにくい

製品名	適応聴力	チャンネル数	価格	電池
P	~90dB	6ch	片耳 ¥98,000	13
SP	~110dB			675
販売名	補聴器 Fun 認証番号:228ABBZX00138000			

*リモコンは非対応、プログラムは固定 ※補聴器は非課税です

カラーバリエーション	ベージュ	グレー	ディープブラウン
ファン Fun P			
ファン Fun SP			

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です

器種	Signia AX	Signia Xperience	Signia Xperience
対象器種	Pure Charge&Go AX Pure 312 AX Insio Charge&Go AX Intuis4 Intuis4.2 Intuis4.1 Intuis4.0はCROS非対応	Motion Charge&Go X Motion Charge&Go P X Motion Charge&Go SP X Pure Charge&Go X Pure 312 X	Motion Charge&Go X Motion Charge&Go P X Motion Charge&Go SP X Pure Charge&Go X Pure 312 X
対応クラス	7AX 5AX 3AX 2AX 1AX	7X 5X 3X	7X 5X 3X
販売名	CROS Pure 312 AX	CROS Pure Charge&Go X	CROS Pure 312 X
価格(税込)	¥99,000	¥110,000 ^{*1} (充電器を除く)	¥99,000
使用電池 電池寿命(連続使用)	312 約80時間	充電 約23時間	312 約60時間

*1 別売の充電器¥44,000(課税・税込)が必要です ※CROS各器種の保証期間は1年です

※カラーバリエーションは51,52ページをご確認ください

補聴器を選ぶ前に

おすすすめ補聴器

IX シグニアIX

Signia AX

充電器

その他

アクセサリ

カラーバリエーション

性能

アクセサリ・補修パーツ

RIC型・耳かけ型用

RIC型・耳かけ型は、レシーバーや耳せんの選択で適応聴力が変わります。あなたの聴力に合わせて最適なアクセサリを選びましょう。

RIC型用

ミニレシーバー使用の場合



Signia IX, Signia AXシリーズ用

1	3.0 ミニレシーバー	¥12,650	(1本 S/M/P)
2	ワックスガード3.0 ナノケア	¥1,210	(8個入り)
3	イヤチップ3.0/スリーブ3.0	¥2,420	(同サイズ6個入り)
4	クリックモールド3.0	¥10,500 (非課税)	(1個)
5	ワックスガード3.0 ナノケア	¥1,210	(8個入り)

上記シリーズ以外

1	2.0 ミニレシーバー	¥12,650	(1本 S/M/P)
2	ミニレシーバー用ワックスガード2	¥1,760	(8個入り)
3	クリックスリーブ2.0/クリックドーム	¥2,420	(同サイズ6個入り)
4	クリックモールド2.0	¥10,500 (非課税)	(1個)
5	クイックガード	¥1,210	(8個入り)

モールド付きHPLレシーバー(高～重度難聴向け)使用の場合

1 モールド付きHPLレシーバー

Signia IX, Signia AXシリーズ用

1	モールド付きHPLレシーバー-3	¥27,000 (非課税)	*1
2	セルストップ WG3.0 XL	¥550 (8個入り)	

上記シリーズ以外

1	モールド付きHPLレシーバー-2	¥27,000 (非課税)	*1
2	クイックガード	¥1,210 (8個入り)	

2 モールド用耳あかプロテクター

*1 モールド付きHPLレシーバーは補聴器と同時注文時のみ¥15,000(非課税)。作成するために耳型が必要。ポータブル充電ケースに非対応 *2 補聴器の器種やアクセサリの種類によって価格・数量が異なります。詳しくは販売店にご確認ください

耳かけ型用

イヤフック使用の場合



1	イヤフック(各種)	¥550	(1本)
2	サウンドチューブ	¥440~¥550*2	(1m)
3	エルボー	¥165	(1個)
4	イヤチップ	¥220~¥330*2	(1個)
5	イヤフック用モールド	¥9,500 (非課税)	(1個)

Thinチューブ(Lifeチューブ)使用の場合

※Thinチューブ(Lifeチューブ)は別途注文が必要



Motion IXシリーズ、Motion Xシリーズ、Intuis4シリーズ用

1	Thinチューブ3.0	¥1,100	(左右各1本入り)
2	ワックスガード3.0 ナノケア	¥1,210	(8個入り)
3	イヤチップ3.0/スリーブ3.0	¥2,420	(同サイズ6個入り)
4	Thinチューブ3.0用モールド	¥10,500 (非課税)	(1個)
5	ワックスガード3.0 ナノケア	¥1,210	(8個入り)

上記以外の耳かけ型

1	Lifeチューブ	¥1,650~¥3,300*2	
3	Lifeチップ	¥2,420	(同サイズ10個入り)

アクセサリ・補修パーツ

耳あな型用

既製耳あな型用



Signia IXシリーズ用



1	ワックスガード3.0ナノケア	¥1,210	(8個入り)
---	----------------	--------	--------

2	スリーブ3.0	¥2,420	(同サイズ6個入り)
---	---------	--------	------------

	XS 6~11mm	S 6~12mm	M 10~15mm	L 11~16mm
上から見た図				
ベント	穴2個			
クローズ	穴1個			
パワー	穴なし			

2	イヤチップ3.0	¥2,420	(同サイズ6個入り)
---	----------	--------	------------

5mm オープン	7mm オープン	10mm オープン
----------	----------	-----------



オーダーメイド耳あな型用



Signia IXシリーズ用



1	クイックガード	¥1,210	(8個入り/交換ツール入り)
---	---------	--------	----------------

上記以外のオーダーメイド耳あな型



1	クイックガード	¥1,210	(8個入り/交換ツール入り)
---	---------	--------	----------------

1	クリネットダイヤルパック	¥2,200	(16個入り交換ツール入り)
---	--------------	--------	----------------

※アクセサリの価格は非課税と記載しているもの以外はすべて税込価格です

補聴器を遠く前に
なごめる補聴器
IX AX用
充電器
その他
補聴器
その他
アクセサリ！
アプリ等
カラーバリエーション
性能一覧

RIC型・耳かけ型用 イヤモールド

耳の形に合わせて作るオーダーメイドの耳せん

- 聞こえに適した音質に調整が可能。
- 音漏れによるハウリング(ピーピー音)を防ぐ。
- 補聴器の脱落を防止し、安定した装着が可能。



※レシーバーとオーダーメイド耳せんが一体化のHPモールドは45ページをご確認ください

対応器種	RIC型用		耳かけ型用				適応聴力	特徴
	3.0ミニレシーバー用 2.0ミニレシーバー用	3.0ミニレシーバー用 (IX, AXのみ対応)	Thinチューブ3.0用	イヤフック用				
名称	クリックモールド*	クリックモールド 3.0シリコン	Thinチューブ3.0 モールド	硬質アクリル	軟質アクリル	ポップフィット		
素材	アクリル製	シリコン製	アクリル製	アクリル製	アクリル製	シリコン製		
色	クリア	クリア	クリア	クリア	クリア	17色		
形状	クリック/ カナル							● 軽 ● 中 最小サイズ、外から見える部分 が少ない
	カナルロック		—			—	—	● 軽 ● 中 クリック/カナルにストッパーが付いたもの クリック/カナルでは外れやすい人向け
	COOL		—			—	—	● 軽 ● 中 当社オリジナルのつけ心地重視 モデル
	ハーフシェル		—					● 軽 ● 中 外から見える部分をなるべく小さくし、 薄く削ったもの(旧カナルサイズ)
	スケルトン		—			—	—	● 軽 ● 中 ● 高 安定感に目立たなさをプラス
	スタンダード		—					● 軽 ● 中 ● 高 ● 重 安定感重視でハウリングしにくく、 高度以上の方に標準の形状
イヤモールド本体	¥10,500 (非課税)			¥9,500 (非課税)				
テグス加工料金	テグス標準装備 追加料金なし	テグス非対応	テグス標準装備 追加料金なし	¥1,000 (非課税)		テグス非対応		

RIC型用

- **クリックモールド*** (クリアのみ)
 ※クリックモールドはレシーバーの世代によって形状が異なり、互換性はありません
- **クリックモールド3.0シリコン** (クリアのみ)

耳かけ型用

- **Thinチューブ3.0モールド** (クリアのみ)
- **イヤフック用アクリル製イヤモールド** (クリアのみ)
- **イヤフック用ポップフィット** (17色)

クリアカラー	クリア	ローズ	ベージュ	ブラウン	トランスブルー	トランスグリーン	トランスパープル	トランスピンク
ビビッドカラー	ブルー	グリーン	パープル	ピンク	レッド	オレンジ	イエロー	ホワイト
								ブラック

ケアソリューション

補聴器は、毎日身につける体の一部だから、お手入れもしっかりと。

UV除菌・乾燥機

ドライキャップ UV2.1

¥8,800 (税込)

※写真は充電式補聴器Stylettoを入れて充電しながら乾燥しているイメージ

充電器ごとに入れて充電しながら除菌・乾燥できる!

対流エアフロー採用でしっかり乾燥。充電器ごとに入れて充電しながら乾燥・除菌ができる。様々なUV除菌可能な小物にも使える特大サイズ。本体サイズ: W127×H115×D127mm

2種類の運転モードから選択可能

夜寝る前に...
ドライ&クリーンモード
運転時間120分 (内4分UV除菌)

ちょっとした時間に...
クリーンモード
運転時間2分

対流エアフロー + UV除菌 99%

パーフェクトドライ ラックス

¥9,900 (税込)

特殊製法の四角形状UVランプが全方向から紫外線を照射し、補聴器をしっかりと除菌。ヒーター採用、30分間温風で急速乾燥。本体サイズ: W93×H48×D76mm

37°C + UV除菌 99%

運転時間30分 (内5分UV除菌)

37°C + UV除菌 99%

その他のお手入れ用品

補聴器乾燥カップ シリカゲル入

しっかり乾燥! 乾燥用の密閉式カップ。(大サイズ乾燥剤 1個付)

¥990 (税込) 1個

詰め替え用 乾燥シリカゲル

補聴器用大サイズ乾燥剤 (個包装)。補聴器乾燥カップ (別売) に入れて使用。

¥1,100 (税込) 2個入り

クリーニングシート

アルコール除菌で毎日きれいに。個包装だから外出時にも便利。

¥990 (税込) 30枚入り、個包装

スターターセット

初めてご利用の方に! 旅行にも便利。

[セット内容]

1. クリーニングシート	5枚
2. 補聴器乾燥カップ	1個
3. 乾燥シリカゲル(サイズ:小)	2個
4. 掃除用ブラシ	2種類 各1本

¥2,200 (税込)

補聴器を選ぶ前に

おすすすめ補聴器

IX シグニタIX

IX AX用

充電器用

補聴器用

その他

アクセサリ! アプリ等 カラーバリエーション、性能一覧

アプリ・リモコン・周辺機器

Signia appとお使いのスマートフォン等との接続可否はこちら



スマートフォン用アプリ Signia app

無料のスマートフォンアプリで、補聴器の音量上げ下げがずっと簡単に。先端技術と豊富な機能で、補聴器のある生活がもっと便利に。

らくらく音リモコン

ほとんどのシグニア補聴器*は、高周波数の音で補聴器をコントロールできます。補聴器の音量・音質調節や電池残量確認、プログラム変更等が可能です。

Signia appのインストール方法

- ①お使いのスマートフォンでApp Store/Playストアを開く
- ②検索ウィンドウに「シグニア」(または「signia」)と入力
- ③アプリをインストール



ご注意

必要なOSバージョンやスマートフォンの要件は各ストアのアプリインストールページの説明をご確認ください

※端末・OS要件を満たしていても、組み合わせによっては本アプリが正常に動作しない場合があります

※特にAndroid端末に関しては、端末の種類やOSバージョンなどによっては本アプリが正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください

※アプリの機能、画面デザインは予告なく変更されることがあります。新しい機能が追加されることがありますので、アプリを定期的にアップデートしてください



*Funを除く本カタログ記載のすべての機種対応

リモコン・周辺機器

ミニポケット
miniPocket
¥22,000 (税込)



●手元でかんたんに音量調節やプログラム切り替え

ストリームラインマイク
StreamLine Mic
¥55,000 (税込)



●相手の声が直接補聴器に届くリモートマイク。リモコンとしても使用可能

TVサウンド
TV Sound
¥33,880 (税込)



●テレビの音を直接補聴器に届け、テレビの音がより聞きやすく

スマートリモート
Smart Remote
¥22,000 (税込)



●primax シリーズ補聴器用のリモコン

各シリーズのアプリ・リモコン等の対応状況

Bluetooth搭載有無	シリーズ	Signia app	スピーチブースト	Signia Assistant	My WellBeing	miniPocket	Smart Remote	StreamLine Mic	TV Sound
Bluetooth 搭載器種	IX Signia IX シグニアIX Pure Charge&Go BCT IX	●	●	●	● 7/5/3クラスのみ対応	●	—	—	●
	IX Signia IX シグニアIX その他/Signia AX	●	●	●	● 7/5/3クラスのみ対応	●	—	●	●
	Signia Xperience Intuis4.2/Intuis4.1	●	●	●	—	●	—	●	●
Bluetooth 非搭載器種	Signia Nx	●	—	—	—	●	—	●	●
	IX Signia IX シグニアIX Signia Xperience Intuis4.0/Intuis3/Prompt	●	—	—	—	●	—	—	—
	primax	●	—	—	—	●	●	—	—

●注意 心臓ペースメーカーを使用している方は、リモコンを使用しないでください。スマートフォン専用アプリをご使用の場合、スマートフォンとの距離はスマートフォンの取扱説明書に従ってください

Bluetooth 搭載器種なら、さらに使える機能がいっぱい

※各機能の対応補聴器シリーズは右の表をご確認ください


AI 補聴器使用支援AIシステム *1 *2 Signia Assistant

使用者の好みを学習し、一人ひとりにぴったりの聞こえをサポート。Signia Assistantの質問に何度か答えることであなたに最適な調節に。



●スピーチブースト *1 (旧マスクモード)

ワンタップで騒がしい場所やマスク越しの会話がより聞き取りやすく。

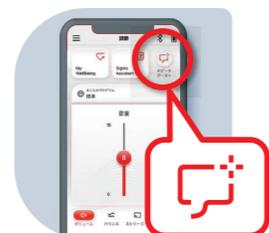

マイ ウェルビーイング ●My WellBeing

補聴器内蔵のモーションセンサーが体の動きを検知、Signia app内に活動量として表示。補聴器とSignia appをより積極的に使うことで、あなたの健康増進・QOL(生活の質)向上の一助となる機能。



*1 CROS/BiCROSシステムを使用する場合、スピーチブーストとSignia Assistantは利用不可

*2 Signia Assistantを使い始めるには、補聴器販売店で機能をONにする必要があります。補聴器を購入した販売店にご相談ください。

定期的に販売店で聴力に合わせて補聴器を調整することをお勧めします

*3 My Conversationsは両耳装着でOVP機能を有効にした場合のみ使用可能。OVP機能を利用できない耳あな型とCROSは非対応

各シリーズのスマートフォンとの連携機能

- ダイレクトストリーミング：スマートフォン等端末の通話音声や動画・音楽の再生音を補聴器に直接ストリーミングして聞くことができる
- ハンズフリー通話：相手の声は補聴器から聞こえ、あなたの声は補聴器マイクが拾うことで、スマートフォンを手に持たず通話可能
- コールコントロール：補聴器をタップする / ボタンを押すといった操作で、スマートフォンに触らずに電話に出る / 切ることができる

Bluetooth 搭載有無	シリーズ	Androidスマートフォン							
		iPhone iPhone 11以上かつOS 15.2以上		Bluetooth LE Audio対応		ASHA対応かつ Android OS 11以上		その他	
		ダイレクト ストリーミング	ハンズフリー通話 コールコントロール	ダイレクト ストリーミング	ハンズフリー通話 コールコントロール	ダイレクト ストリーミング	ハンズフリー通話 コールコントロール	ダイレクト ストリーミング	ハンズフリー通話 コールコントロール
Bluetooth 搭載器種	IX Signia IX シグニアIX Pure Charge&Go BCT IX	●	●	●	●	●	●	●	●
	IX Signia IX シグニアIX その他	●	●	●	●	—	—	StreamLine Mic が必要	—
	Signia AX	●	7/5/3クラスのみ	StreamLine Mic が必要	—	—	—	StreamLine Mic が必要	—
	Signia Xperience Signia Nx	●	—	StreamLine Mic が必要	—	StreamLine Mic が必要	—	StreamLine Mic が必要	—
	Intuis4.1/Intuis4.2	●	—	StreamLine Mic が必要	—	●	—	StreamLine Mic が必要	—
Bluetooth 非搭載器種	全シリーズ	—	—	—	—	—	—	—	—

Bluetooth LE Audio/ASHA
対応のAndroid端末
お持ちの方へ

端末のメーカーが定める仕様や搭載OSバージョンにより、表に記載している補聴器との連携機能を利用できない場合があります。お使いのスマートフォンとの接続はこちらも併わせてご確認ください



カラーバリエーション

製品のカラーは動画でご確認いただけます
※一部器種を除く



RIC型・耳かけ型

IX Signia IX シグニアIX

Pure Charge&Go BCT IX
Pure Charge&Go IX
CROS Pure Charge&Go IX

Signia AX

Pure Charge&Go AX
Pure 312 AX
CROS Pure Charge&Go AX
CROS Pure 312 AX

表面質感

A: 全体がサラサラした触感のツヤ無し
B: 全体がツルツルとした鏡面仕上げ
C: ボディはサラサラした触感のツヤ無し
ボタン部分はツルツルの鏡面仕上げ



※実寸大



補聴器ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)で可能です。CROS送信器ご購入後のカラー変更は¥9,900(税込)で可能です。※写真はPure Charge&Go IXです

IX Signia IX シグニアIX

Styletto IX

Signia AX

Styletto AX

表面質感

A: 全体がサラサラした触感のツヤ無し
B: ボディはサラサラした触感のツヤ無し
メタル部分はツルツルの鏡面仕上げ



※実寸大



Stylettoは購入後のカラー変更はできません。

7AX、5AX、3AXのみ



ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)で可能です。 ※写真はMotion Charge&Go M IXです



ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)で可能です。 ※写真はIntuis4 Mです



ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)で可能です。 ※写真はMotion Charge&Go Xです



ご購入後のカラー変更が¥9,900(税込)で可能です。 ※写真はCROS Pure Charge&Go Xです

既製耳あな型



オーダーメイド耳あな型

フェイスプレート
(外から見える部分)



シェル
(耳の中に入れる部分)

IX Signia IX シグニアIX	フェイスプレート・シェル同色
Insio Charge&Go IX	 ブラック
Signia AX	フェイスプレート・シェル同色
Insio Charge&Go AX	 ブラック ベージュ

IX Signia IX シグニアIX	フェイスプレート	シェル
IIC	 ブラック	 モカ スケルトンレッド スケルトンブルー ブラック
CIC	 ブラック	 モカ スケルトンレッド スケルトンブルー ベージュ ブラック
Insio IX	 ブラック	 スケルトンレッド スケルトンブルー
ITC	 ブラック	 スケルトンレッド スケルトンブルー
ITC TWIN	 ベージュ	 ベージュ ブラック
ITE TWIN	 ベージュ	 ベージュ ブラック

※写真はInsio IX ITCです

その他のオーダーメイド耳あな型

フェイスプレート										シェル					
Signia Nx	ベージュ	モカ	ブラック	primax	ベージュ	モカ	ブラック	Intuis3	ベージュ	モカ	ブラック	シェルカラーはSignia Nx、primax、Intuis3の3シリーズ共通			
IIC	—	—		CIC	—			CIC	—		—				
CIC	—		—	CIC 312	—	—	—	CIC 312		—	—				
COOL		—		MC	—		—	MC	—		—				
ITC		—	—	MC 312		—	—	MC 312		—	—				
ITC TWIN		—	—	COOL		—		ITC		—	—				
ITE TWIN		—	—	COOL13		—	—	ITE		—	—				
				ITC/ITC TWIN		—	—	ITE		—	—				
				ITE/ITE TWIN		—	—								

* 2px、1pxは選択不可(モカのみ)

補聴器を選ぶ前に

お悩みを解決する補聴器

IX Signia IX シグニアIX

Signia AX

IX AX 充電器

補聴器

アクセサリ

性能一覧 カラーバリエーション

性能一覧 RIC型・耳かけ型

※このデータはJIS C 5512:2015(2cmカブラで測定)で表示しています
 ※仕様は予告なく変更される場合があります ※数値は代表的な仕様によるものです

形式		性能					プログラム	リモコン・アプリ ^{*2}	適応聴力(平均dBまで)	使用電池	電池寿命(連続使用)(h) ^{*3}
シリーズ	タイプ	最大音響利得(dB)		90dB入力最大出力音圧レベル(dB)		誘導コイル感度(dB)					
		HFA-FOG(±5dB以内)	最大値(+3dB以下)	HFA-OSPL90(±4dB以内)	最大値(+3dB以下)	HFA-MASL(±6dB以内)					
Styletto IX(S/M/P)		38 / 51 / 61	46 / 60 / 65	102 / 115 / 120	110 / 119 / 122	—		mP、app	60 / 75 / 90		約20
Pure IX	Pure Charge&Go BCT IX(S/M/P/HP)	38 / 51 / 61 / 69	46 / 60 / 65 / 75	102 / 115 / 120 / 124	110 / 119 / 122 / 131	68 / 83 / 85 / 94		本体、mP、app	60 / 75 / 90 / 100		約54
	Pure Charge&Go IX(S/M/P/HP)	38 / 51 / 61 / 69	46 / 60 / 65 / 75	102 / 115 / 120 / 124	110 / 119 / 122 / 131	—		本体、mP、app	60 / 75 / 90 / 100		約28
Motion IX	Motion Charge&Go M IX	53(50) ^{*1}	60(60) ^{*1}	125(116) ^{*1}	133(125) ^{*1}	83(75) ^{*1}		本体、mP、app	90(70) ^{*1}		約36
	Motion Charge&Go P IX	71(56) ^{*1}	77(66) ^{*1}	130(118) ^{*1}	135(131) ^{*1}	101(85) ^{*1}		本体、mP、app	100(80) ^{*1}		約35
	Motion Charge&Go SP IX	73	82	132	140	104		本体、mP、app	110		約70
Styletto AX(S/M/P)		38 / 51 / 61	46 / 60 / 65	102 / 115 / 120	110 / 119 / 122	—		mP、app	60 / 75 / 90		約20
Pure AX	Pure Charge&Go AX(S/M/P/HP)	38 / 51 / 61 / 69	46 / 60 / 65 / 75	102 / 115 / 120 / 124	110 / 119 / 122 / 131	—		本体、mP、app	60 / 75 / 90 / 100		約28
	Pure 312 AX(S/M/P/HP)	38 / 51 / 59 / 67	46 / 58 / 63 / 74	102 / 114 / 118 / 122	109 / 117 / 120 / 128	—		本体、mP、app	60 / 75 / 90 / 100		約90~105
Motion X	Motion Charge&Go X	53(50) ^{*1}	60(60) ^{*1}	125(116) ^{*1}	133(125) ^{*1}	—	IX Signia IX シグニア IX Signia AX Signia Xperience Signia Nx primax の7/5/3クラスの プログラム数は6	本体、mP、app	90(70) ^{*1}		約24
	Motion Charge&Go P X	71(56) ^{*1}	77(66) ^{*1}	130(117) ^{*1}	135(130) ^{*1}	100(85) ^{*1}		本体、mP、app	100(80) ^{*1}		約30
	Motion Charge&Go SP X	74	82	133	140	104		本体、mP、app	110		約61
Intuis4	Intuis4 M	53(51) ^{*1}	60(61) ^{*1}	124(116) ^{*1}	133(125) ^{*1}	82(76) ^{*1}	IX Signia IX シグニア IX Signia AX Signia Xperience Signia Nx primax の2/1クラス、 Intuis4、Intuis3、 Prompt、Fun のプログラム数は4	本体、mP、app	90(70) ^{*1}		約160
	Intuis4 P	71(57) ^{*1}	77(66) ^{*1}	130(118) ^{*1}	135(129) ^{*1}	101(86) ^{*1}		本体、mP、app	100(80) ^{*1}		約135
	Intuis4 SP	74	82	132	140	103		本体、mP、app	110		約285
Intuis3	Intuis3 RIC(S/M/P/HP)	37 / 50 / 63 / 68	45 / 60 / 70 / 75	102 / 114 / 120 / 124	108 / 119 / 124 / 130	68 / 80 / 91 / 99		本体、mP、app	60 / 75 / 90 / 100		約140~175
	Intuis3 S	42(41) ^{*1}	55(45) ^{*1}	121(113) ^{*1}	124(124) ^{*1}	—		mP、app	65(50) ^{*1}		約175
	Intuis3 M	53(46) ^{*1}	60(53) ^{*1}	126(116) ^{*1}	130(125) ^{*1}	82(74) ^{*1}		本体、mP、app	85(65) ^{*1}		約260
	Intuis3 P	64	70	127	134	93		本体、mP、app	100		約190
	Intuis3 SP	72	80	133	140	102		本体、mP、app	110		約260
Prompt	Prompt S	42(41) ^{*1}	55(45) ^{*1}	121(113) ^{*1}	124(124) ^{*1}	—		mP、app	65(50) ^{*1}		約175
	Prompt P	64	70	127	134	93		本体、mP、app	100		約190
Fun	Fun P	64	70	126	132	—		本体	90		約220
	Fun SP	72	79	133	140	—		本体	110		約285

*1 ()はLifeチューブ/Thinチューブでの数値です *2 右記の略名を記載しています。本体→補聴器本体にボリューム付き / SC→Smart Connect(販売終了) / SR→Smart Remote / mP→miniPocket / app→Signia appでボリューム調節可能 *3 電池寿命は使用状況によって変わります

オーダーメイド耳あな型のオプション

※オプションの詳細は「オーダーメイド補聴器ご注文の手引き」に記載

名前刻印



最大6文字カタカナを補聴器本体に刻印可能。

- 無料
- ※本体購入後の刻印は、修理扱い(¥8,800税込)

シェルグリップ



耳の中でずれにくくする加工。

- 対象器種: COOL、COOL 13を除く耳あな型
- 無料

カナルロック



耳から抜けないようにするためのストッパー。目立ちにくい透明色。

- 一部器種非対応
- 無料

テグス



補聴器を取り出しやすくするテグス有無、形状、長さ等選択可能。

- 無料

シェルマーキング



両耳装着の場合左右が分かりやすいようにシェルにマーク。

- 無料

ノンワイヤレス(小型優先)



両耳間で通信する「ワイヤレス機能」をなくすことで小型化。

- 対象器種: 下記の一覧表をご確認ください
- 無料

アクアプロテクト



汗・水に強いIP57対応。

- 対象器種: 7px/5px/3pxシリーズ(CIC、CIC 312除く)
- ¥6,000/台(非課税)

性能一覧 耳あな型

※このデータはJIS C 5512:2015(2cmカブラで測定)で表示しています ※仕様は予告なく変更される場合があります ※各項目の数値はノーマルタイプ/パワータイプ/ハイパワータイプの順に記載。「-」はそのタイプ非対応です

形式			性能					プログラム ^{*2}	リモコン・アプリ ^{*1}	適応聴力 (平均dBまで)	使用電池	電池寿命 ^{*3} (連続使用)(h)
シリーズ	タイプ	マイク	最大音響利得 (dB)		90dB入力最大出力音圧 レベル (dB)		誘導コイル感度 (dB)					
			HFA-FOG (±5dB以内)	最大値 (+3dB以下)	HFA-OSPL90 (±4dB以内)	最大値 (+3dB以下)	HFA-MASL (±6dB以内)					
Insio Charge&Go IX	充電CIC	シングル	45 / 50 / 57	50 / 55 / 60	109 / 109 / 120	113 / 118 / 124	-	mP.app	70 / 80 / 90	充電	約34	
Silk Charge&Go IX	既製耳あな型	シングル	45 / - / -	50 / - / -	108 / - / -	114 / - / -	-	mP.app	70 / - / -	充電	約28	
Insio IX	IIC	シングル	44 / - / -	50 / - / -	108 / - / -	113 / - / -	-	mP.app	70 / - / -	10A	約90	
	CIC		45 / 50 / 57	50 / 55 / 60	107 / 109 / 118	113 / 118 / 124	-	本体、mP.app	70 / 80 / 90	10A	約90	
	ITC		46 / 50 / 55	50 / 55 / 60	109 / 112 / 118	113 / 118 / 124	-	mP.app	70 / 80 / 90	312	約145	
	ITC TWIN	ツイン	45 / 48 / 55	50 / 55 / 60	108 / 112 / 119	113 / 118 / 124	-	mP.app	70 / 80 / 90	312	約145	
	ITE TWIN		- / 49 / 56	- / 55 / 60	- / 112 / 118	- / 118 / 124	- / 79 / 86	mP.app	- / 80 / 90	312	約145	
Insio Charge&Go AX	ワイヤレス充電ITC	ツイン	46 / 44 / 60	50 / 55 / 65	109 / 109 / 119	113 / 118 / 124	-	本体、mP.app	70 / 80 / 90	充電	約28	
	ワイヤレス充電ITE		- / 47 / 60	- / 55 / 65	- / 109 / 120	- / 118 / 124	-	本体、mP.app	- / 80 / 90	充電	約28	
Insio Nx	IIC	シングル	46 / - / -	50 / - / -	109 / - / -	113 / - / -	-	mP.app	70 / - / -	10A	約75	
	CIC		45 / 48 / 59	50 / 55 / 65	108 / 112 / 119	113 / 118 / 124	-	mP.app	70 / 80 / 90	10A	約70	
	COOL		45 / 47 / -	50 / 55 / -	108 / 111 / -	113 / 118 / -	65 / 79 / -	mP.app	70 / 80 / -	312	約120	
	ITC		45 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 111 / 119	113 / 118 / 124	65 / 79 / 91	mP.app	70 / 80 / 90	312	約120	
	ITC TWIN	ツイン	45 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 111 / 119	113 / 118 / 124	65 / 79 / 91	mP.app	70 / 80 / 90	312	約120	
	ITC TWIN BT有り		45 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 111 / 119	113 / 118 / 124	-	mP.app	70 / 80 / 90	312	約120	
	ITE TWIN		- / 48 / 60	- / 55 / 65	- / 112 / 119	- / 118 / 124	- / 79 / 90	mP.app	- / 80 / 90	312	約120	
	ITE TWIN BT有り		- / 48 / 60	- / 55 / 65	- / 112 / 119	- / 118 / 124	-	mP.app	- / 80 / 90	312	約120	
Insio px	CIC	シングル	45 / - / -	50 / - / -	109 / - / -	113 / - / -	-	mP.app	70 / - / -	10A	約80	
	CIC 312		44 / - / -	50 / - / -	108 / - / -	113 / - / -	-	mP.app	70 / - / -	312	約145	
	MC		45 / 48 / 60	50 / 55 / 65	109 / 112 / 119	113 / 118 / 124	-	SC、SR、mP.app	70 / 80 / 90	10A	約80	
	MC 312		44 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 112 / 120	113 / 118 / 124	-	SC、SR、mP.app	70 / 80 / 90	312	約145	
	COOL		44 / 47 / -	50 / 55 / -	108 / 112 / -	113 / 118 / -	-	SC、SR、mP.app	- / 80 / -	13	約240	
	COOL 13		- / 48 / -	- / 55 / -	- / 113 / -	- / 118 / -	-	SC、SR、mP.app	70 / 80 / 90	312	約145	
	ITC		44 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 112 / 120	113 / 118 / 124	-	SC、SR、mP.app	- / 80 / 90	13	約240	
	ITE		- / 48 / 60	- / 55 / 65	- / 113 / 120	- / 118 / 124	- / 78 / 89	SC、SR、mP.app	70 / 80 / 90	312	約145	
	ITC TWIN		ツイン	44 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 112 / 120	113 / 118 / 124	-	SC、SR、mP.app	70 / 80 / 90	312	約145
	ITE TWIN			- / 48 / 60	- / 55 / 65	- / 113 / 120	- / 118 / 124	- / 78 / 89	SC、SR、mP.app	- / 80 / 90	13	約240
Intuis3	CIC	シングル	45 / - / -	50 / - / -	109 / - / -	113 / - / -	-	mP.app	70 / - / -	10A	約80	
	CIC 312		44 / - / -	50 / - / -	108 / - / -	113 / - / -	-	mP.app	70 / - / -	312	約145	
	MC		45 / 48 / 60	50 / 55 / 65	109 / 112 / 119	113 / 118 / 124	-	mP.app	70 / 80 / 90	10A	約80	
	MC 312		44 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 112 / 120	113 / 118 / 124	-	mP.app	70 / 80 / 90	312	約145	
	ITC		44 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 112 / 120	113 / 118 / 124	-	mP.app	70 / 80 / 90	312	約145	
	ITE		- / 48 / 60	- / 55 / 65	- / 113 / 120	- / 118 / 124	- / 78 / 89	mP.app	- / 80 / 90	13	約240	

IX Signia K シグニアK
 Signia Xperience
 Signia Nx
 primax
 の7/5/3クラスのプログラム数は6
 IX Signia K シグニアK
 Signia Xperience
 Signia Nx
 primax
 の2/1クラスの、Intuis3
 のプログラム数は4

オプション一覧(無料)

シリーズ	タイプ	環境スイッチ (メモリー)	ポリウム コントロール ^{*A}	テレコイル ^{*A}	オートフォン ^{*A}	ノンワイヤレス
Insio Charge&Go IX	充電CIC	-	-	-	-	-
Insio IX	IIC	-	-	-	-	選択可
	CIC	標準装備 ^{*B}	-	-	-	選択可
	ITC	選択可	選択可 ^{*I}	-	-	選択可
	ITC TWIN	選択可	選択可 ^{*I}	-	-	選択可
	ITE TWIN	選択可	選択可 ^{*I}	選択可 ^{*F}	-	選択可
Insio Charge&Go AX	ワイヤレス充電ITC/ITE	標準装備	-	-	-	-
Insio Nx	IIC	-	-	-	-	-
	CIC	標準装備 ^{*B}	-	-	-	選択可
	COOL	選択可 ^{*C}	選択可 ^{*C-I}	選択可 ^{*F}	-	選択可
	ITC	選択可	選択可 ^{*I}	-	-	選択可
	ITC TWIN	選択可	選択可 ^{*I}	-	-	選択可
	ITC TWIN BT有り	標準装備	-	-	-	-
	ITE TWIN	選択可	選択可 ^{*I}	選択可 ^{*F}	-	選択可
	ITE TWIN BT有り	標準装備	-	-	-	-
Insio px	CIC / CIC 312	-	-	-	-	標準装備
	MC / MC 312	選択可	-	-	-	選択可
	ITC / ITC TWIN	選択可	選択可 ^{*D}	-	-	選択可
	ITE / ITE TWIN	選択可	選択可 ^{*D}	選択可 ^{*F}	選択可 ^{*G-H}	選択可
	COOL / COOL 13	選択可 ^{*C}	選択可 ^{*C-D}	-	選択可 ^{*G-H}	選択可
	CIC / CIC 312	-	-	-	-	標準装備
Intuis3	MC / MC 312	標準装備	-	-	-	標準装備
	ITC	選択可	選択可 ^{*E}	-	-	標準装備
	ITE	選択可	選択可 ^{*E}	選択可 ^{*F}	-	標準装備

*A テレコイルとポリウムコントロールは、オートフォンとの同時取り付けはできません
 *B バッテリーロッカーが環境スイッチを兼ねます
 *C 補聴器1台に、環境スイッチとポリウムコントロールの同時取り付けはできません。両耳装着の場合、左右別々に付けることは可能です。
 *D ワイヤレスはデジタルポリウム(エンドレス)、ノンワイヤレスはアナログポリウム(ストップエンド)になります
 *E アナログポリウム(ストップエンド)になります
 *F リモコンまたはアプリ無しでテレコイルを使用する場合は、同時に環境スイッチ(メモリー)も必要です
 *G ツインフォン機能を利用する場合、両耳にオートフォン、ワイヤレスが必要
 *H 2px、1pxは、取り付けできません
 *I ワイヤレス/ノンワイヤレスともにデジタルポリウム(エンドレス)のみになります

*1 右記の略名を記載しています。SC→Smart Connect(販売終了) / SR→Smart Remote / mP→miniPocket / app→Signia app *2 最大プログラム数:本体のプッシュボタンやリモコンアプリを利用した時に得られる最大プログラム数です *3 電池寿命は使用状況によって変わります

補聴器を選ぶ前に
 必ずお読みください
 IX AX用
 補聴器
 その他
 アクセサリー
 カラーバリエーション
 性能一覧

機能比較表

- 強力に働く
- ◎ IX/AXシリーズはより強力に働く
- 機能搭載
- Ⓜ 両耳装着時の専用機能
- Ⓜ ツインマイク商品は両耳装着でより強力に(ノンワイヤレス除く)

※耳あな型の機能は56ページの【オプション一覧】も併せてご確認ください

機能	機能説明	Signia IX シリーズ					Signia AX シリーズ					Signia Xperience シリーズ					Signia Nx シリーズ					primax シリーズ					Intuis4シリーズ			Intuis3	Prompt	Fun			
		7IX	5IX	3IX	2IX	1IX	7AX	5AX	3AX	2AX	1AX	7X	5X	3X	2X	1X	7Nx	5Nx	3Nx	2Nx	1Nx	7px	5px	3px	2px	1px	4.2	4.1	4.0						
聞こえ	ロックオン	ワードロックオン	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	スピーチロックオン	複数の動く人の声を判別・追跡することでより聞きやすく	●※1※31	●※1※31	●※1※31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	ダブルプロセッサー	言葉と環境音を別々に処理、楽に聞き取れる	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—		
	ライブサウンド	音をリアルに再現し、生音のような自然な聞こえ	◎Ⓜ※2※30	◎Ⓜ※2※30	◎Ⓜ※2※30	●	●	◎Ⓜ※2※30	◎Ⓜ※2※30	◎Ⓜ※2※30	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—		
	Xセンサー	超広角センサー	周囲360°の音や物を常に分析	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	
		モーションセンサー	モーションセンサーがユーザーの状態(運動・静止等)を判別する	●※29	●※29	●※29	—	—	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	
	OWN VOICE PROCESSING	「自分の声」と「周囲の声」を判別し「自分の声」を快適にする	●※24	●※24	●※24	—	—	◎※24	◎※24	◎※24	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	全自動ダブルピント調整	相手の声がよく聞きやすい	●※23	●※23	●※23	○※13	○※13	●	●	●	○※13	○※13	●	●	●	○※13	○※13	●※23	●※23	●※23	○※13	○※13	●※23	●※23	●※23	○※13	○※13	○※13	○※13	○※13	—	—	—		
	マルチチャンネル方式	聞こえの帯域を複数に分割、より細かい調整が可能	48ch※18	36ch	32ch	24ch	16ch	48ch	32ch	24ch	16ch	16ch	48ch	32ch	24ch	16ch	16ch	48ch	32ch	24ch	16ch	16ch	48ch	32ch	24ch	16ch	16ch	16ch	16ch	16ch	12ch	12ch	8ch	6ch	
	自動音量調整	音の大きさに応じ、自動で音量を心地よい大きさに調整	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
スピーチ & ノイズマネージメント	言葉を聞き取りやすくするに、周囲環境に応じて設定が自動で変化	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
雑音抑制	サウンドスモーキング(突発音抑制)	突発的に響くような衝撃音を抑制	●	●	●	●	○	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	●	●	○	○	—	●	●	○	○	—	—	—	—	—	—	—		
	eWindスクリーン(風雑音抑制)	風雑音を抑制	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	ハウリングストッパー	不快なピーピー音(ハウリング)を抑制	◎Ⓜ	◎Ⓜ	◎Ⓜ	◎Ⓜ	◎Ⓜ	◎Ⓜ	◎Ⓜ	◎Ⓜ	◎Ⓜ	◎Ⓜ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	ビーム指向性	両耳装着で正面の音だけフォーカス	◎※1※31	◎※1※31	◎※1※31	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎※1※31	◎※1※31	◎※1※31	◎	◎	◎※1※31	◎※1※31	◎※1※31	◎	◎	—	—	—	—	—	—		
指向性	ワンマイク指向性	両耳装着で正面の音にフォーカス、IXは2.0に対応	◎2.0※14	◎2.0※14	◎2.0※14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎14	◎14	◎14	◎	◎	◎14	◎14	◎14	◎	◎	—	—	—	—	—	—		
	スピーチフォーカス 360°	前後左右、声の方向に自動的にフォーカス	◎※1※31	—	—	—	◎	—	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎※1※31	—	—	◎	◎	◎※1※31	—	—	◎	◎	—	—	—	—	—	—		
	スピーチフォーカス	前後の声の方向に自動的にフォーカス	◎※1	◎※1	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎※1	◎※1	◎	◎	◎	◎※1	◎※1	◎	◎	—	—	—	—	—	—			
	トゥルーイヤヤー	耳介効果で裸耳に近い臨場感	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	マニュアル指向性	両耳使用時に指向性の向きを手動調節(要アプリ)	◎※1※31	◎※1※12※31	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎※1※31	◎※8※12	◎	◎	◎	◎※1※31	◎※8※12	◎	◎	—	—	—	—	—	—			
	パワーエンハンス	後ろの雑音を抑えて静かに	◎※17	◎※17	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎※17	◎※17	◎	◎	◎	◎※17	◎※17	◎	◎	—	—	—	—	—	—			
	アダプティブ	雑音の方向以外の周囲360°を聞く	◎※1※18	◎※1	◎※1	◎※1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎※19	◎	◎	◎	◎	◎※1	◎※1	◎※1	◎※1	◎※1	◎※1	◎※1	◎※1	◎※1	◎※1	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
固定指向性	後ろの雑音を抑えて静かに	—	—	—	—	◎※1自動	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎自動	◎※1自動	◎	—			
高機能	e2eワイヤレス※31	両耳が常に通信しあい、聞きやすくする	◎4.0	◎4.0	◎4.0	◎4.0	◎4.0	◎4.0	◎4.0	◎4.0	◎4.0	◎4.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎※2	◎※2	◎※2	◎※2	◎※2	◎4.0	◎4.0	◎4.0	—	—	—		
	反響音抑制	ワンワン響く反響音をしっかり抑える	◎自動	◎自動	◎自動	◎自動	◎自動	◎自動	◎自動	◎自動	◎自動	◎自動	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—		
	ハイレゾ音楽	カラオケや、コンサートや、CD・レコードが、より聞きやすい	3モード	3モード	1モード	1モード	—	3モード	3モード	1モード	1モード	—	3モード	3モード	1モード	1モード	—	3モード	3モード	1モード	—	—	3モード	3モード	1モード	—	—	1モード	—	—	—	—	—		
	12kHz帯域	12kHzまでの高音域を出力、より豊かな音色を実現	◎※21	—	—	—	—	◎	—	—	—	—	◎※20	—	—	—	—	◎	—	—	—	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	周波数圧縮	高い音を圧縮。聴野に入れて聞き取りやすくする	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
プログラム数	利用できる最大メモリー数(標準音、テレビ用等)	6	6	6	4	4	6	6	6	4	4	6	6	6	4	4	6	6	6	4	4	6	6	6	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4	4
便利さ	ハンズフリー通話	スマートフォンを手に持たずに通話できる	◎※15※29	◎※15※29	◎※15※29	◎※15※29	◎※15※29	◎※15	◎※15	◎※15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	ダイレクトストリーミング(iPhone)※15	iPhoneの音声から直接補聴器から聞こえる	◎※29	◎※29	◎※29	◎※29	◎※29	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎※7	◎※7	◎※7	◎※7	◎※7	—	—	—	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	ダイレクトストリーミング(Android)※15	Androidスマートフォンの音声から直接補聴器から聞こえる	◎※29	◎※29	◎※29	◎※29	◎※29	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	ツインフォン	受話器を補聴器に近づけると両耳で電話を聞くことができる	◎※3※9※31	◎※3※9※31	◎※3※9※31	◎※3※9※31	◎※3※9※31	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	◎	◎	◎※3	◎※3	◎※3	◎	◎	◎※3※4	◎※3※4	◎※3※4	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	オートフォン™	受話器を補聴器に近づけると自動で電話用の聞こえに切り替え	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎※4	◎※4	◎※4	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
テレコイル	ループシステムに対応し、マイクを介さずに直接音声を受信	◎※32	◎※32	◎※32	◎※32	◎※32	◎	◎	◎	◎	◎	◎※22	◎※22	◎※22	◎※22	◎※22	◎※10	◎※10	◎※10	◎※10	◎※10	◎※5	◎※5	◎※5	◎※5	◎※5	◎	◎	◎	◎※6	◎※16	◎			
オーディオインプット	FM補聴システムなどで利用可能 ※別売のオーディオチューブが必要	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎※11	◎※11	◎			
周辺機器	Smart Remote	大きなボタンと液晶表示で使いやすい	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎※2	◎※2	◎※2	◎※2	◎※2	—	—	—	—	—	—		
	miniPocket	超小型の簡単リモコン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	TV Sound	TVの音をダイレクトに補聴器へ届ける	◎※29	◎※29	◎※29	◎※29	◎※29	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	StreamLine Mic	スマートフォン(アンドロイド)通話に、遠距離マイクとしても使える	◎※9※29	◎※9※29	◎※9※29	◎※9※29	◎※9※29	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	CROS送信器※25	CROS送信器のマイクで音をとり、逆側の補聴器に音声を送る	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

※1 シングルマイクの機種には非搭載 ※2 ノンワイヤレス(小型)オプションとCICには搭載できません ※3 IX, AX, X, Nxシリーズは手動切替のみ、primaxシリーズは同梱オートフォンマグネットを使用すると自動で切り替わりやす
 ※4 COOL, ITEはオプションで取付可能 ※5 ITEはオプションで取付可能 ※6 耳かけ型M, P, SPは標準、ITEはオプションで取付可能 ※7 耳あな型はITC TWIN, ITE TWINのBluetooth有りのみ対応
 ※8 ツインマイク機種を両耳使用した場合のみ ※9 Pure Charge&Go BCT IXは非対応 ※10 COOL, ITE, ITE TWINは取付可能 ※11 耳かけ型(Sを除く)に搭載 ※12 5IX, 5AX, 5X, 5Nx, 5pxは前後にフォーカス
 ※13 ◎は自動ピント調整 ※14 シングルマイクの耳あな型を両耳装着にした場合のみ(ノンワイヤレス仕様およびprimaxシリーズのCIC除く) ※15 詳しくは49, 50ページをご確認ください ※16 Prompt SIは非対応、Prompt MPは対応
 ※17 ツインマイク機種、または両耳にワイヤレス機能あり(標準)のシングルマイク機種を装着時に対応 ※18 Motion Charge&Go SP IXの7クラスは36ch
 ※19 Motion Charge&Go SP Xの7クラスは34ch ※20 Motion Charge&Go SP Xは非対応 ※21 Motion Charge&Go SP IXは非対応 ※22 Motion Charge&Go P XとMotion Charge&Go SP X対応
 ※23 シングルマイク機種、またはノンワイヤレス選択時は自動ピント調整 ※24 Signia IX, Signia AXのRIC型・耳かけ型はさらに進化したOVP 2.0に対応。耳あな型はOVP機能非対応 ※25 詳しくは44ページをご確認ください
 ※28 Signia IX, Signia AXシリーズの7/5/3クラスはより進化したライブサウンドプラスを搭載 ※29 Insio Charge&Go IX, Silk Charge&Go IX, Insio IXは非対応 ※30 RIC型・耳かけ型は耳あな型より強力に働く
 ※31 ノンワイヤレスを選択した場合非対応 ※32 Pure Charge&Go BCT IXとMotionCharge&Go IXのみ対応、Insio IX ITE TWINはオプションで取付可能

補聴器を選ぶ前に
 必ずお読みください
 IX AX用
 充電器
 補聴器
 その他
 アクセサリー！
 カラバリエンタテイン
 性能一覧

シグニア補聴器の安心保証とスマートリペア



+



① 保証期間内は無料で修理 補聴器本体に自然故障*が生じた場合

*取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合
*紛失および過失による故障(シェル破損や水没など)は保証対象外です。修理可能な場合はスマートリペアの価格でご対応いたします(全損は対象外)
*電池やイヤチップなどのアクセサリ類は、保証およびスマートリペアの対象外です

② さらに修理保証期間が過ぎた後も修理は定額のスマートリペア

*「スマートリペア」は入会金などの費用が一切からず、修理は定額
*耳あな型のシェル再作、修正は別途費用がかかります
*故障部位および購入年数によって各種規定があります

③ 購入後の無料再作(耳あな型オーダーメイド補聴器)

耳あな型オーダーメイド補聴器の形が耳に合わない場合、お買い上げの日から1年あるいは2年以内(機種によって異なる)の再作を無料でいたします(その他、詳しい保証規定は添付の保証書によります)

● 修理保証

	1年目	2年目	3年目	4年目以降～
Signia 7IX/5IX Signia 7AX/5AX Signia 7X/5X Signia 7Nx/5Nx	3年無料修理保証			スマートリペア定額修理期間
上記以外の シグニア補聴器	2年無料修理保証		スマートリペア定額修理期間	

● 紛失保証

	1年目	2年目
Signia 7IX/5IX Signia 7AX/5AX Signia 7X/5X Signia 7Nx/5Nx	2年保証 1回に限り無料	
Signia 3IX Signia 3AX Signia 3X 7px/5px	1年保証 1回に限り無料	

シグニア補聴器

〒242-0007 神奈川県大和市中央林間7丁目10番1号 三機大和ビル6F

■ 一般のお客様専用窓口

電話:0800-888-0303/直通:046-289-0303
FAX:046-407-1133

■ 販売店様専用窓口

電話:0800-222-4133/直通:046-409-4133
FAX:0800-888-4133/直通:046-407-1133
販促物注文専用FAX:050-3730-5795



シグニア補聴器
お問い合わせ・公式SNS

www.signia.net/ja-jp/local/ja-jp/signia-info/



聞こえと補聴器の
情報サイト「きこえナビ」

www.kikoe-navi.jp



シグニア補聴器のご相談・ご用命は当店へ

補聴器の装用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察をお勧めします。補聴器は個々に合わせた適切なフィッティング(調整)により効果が発揮されます。しかし、装用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。カタログに掲載されている製品の色や見え方は、印刷等により実際の製品と異なる場合があります。

価格はメーカー希望小売価格です。補聴器は薬機法で定められた医療機器のため非課税対象商品です(アクセサリ・周辺機器を除く)。

カタログに記載されている会社名やロゴおよび製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
本カタログの内容は2026年2月時点のものです。価格や仕様は予告なく変更されることがあります。26.2.JP.17001480
製造販売元:WSオーディオロジージャパン株式会社 医療機器製造販売業許可番号 14B2X00018



6月6日は補聴器の日