

■ シーメンス・シグニア補聴器の修理サービス

全器種

2年保証

1年安心修理

メーカー保証

1年安心修理

1年目

2年目

3年目

※リモコンの保証期間は2年間

① 保証期間内は無料で修理 補聴器本体に自然故障*が生じた場合

*取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合
*紛失および過失による故障(シェル破損や水没など)ならびに、電池やイヤチップなどのアクセサリ類は、保証および安心修理の対象外です

② さらにプラス1年間は修理金額のご負担 → 最高2万円までの安心修理期間

「1年安心修理」は入会金などの費用が一切かかりません

③ 120日以内の無料再作 (耳あな型オーダーメイド補聴器)

耳あな型オーダーメイド補聴器の形が耳に合わない場合、お買い上げの日から120日以内の再作を無料でいたします (その他、詳しい保証規定は添付の保証書によります)

7px・5pxの耳かけ型と耳あな型、7bx・7miの耳あな型のみ

1年
紛失保証

補聴器を紛失した場合、ご購入から1年間、1回に限り無料で新品をご提供いたします。

※警察などの公的機関へ届け出されたことを証明する信憑書類が必要になります

シバントス株式会社 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野5-29-15 <http://www.signia.jp>

■ 「シーメンス・シグニア補聴器」お客様コールセンター ■ 販売店様専用問合せ窓口 本社・カスタマーサービス部

0800-888-0303

Tel.042-740-0022 Fax.042-765-7237

営業時間 9:00-17:00 (土・日・祝日 定休日)

※本フリーコールはIP電話からはつながりません。その場合は通常の電話番号までお問い合わせください

0800-222-4133 Fax0800-888-4133

Tel.042-765-7211 Fax.042-765-7237

営業時間 平日 9:00-18:30 土曜日 9:00-17:00 (日・祝日 定休日)

フォローお待ちしております

f Signia 🔍 で検索

公式 facebook @signiahearing
<https://www.facebook.com/signiahearing>

🐦 公式 twitter @SigniaHearingJP
<https://twitter.com/SigniaHearingJP>

シーメンス・シグニア補聴器のご相談・ご用命は当店へ

聞こえの詳細な検査は、耳鼻科専門医を受診してください。補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。このカタログと実際の製品の色・形状は、印刷の関係で異なる場合があります。

カタログに表示されている価格は希望小売価格です。

医療機器製造販売業許可番号 14B2X00018 このカタログの内容は2016年11月時点のものです。価格や仕様は予告なく変更されることがあります。16.11.SM130.17001210

AndroidとGoogle PlayはGoogle Inc.の商標です。Apple App StoreはApple Inc.の商標です。Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有しており、Sivantosによるこれらのマークの使用は、ライセンス許諾されています。その他の商標・商品名に関する権利は、それぞれの所有者に帰属します。GORE and designs are trademarks of W.L. Gore & Associates. Signia GmbH is a Trademark Licensee of Siemens AG.

シーメンス・シグニア補聴器 総合カタログ

2016年11月版



Hearing
Systems

SIEMENS

www.signia.jp

シーメンス・シグニア補聴器 イメージキャラクター プロスキーヤー・冒険家 三浦雄一郎(テレビCM放映)



Life sounds brilliant.

シーメンス補聴器が誕生してから約130年。

シグニア Signiaは、シーメンスの高品質と革新性を継承し、幅広いお客様のニーズに応えるブランドとして、2016年1月に誕生しました。

聴力の低下に対する感じ方や問題点は一人ひとり異なり、すべてのご要望にお応えすることは簡単なことではありません。

しかし、私たちは、たゆまぬ製品開発、丁寧な生産工程、そしてフィッティングソフトやサービスの改善を通じてみなさま一人ひとりに最適な聞こえをご提供したいと考えています。

今後日本が世界でもトップレベルの高齢化社会を迎える中で、年齢を重ねても多くの方々に充実した毎日を送っていただきたい。そのために我々は日々、努力を続けています。



Hearing Systems



TRT プライマックス、バイナックス、マイコン、オリオン2及びオリオンは耳鳴り治療器機能を搭載

8割の方に効果があったと報告されている*1 TRT (耳鳴り再訓練法) 用の治療音 (音響的ノイズ) を発生させることができます。
※ 耳鳴りの治療及び本機能の使用については、必ず耳鼻科専門医にご相談ください。※ TRT: Tinnitus Retraining Therapy
*1 関谷芳正、松田太志、高橋真理子他、耳鳴りに対する新しい治療法・TRT (療法) 耳鼻臨床95:6:639-646, 2002

INDEX

130年以上の歴史	3	
聞こえのこと・難聴のこと	5	
両耳装用のススメ	7	
プライマックスについて	9	
形で選ぶ	概要	15
	RICタイプ	17
	耳かけ型タイプ	19
お母様のラインナップ	オーダーメイド耳あな型タイプ	21
	概要	23
	プライマックス primax7	25
	プライマックス primax5	27
	プライマックス primax3	29
バイナックス binax7・5・3、マイコン micon3	31	
リモコンについて	33	
ニーズで選ぶ	ニトロ Nitro	35
	オリオン Orion2	37
その他のラインナップ	オリオン Orion	39
	シリオン Sirion2	41
	インティス Intuis2	43
	プロンプト Prompt / ファン Fun	45
	インティス Intuis / ロータス Lotus / ポケットィオ Pockettio	47
	リモコン・アプリ	49
クロス CROS / バイクロス BiCROS	53	
アクセサリ	54	
性能一覧・機能比較表	55	

130年以上

聞こえのケアに取り組んでいます。

■ 私たちは130年以上に渡り、補聴器の技術と聞こえの経験を積み重ねてきました。1878年にベルナー・フォン・シーメンスが最初の難聴補助機器「Phonophor」を開発して以降、音響学の最先端を切り開いてきた歴史があります。

1878

Phonophor

ベルナー・フォン・シーメンスが難聴の従業員とその家族向けに特別な電話受話器を発明



1913

シーメンス初の補聴器



1951

Phonophor Alpha
シーメンス初のポケットサイズの補聴器



1959

Auriculina 326
シーメンス初の耳かけ型補聴器



1966

Siretta 339
シーメンス初の耳あな型補聴器



1997

Prisma
シーメンス初のフルデジタル補聴器



2011

アクアリス Aquaris
シーメンス初の防水・防塵補聴器



2011

シーメンス クール SIEMENS COOL
補聴器の新しいカタチ

2013

miconテクノロジー

マイコン micon

高性能・多機能を実現し、より自然な音であなただけの聞こえをサポート

2014 / 2015

binaxテクノロジー

バイナックス binax

脳の聴覚メカニズムの研究から誕生。会話の聞き取りやすさをハイスpekク化で追求

2016

primaxテクノロジー

プライマックス

primax

シグニアブランド初の補聴器。日本語をしっかりと。楽に。日本を元気にするプライマックス



一人ひとりの聞こえに合わせた補聴器をご提供します。



Oldenburg大学との共同研究により、両耳通信システム(e2eワイヤレス)を開発。ドイツの最も革新的な発明や技術に与えられる賞「ジャーマン・フューチャー・プライズ」を受賞しました。



GOOD DESIGN

シーメンス・シグニア補聴器は、そのデザイン性や画期的な商品が評価され、複数回グッドデザイン賞を受賞しています。



GOOD DESIGN AWARD 2010



GOOD DESIGN AWARD 2013



GOOD DESIGN AWARD 2012 BEST 100



GOOD DESIGN AWARD 2015


補聴器を選ぶ前に
知っておきたいこと。

**聞こえにくくなること。
それは誰にでも起きる自然なことです。**

人は年齢を重ねると聴力が低下していきます。このような加齢性難聴は高音から少しずつ聞こえにくくなっていき、「あ、い、う、え、お」の母音は聞こえるものの、子音を聞きとる力が低下していきます。

■ こんなことはありませんか？


- 自動車の中での話が、よく聞き取れない
- 人の話し声が小さいように感じる
- 周りの人から、テレビの音が大きいと言われる
- 携帯電話の呼び出し音に気付かないことがある
- 人と会話をするのが面倒に感じる

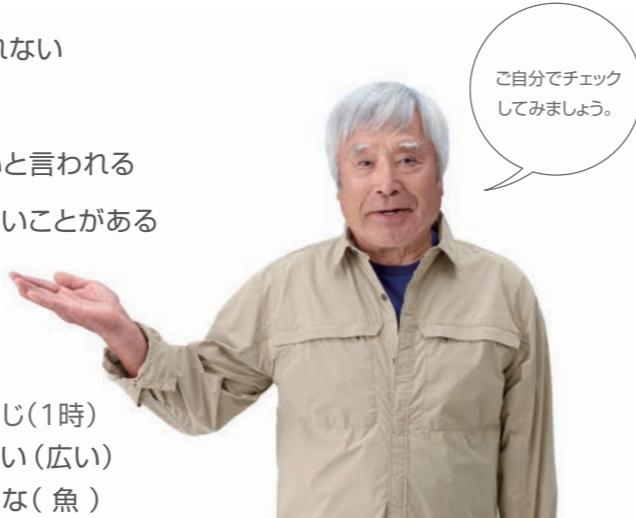

■ こんな聞き間違いありませんか？

- × しちじ(7時) ← ○ いちじ(1時)
- × しろい(白い) ← ○ ひろい(広い)
- × たかな(高菜) ← ○ さかな(魚)

■ 耳の構造と役割

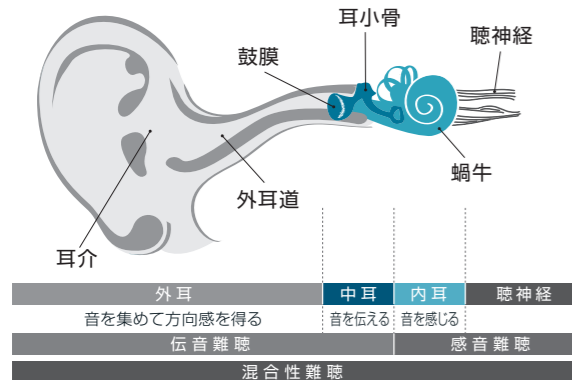


難聴の種類	伝音難聴	感音難聴	混合性難聴
解説	中耳炎や鼓膜の損傷・病気などが原因で、音が伝わりにくくなることによる難聴	加齢や病気、長時間騒音下にいることなどが原因の難聴	伝音難聴と感音難聴の両方が同時に起こる難聴
	医学的に治療できるケースも。難聴が残る場合は補聴器を使う事もあります。	医学的治療では治らず、補聴器を使うケースも。難聴レベルや周りの状況によっては、補聴器を装着しても聞き取りが困難なケースもあります。	

■ 加齢に伴う聴力の変化

出典：立木 孝 他：日本人聴力の加齢変化の研究 Audiology Japan 45:241、241～250(2001)より改編

難聴が進むにつれて、聞こえる音が減っていきます。聴力の低下は30代からすでに始まっています。

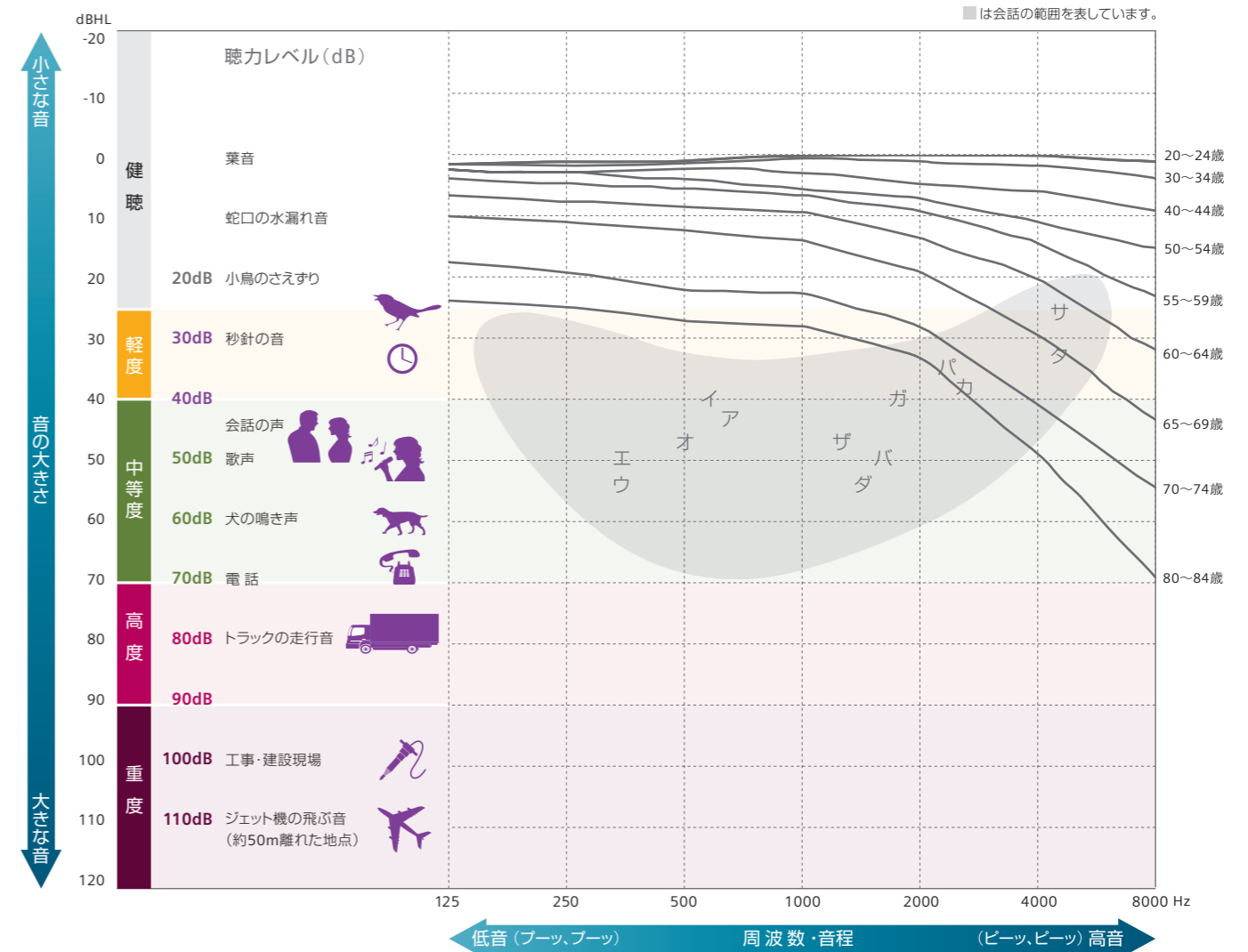


■ 聞こえの目安

軽度 25dBHL～40dBHL	中等度 40dBHL～70dBHL	高度 70dBHL～90dBHL	重度 90dBHL以上
・小さな声やささやき声は聞き取りにくい ・テレビの音が大きいと言われる	・普通の会話が聞きづらい ・自動車がそばに来て初めて気づく	・大きな声でも聞きづらい ・大きな声でも聞き間違いが多い	・耳元での大きな声も聞きづらい

片耳だけの補聴器は、 片目で見ると同じです

両耳装用のメリット


- ✓ 自然な聞こえ
- ✓ 騒音下でも聞き取りやすい
- ✓ 片耳装用時ほど音量を上げなくても良いので疲れにくい
- ✓ 音の方向感が得やすい

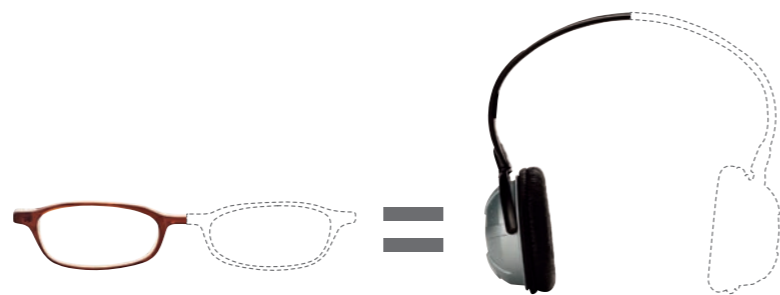


両耳装用だと、音の方向を捉えやすい

両耳に音が入るので、聞こえの範囲が左右に広がり、音の場所を捉えやすくなります。音の方向が分からないと道路沿いを歩行中などに危険性が高まります。

片耳装用
聞こえの範囲は片側が中心。装用していない側からの聞き取りが悪く、音の方向も分からない。

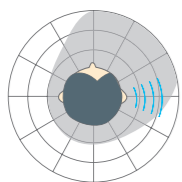


両耳装用
聞こえの範囲が左右同じなので、どちらから話されても安心。音源の方向も捉えやすい。

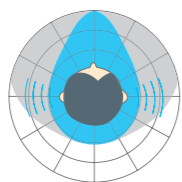

両耳装用だと、どちらの方向から音がきているのかが、分かりやすい。


両耳装用は満足度が 高いという事実⁽¹⁾

両耳装用は様々な環境において満足度が
高い事が判明しています。

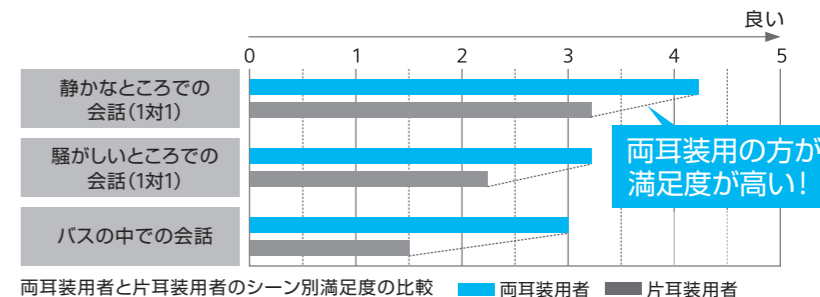

言葉の聞き取り能力の 低下⁽²⁾

片耳装用だと、補聴器をつけていない方の耳は、言葉の聞き取り能力が次第に衰えていく場合があるという研究結果があります。

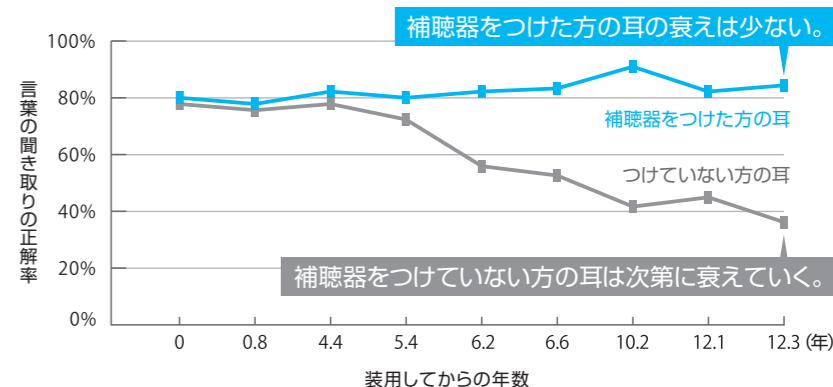

欧米では補聴器の両耳装用が基本(約7割~8割)⁽³⁾。しかし日本では、まだまだ少ないのが現状です(約4割)⁽³⁾。

確かな聞こえのために、日本でも両耳装用をおすすめします。

さらに、primax・binaxなら **両耳の2台は、常に高速で無線通信。**

音声信号も通信

リアルタイムで通信。
だから自然な聞こえを実現!

ECO
消費電力は従来とほぼ同じ!!


今までの両耳通信機能は、「補聴器の状態」のみのやりとりでしたが、primax・binaxは「音声信号」もやりとりしています。搭載されたスーパーコンピュータ並みの超高速チップ^{※1}が、その処理を可能にしています。音声信号も左右でやり取りできるから、14ページのような画期的な機能が実現しました。

一方で、大量・高速の音声処理を行えば、大きな電力を消費します。しかしprimax・binaxの消費電力は、今までの補聴器とほぼ同じ!エコなところもシーメンス・シグニア補聴器のテクノロジーです。

^{※1} 1秒間に3億回の演算処理能力

出典: (1) 補聴器1年間使用後の主観的評価によるデータ(スキャンジナビアンオージオロジーより抜粋) (2) JAAA 141-149, Vol.6/No.2 Mar.1995 (3) EuroTrak2012, JapanTrak2015, MarkeTrakVII

日本語をしっかりと。楽に。
ニッポン🇯🇵を元気にする
プライマックス

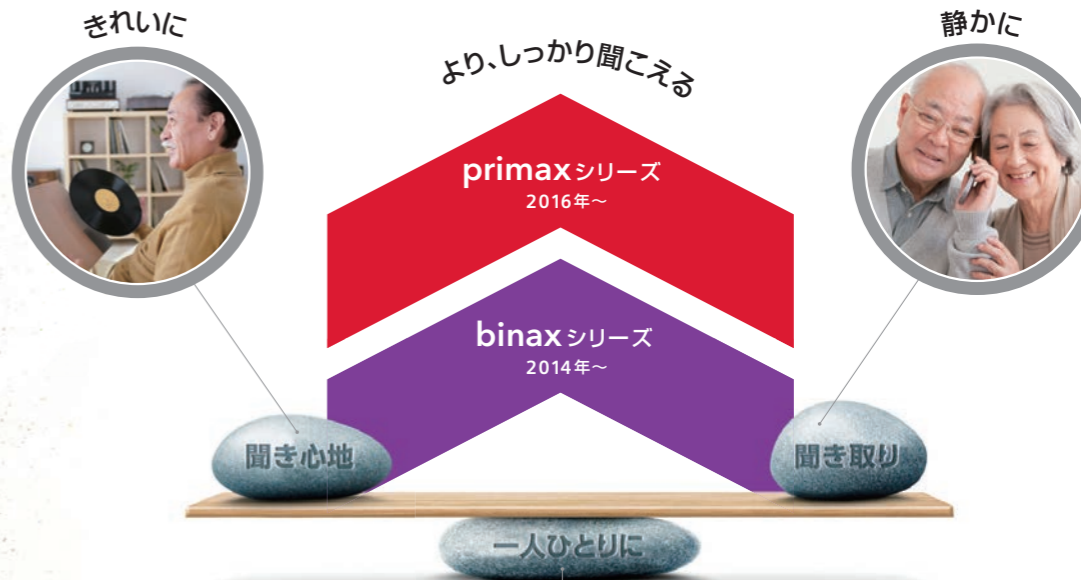

補聴器の課題だった、「聞きとり」と「聞き心地」を両立。従来は言葉の「聞きとり」を優先すると「聞き心地」が損なわれがちでした。しかし、シーメンス・シグニア補聴器はこの二つを高品位にバランス。長時間装着しても疲れにくい聞こえで、補聴器をつけていることを忘れさせてくれます。



一人ひとりに合わせて調整できる、パーソナライズ機能。永くお使いいただけるように、お好みに合わせて、きめ細かな調整ができます。

「日本語をしっかりと。楽に。」
プライマックスの秘密

プライマックスに新搭載の「スピーチマスター」で、従来よりも相手の声が楽に聞きとりやすく。開発時には、日本の補聴器使用者のご要望を集め、反映しました。

本当に楽に聞こえるの？

開発段階で脳波を測定し、聞きとる際の労力が軽減することを目指して開発されました。

※ primax 補聴器に搭載、スピーチマスター機能の研究レポートは、Hearing Review 2016 3月に掲載。



日本でも従来タイプの補聴器使用者の方々にプライマックスを試していただきました。1日中、楽しく過ごせそう!とコメントをいただいています。スピーチマスターは、「全自動ダブルピント調整」。全自動で相手の声の方向と大きさを感知するから、従来よりも聞きとりやすさに磨きがかかりました。

だから、プライマックス。日本語をしっかりと。楽に。
皆さんの元気な毎日を応援します。

1日中、もっと聞きとりやすく。




7:30 家族団らんで

テレビの音、新聞をめくる音、食器のガチャガチャ音もしっかり抑える!



今までは…

食事中的、テレビの音や、新聞をめくる音、食器の音などが会話をさまたげがちでした。

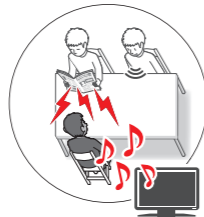

スピーチマスター (全自動ダブルピント調整*1)	7px	5px	3px
-----------------------------	-----	-----	-----

プライマックスなら…

会話は強調し、雑音は抑制。リラックスしてさらに自然に会話が聞き取れます。




9:00 街中や駅で

ザワザワした場所でも、会話がラクラク!



今までは…

駅のような騒がしい場所では、会話を聞き取るのは大変でした。

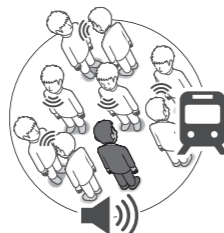

スピーチマスター (全自動ダブルピント調整*1)	7px	5px	3px
-----------------------------	-----	-----	-----

プライマックスなら…

聞き取る範囲を絞り、さらに話し相手の声を大きくします。相手の声がいかに聞き取りやすくなります。



13:00


集会室や 会議室で

部屋の中でも、ワンワンする反響音を抑え、会話がクリアに!



今までは…


部屋の中で発生しがちな反響音は、不快な雑音でした。

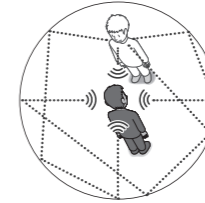

エコーシールド (反響抑制)	7px
-------------------	-----

プライマックスなら…

ワンワン響く反響をしっかりと抑えるので、聞こえもスッキリ、会話も弾みます。

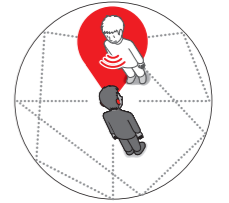

15:00

カラオケ・歌番組で

音楽もさらに楽しめる!



カラオケでも



コンサートでも



CD・レコードを聴くときも

ハイレゾ音楽	7px (3モード)	5px (1モード)	3px (1モード)
--------	---------------	---------------	---------------

18:00

固定電話で

両耳で聞こえるから、よく聞こえる!

ツインフォン*2	7px	5px	3px
----------	-----	-----	-----



20:00

テレビで

テレビドラマの重要なシーンも聞き逃さない!

リモコン (easyTek boost)*3	7px	5px	3px
---------------------------	-----	-----	-----



1日中、楽しく過ごせそうです。

いろんなことをやってみたいという意欲が湧いてきます。



*1 7px: 両耳装用の場合に限る。AceとCIC、CIC312を除く。 5px・3px: 両耳装用の場合に限る。耳かけ型はAceを除く。耳あな型はCT Twin・LS Twinに対応
*2 耳かけ型: AceとMotion S 3pxを除く。耳あな型: COOL、COOL13とLSにオプションで取付可能
*3 AceとCIC、CIC312を除く

プライマックス
primax

バイナックス
binax

共通テクノロジー

プライマックス
primax

バイナックス
binax

48ch*1*2

チャンネル数が音質を左右します。


チャンネル数が多いほど、より静かでハッキリとした音質に近づきます。

シーメンス・シグニア補聴器は、補聴器最高クラス*2の48ch。

不要な雑音はカットし、聞きたい会話だけを拾います。

■ 聞こえのイメージ


16ch

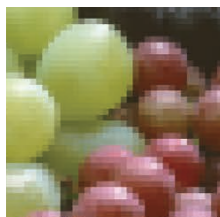

24ch



48ch

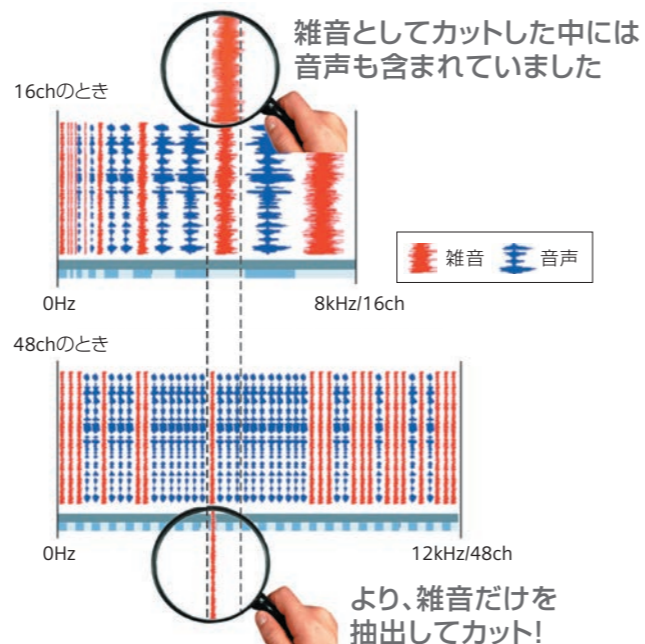

お客様の声



着けていることを感じないくらい軽くて快適。

家族や友人の話すことが聞き取りにくく、何度も聞き返すようになっていました。補聴器は考えたことが無かったのですが、試してみても驚きました。

こんなに軽く、小さくて大丈夫かしらという印象でしたが、すぐに不安はなくなり着けていることさえ忘れるほど話中に夢中になっていました。カラーも豊富で、最近は赤が好きです。

松本 日登絵 さん (60代・東京都在住)



*1 7px・7bx・7miのみ。5px・5bx・5miは32ch、3px・3bx・3miは24chです *2 2016年3月末現在 当社調べ

会話
強調機能

1

例えば
居酒屋
レストランで



騒がしい場所でも聞きとりラクラク。

聞きとる範囲をシャープに絞れるので、ザワザワした居酒屋でも、会話が明瞭に聞きとれるようになりました。

ビーム指向性*3	7px	5px	3px
	7bx	5bx	3bx

旧友とおしゃべり。会話も弾み、笑顔になれそうです。



primax・binaxの聞きとり範囲
弊社従来機種(micon)の聞きとり範囲

会話
強調機能

2

例えば
車の中
カルチャー教室で



横も後ろも会話をキャッチ。

相手がどこにいてもレーダーのようにしっかり声をキャッチ。電車や車の中、カルチャー教室や散歩でもみんなと会話が弾みます。

スピーチフォーカス360°*4	7px	7bx
スピーチフォーカス前後*5	5px	5bx

助手席の妻とも会話を楽しめそうです。



会話
強調機能

3

例えば
ゴルフ
ウォーキングで



風が吹いても大丈夫。

屋外では風のゴォー音が気になるものです。風の音をぐっと軽減して会話をますます楽にします。屋外でも楽しい時間を満喫できます。

両耳eウィンドスクリーン*4	7px	7bx
----------------	-----	-----

ハイキングを楽しみ、好奇心の高まる日々になりそうです。



*3 7px・5px・3px、7bx・5bx・3bxを両耳装用し、耳かけ型: Pure・Carat・Motion P・Motion PX+・Motion SAと、耳あな型: CT Twin・LS Twinに対応
*4 7px・7bxを両耳装用し、耳かけ型: Pure・Carat・Motion P・Motion PX+・Motion SAと、耳あな型: CT Twin・LS Twinに対応
*5 7px・5px・7bx・5bxを両耳装用し、耳かけ型: Pure・Carat・Motion P・Motion PX+・Motion SAと、耳あな型: CT Twin・LS Twinに対応

補聴器のタイプ

補聴器にはさまざまなタイプがあります。聞こえのレベルやお好みに合わせてお選びいただけます。

耳かけ型補聴器

- 機能が豊富でオールインワン
- レシーバーやイヤチップの種類が多くすぐに交換、使用開始できる
- 色が豊富でスタイリッシュ
- 小型で耳の後ろにフィットするので目立たない

タイプ	装着イメージ	製品イメージ		聴力レベル (dBHL)											
				軽度難聴	40	中等度難聴		70	高度難聴		重度難聴		110		
RICタイプ P.17 小さくて、チューブも細い、目立たないタイプ			RIC	Sレシーバー				Mレシーバー			Pレシーバー		HPLレシーバー		
				耳かけ型補聴器はレシーバーやイヤフックの選択により、適合聴力が変更できます											
耳かけ型タイプ P.19 耳の後ろにかけて使う。パワータイプもあります。			耳かけ	チューブ						イヤフック					
ニトロ P.35 高～重度難聴対応の大パワー補聴器			パワー	チューブ						イヤフック					
				Nitro イヤフック											

名前刻印

「名前刻印」で、世界に1つだけのあなたの補聴器にしませんか?



¥2,160
(税込/1台につき)

※カタカナ・ひらがなで最大6文字まで刻印可能
※Aceは対象外です
※耳かけ型はカラーによって刻印ができないものもあります
※本体購入後の刻印は、修理扱い(¥8,640税込)

耳あな型補聴器

- 一人ひとりに合わせてオーダーメイド
- 耳に入れるだけなので装着が楽
- メガネや帽子と一緒に使える
- 耳あなに挿入するのでズレにくい
- 色が豊富

CIC コンプリートインカナル P.21 シーメンス最小サイズ			CIC(px)												
MC マイクロカナル P.21-22 目立たない			CIC(その他)							パワー					
			MC(px)							パワー		ハイパワー			
			MC(その他)							パワー		ハイパワー			
CT カナルタイプ P.22 定番サイズ			CT							パワー		ハイパワー			
COOL クール P.22 ワンタッチで着け心地快適			COOL							パワー					
LS フルサイズ P.22 高度難聴対応			LS							パワー					
ニトロ P.36 中～重度難聴対応の大パワー補聴器										Nitro					

RICタイプ

Pure ピュア
Carat カラット
Ace エース

TRT 詳しくは2ページをご覧ください。

耳の後ろにすっぽりと隠れる
小さなボディにハイスペック機能を搭載



装着イメージ



対応リモコン
(詳細は33ページへ)

GOOD DESIGN (easyTek boost)

適合聴力

使用電池
電池寿命(連続使用)



最小サイズ
エース
Ace

軽 中 ▶ 高

PR536 **10A**
[primax・binax]
S:約96時間/M・P・HP:約80時間



RICの定番
ピュア
Pure

軽 中 ▶ 高 重

PR41 **312**
[primax・binax] S:約148時間/M・P・HP:約125時間
[micon] S:約160時間/M・P・HP:約135時間



電池長持ち
カラット
Carat

軽 中 ▶ 高 重

PR48 **13**
[binax]
S:約235時間/M・P・HP:約216時間

お財布に
やさしい!
電池
寿命が
約**1.6倍**

※Pure(PR41電池使用)と比べた電池寿命

スマホアプリでも音量調節可能

タッチコントロールアプリ*をインストールすれば、あなたのスマートフォンが簡単リモコンになります。音量調節のほか、プログラム切替、音質調節やミュートもできます。

iPhoneも!アンドロイドも!



*primax・binax・Orion2のみ。アンドロイド Ver.4.0以上、iOS8.1以上に対応



安心の防水機能

汗・水・湿気に加え、砂やホコリにも強いIP67対応。水深1mに30分浸しても保護。



中も防水コーティング!!



お客様の声

知らないことをもっと知りたい。この気持ちは無限大です。大塚 久子 さん (80代・千葉県在住)

補聴器をつけようと思ったきっかけは、後ろからきた自転車のベルに気付かなかったことがあったから。最初はショックでしたが、娘に薦められて、わくわくしながら補聴器を選びました。友人からは、「いつもお元気でいいね」と言われ、うれしく思っています。



① 小さくて目立たない

補聴器本体からレシーバー(スピーカー)を外に出し、より小さく目立たなくなりました。



※1円玉との比較です

② ツインマイク

マイクを前向きに配置し、聞こえの性能がアップしました。

③ ロッカースイッチ

音量調節やプログラムの切り替えスイッチ。お好みで販売元で機能を割り合てられます。

④ ナノコート

表面も内部もナノレベルのコーティング。サビや水分による故障から守ります。



⑤ 防水・防塵対応

汗・水・湿気に加え、砂やホコリにも強いIP67*対応の補聴器。

*水に浸しても影響がないよう保護(水深1m、30分)



⑥ 長く使える

聴力が低下した場合にも、レシーバー交換で幅広い聴力に対応。「1台を長く使い続けたい」方におすすめです。

⑦ ミニレシーバー2.0

耳の奥に入れるタイプのレシーバー。鼓膜に音が直接伝わるので、豊かな音量と音質を得られます。



防水性能のシリコンパッキング

⑧ 名前刻印対応

詳しくは15ページへ

名入れ
対応

⑨ HPモード

高～重度難聴にも対応します。詳しくは54ページへ

⑩ 電池長持ち(Caratのみ)

PR48電池を使用しているため、電池寿命が長く、環境にもお財布にもやさしい補聴器。※レシーバーによって電池寿命が変わります

電池1粒 ▶ 約**235時間**

人気機種Pure(PR41電池使用)に比べ約1.6倍も電池長持ち。※binax SLレシーバーの時

⑪ 小型な電池(Aceのみ)

最も小型な電池を使用しています。

⑫ プッシュボタン

プログラムの切り替えスイッチ。お好みで販売元でプログラム調節できます。

豊富なカラーバリエーション

※★のカラーは名前刻印対象外です
※製品の色と形は印刷と異なる場合があります



ご購入後のカラー変更が可能です。2年保証期間中は¥6,000(非課税)、それ以後は¥9,000(非課税)です

耳かけ型タイプ

Motion S モーション S
Motion P モーション P

幅広い聴力に対応する
万能型耳かけ型タイプ



装着イメージ

TRT 詳しくは2ページをご覧ください。



対応リモコン
(詳細は33ページへ)

GOOD DESIGN (easyTek boost)

適合聴力

使用電池
電池寿命(連続使用)

<p>1 2 3 4 6 9</p> <p>小型タイプ モーション Motion S</p> <p>PR41 312 [primax] 約160時間</p>	<p>1 2 3 4 6 8</p> <p>耳かけ型の定番 モーション Motion SA, SX</p> <p>PR48 13 [primax・binax] 約216時間 [micon] 約250時間</p>	<p>1 2 3 4 6 8</p> <p>パワータイプ モーション Motion PX+, P</p> <p>PR48 13 [binax] 約216時間 [micon] 約230時間</p>	<p>1 2 3 4 6</p> <p>パワータイプ モーション Motion P</p> <p>PR48 13 [primax] 約216時間</p>
--	---	---	--

スマホアプリでも音量調節可能

タッチコントロールアプリ*をインストールすれば、あなたのスマートフォンが簡単にリモコンになります。音量調節のほか、プログラム切替、音質調節やミュートもできます。

iPhoneも!アンドロイドも!



*primax・binax, Orion2・Sirion2のみ。アンドロイド Ver.4.0以上、iOS8.1以上に対応



安心の防水機能

汗・水・湿気に加え、砂やホコリにも強いIP67対応。水深1mに30分浸しても保護。



中も防水コーティング!!



① スリムなデザイン

頑丈で人間工学に基づいたデザインだから耳にやさしく目立たないようにフィットします。

② ツインマイク

前方向の音にフォーカスし、他の角度から来る音を抑えるので話し相手との会話がスムーズになります。

③ ロッカースイッチ

使いやすいボリューム調節ボタン。簡単に音量など調節することができます。
*購入先でプログラム切り替えに変更することもできます

④ ナノコート

表面も内部もナノレベルのコーティング。サビや水分による故障から守ります。



⑤ Lifeチューブ / Thinチューブ

Lifeチューブ/Thinチューブに交換すると、周囲からより目立ちにくくなります。(別売)



⑥ 防水・防塵対応

汗・水・湿気に加え、砂やホコリにも強いIP67*対応の補聴器。
*水に浸しても影響がないよう保護(水深1m, 30分)



⑦ 名前刻印対応

詳しくは15ページへ



⑧ 調節ボタン

使いやすい音量調節ボタンとプログラム切り替えボタンを搭載。

⑨ プッシュボタン

プログラムの切り替えスイッチ。お好みで販売元でプログラム調節できます。



豊富なカラーバリエーション

※★のカラーは名前刻印対象外です
※製品の色と形は印刷と異なる事があります

Motion S モーション S <p>ベージュ01 グレー03 ブラウン04 ブラック05 シルバー06 ダークグラナイト66 ティーブレット73</p>	Motion SA, SX モーション SA, SX <p>ベージュ01 グラナイト02 グレー03 ブラウン04 ブラック05 シルバー06 ゴールドフロート30 サンディブラウン31 シャンパン37 グラナイト66</p>	primax 限定色 <p>ティーブレット73</p>	primax-binax 限定色 <p>キャンディーピンク60 キャラクティックブルー61 C★</p>	micon 限定色 <p>エルカスC12 パールホワイト07</p>
Motion P, PX+ モーション P, PX+ <p>ベージュ01 グラナイト02 グレー03 ブラック05 シルバー06 サンディブラウン31 グラナイト66</p>	primax 限定色 <p>ティーブレット73</p>	primax binax 限定色 <p>ブラウン04 パールホワイト07 ゴールドフロート30 ダークシャンパン37</p>	primax micon 限定色 <p>キャンディーピンク60 キャラクティックブルー61</p>	

ご購入後のカラー変更が可能です。2年保証期間中は¥6,000(非課税)、それ以後は¥9,000(非課税)です(Motion Sは除く)

オーダーメイド 耳あな型タイプ

Inzio インシオ



TRT 詳しくは2ページをご覧ください。

熟練した匠の手で、
小型で快適にお使いいただける補聴器を
一つひとつ丁寧に作り上げます。



対応リモコン
(詳細は33ページへ)



抗菌加工で清潔・簡単お手入れ

表面に抗菌効果のある
特殊なコーティングを施しているため
汚れが付着しても
簡単にお手入れできます。



便利なリモコン

※対応リモコンの詳細は
各器種のページを参照ください

名前刻印対応

詳しくは15ページへ



アクアプロテクト


汗・水・湿気に強いIP57対応

水やホコリの多い環境でお使いの方や、
スポーツなど、汗水に気を遣わないで
過ごしたい方におすすめです。

オプション

¥6,000 (非課税/1台につき)

対象器種: primax/binax/micon
シリーズのCIC、CIC 312以外

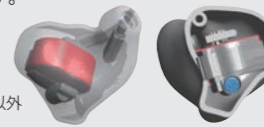

COOL パワーアップ サービス

ノーマルタイプをご購入後、
パワータイプに作り直す事(再作)が
できます。聴力変動後も安心して
COOLをお使いいただけます。

¥16,000 (非課税/1台につき)

対象器種: COOL/COOL13



目立たない・軽い

着脱しやすい・電池長持ち



シーメンス・シグニア最小サイズ
CIC



小さくても電池長持ち
CIC 312



リモコン対応
MC



リモコン対応で電池長持ち
MC 312



耳あな型の定番
CT / CT Twin



ワンタッチ補聴器
COOL



ワンタッチ補聴器で電池長持ち
COOL 13



高度難聴まで対応
LS / LS Twin

適合聴力

px	ノーマル	緑	中	~70dB
bx・mi	ノーマル	緑	中	~60dB
	パワー	黄	中	~70dB

px	ノーマル	緑	中	~70dB
bx・mi	ノーマル	緑	中	~60dB
	パワー	黄	中	~70dB

px	ノーマル	緑	中	~70dB
	パワー	黄	中	~80dB
	ハイパワー	中	高	~90dB
bx・mi	ノーマル	緑	中	~60dB
	パワー	黄	中	~70dB
	ハイパワー*1	中	高	~90dB

px	ノーマル	緑	中	~70dB
	パワー	黄	中	~80dB
	ハイパワー	中	高	~90dB
bx・mi	ノーマル	緑	中	~60dB
	パワー	黄	中	~70dB
	ハイパワー*1	中	高	~90dB

ノーマル	緑	中	~70dB
パワー	黄	中	~80dB
ハイパワー	中	高	~90dB
ツイン	緑	中	~70dB
ツインパワー	黄	中	~80dB
ツインハイパワー*1	中	高	~90dB

ノーマル	緑	中	~70dB
パワー	黄	中	~80dB

ノーマル	緑	中	~70dB
パワー	黄	中	~80dB

ノーマル	緑	中	~80dB
パワー	黄	中	~90dB
ツイン	緑	中	~80dB
ツインパワー	中	高	~90dB

使用電池 電池寿命(連続使用) PR536 10A 約80~90時間 PR41 312 約125~150時間 PR536 10A 約80~90時間 PR41 312 約125~150時間

PR41 312 約125~150時間 PR41 312 約125~150時間 PR48 13 約216~250時間 PR48 13 約216~250時間

※1 miconは除く ※耳の大きさに合わせて成形するため、サイズが多少大きくなる場合があります

スマホアプリでも音量調節可能

タッチコントロールアプリ*をインストールすれば、あなたのスマートフォンが簡単リモコンになります。音量調節のほか、プログラム切替、音質調節やミュートもできます。

iPhoneも! Androidも!



*primax・binax・Orion2・Sirion2のみ。Android Ver.4.0以上、iOS8.1以上に対応



小型の耳あな型
CIC・MC
にも対応!

匠の技を極めた工房「アトリエ」

ワンランク上のプレミアムサービス

対象製品: Inzio 7px・7bx・7mi・Nitro 7mi



- ① 電池10パックサービス
- ② 再作2年間無料サービス*1
- ③ 紛失保証(1年間)*1*2 (補聴器本体のみ)
- ④ アトリエ訪問*3
- ⑤ スピード修理サービス

*1 2・3の特典を受ける際は、プレミアム保証カードのご提示が必要です
*2 警察などの公的機関へ届出されたことを証明する信憑書類が必要となります
*3 販売店での事前予約が必要です

選べるカラーバリエーション

※製品の色と形は印刷と異なる場合があります

フェイスプレートとシェルでそれぞれお好きな色を選べます。(無料)

① シェル 耳の中に入る部分



① シェルの色を選ぶ



② フェイスプレート 外側に来る部分



② フェイスプレートの色を選ぶ

	CIC	CIC 312	MC	MC 312	CT/CT Twin	COOL	COOL13	LS/LS Twin
ページュ	—	標準	—	標準	標準	—	—	標準
モカ	標準	—	標準	—	—	—	—	—
ダーク ブラウン	—	—	—	—	—	—	—	—
ブラック	—	—	—	—	—	—	—	—
ホワイト	—	—	—	—	—	—	—	—






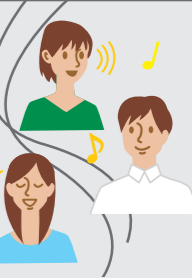
補聴器の比較

- プラットフォーム別
- クラス別

■ プラットフォーム別比較

<p>プライマックス primax</p> <p>2016年5月発売</p>	<p>きめ細かい聞こえ P.13</p> <p>48 ch 32 ch 24 ch</p>	<p>両耳通信 (補聴器の状態と音声も通信) P.14</p> <p>会話強調機能</p>	<p>日本語をしっかりと楽に。 P.11</p> <p>スピーチマスター</p>	<p>1年紛失保証</p> <p>7px・5px</p>
<p>バイナックス binax</p> <p>2014年発売</p>	<p>きめ細かい聞こえ P.13</p> <p>48 ch 32 ch 24 ch</p>	<p>両耳通信 (補聴器の状態と音声も通信) P.14</p> <p>会話強調機能</p>		
<p>マイコン micon</p> <p>2013年発売</p>	<p>きめ細かい聞こえ P.13</p> <p>48 ch 32 ch 24 ch</p>	<p>両耳通信 (補聴器の状態のみ通信)</p>		
<p>オリオン Orion2</p> <p>2015年発売</p>	<p>きめ細かい聞こえ P.13</p> <p>16 ch</p>	<p>両耳通信 (補聴器の状態のみ通信)</p>		
<p>シリオン Sirion2</p> <p>2015年発売</p>	<p>きめ細かい聞こえ P.13</p> <p>16 ch</p>			

■ クラス別機能比較

機能	アダプティブ ^{※1} (指向性)	サウンドスムージング	スピーチフォーカス ^{※1}	パワーエンハンス ^{※1} 会話強調機能	サウンドイコライザー 会話強調機能	12 kHz
機能の説明	自動で雑音を追尾して抑える。チャンネル数が多いほど、より多く抑制。	突発的な不快音を抑える。	レーダーのように前後左右の声を拾い、聞きやすくする。	横や後ろの音を大幅に下げ、正面の声を聞きやすくする。	音環境に合わせて、最適な音質に自動切り替え。	従来の補聴器では不可能だった高音域(12kHz)の音まで再生。
役立つシーン	 掃除機や車など動く騒音源を自動でしっかり抑えます。	 耳に響く、食器のあたる音・新聞をめくる音・ドアが閉まる音などを抑えます。	 カルチャー教室や車の中などで、隣や後の友人の声もしっかり聞くことができます。	 駅前・スーパーなどのざわざわした場所でも、正面からの声がぐっと聞きやすくなります。	 補聴器が自動的に、「会話」「音楽」「外出時」など環境にあった聞きやすさに切り替えます。	 原音に近い、より豊かで自然な聞き心地を得られます。
クラス						
シーメンス・シグニア補聴器の最上位器種						
プレミアム 7 48ch	★★★★★★ 自動:48chアダプティブ	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★	★★★★★★	★★★★ ^{※3}
一日中、ワンランク上の聞こえを実感						
アドバンス 5 32ch	★★★★★ 自動:32chアダプティブ	★★★★	★★★★	★★★★ ^{※2}	★★★★	
テレビや電話もクリアに聞こえる						
スタンダード 3 24ch	★★★★ 自動:24chアダプティブ	★★★★				
基本機能を重視した						
オリオン ^{※4} ベーシック Orion2 16ch	★★★ ^{※5} 自動:16chアダプティブ	★★ ^{※6}				
シンプル機能をお手軽価格で						
シリオン ^{※7} バリュー Sirion2 16ch	★ ^{※8} 自動:1バンド					
リモコン非対応、アプリのみに対応 ^{※7}						

※1 耳あな型のシングルマイク器種にはありません

※2 primax, binaxのみ ※3 Nitro 7miを除く ※4 Orion Plus RICは24chです ※5 Orion Plus RICは自動:1バンドアダプティブです ※6 Orion Plus RICは★★★★です ※7 タッチコントロール ※8 追尾はしません

シーメンス・シグニア補聴器 最上位器種

★★★★★★★★ 48ch 1年紛失保証



 最小サイズ Ace カラーバリエーションは18ページへ 適合聴力: 軽 ▶ 中 ▶ 高 使用電池: PR536 10A 電池寿命(連続使用): S:約96時間/M・P・HP:約80時間	 RICの定番 Pure カラーバリエーションは18ページへ 適合聴力: 軽 ▶ 中 ▶ 高 ▶ 重 使用電池: PR41 312 電池寿命(連続使用): S:約148時間/M・P・HP:約125時間	 耳かけ型の定番 Motion SA カラーバリエーションは20ページへ 適合聴力: 軽 ▶ 中 ▶ 高 使用電池: PR48 13 電池寿命(連続使用): 約216時間	 パワータイプ Motion P カラーバリエーションは20ページへ 適合聴力: 中 ▶ 高 ▶ 重 使用電池: PR48 13 電池寿命(連続使用): 約216時間
--	---	--	--

製品名	片耳価格	最大プログラム数 ^{*5}	対応リモコン
Ace Pure Motion SA Motion P	¥490,000	6	<ul style="list-style-type: none"> ●イージーテックブースト^{*6} ●イージーポケット^{*6} ●ミニポケット ○スマートフォン対応アプリ: タッチコントロール
販売名	補聴器 primaxシリーズ		

※補聴器は非課税です

きめ細かい聞こえ P.13	日本語をしっかりと。楽に。聞こえラクラク♪聞き取り P.11				日常生活で	外出時に	騒がしいところで	旅行・散策		
	全自動ダブルピン調整	固定電話 ^{*7*}	カラオケ・音楽	ホテルロビー	2~3人の会話	レストラン	受付	同窓会	車中	野外
48ch										



カラーバリエーションは22ページへ

Insio

CIC / CIC 312

MC / MC 312

CT / CT Twin

COOL / COOL 13

LS / LS Twin

適合聴力

ノーマル 軽 ▶ 中 ~70dB

ノーマル 軽 ▶ 中 ~70dB
 パワー 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~80dB
 ハイパワー 中 ▶ 高 ~90dB

ノーマル 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~70dB
 パワー 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~80dB
 ツイン 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~70dB
 ツインパワー 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~80dB
 ツインハイパワー 中 ▶ 高 ~90dB

ノーマル 軽 ▶ 中 ~70dB
 パワー 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~80dB

ノーマル 中 ▶ 高 ~80dB
 パワー 中 ▶ 高 ~90dB
 ツイン 中 ▶ 高 ~80dB
 ツインパワー 中 ▶ 高 ~90dB

使用電池
電池寿命(連続使用)

CIC PR536 **10A** 約80時間
 CIC 312 PR41 **312** 約125時間

MC PR536 **10A** 約80時間
 MC 312 PR41 **312** 約125時間

PR41 **312** 約125時間

PR41 **312** 約125時間
 PR48 **13** 約216時間

PR48 **13** 約216時間

製品名	片耳価格	最大プログラム数 ^{*5}	対応リモコン
ノーマル CIC / CIC 312 MC / MC 312 CT / COOL / COOL 13 / LS	¥500,000	6 CICとCIC 312はミニポケットまたはタッチコントロールアプリ使用で6	<ul style="list-style-type: none"> ●イージーテックブースト^{*6} ●イージーポケット^{*6} ●ミニポケット ○スマートフォン対応アプリ: タッチコントロール
パワー MC/パワー/MC 312/パワー CT/パワー/COOL/パワー/COOL13/パワー LS/パワー	¥510,000	6	
ハイパワー MC ハイパワー MC 312 ハイパワー CT ハイパワー	¥520,000	6	
ツイン CT Twin LS Twin	¥520,000	6	
ツインパワー CT Twin パワー LS Twin パワー	¥530,000	6	
ツインハイパワー CT Twin ハイパワー	¥540,000	6	
販売名	補聴器 primaxシリーズ カスタム		

オプション(無料)

	CIC / CIC 312	MC / MC 312	CT / CT Twin	COOL / COOL13	LS / LS Twin
環境スイッチ(メモリー)	—	●	●	○*4	●
ボリュームコントロール	—	—	●*1	○*1*4	●*1*2
テレコイル	—	—	—	—	●*2*3
オートフォン	—	—	—	●	●*2

※補聴器は非課税です

*1 ワイヤレスありの場合はデジタルボリューム(エンドレス)、ノンワイヤレスの場合はアナログボリューム(ストップエンド)になります

*2 テレコイルとボリュームコントロールは、オートフォンとの同時取り付けはできません

*3 リモコンまたはアプリなしでテレコイルを使う場合は、同時に環境スイッチ(メモリー)も必要となります

*4 環境スイッチとボリュームコントロールは同時に取り付けられません

*5 本体のプッシュボタンからリモコン・アプリを利用した時に得られる最大プログラム数です

*6 Ace、CIC、CIC 312を除く

*7 両耳装着で更に快適になります

*8 耳かけ型: Aceを除く。耳あな型: COOL、COOL13とLSにオプションで取得可能

※小型化のため、ノンワイヤレス仕様にすることもできますが、e2e(両耳間通信)とリモコン非対応になります

※耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できないことや、ご希望のオプションが付けられない場合があります

※オプションを複数取り付けた場合、形状が大きくなる場合があります

1日中、ワンランク上の聞こえを実感



32ch 1年紛失保証



詳しくは2ページをご覧ください。



最小サイズ
エース
Ace

カラーバリエーションは18ページへ

軽 中 ▶ 高

PR536 10A 約80時間
S:約96時間/M・P・HP:約80時間



RICの定番
ピュア
Pure

カラーバリエーションは18ページへ

軽 中 ▶ 高 重

PR41 312 約125時間
S:約148時間/M・P・HP:約125時間



耳かけ型の定番
モーション
Motion SA

カラーバリエーションは20ページへ

軽 中 ▶ 高

PR48 13 約216時間



（実物大）
パワータイプ
モーション
Motion P

カラーバリエーションは20ページへ

中 ▶ 高 重

PR48 13 約216時間

製品名	片耳価格	最大プログラム数 ^{*5}	対応リモコン
Ace Pure Motion SA Motion P	¥340,000	6	●イージーテックブースト ^{*6} ●イージーポケット ^{*6} ●ミニポケット ○スマートフォン対応アプリ：タッチコントロール
販売名	補聴器 primaxシリーズ		

※補聴器は非課税です

きめ細かい聞こえ P.13	日本語をしっかりと。楽に。聞こえラクラク♪聞き取り P.11				日常生活で	外出時に		騒がしいところで		旅行・散策
	全自動ダブルピン調整	固定電話 ^{*7*}	カラオケ・音楽	ホテルロビー		レストラン	受付	同窓会	車中	
32ch										



カラーバリエーションは22ページへ
※オプション対応

製品名	片耳価格	最大プログラム数 ^{*5}	対応リモコン
Insio CIC / CIC 312 MC / MC 312 CT / CT Twin	¥350,000	6	●イージーテックブースト ^{*6} ●イージーポケット ^{*6} ●ミニポケット ○スマートフォン対応アプリ：タッチコントロール
Insio 適合聴力 ノーマル 軽 ▶ 中 ~70dB	¥360,000	6	●イージーテックブースト ^{*6} ●イージーポケット ^{*6} ●ミニポケット ○スマートフォン対応アプリ：タッチコントロール
MC / MC 312 ノーマル 軽 ▶ 中 ~70dB パワー 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~80dB ハイパワー 中 ▶ 高 ~90dB	¥370,000		
CT / CT Twin ノーマル 軽 ▶ 中 ~70dB パワー 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~80dB ツイン 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~70dB ツインパワー 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~80dB ツインハイパワー 中 ▶ 高 ~90dB	¥370,000		
COOL / COOL 13 ノーマル 軽 ▶ 中 ~70dB パワー 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~80dB	¥380,000		
LS / LS Twin ノーマル 中 ▶ 高 ~80dB パワー 中 ▶ 高 ~90dB ツイン 中 ▶ 高 ~80dB ツインパワー 中 ▶ 高 ~90dB	¥390,000		
使用電池 電池寿命(連続使用)	CIC PR536 10A 約80時間 CIC 312 PR41 312 約125時間	MC PR536 10A 約80時間 MC 312 PR41 312 約125時間	PR41 312 約125時間 PR48 13 約216時間
販売名	補聴器 primaxシリーズ カスタム		

製品名	片耳価格	最大プログラム数 ^{*5}	対応リモコン
ノーマル CIC / CIC 312 MC / MC 312 CT / COOL / COOL 13 / LS	¥350,000	6	●イージーテックブースト ^{*6} ●イージーポケット ^{*6} ●ミニポケット ○スマートフォン対応アプリ：タッチコントロール
パワー MC / MC 312 CT / CT Twin	¥360,000	6	●イージーテックブースト ^{*6} ●イージーポケット ^{*6} ●ミニポケット ○スマートフォン対応アプリ：タッチコントロール
ハイパワー MC / MC 312 CT / CT Twin	¥370,000		
ツイン CT / CT Twin LS / LS Twin	¥370,000		
ツインパワー CT / CT Twin LS / LS Twin	¥380,000		
ツインハイパワー CT / CT Twin	¥390,000		
販売名	補聴器 primaxシリーズ カスタム		

オプション(無料)	CIC / CIC 312	MC / MC 312	CT / CT Twin	COOL / COOL 13	LS / LS Twin
環境スイッチ(メモリー)	—	●	●	○*4	●
ボリュームコントロール	—	—	●*1	○*1*4	●*1*2
テレコイル	—	—	—	—	●*2*3
オートフォン	—	—	—	●	●*2

※補聴器は非課税です
*1 ワイヤレスありの場合はデジタルボリューム(エンドレス)、ノンワイヤレスの場合はアナログボリューム(ストップエンド)になります
*2 テレコイルとボリュームコントロールは、オートフォンとの同時取り付けはできません
*3 リモコンまたはアプリなしでテレコイルを使う場合は、同時に環境スイッチ(メモリー)も必要となります
*4 環境スイッチとボリュームコントロールは同時に取り付けられません
*5 本体のプッシュボタンからリモコン・アプリを利用した時に得られる最大プログラム数です
*6 Ace、CIC、CIC 312を除く
*7 両耳装着で更に快適になります
*8 耳かけ型：Aceを除く。耳あな型：COOL、COOL13とLSにオプションで取得可能
※小型化のため、ノンワイヤレス仕様にすることもできますが、e2e(両耳間通信)とリモコン非対応になります
※耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できないことや、ご希望のオプションが付けられない場合があります
※オプションを複数取り付けた場合、形状が大きくなる場合があります

テレビや電話もクリアに聞こえる



24ch NEW

TRT 詳しくは2ページをご覧ください。



最小サイズ エース Ace	RICの定番 ピュア Pure	小型耳かけ型 モーション Motion S	耳かけ型の定番 モーション Motion SA	パワータイプ モーション Motion P
カラーバリエーションは18ページへ	カラーバリエーションは18ページへ	カラーバリエーションは20ページへ	カラーバリエーションは20ページへ	カラーバリエーションは20ページへ
適合聴力 軽 中 ▶ 高	適合聴力 軽 中 ▶ 高 重	適合聴力 軽 ▶ 中	適合聴力 軽 中 ▶ 高	適合聴力 中 ▶ 高 重
使用電池 電池寿命(連続使用) PR536 10A S:約96時間/M・P・HP:約80時間	使用電池 電池寿命(連続使用) PR41 312 S:約148時間/M・P・HP:約125時間	使用電池 電池寿命(連続使用) PR41 312 約160時間	使用電池 電池寿命(連続使用) PR48 13 約216時間	使用電池 電池寿命(連続使用) PR48 13 約216時間

製品名	片耳価格	最大プログラム数 ^{*5}	対応リモコン
Ace Pure Motion S Motion SA Motion P NEW	¥250,000	6	●イージーテックブースト ^{*6} ●イージーポケット ^{*6} ●ミニポケット ○スマートフォン対応アプリ:タッチコントロール
販売名	補聴器 primaxシリーズ		

※補聴器は非課税です

きめ細かい聞こえ P.13	日本語をしっかりと。楽に。 聞こえラクラク聞き取り P.11				日常生活で	外出時に	騒がしいところで		旅行・散策	
	全自動 ダブルピン調整	固定電話 ^{*7*}	カラオケ・音楽	ホテルロビー	2~3人の会話	レストラン	受付	同窓会	車中	野外
24ch										

カラーバリエーションは22ページへ
※オプション対応

製品名	片耳価格	最大プログラム数 ^{*5}	対応リモコン
Insio CIC / CIC 312 MC / MC 312 CT / CT Twin	¥260,000	6 CICとCIC 312はミニポケットまたはタッチコントロールアプリ使用で6	●イージーテックブースト ^{*6} ●イージーポケット ^{*6} ●ミニポケット ○スマートフォン対応アプリ:タッチコントロール
適合聴力 ノーマル 軽 中 ▶ 高	MC / MC 312 ノーマル 軽 ▶ 中 ~70dB パワー 軽 中 ▶ 高 ~80dB ハイパワー 中 ▶ 高 ~90dB	CT / CT Twin ノーマル 軽 ▶ 中 ~70dB パワー 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~80dB ツイン 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~70dB ツインパワー 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~80dB ツインハイパワー 中 ▶ 高 ~90dB	
使用電池 電池寿命(連続使用) CIC PR536 10A 約80時間 CIC 312 PR41 312 約125時間	MC PR536 10A 約80時間 MC 312 PR41 312 約125時間	PR41 312 約125時間	
COOL / COOL 13 LS / LS Twin	¥270,000	6	
適合聴力 ノーマル 軽 ▶ 中 ~70dB パワー 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~80dB	MC / MC 312 MC 312 PR41 312 約125時間	PR41 312 約125時間 PR48 13 約216時間	
使用電池 電池寿命(連続使用) PR41 312 約125時間 PR48 13 約216時間	MC / MC 312 MC 312 PR41 312 約125時間	PR41 312 約125時間 PR48 13 約216時間	

製品名	片耳価格	最大プログラム数 ^{*5}	対応リモコン
ノーマル CIC / CIC 312 MC / MC 312 CT / COOL / COOL 13 / LS	¥260,000	6 CICとCIC 312はミニポケットまたはタッチコントロールアプリ使用で6	●イージーテックブースト ^{*6} ●イージーポケット ^{*6} ●ミニポケット ○スマートフォン対応アプリ:タッチコントロール
パワー MC / MC 312 CT / CT Twin	¥270,000	6	
ハイパワー MC / MC 312 CT / CT Twin	¥280,000	6	
ツイン CT / CT Twin LS / LS Twin	¥280,000	6	
ツインパワー CT / CT Twin LS / LS Twin	¥290,000	6	
ツインハイパワー CT / CT Twin	¥300,000	6	
販売名	補聴器 primaxシリーズ カスタム		

オプション(無料)	CIC / CIC 312	MC / MC 312	CT / CT Twin	COOL / COOL 13	LS / LS Twin
環境スイッチ(メモリー)	—	●	●	○*4	●
ボリュームコントロール	—	—	●*1	○*1*4	●*1*2
テレコイル	—	—	—	—	●*2*3
オートフォン	—	—	—	●	●*2

※補聴器は非課税です
*1 ワイヤレスありの場合はデジタルボリューム(エンドレス)、ノンワイヤレスの場合はアナログボリューム(ストップエンド)になります
*2 テレコイルとボリュームコントロールは、オートフォンとの同時取り付けはできません
*3 リモコンまたはアプリなしでテレコイルを使う場合は、同時に環境スイッチ(メモリー)も必要となります
*4 環境スイッチとボリュームコントロールは同時に取り付けられません
*5 本体のプッシュボタンからリモコン・アプリを利用した時に得られる最大プログラム数です
*6 Ace、CIC、CIC 312を除く
*7 両耳装着で更に快適になります
*8 耳かけ型: Aceを除く。耳あな型: COOL、COOL13とLSにオプションで取得可能
※小型化のため、ノンワイヤレス仕様にすることもできますが、e2e(両耳間通信)とリモコン非対応になります
※耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できないことや、ご希望のオプションが付けられない場合があります
※オプションを複数取り付けた場合、形状が大きくなる場合があります

binax 7・5・3
バイナックス 7・5・3

micon 3
マイコン 3

TRT 詳しくは2ページをご覧ください。

7bx ★★★★★★ 48ch | 3bx ★★ 24ch

5bx ★★★★★ 32ch | 3mi ★ 24ch



※適合聴力、カラーバリエーションはP.17～P.20をご覧ください

製品名	クラス	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数 ^{*5}	対応リモコン
Pure Carat ^{*6} Motion SA、SX Motion PX+、P	7bx	¥470,000	48ch	6	●イージーテックブースト ●イージーポケット ●ミニポケット ◎スマートフォン対応アプリ:タッチコントロール
	5bx	¥290,000	32ch	6	
	3bx	¥220,000	24ch	6	
	3mi	¥200,000	24ch	6	
Ace	7bx	¥450,000	48ch	6	●ミニポケット ◎スマートフォン対応アプリ:タッチコントロール
	5bx	¥290,000	32ch	6	
	3bx	¥220,000	24ch	6	

販売名 補聴器 binaxシリーズ・補聴器 miconシリーズ

※Pure micon、Motion micon SXは在庫僅少品です ※補聴器は非課税です

きめ細かい聞こえ P.13	日本語をしっかり。楽に。聞こえラクラク聞き取り				会話強調機能 P.14	日常生活で	外出時に	騒がしいところで		旅行・散策
	全自動ダブルピント調整	固定電話	カラオケ・音楽	ホテルロビー		2～3人の会話	レストラン	受付	同窓会	車中
7bx	48ch	—	—	—	○	○	○	○	○	○
5bx	32ch	—	—	—	○	○	○	○	—	—
3bx	24ch	—	—	—	○	○	○	—	—	—
3mi	24ch	—	—	—	—	○	○	—	—	—



カラーバリエーションは22ページへ
※オプション対応



Insio CIC / CIC 312 MC / MC 312 CT / CT Twin COOL / COOL13 LS / LS Twin

※適合聴力、カラーバリエーションはP.21～22をご覧ください

製品名	クラス	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数 ^{*5}	対応リモコン	
ノーマル	CIC / CIC 312	7bx	¥470,000	48ch	6 CIC / CIC 312は1 (ただし、binaxはミニポケットまたはタッチコントロールアプリ使用で6)	[binax] CIC / CIC 312 ●ミニポケット ◎スマートフォン対応アプリ:タッチコントロール
	MC / MC 312	5bx	¥300,000	32ch		
	CT / COOL / COOL13	3bx	¥230,000	24ch		
	LS	3mi	¥200,000	24ch		
パワー	CIC パワー	7bx	¥480,000	48ch	6	MC / MC 312 / CT / COOL / COOL13 / LS ●イージーテックブースト ●イージーポケット ●ミニポケット ◎スマートフォン対応アプリ:タッチコントロール
	CIC 312 パワー	5bx	¥310,000	32ch		
	MC 312 パワー	3bx	¥240,000	24ch		
	CT パワー / COOL パワー / COOL13 パワー / LS パワー	3mi	¥210,000	24ch		
ハイパワー	MC ハイパワー	7bx	¥490,000	48ch	6	[micon] MC / MC 312 / CT / COOL / COOL13 / LS ●ミニテック ●イージーポケット
	MC 312 ハイパワー	5bx	¥320,000	32ch		
	CT ハイパワー	3bx	¥250,000	24ch		
ツイン	CT Twin LS Twin	7bx	¥490,000	48ch	6	
		5bx	¥320,000	32ch		
		3bx	¥250,000	24ch		
		3mi	¥220,000	24ch		
ツインパワー	CT Twin パワー LS Twin パワー	7bx	¥500,000	48ch	6	
		5bx	¥330,000	32ch		
		3bx	¥260,000	24ch		
		3mi	¥230,000	24ch		
ツインハイパワー	CT Twin ハイパワー	7bx	¥510,000	48ch	6	
		5bx	¥340,000	32ch		
		3bx	¥270,000	24ch		

販売名 補聴器 binaxシリーズ カスタム・補聴器 miconシリーズ カスタム

※Insio miconは在庫僅少品です ※補聴器は非課税です

オプション(無料)	CIC / CIC 312	MC / MC 312	CT / CT Twin	COOL / COOL13	LS / LS Twin
環境スイッチ(メモリー)	—	●	●	○*4	●
ボリュームコントロール	—	—	●*1	○*1*4	●*1*2
テレコイル	—	—	—	—	●*2*3
オートフオン	—	—	—	●	●*2

*1 ワイヤレスありの場合はデジタルボリューム(エンドレス)、ノンワイヤレスの場合はアナログボリューム(ストップエンド)になります

*2 テレコイルとボリュームコントロールは、オートフオンとの同時取り付けはできません

*3 リモコンまたはアプリなしでテレコイルを使う場合は、同時に環境スイッチ(メモリー)も必要となります

*4 環境スイッチとボリュームコントロールは同時に取り付けられません

*5 本体のプッシュボタンからリモコン・アプリを利用した時に得られる最大プログラム数です

*6 3miを除く

※小型化のため、ノンワイヤレス仕様にすることもできますが、e2e(両耳間通信)とリモコン非対応になります

※耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できないことや、ご希望のオプションが付けられない場合があります

※オプションを複数取り付けた場合、形状が大きくなる場合があります

テレビや音楽、携帯電話など
全ての接続がボタン1つで実現。
更に操作が簡単に、スマートになりました。

■ ボタンを押すだけ! テレビの音がはっきり聞こえる!


イージーテックブーストやミニテックを経由して、テレビの音声を直接補聴器に届けるので、明瞭な音声で聞くことができます。テレビ本体の音量とは別の音量で聞けるので、ご家族に気がねなく、聞くことができます。



■ 電話をかける/受ける がカンタンに!

イージーテックブーストとミニテックは、電話のやり取りが格段に簡単でスマートになりました。着信→通話→終話の全てをボタン1つでできます。

携帯電話はポケットにしまっておいても大丈夫。

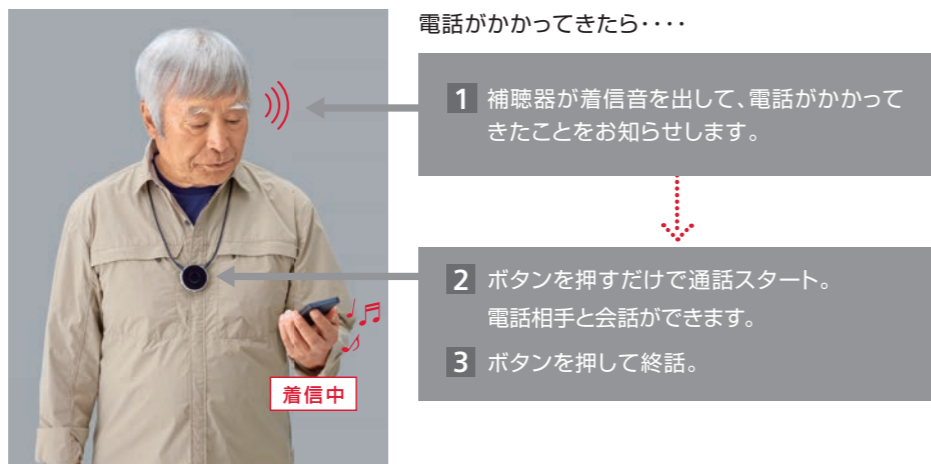

- 電話がかかってきたら・・・
- 1 補聴器が着信音を出して、電話がかかってきたことをお知らせします。
 - 2 ボタンを押すだけで通話スタート。電話相手と会話ができます。
 - 3 ボタンを押して終話。

GOOD DESIGN



つながりだけで
TVのサウンドを楽しめる!
イージーテックブースト
easyTek boost

プライマックス バイナックス オリオン
primax・binax・Orion2用

¥54,000(税込)(テレビバック)

- 1 ファンクションボタン
- 2 ボリュームボタン
- 3 3.5mmステレオ入力
- 4 FM入力端子




つながりだけで
TVのサウンドを楽しめる!
ミニテック
miniTek

マイコン オリオンプラス
micon・Orion Plus用

¥43,200(税込)

- 1 電話ボタン
- 2 プログラムボタン
- 3 ボリュームボタン
- 4 2.5mmステレオ入力
- 5 FM入力端子

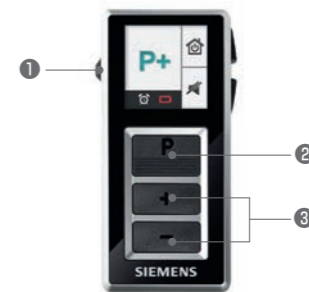

音量調節を手元で簡単に
イージーポケット
easyPocket

プライマックス バイナックス マイコン
primax・binax・micon・
オリオン オリオンプラス オリオン
Orion2・Orion Plus・Orion用

¥21,600(税込)

- 1 ロックスイッチ
- 2 プログラムボタン
- 3 ボリュームボタン



音量調節を手元で簡単に
ミニポケット
miniPocket

プライマックス バイナックス
primax・binax
オリオン シリオン
Orion2・Sirion2用

¥19,440(税込)

- 1 誤作動防止ロック
- 2 ボリュームボタン
- 3 プログラムボタン

※リモコンの詳細はP.49~をご覧ください



Nitro
ニトロ

micon


TRT 詳しくは2ページをご覧ください。



Nitro SP micon
(実物大)



装着イメージ

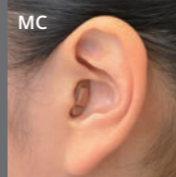

MC
耳の奥にフィットする
小型タイプ



CT/CT Twin
補聴器の定番カナルタイプ
ツインマイク搭載タイプも



LS/LS Twin
重度難聴対応フルサイズ
ツインマイク搭載タイプも



(7miのみ)
詳しくは21ページへ

アクアプロテクト

汗・水・湿気に強いIP57対応

水やホコリの多い環境でお使いの方や、
スポーツなど、汗水に気を遣わないで
過ごしたい方におすすめです。

オプション
¥6,000
(非課税/1台につき)



高～重度難聴対応のシーメンス最高出力 スーパーパワー補聴器

高度・重度難聴の方に対応したスーパーパワー補聴器。従来品より30%小型化しながら頑丈に作られており、壊れにくくお子様にもお使いいただいています。使いやすさと快適な装着感で職場やレジャーで日々の生活をサポートします。

① スリムなデザイン

② 調節ボタン

③ ツインマイク

④ LEDライト

⑤ ナノコート

⑥ 防水・防塵対応

⑦ 名前刻印対応

電源オンやプログラム変更、ロック、解除で赤く点滅してお知らせします。
*購入先で、LEDライトのオン/オフ設定ができます



名入れ対応

詳しくは15ページへ

豊富なカラーバリエーション

*製品の色と形は印刷と異なる事があります

Nitro SPmiconは全6色。ご購入後のカラー変更はできません。



製品名		SP	
難聴レベル	適合聴力	難聴レベル	適合聴力
クラス	チャンネル数	クラス	チャンネル数
7mi	48ch	高 ▶ 重	~110dB
3mi	24ch	片耳価格	
最大プログラム数*4		¥430,000	
対応リモコン		¥240,000	
使用電池/電池寿命(連続使用)		6	
販売名		●ミニテック ●イージーポケット	
		PR44 675 約350時間	
		補聴器 miconシリーズ	

*補聴器は非課税です

Nitro スーパーパワー耳あな型補聴器

● 選べるカラーバリエーション

詳しくは22ページへ

詳しくは15ページへ

製品名		MC/CT/LS	
難聴レベル	適合聴力	難聴レベル	適合聴力
クラス	チャンネル数	中 ▶ 高 重	~100dB
7mi	48ch	片耳価格	
3mi	24ch	¥470,000	
最大プログラム数*4		¥260,000	
対応リモコン		6	
使用電池/電池寿命(連続使用)		●ミニテック ●イージーポケット(詳細は下記の表をご参照ください)	
販売名		MC PR536 10A 約90時間	CT PR41 312 約130時間
		LS PR48 13 約220時間	
		補聴器 miconシリーズ カスタム	

製品名		MC		CT/CT Twin		LS/LS Twin	
マトリクス(2cc)	適合聴力	マトリクス(2cc)	適合聴力	マトリクス(2cc)	適合聴力	マトリクス(2cc)	適合聴力
環境スイッチ(メモリー)		●	●	●	●	●	●
オプション(無料)	ボリュームコントロール	—	—	●*1	●*1	●*1*2	●*1*2
	テレコイル/オートフォン	—	—	—	—	●*2*3	●*2*3
	リモコン・e2e機能	●	—	●	—	●	●

*1 ワイヤレスありの場合はデジタルボリューム(エンドレス)、ノンワイヤレスの場合はアナログボリューム(ストップエンド)になります *2 テレコイルとボリュームコントロールは、オートフォンとの同時取り付けはできません *3 リモコンなしでテレコイルを使う場合は、同時に環境スイッチ(メモリー)も必要となります *4 本体のプッシュボタン/リモコンを利用した時に得られる最大プログラム数です *小型化のため、ノンワイヤレス仕様にすることもできますが、e2e(両耳間通信)とリモコン非対応になります *耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できないことや、ご希望のオプションが付けられない場合があります *オプションを複数取り付けた場合、形状が大きくなる場合があります

お客様の声



世界で通用するアスリートとして、もっと強くなりたい。
それが僕の原動力です。

トレーニングの毎日ですが、それも「もっと早く走れる様になりたい」といった強い思いから。僕の補聴器は、防水性や防塵性にも優れているので、練習三昧で大量の汗をかく僕にとってピッタリです。これからも練習に励み、補聴器と一緒に引き続き邁進していきたいと思っています。

岡部 祐介 さん (2013年デフリンピック陸上競技日本代表選手(400m))

お客様の声



音や声が聞こえる嬉しさと大切さを
感じられるようになりました。

両耳の聴力が短期間のうちに低下し、高度難聴と診断されました。補聴器を着けるようになり聞こえる嬉しさと大切さを感じられるようになりました。進行する難聴で重度難聴となりましたが、多くの方々に出会い支えられて感謝しています。

荒井 由紀子 さん (東京都在住)

Orion2シリーズ オリオン2

こんな方におすすめ!

- 初めて補聴器を使う

TRT 詳しくは2ページをご覧ください。



対応リモコン
(詳細は33ページへ)

GOOD DESIGN (easyTek boost)

最新機能が加わった最新ベーシックモデル、新登場!

シーメンス・シグニアの最新プレミアム技術を受け継ぎ、聞こえも使いやすさも上位器種に近づいたラインナップ。お求めやすい価格ながらも、高い機能とスマートで簡単な使いやすさは、もはやプレミアム器種級。

- Life チューブ (SIMIPのみ) (別売)

- ツインマイク (耳あな型はTwinのみ対応)

- 名前刻印対応 名入れ対応 詳しくは15ページへ

- ナノコート (耳かけ型のみ)

- 防水・防塵対応 (耳かけ型のみ)



- スマートフォンをオリオン2のリモコンとして使えます。



全てのiPhoneやAndroid携帯に対応
タッチコントロールアプリ*

Google PlayやApp Storeから無償
アプリインストールで、音量調節を
スマートフォンの画面上で操作できます。
*Android Ver.4.0以上、iOS8.1以上に対応



豊富なカラーバリエーション

※製品の色と形は印刷と異なる事があります



S/M/P
*03, 04, 05, 06は
各色+ダークグラナイトの
2トーンカラーです



製品名	難聴レベル	適合聴力	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数 ^{*6}	対応リモコン	使用電池 / 電池寿命 (連続使用)
RIC	軽 ● 中 ▶ 高 ● 重 ●	~100dB	¥160,000	16ch	4	●イージーテックブースト ●イージーポケット ●ミニポケット ◎スマートフォン対応アプリ: タッチコントロール	PR41 312 S: 約148時間 / M-P: 約125時間
ミニ耳かけ型S	軽 ● 中 ▶	~65dB	¥150,000	16ch	4		PR41 312 約160時間
耳かけ型M	軽 ● 中 ▶ 高 ●	~85dB	¥150,000	16ch	4		PR48 13 約255時間
耳かけ型P	中 ● 重 ●	~100dB	¥150,000	16ch	4		PR48 13 約235時間
販売名	補聴器 Orion2						

※補聴器は非課税です

RICのみ、ご購入後のカラー変更が可能です。2年保証期間中は¥6,000 (非課税)、それ以後は¥9,000 (非課税) です。RIC以外は、ご購入後のカラー変更はできません

- 抗菌加工で清潔・簡単お手入れ (耳あな型のみ)



- 名前刻印対応 名入れ対応 詳しくは15ページへ

選べるカラーバリエーション

詳しくは22ページへ (COOL/COOL13のみ)

COOL パワーアップ サービス

詳しくは22ページへ



(実物大)

CIC / CIC 312

適合聴力

ノーマル ●▶● 中 ● ~60dB
パワー ●▶● 中 ● ~70dB

使用電池
電池寿命(連続使用)

CIC PR536 **10A** 約80時間
CIC 312 PR41 **312** 約125時間



MC / MC 312

ノーマル ●▶● 中 ● ~60dB
パワー ●▶● 中 ● ~70dB

MC PR536 **10A** 約80時間
MC 312 PR41 **312** 約125時間



CT / CT Twin

ノーマル ●▶● 中 ● ~70dB
パワー ●▶● 中 ● 高 ● ~80dB
ツイン ●▶● 中 ● ~70dB
ツインパワー ●▶● 中 ● 高 ● ~80dB

PR41 **312** 約125時間



COOL / COOL13

ノーマル ●▶● 中 ● ~70dB
パワー ●▶● 中 ● 高 ● ~80dB

PR41 **312** 約125時間
PR48 **13** 約216時間



LS / LS Twin

ノーマル ●▶● 中 ● 高 ● ~80dB
パワー ●▶● 中 ● 高 ● ~90dB
ツイン ●▶● 中 ● 高 ● ~80dB
ツインパワー ●▶● 中 ● 高 ● ~90dB

PR48 **13** 約216時間

※カラーはページのみ (COOLを除く)

製品名	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数 ^{*6}	対応リモコン
ノーマル CIC / CIC 312 MC / MC 312 CT / COOL / COOL13 / LS	¥150,000	16ch	4 CICとCIC312は1 (ミニポケットまたは タッチコントロール アプリ使用で4)	●イージーテックブースト (CIC / CIC 312は除く) ●イージーポケット (CIC / CIC 312は除く) ●ミニポケット ◎スマートフォン対応アプリ: タッチコントロール
パワー CICパワー / CIC 312パワー MCパワー / MC 312パワー / CTパワー COOLパワー / COOL13パワー / LSパワー	¥160,000			
ツイン CT Twin LS Twin	¥170,000			
ツインパワー CT Twin パワー LS Twin パワー	¥180,000			
販売名	補聴器 Orion2 カスタム			

オプション(非課税): 1台¥12,000

	CIC / CIC 312	MC / MC 312	CT / CT Twin	COOL / COOL13	LS / LS Twin
環境スイッチ(メモリー)	—	●	●*1	○*5	●*1
ボリュームコントロール	—	—	●*2	○*2*5	●*2*3
テレコイル	—	—	—	—	●*3*4
オートフォン	—	—	—	●	●*3

- *1 Twinタイプはご注文時に指定があれば、無料で取り付け可能です ※補聴器は非課税です
- *2 ワイヤレスありの場合はデジタルボリューム(エンドレス)、ノンワイヤレスの場合はアナログボリューム(ストップエンド)になります
- *3 テレコイルとボリュームコントロールは、オートフォンとの同時取り付けはできません
- *4 リモコンまたはアプリなしでテレコイルを使う場合は、同時に環境スイッチ(メモリー)も必要となります
- *5 環境スイッチとボリュームコントロールは同時に取り付けられません
- *6 本体のプッシュボタンからリモコン、アプリを利用した時に得られる最大プログラム数です
- ※小型化のため、ノンワイヤレス仕様にすることもできますが、e2e(両耳間通信)とリモコン非対応になります
- ※耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できないことや、ご希望のオプションが付けられない場合があります
- ※オプションを複数取り付けた場合、形状が大きくなる場合があります

Orionシリーズ オリオン

こんな方におすすめ！
●初めて補聴器を使う

TRT 詳しくは2ページをご覧ください。



- 抗菌加工で清潔・簡単お手入れ (耳あな型のみ)
- 名前刻印対応 名入れ対応 詳しくは15ページへ

選べるカラーバリエーション
詳しくは22ページへ (COOL/COOL13のみ)

COOL パワーアップ サービス 安心
詳しくは22ページへ

お求めやすい価格で選べるベーシックモデル

- Life チューブ (S/MIPのみ) (別売)
- ツインマイク (耳あな型はTwinのみ対応)
- 名前刻印対応 名入れ対応 詳しくは15ページへ



適合聴力	CIC / CIC 312	MC / MC 312	CT / CT Twin	COOL / COOL13	LS / LS Twin
ノーマル	● 軽 ● 中 ● 高 ● 重	● 軽 ● 中 ● 高 ● 重	● 軽 ● 中 ● 高 ● 重	● 軽 ● 中 ● 高 ● 重	● 軽 ● 中 ● 高 ● 重
パワー	● 軽 ● 中 ● 高 ● 重	● 軽 ● 中 ● 高 ● 重	● 軽 ● 中 ● 高 ● 重	● 軽 ● 中 ● 高 ● 重	● 軽 ● 中 ● 高 ● 重
使用電池	CIC PR536 10A 約90時間	MC PR536 10A 約90時間	PR41 312 約150時間	PR41 312 約150時間	PR48 13 約250時間
電池寿命(連続使用)	CIC 312 PR41 312 約150時間	MC 312 PR41 312 約150時間	PR41 312 約150時間	PR48 13 約250時間	PR48 13 約250時間

豊富なカラーバリエーション ※製品の色と形は印刷と異なる事があります



製品名	難聴レベル	適合聴力	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数 ^{*6}	対応リモコン	使用電池/電池寿命(連続使用)
Plus RIC	● 軽 ● 中 ● 高 ● 重	~100dB	¥170,000	24ch	6	●ミニテック ●イージーポケット	PR41 312 約160時間
RIC	● 軽 ● 中 ● 高 ● 重	~100dB	¥120,000	16ch	4	●イージーポケット	S:約160時間/M-P:HP:約135時間
ミニ耳かけ型S <small>在庫僅少品です</small>	● 軽 ● 中	~65dB	¥120,000	16ch	4	●イージーポケット	PR41 312 約160時間
耳かけ型M <small>在庫僅少品です</small>	● 軽 ● 中 ● 高	~85dB	¥120,000	16ch	4	●イージーポケット	PR48 13 約255時間
耳かけ型P <small>在庫僅少品です</small>	● 中 ● 高 ● 重	~100dB	¥120,000	16ch	4		PR48 13 約235時間
耳かけ型SP	● 高 ● 重	~110dB	¥150,000	16ch	4		PR44 675 約350時間

販売名 [Plus RIC] 補聴器 Octiv(形式Octiv R+) [RIC、ミニ耳かけ型S、耳かけ型M、耳かけ型P、耳かけ型SP] 補聴器 ORION ※補聴器は非課税です

Plus RIC、RICのみ、ご購入後のカラー変更が可能です。2年保証期間中は¥6,000(非課税)、それ以後は¥9,000(非課税)です。Plus RIC、RIC以外は、ご購入後のカラー変更はできません

製品名	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数 ^{*6}	対応リモコン
ノーマル CIC / CIC 312 MC / MC 312 CT / COOL / COOL13 / LS <small>在庫僅少品です</small>	¥120,000	16ch	4 CICとCIC312は1	●イージーポケット (CIC / CIC 312は除く)
パワー CIC / パワー / CIC 312 / パワー MC / パワー / MC 312 / パワー / CT / パワー COOL / パワー / COOL13 / パワー / LS / パワー <small>在庫僅少品です</small>	¥130,000			
ツイン CT Twin LS Twin <small>在庫僅少品です</small>	¥140,000			
ツインパワー CT Twin パワー LS Twin パワー <small>在庫僅少品です</small>	¥150,000			

販売名 補聴器 ORION カスタム

オプション(非課税): 1台¥12,000

	CIC / CIC 312	MC / MC 312	CT / CT Twin	COOL / COOL13	LS / LS Twin
環境スイッチ(メモリー)	—	●	●*1	○*5	●*1
ボリュームコントロール	—	—	●*2	○*2*5	●*2*3
テレコイル	—	—	—	—	●*3*4
オートフォン	—	—	—	●	●*3

- *1 Twinタイプはご注文時に指定があれば、無料で取り付け可能です ※補聴器は非課税です
- *2 ワイヤレスありの場合はデジタルボリューム(エンドレス)、ノンワイヤレスの場合はアナログボリューム(ストップエンド)になります
- *3 テレコイルとボリュームコントロールは、オートフォンとの同時取り付けはできません
- *4 リモコンなしでテレコイルを使う場合は、同時に環境スイッチ(メモリー)も必要となります
- *5 環境スイッチとボリュームコントロールは同時に取り付けられません
- *6 本体のプッシュボタンからリモコンを利用した時に得られる最大プログラム数です
- ※小型化のため、ノンワイヤレス仕様にすることもできますが、e2e(両耳間通信)とリモコン非対応になります
- ※耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できないことや、ご希望のオプションが付けられない場合があります
- ※オプションを複数取り付けた場合、形状が大きくなる場合があります

Sirion2シリーズ

シリオン2

こんな方におすすめ!

- 初めて補聴器を使う
- 価格重視で最新モデルが欲しい



お求めやすい価格のバリューモデル、新登場!

シーメンスの最新技術を受け継ぎ、より自然な聞こえと使いやすさにお求めやすさをプラス。スマホやリモコンの併用で操作もスマートに、簡単にできます。

● Life チューブ

Life チューブに交換すると、周囲からより目立ちにくくなります。(別売)

● ツインマイク (耳あな型はTwinのみ対応)

● 名前刻印対応 詳しくは15ページへ

豊富なカラーバリエーション ※製品の色と形は印刷と異なる場合があります

S/M/Pはご購入後のカラー変更はできません。
*SPのみ、ご購入後のカラー変更が可能です。2年保証期間中は¥6,000(非課税)、それ以後は¥9,000(非課税)です



● ナノコート(耳かけ型のみ)

● 防水・防塵対応(耳かけ型のみ)

汗・水・湿気に加え、砂やホコリにも強いIP67*対応の補聴器。
*水に浸しても影響がないよう保護(水深1m、30分)

● スマートフォンをシリオン2のリモコンとして使えます。

全てのiPhoneやAndroid携帯に対応
タッチコントロールアプリ*

Google PlayやApp Storeから無償アプリインストールで、音量調節をスマートフォンの画面上で操作できます。
*Android Ver.4.0以上、iOS8.1以上に対応

製品名	難聴レベル	適合聴力	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数 ^{*5}	対応リモコン	使用電池/電池寿命(連続使用)
ミニ耳かけ型S	軽 ▶ 中	~65dB	¥110,000	16ch	4	●ミニポケット	PR41 312 約160時間
耳かけ型M	軽 ▶ 中 ▶ 高	~85dB	¥110,000	16ch	4	◎スマートフォン対応アプリ:タッチコントロール	PR48 13 約255時間
耳かけ型P	中 ▶ 重	~100dB	¥110,000	16ch	4		PR48 13 約235時間
耳かけ型SP	高 ▶ 重	~110dB	¥130,000	16ch	4		PR44 675 約350時間

販売名: 補聴器 Sirion2

※補聴器は非課税です

● 抗菌加工で清潔・簡単お手入れ (耳あな型のみ)

● 名前刻印対応 詳しくは15ページへ

(実物大)	CIC / CIC 312	MC / MC 312	CT / CT Twin	COOL / COOL13	LS / LS Twin
適合聴力	ノーマル 軽 ▶ 中 ~60dB パワー 軽 ▶ 中 ~70dB	ノーマル 軽 ▶ 中 ~60dB パワー 軽 ▶ 中 ~70dB	ノーマル 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~70dB パワー 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~80dB ツイン 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~70dB ツインパワー 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~80dB	ノーマル 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~70dB パワー 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~80dB	ノーマル 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~80dB パワー 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~90dB ツイン 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~80dB ツインパワー 軽 ▶ 中 ▶ 高 ~90dB
使用電池	CIC PR536 10A 約80時間	MC PR536 10A 約80時間	PR41 312 約125時間	PR41 312 約125時間	PR41 312 約125時間
電池寿命(連続使用)	CIC312 PR41 312 約125時間	MC312 PR41 312 約125時間	PR41 312 約125時間	PR48 13 約216時間	PR48 13 約216時間

※カラーはページのみのみ

製品名	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数 ^{*5}	対応リモコン
ノーマル CIC / CIC 312 CT / COOL / COOL13 / LS MC / MC 312	¥110,000 ¥122,000	16ch	4 CICとCIC 312は1 (ミニポケットまたは タッチコントロール アプリ使用で4)	●ミニポケット ◎スマートフォン対応アプリ:タッチコントロール
パワー CIC パワー / CIC 312 パワー / CT パワー COOL パワー / COOL13 パワー / LS パワー MC パワー / MC 312 パワー	¥120,000 ¥132,000			
ツイン CT Twin LS Twin	¥130,000			
ツインパワー CT Twin パワー LS Twin パワー	¥140,000			
販売名	補聴器 Sirion2 カスタム			

オプション(非課税): 1台¥12,000

	CIC / CIC 312	MC / MC 312	CT / CT Twin	COOL / COOL13	LS / LS Twin
環境スイッチ(メモリー)	—	●(標準搭載)	●*4	○*3	●*4
ボリュームコントロール	—	—	●*1	○*1*3	●*1
テレコイル	—	—	—	—	●*2

- *1 アナログボリューム(ストップエンド)になります
- *2 同時に環境スイッチ(メモリー)も必要になります
- *3 環境スイッチとボリュームコントロールは同時に取り付けられません
- *4 Twinタイプはご注文時に指定があれば、無料で取り付け可能です
- *5 本体のプッシュボタンまたはミニポケット、アプリを利用した時に得られる最大プログラム数です
- ※耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できないことや、ご希望のオプションが付けられない場合があります
- ※オプションを複数取り付けた場合、形状が大きくなる場合があります

COOL パワーアップ サービス 安心
詳しくは22ページへ

Intuis2シリーズ インティス2

こんな方におすすめ!

- 価格重視で基本性能を備えた補聴器が欲しい



基本性能を備えたエントリーモデルの最新器種新登場!

価格重視で基本性能を備えるインティスシリーズが最新機能を搭載してリニューアル。毎日の聞こえをサポートします。

● Life チューブ

Life チューブに交換すると、周囲からより目立ちにくくなります。(別売)

● ツインマイク (耳かけ型のみ)

前方向の音にフォーカスし、他の角度から来る音を抑えるので話し相手との会話がスムーズになります。

● 名前刻印対応 詳しくは15ページへ

● ナノコート (耳かけ型のみ)

ナノレベルのコーティングが補聴器をサビや水分による故障から守ります。

● 防水・防塵対応 (耳かけ型のみ)

汗・水・湿気に加え、砂やホコリにも強いIP67*。
*水に浸しても影響がないよう保護(水深1m、30分)



豊富なカラーバリエーション

※製品の色と形は印刷と異なる事があります

S/M/Pはご購入後のカラー変更はできません。*SPのみ、ご購入後のカラー変更が可能です。2年保証期間中は¥6,000(非課税)、それ以後は¥9,000(非課税)です

S/M/P *03、04、05、06は各色+ダークグラナイトの2トーンカラーです



製品名	難聴レベル	適合聴力	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数*3	対応リモコン	使用電池/電池寿命(連続使用)
ミニ耳かけ型S	軽 ▶ 中	~65dB	¥79,800	12ch	4	—	PR41 312 約160時間
耳かけ型M	軽 ▶ 中 ▶ 高	~85dB	¥79,800	12ch	4	—	PR48 13 約255時間
耳かけ型P	中 ▶ 重	~100dB	¥79,800	12ch	4	—	PR48 13 約235時間
耳かけ型SP	高 ▶ 重	~110dB	¥98,000	12ch	4	—	PR44 675 約350時間
販売名	補聴器 Intuis2						

※補聴器は非課税です

● 抗菌加工で清潔・簡単お手入れ (耳あな型のみ)

表面に抗菌効果のある特殊なコーティングを施しているため、汚れが付着しても簡単にお手入れできます。



● 名前刻印対応 詳しくは15ページへ

(実物大)	CIC / CIC 312	MC / MC 312	CT	LS
適合聴力	ノーマル ▶ ~60dB パワー ▶ ~70dB	ノーマル ▶ ~60dB パワー ▶ ~70dB	ノーマル ▶ ~70dB パワー ▶ ~80dB	ノーマル ▶ ~80dB パワー ▶ ~90dB
使用電池	CIC PR536 10A 約80時間	MC PR536 10A 約80時間	PR41 312 約125時間	PR48 13 約216時間
電池寿命(連続使用)	CIC 312 PR41 312 約125時間	MC 312 PR41 312 約125時間		

※カラーはページのみ

製品名	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数*3	対応リモコン
ノーマル CIC / CIC 312 CT / LS	¥98,000	12ch	4 CICとCIC 312は1	—
MC / MC 312	¥110,000			
パワー CIC パワー / CIC 312 パワー CT パワー / LS パワー	¥108,000			
MC パワー / MC 312 パワー	¥120,000			

販売名 補聴器 Intuis2 カスタム

オプション(非課税): 1台¥12,000

	CIC / CIC 312	MC / MC 312	CT	LS
環境スイッチ(メモリー)	—	● (標準搭載)	●	●
ボリュームコントロール	—	—	● *2	● *2
テレコイル	—	—	—	● *1

- *1 同時に環境スイッチ(メモリー)も必要となります
 - *2 アナログボリュームです
 - *3 本体のプッシュボタンを利用した時に得られる最大プログラム数です
- ※補聴器は非課税です
※コントロールオプションを複数取り付けた場合、形状が大きくなる場合があります
※耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できないことや、ご希望のオプションが付けられない場合があります

Prompt プロンプト

NEW



基本性能を備えた補聴器

価格重視で、基本性能を備えた耳かけ型補聴器。快適な装用感と基本性能が毎日の聞こえをサポートします。

- **Life チューブ**
Life チューブに交換すると、周囲からより目立ちにくくなります。(Sのみ) (別売)
- **ツインマイク**
マイクを前向きに配置し、聞こえの性能がアップしました。
- **プッシュボタン**
プログラムの切り替えスイッチ。お好みで販売元でプログラム調節できます。
- **ボリューム付 (MPのみ)**
簡単に音量調節ができます。
- **名前刻印対応** 名入れ対応
詳しくは15ページへ
- **ナノコート**
表面のナノレベルのコーティング。サビや水分による故障から守ります。



カラーバリエーション

※製品の色と形は印刷と異なる事があります

*MPのみ、ご購入後のカラー変更が可能です。2年保証期間中は¥6,000(非課税)、それ以後は¥9,000(非課税)です



製品名	難聴レベル	適合聴力	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数	使用電池/電池寿命 (連続使用)
S	軽 ▶ 中	~65dB	¥50,000	8ch	4	PR41 312 約160時間
MP	中 ▶ 重	~100dB	¥50,000	8ch	4	PR48 13 約200時間
販売名	補聴器 Prompt					

※Prompt MPの形式はPrompt Pです ※リモコン: 非対応

※補聴器は非課税です


Fun ファン

NEW



簡易デジタル補聴器

お手頃価格でデジタルならではの澄んだ透明感のある音質を手に入れます。

- **ボリューム付**
簡単に音量調整ができます。
- **ピーピーしにくい**

- **名前刻印対応** 名入れ対応
詳しくは15ページへ
- **ナノコート**
表面のナノレベルのコーティング。サビや水分による故障から守ります。

カラーバリエーション

※製品の色と形は印刷と異なる事があります

ご購入後のカラー変更が可能です。2年保証期間中は¥6,000(非課税)、それ以後は¥9,000(非課税)です



製品名	難聴レベル	適合聴力	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数*	使用電池/電池寿命 (連続使用)
P	中 ▶ 高	~90dB	¥98,000	6ch	4	PR48 13 約200時間
SP	高 ▶ 重	~110dB	¥98,000	6ch	4	PR44 675 約350時間
販売名	補聴器 Fun					

*リモコン: 非対応 プログラムは固定

Intuisシリーズ

インティス



基本性能を備えた補聴器

価格重視で、基本性能を備えた耳かけ型補聴器。快適な装用感と基本性能が毎日の聞こえをサポートします。

- **ツインマイク**
マイクを前向きに配置し、聞こえの性能がアップしました。
- **プッシュボタン**
プログラムの切り替えスイッチ。お好みで販売元でプログラム調節できます。
- **ナノコート**
表面のナノレベルのコーティング。サビや水分による故障から守ります。



- **目盛つきアナログボリューム**
簡単に音量調節ができます。(Dir, SP Dirのみ)
- **名前刻印対応** 名入れ対応
詳しくは15ページへ

豊富なカラーバリエーション

※★のカラーは名前刻印対象外です
※製品の色と形は印刷と異なる事があります

ご購入後のカラー変更が可能です。2年保証期間中は¥6,000(非課税)、それ以後は¥9,000(非課税)です



製品名	難聴レベル	適合聴力	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数	使用電池/電池寿命(連続使用)
Life	軽 ▶ 中	チューブ: ~50dB イヤフック: ~60dB	¥49,800	4ch	1	PR41 312 約240時間
S Dir	軽 ▶ 中 ▶ 高	~80dB	¥49,800	4ch	4	PR48 13 約400時間
Dir	中 ▶ 高	~90dB	¥49,800	4ch	3	PR48 13 約400時間
SP Dir	高 ▶ 重	~110dB	¥98,000	4ch	3	PR44 675 約600時間

販売名 シーメンス補聴器 INTUIS

※Intuisシリーズは在庫僅少品です ※補聴器は非課税です

Lotus

ロータス



デジタルトリマー補聴器

お手頃価格でデジタルならではの澄んだ透明感のある音質を手に入れます。

- **ダイヤル式アナログボリューム** 名入れ対応 ※23Mのみ
- **プッシュボタン**
- **ピーピーしにくい**
- **名前刻印対応** 名入れ対応 詳しくは15ページへ

製品名	難聴レベル	適合聴力	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数*	音質調整トリマー	使用電池/電池寿命(連続使用)
23M	軽 ▶ 高	~80dB	¥68,000	2ch	3	G.NH.MPO	PR48 13 約310時間
23P	中 ▶ 高	~90dB	¥78,000	2ch	3	G.NH.MPO	PR48 13 約350時間
23SP	高 ▶ 重	~110dB	¥98,000	2ch	3	G.NH.MPO	PR44 675 約700時間

販売名 シーメンス補聴器 LOTUS

*最大プログラム数: 3P(M/T/MT) リモコン: 非対応 プログラムは固定で、マイク・テレコイル・マイク+テレコイル

製品名	難聴レベル	適合聴力	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数	音質調整トリマー	使用電池/電池寿命(連続使用)
23MC	軽 ▶ 中	~60dB	¥98,000	2ch	1	NH.SSVC	PR536 10A 約130時間
23CT	軽 ▶ 中	~70dB	¥98,000	2ch	1	NH.NL	PR41 312 約200時間
23CT パワー	軽 ▶ 中	~75dB	¥108,000	2ch	1		
23LS	中 ▶ 高	~80dB	¥98,000	2ch	1	NH.NL.AO	PR48 13 約350時間
23LS パワー	中 ▶ 高	~90dB	¥108,000	2ch	1		

販売名 シーメンス補聴器 LOTUS カスタム

※Lotusシリーズは在庫僅少品です ※補聴器は非課税です

Pockettio

ポケットティオ

簡単操作のポケット型補聴器

- 1 プログラム切換えボタン
- 2 音質調整トリマー
- 3 ボリュームつまみ



製品名	難聴レベル	適合聴力	価格	音質調整トリマー	使用電池/電池寿命(連続使用)
DMP	軽 ▶ 中 ▶ 高	~85dB	¥44,000	NH.NL.MPO	R6P(単3形)
DHP	中 ▶ 高 ▶ 重	~100dB	¥62,000		約700時間

販売名 シーメンス補聴器 POCKETTIO

両耳で聞くためのアクセサリやTV鑑賞用のアクセサリ類(別売)もございます

Pockettio用バイノーラルセット
DMP ¥8,640(税込)
DHP ¥10,800(税込)
Pockettio用テレビケーブルセット
¥1,620(税込)

※補聴器は非課税です

リモコン

easyTek boost

イージーテックブースト



かんたん!

イージーテックブーストでできること

映画や音楽、携帯電話の受信を、手元で簡単に。

プライマックス バイナックス オリオン
primax、binax、Orion2用



リモコン

miniTek

ミニテック

かんたん!

ミニテックでできること

映画や音楽、携帯電話の受信などを、手元で簡単に。

マイコン オリオン プラス
miCON、Orion Plus用



製品名	価格(税込)	サイズ
easyTek boost イージーテックブースト	¥41,040	高さ49 横幅49 奥行き12(ミリ)コードの長さ:約700(ミリ)

テレビ視聴	イージーテックブーストでテレビの視聴をご希望の際は、テレビの取扱説明書をご確認の上、こちらをお求めください。	イージーテックブーストテレビパック※1 (内容物:イージーテックブースト+ボイスリンク) ¥54,000 (税込)
--------------	--	--

※1 こちらのパックは、ヘッドホンとスピーカーから同時に別音量で音が出せるテレビにすぐにご使用いただけます(2012年以降の多くのテレビはこちらです)
 ヘッドホンを押すとスピーカーが止まるか、ヘッドホン端子がないテレビで、光デジタル端子があるテレビには、別売のテレビキット(¥8,000+税)が必要になります

製品名	価格(税込)	サイズ
miniTek ミニテック	¥43,200	高さ61 横幅45 奥行き15.5(ミリ) (トランスミッター 1台付属)

※テレビ視聴の際、ヘッドホンを押すとスピーカーが止まるか、ヘッドホン端子がないテレビで、光デジタル音声出力があるテレビは別途テレビキットが必要です

つなぐだけでTVのサウンドを楽しめる!



※2 3.5mmステレオソケットの直接入力により接続

つなぐだけでTVのサウンドを楽しめる!



※2 2.5mmステレオソケットの直接入力により接続

リモコン

easyPocket

イージーポケット

mini Pocket **NEW**

ミニポケット

かんたん!

イージーポケット・ミニポケットでできること

音量調節やプログラム切替が手元で簡単に。



スマートフォン用アプリ

全てのiPhone*1と
アンドロイド携帯に対応

*1 ミニテックリモートアプリを除く



製品名	価格(税込)	サイズ
easyPocket イージーポケット	¥21,600	高さ92.5 横幅42.5 奥行き17.5(ミリ)
miniPocket ミニポケット	¥19,440	高さ56 横幅34 奥行き11(ミリ)



easyPocket
イージーポケット

**primax
binax
miCON**

Orion2
Orion Plus
Orion



**primax
binax**

Orion2
Sirion2

miniPocket
ミニポケット

全機種共通リモコン対応補聴器一覧(スマートフォン用アプリ含む)

Pure	Carat	Ace	Motion P/S	Insio (耳あな型)							Nitro		Orion2	Orion	Sirion2	Intuis2	Prompt	Fun	Intuis	Lotus
				CIC	MC	CT	CTwin	COOL	LS	LS Twin	耳あな型	耳かけ型								
●	●	▲*1	●	▲*1*4	●	●	●	●	●	●	●	●	▲*3	▲*1	—	—	—	—	—	—

*1 ミニポケット、タッチコントロールアプリのみ使用可能 *2 マトリックス130/71のLS/LS Twinのみ対応 *3 OrionはeasyPocketのみ対応 (miniTek・easyTek boostは非対応)

*4 Insio primax, binaxのみ

ご注意 心臓ペースメーカーを使用している方は、リモコンを使用しないでください。スマートフォン専用アプリをご使用の場合、スマートフォンとの距離はスマートフォンの取扱説明書に従ってください

*外部機器(テレビ・携帯音楽プレイヤーなど)がステレオ仕様の場合、補聴器を両耳装着することにより、**ステレオ音質でお楽しみいただけます**

* easyTek boostとminiTekはテレビ2台まで接続できます * easyTek boostとminiTekはFM受信機が接続できます * ④マークはBluetoothによるワイヤレス通信です

* 固定電話との接続に別売電話アダプターTA12Sが必要です

イージーテックアプリ*2

プライマックス バイナックス オリオン

対象: **primax**、**binax**、Orion2

イージーテックアプリをインストール(無償)すれば、あなたのスマートフォンがイージーテックブーストに早がります。

このアプリだけでは補聴器を操作できません。別途、イージーテックブーストが必要です。





インストールはこちら

Available on the iPhone
App Store

ANDROID APP ON
Google play

*2 アンドロイド Ver.4.0以上、iOS8.1以上に対応



タッチコントロールアプリ*3

プライマックス バイナックス オリオン シリオン

対象: **primax**、**binax**、Orion2、Sirion2

タッチコントロールアプリをインストール(無償)すれば、あなたのスマートフォンが簡単リモコンになります。

イージーテックブースト無しで使えます。





インストールはこちら

Available on the iPhone
App Store

ANDROID APP ON
Google play

*3 アンドロイド Ver.4.0以上、iOS8.1以上に対応



ミニテックリモート アプリ

マイコン オリオン プラス

対象: **miCON**、Orion Plus

アンドロイドに対応したミニテック専用アプリをインストール(無償)すれば、あなたのスマートフォンがミニテックに早がります。

このアプリだけでは補聴器を操作できません。別途、ミニテックが必要です。



インストールはこちら

ANDROID APP ON
Google play



できること	プログラム切替	音量調節	音質調節	ミュート	マニュアル指向性	電池残量	ボイスリンク使用
イージーテックアプリ	●	●	●	●	●	●	●
タッチコントロールアプリ	●	●	●	●	●	●	×
ミニテックリモート アプリ	●	●	×	●	×	×	●

CROS/BiCROS 補聴システム

クロスPure ヒュア

片方の耳が聞こえない方へ
聞こえない側の音も、しっかりキャッチ

対象器種: Pure primax / Motion SA primax / Motion P primax
Insio primax



アクセサリ・ 補修パーツ

■ 液晶バッテリー
チェッカー V2



¥864 (税込)

■ 乾燥ケースA



乾燥剤入り ¥864 (税込)
詰め替え用乾燥剤A ¥432 (税込)

聞こえない側の耳周辺の音を集め、良い耳の方に転送して聞くシステムです。
聞き取りができない耳にクロスPureを装着すると、
クロスPureのマイクが周りの音声をとらえ、
聞こえる耳に装着した補聴器に電波で音声を届けます。

- ① 小さくて目立たないボディ
- ② 指向性マイク
- ③ ロッカースイッチ
- ④ 312電池
- ⑤ ミニレシーバー2.0
(耳への固定のためにPureと同じレシーバーとドームを使います)



クロスPure

● 名前刻印対応 名入れ
対応 詳しくは15ページへ

価格 (税込)	¥97,200
販売名	クロスPure
使用電池 電池寿命 (連続使用)	PR41 312 約90時間

クロス バイクロス システムの仕組み



豊富なカラーバリエーション ※製品の色と形は印刷と異なる事があります



耳かけ型用

■ クリックドームミニレシーバー用

対応: RICタイプ



¥2,160
(同サイズ6ヶ入り・税込)

■ Lifeチップ

対応: Life



¥432
(同サイズ2ヶ入り・税込)

■ HPモールド (ミニレシーバーHP付き)

対応: RICタイプ

オーダーメイドのHPモールドを使うと、高〜重度難聴にも対応します。
高〜重度難聴で小型の補聴器をお求めの方におすすめです。
※ミニレシーバーHP単体では販売していません



¥27,000 (非課税)

耳あな型用

■ ノーフックス



¥1,080 (6ヶ入り/交換ツール入り・税込)

■ ブラッククリネットダイヤルパック (HF3) (赤/青)
■ スモールブラッククリネットダイヤルパック (HF4) (赤/青)



¥2,160 (16粒入り/交換ツール入り・税込)
(HF3): φ3.0mm (HF4): φ2.3mm

子供用アクセサリ

■ オーディオシューキット

対応: Motion P micon

子供用バッテリードアを含む
本体と同時に購入 ¥4,000 (非課税)
本体購入後の取付* ¥10,000 (非課税)

子供用バッテリードア単体
本体と同時に購入 ¥2,000 (非課税)
本体購入後の取付* ¥8,000 (非課税)

■ オーディオシューキット

対応: Orion2 / Orion / Sirion2 / Intuis2

M、P用
本体と同時に購入 ¥4,000 (非課税)
本体購入後の取付* ¥10,000 (非課税)

対応: Sirion2 / Intuis2

SP用
本体と同時に購入 ¥4,000 (非課税)
本体購入後の取付* ¥10,000 (非課税)

対応: Nitro / Orion

SP用(子供用バッテリードアを含む)
本体と同時に購入 ¥6,000 (非課税)
本体購入後の取付* ¥12,000 (非課税)

対応: Prompt MP

本体と同時に購入 ¥4,000 (非課税)
本体購入後の取付* ¥10,000 (非課税)

■ オーディオシューキット (ベージュ、ダークグラナイト)

対応: Carat / Motion SA / Motion P (primaxのみ)

オーディオシューとバッテリーロッカー一体型
本体と同時に購入 ¥4,000 (非課税)
本体購入後の取付* ¥10,000 (非課税)

■ バッテリードア単体

対応: Orion2 / Orion / Sirion2 / Intuis2

M、P用
本体と同時に購入 ¥600 (非課税)
本体購入後の取付* ¥6,600 (非課税)

■ スモールイヤフック

対応: Nitro / Motion P / Orion2 / Orion / Sirion2 / Intuis2

対応: Nitro / Orion

SP用
本体と同時に購入 ¥2,000 (非課税)
本体購入後の取付* ¥8,000 (非課税)



¥545 (税込)

*修理として補聴器をお預かりして加工します

■ 性能一覧

※このデータはJIS C 5512:2000に基づいて測定されています ※仕様は予告なく変更される場合があります ※数値は代表的な仕様によるものです ※電池寿命は使用状況によって変わります

型式 【片耳価格】	フィッティングレンジ	性能									保証期間(年) ^{*6}	使用電池	電池寿命(連続使用)(h)	
		最大音響利得		最大出力音圧レベル(dB)		誘導コイル感度(dB)	ポリウム ^{*4}	最大プログラム数 ^{*5}	適合聴力(平均dBまで)					
		1600Hz	ピーク	1600Hz	ピーク(以下)									
Pure,Carat,Ace 7px・5px・3px 7bx・5bx・3bx 7mi・5mi・3mi 共通性能 7mi・5mi・3miは 在庫僅少品です	Pure 7px / 7bx(S/M/P/HP)		43 / 55 / 62 / 82	54 / 69 / 73 / 84	108/121/126/136	122 / 132 / 136 / 142	72 / 83 / 96 / 115	本、リモ、TC	6	60 / 75 / 90 / 100	2(+1)	PR41	S約148/M・P・HP約125	
	Pure 7mi(S/M/P/HP) 【¥450,000】													
	Pure 5mi(S/M/P/HP) 【¥290,000】	軽 中 ▶ 高 重	43 / 55 / 62 / 82	54 / 69 / 73 / 84	108/121/126/136	122 / 132 / 136 / 142	72 / 83 / 96 / 115	本、リモ	6	60 / 75 / 90 / 100	2(+1)	PR41	S約160/M・P・HP約135	
	Pure 3mi(S/M/P/HP) 【¥200,000】													
	CARAT 7bx(S / M / P / HP)	軽 中 ▶ 高 重	43 / 54 / 63 / 82	53 / 69 / 75 / 83	108/122/126/136	124 / 132 / 136 / 142	74 / 85 / 91 / 100	本、リモ、TC	6	60 / 75 / 90 / 100	2(+1)	PR48	S約235/M・P・HP約216	
	Ace 7px / 7bx(S / M / P / HP)	軽 中 ▶ 高	44 / 50 / 58 / 61 ^{*1}	54 / 63 / 67 / 72	108/114/119/118 ^{*1}	121 / 127 / 130 / 135	—	TC	6	60 / 70 / 80 / 90	2(+1)	PR536	S約96/M・P・HP約80	
Motion 7px・5px・3px 7bx・5bx・3bx 7mi・5mi・3mi 共通性能 7mi・5mi・3miのSXは 在庫僅少品です	MOTION P 7px		70(60) ^{*3}	75(68) ^{*3}	132(123) ^{*3}	142(135) ^{*3}	102(91) ^{*3}	本、リモ、TC	6	80(チューブ)100(フック)	2(+1)	PR48	約216	
	MOTION PX+ 7bx		65(57) ^{*3}	76(68) ^{*3}	127(117) ^{*3}	143(135) ^{*3}	98(86) ^{*3}	本、リモ、TC	6	80(チューブ)100(フック)	2(+1)	PR48	約216	
	MOTION P 7mi 【¥420,000】	中 ▶ 高 重												
	MOTION P 5mi 【¥270,000】		66(59) ^{*3}	76(70) ^{*3}	127(117) ^{*3}	143(135) ^{*3}	98(87) ^{*3}	本、リモ	6	80(チューブ)100(フック)	2(+1)	PR48	約230	
	MOTION P 3mi 【¥200,000】													
	MOTION SA 7px / 7bx		60(55) ^{*3}	67(63) ^{*3}	134(121) ^{*3}	139(134) ^{*3}	85(76) ^{*3}	本、リモ、TC	6	65(チューブ)85(フック)	2(+1)	PR48	約216	
	MOTION SX 7mi 【¥400,000】													
	MOTION SX 5mi 【¥250,000】	軽 中 ▶ 高	60(53) ^{*3}	67(60) ^{*3}	132(120) ^{*3}	142(134) ^{*3}	92(81) ^{*3}	本、リモ	6	65(チューブ)85(フック)	2(+1)	PR48	約250	
	MOTION SX 3mi 【¥200,000】													
MOTION S 3px	軽 ▶ 中	49	63	129	133	—	TC / —	6	65	2(+1)	PR41	約160		
Orion Orion Plus 共通機能 S・M・Pは在庫僅少品です	ORION RIC ^{*8} (S / M / P / HP)	軽 中 ▶ 高 重	43 / 55 / 62 / 82	54 / 69 / 73 / 84	108 / 121 / 126 / 136	122 / 132 / 136 / 142	72 / 83 / 96 / 115	本、リモ *Sはリモコンのみ	4 ^{*7}	60 / 75 / 90 / 100	2(+1)	PR41	S約160 / M・P・HP約135	
	ORION(S / M / P / SP)		49 / 59 / 68 / 74	63 / 66 / 74 / 82	129 / 133 / 129 / 136	133 / 142 / 143 / 150	— / 88 / 96 / 105			65 / 85 / 100 / 110		PR41 / PR48 / PR48 / PR44	約160 / 255 / 235 / 350	
Orion2 Sirion2 Intuis2	Orion2 RIC(S/M/P/HP)	軽 中 ▶ 高 重	43 / 55 / 62 / 82	54 / 69 / 73 / 84	108/121/126/136	122 / 132 / 136 / 142	72 / 83 / 96 / 115	本、リモ、TC	4	60 / 75 / 90 / 100	2(+1)	PR41	S約148/M・P・HP約125	
	Orion2 S / Sirion2 S / Intuis2 S	軽 ▶ 中	49	63	129	133	—	TC / —		65		2(+1)	PR41	約160
	Orion2 M / Sirion2 M / Intuis2 M	軽 中 ▶ 高	59	66	133	139	88	本、TC / 本		85		2(+1)	PR48	約255
	Orion2 P / Sirion2 P / Intuis2 P	中 ▶ 重	68	74	129	139	96	本、TC / 本		100		2(+1)	PR48	約235
	Sirion2 SP / Intuis2 SP	高 ▶ 重	72	80	136	147	102	本、リモ、TC / 本		110		2(+1)	PR44	約350
Prompt	Prompt S	軽 ▶ 中	49(51)	63(54)	129(117)	133(130)	—	本	4	65	2(+1)	PR41	約160	
	Prompt P	中 ▶ 重	64	75	133	138	97	本	4	100	2(+1)	PR48	約200	
Fun	Fun P	中 ▶ 高	64	74	129	137	—	本	4	90	2(+1)	PR48	約200	
	Fun SP	高 ▶ 重	71	83	136	144	—	本	4	110	2(+1)	PR44	約350	

*1 規準周波数は2500Hzです *2 パワータイプの性能を表示しています *3 ()はライフチューブ/シンチューブでの数値です
 *4 ポリューム 本:補聴器本体にボリューム付き/オプ:本体オプションでボリューム取付可能/リモ:リモコンでボリューム利用可能 /TC:タッチコントロールアプリでボリューム利用可能
 *5 primax, binaxのハイパワータイプの性能を表示しています

*5 最大プログラム数:本体のプッシュボタンやリモコンを利用した時に得られる最大プログラム数です *8 Orion Plus RICの形式はOctiv R+です
 *6 保証期間:(+1)は弊社の「1年安心修理サービス」です。詳細は裏表紙をご覧ください
 *7 Orion Plus RICは6です

■ 性能一覧

※このデータはJIS C 5512:2000に基づいて測定されています ※仕様は予告なく変更される場合があります ※数値は代表的な仕様によるものです ※電池寿命は使用状況によって変わります

	形式 【片耳価格】	フィッティング レンジ	性能								保証期間(年) ^{*7}	使用電池	電池寿命(連続使用)(h)	
			最大音響利得		最大出力音圧レベル(dB)		誘導コイル感度(dB)	ボリューム ^{*4}	最大プログラム数 ^{*6}	適合聴力(平均dBまで)				
			1600Hz	ピーク	1600Hz	ピーク(以下)								
耳かけ型	Intuis 在庫僅少品です	INTUIS S DIR	軽 ▶ 中 ▶ 高	63 ^{*1}	64	132 ^{*1}	137	92	—	4	80	2(+1)	PR48	約400
		INTUIS DIR	中 ▶ 高	70 ^{*1}	70	138 ^{*1}	143	101	本	3	90	2(+1)	PR48	約400
		INTUIS SP DIR	高 ▶ 重	77 ^{*1}	83	135 ^{*1}	146	104	本	3	110	2(+1)	PR44	約600
		INTUIS LIFE	軽 ▶ 中	51(43) ^{*1*3}	57(47) ^{*3}	126(117) ^{*1*3}	132(125) ^{*3}	—	—	1	50(チューブ)60(フック)	2(+1)	PR41	約240
	Lotus 在庫僅少品です	LOTUS 23 M	軽 ▶ 中	58	66	132	143	88	本	M/T/MT	80	2(+1)	PR48	約310
		LOTUS 23 P	中 ▶ 高	63	72	130	141	97	本	M/T/MT	90	2(+1)	PR48	約350
		LOTUS 23 SP	高 ▶ 重	69	80	136	146	103	本	M/T/MT	110	2(+1)	PR44	約700
	Nitro 7mi・3mi 共通性能	NITRO 7mi SP	高 ▶ 重	74	82	136	150	105	本、リモ	6	110	2(+1)	PR44	約350
	Insio 7px・5px・3px 共通性能	INSIO 7px CIC	軽 ▶ 中	52	60	116	128	—	TC	6	70	2(+1)	PR536	約80
INSIO 7px CIC 312		52		60	116	128	—	70			2(+1)	PR41	約125	
INSIO 7px MC ^{*2}		54 / 63 ^{*5}		64 / 73 ^{*5}	119 / 127 ^{*5}	132 / 139 ^{*5}	—	リモ、TC	70 / 90 ^{*5}		2(+1)	PR536	約80	
INSIO 7px MC 312 ^{*2}		54 / 63 ^{*5}		64 / 73 ^{*5}	119 / 127 ^{*5}	132 / 139 ^{*5}	—		70 / 90 ^{*5}		2(+1)	PR41	約125	
INSIO 7px CT ^{*2}		52 / 63 ^{*5}		64 / 74 ^{*5}	118 / 127 ^{*5}	130 / 139 ^{*5}	—	オブ、リモ、TC	80 / 90 ^{*5}		2(+1)	PR41		
INSIO 7px CT TWIN ^{*2}		52 / 63 ^{*5}		64 / 74 ^{*5}	118 / 127 ^{*5}	130 / 139 ^{*5}	—		80 / 90 ^{*5}		2(+1)	PR41		
INSIO 7px COOL ^{*2}		52		64	118	130	84		80		2(+1)	PR41		
INSIO 7px COOL13 ^{*2}		52		64	118	130	84		80		2(+1)	PR48	約216	
INSIO 7px LS ^{*2}		63		74	127	139	94		90		2(+1)	PR48		
INSIO 7px LS TWIN ^{*2}		63		74	127	139	94		90		2(+1)	PR48		
Insio 7bx・5bx・3bx 7mi・5mi・3mi 共通性能	INSIO 7bx CIC ^{*2} /INSIO 7mi CIC ^{*2} / Orion CIC ^{*2} /Orion2/Sirion2/ Intuis2 CIC ^{*2}	軽 ▶ 中	52	60	116	128	—	TC (7.5, 3bx/Orion2/Sirion2)	6 (7.5, 3bx) ^{*8} 1 (7.5, 3mi/Orion/Intuis2) 4 (Orion2/Sirion2) ^{*8}	70	2(+1)	PR536		約90 約80 (binax/Orion2/Sirion2/Intuis2)
	INSIO 7bx CIC 312 ^{*2} /INSIO 7mi CIC 312 ^{*2} / Orion CIC 312 ^{*2} /Orion2/Sirion2/ Intuis2 CIC 312 ^{*2}		43	54	118	130	—			70	2(+1)	PR41	約150 約125 (binax/Orion2/Sirion2/Intuis2)	
	INSIO 7bx MC ^{*2} /INSIO 7mi MC ^{*2} / Orion MC ^{*2} /Orion2/Sirion2/ Intuis2 MC ^{*2}		52 / 63 ^{*5}	60 / 73 ^{*5}	116 / 127 ^{*5}	128 / 139 ^{*5}	—	リモ (7/5/3/Orion/Orion2)		70 / 90 ^{*5}	2(+1)	PR536	約90 約80 (binax/Orion2/Sirion2/Intuis2)	
	INSIO 7bx MC 312 ^{*2} /INSIO 7mi MC 312 ^{*2} / Orion MC 312 ^{*2} /Orion2/ Sirion2/Intuis2 MC 312 ^{*2}		43 / 63 ^{*5}	54 / 74 ^{*5}	118 / 127 ^{*5}	130 / 139 ^{*5}	—			TC (7.5, 3bx/Orion2/Sirion2)	70 / 90 ^{*5}	2(+1)	PR41	約150 約125 (binax/Orion2/ Sirion2/Intuis2)
	INSIO 7bx CT ^{*2} /INSIO 7mi CT ^{*2} / Orion CT ^{*2} /Orion2/Sirion2/ Intuis2 CT ^{*2}		52 / 63 ^{*5}	64 / 74 ^{*5}	118 / 127 ^{*5}	130 / 139 ^{*5}	—	80 / 90 ^{*5}			2(+1)	PR41		
	INSIO 7bx CT TWIN ^{*2} / INSIO 7mi CT TWIN ^{*2} /Orion CT TWIN ^{*2} / Orion2/Sirion2 CT TWIN ^{*2}		52 / 63 ^{*5}	64 / 74 ^{*5}	118 / 127 ^{*5}	130 / 139 ^{*5}	—	80 / 90 ^{*5}			2(+1)	PR41		
	INSIO 7bx COOL ^{*2} / INSIO 7mi COOL ^{*2} /Orion COOL ^{*2} / Orion2/Sirion2 COOL ^{*2}		52	64	118	130	84	オブ、 リモ(7/5/3/Orion/Orion2)			80	2(+1)	PR41	
	INSIO 7bx COOL13 ^{*2} / INSIO 7mi COOL13 ^{*2} /Orion COOL13 ^{*2} / Orion2/Sirion2 COOL13 ^{*2}		52	64	118	130	84			80	2(+1)	PR48		
	INSIO 7bx LS ^{*2} /INSIO 7mi LS ^{*2} / Orion LS ^{*2} /Orion2/Sirion2/ Intuis2 LS ^{*2}		中 ▶ 高	62	69	127	136	91		TC (7.5, 3bx/Orion2/Sirion2)	90	2(+1)	PR48	約250 約216 (binax/ Orion2/Sirion2)
	INSIO 7bx LS TWIN ^{*2} / INSIO 7mi LS TWIN ^{*2} /Orion/Orion2/ Sirion2 LS TWIN ^{*2}		中 ▶ 高	62	69	127	136	91			90	2(+1)	PR48	

*1 規準周波数は2500Hzです *2 パワータイプの性能を表示しています *3 ()はライフチューブでの数値です
 *4 ボリューム 本:補聴器本体にボリューム付き/オブ:本体オプションでボリューム取付可能/リモ:リモコンでボリューム利用可能 /TC:タッチコントロールアプリでボリューム利用可能
 *5 primax, binaxのハイパワータイプの性能を表示しています

*6 最大プログラム数:本体のプッシュボタンやリモコンを利用した時に得られる最大プログラム数です
 *7 保証期間:(+1)は弊社の「1年安心修理サービス」です。詳細は裏表紙をご覧ください *8 タッチコントロールアプリ使用の場合。アプリを使用しない場合は1
 *9 パワータイプは+1万円、ツインタイプは+2万円、ツインパワーは+3万円です *10 パワータイプは+1.9万円、ツインタイプは+3.8万円、ツインパワーは+5.7万円です

■ 性能一覧

※このデータはJIS C 5512:2000に基づいて測定されています ※仕様は予告なく変更される場合があります ※数値は代表的な仕様によるものです ※電池寿命は使用状況によって変わります

	形式 【片耳価格】	フィッティングレンジ	性能								保証期間(年) ^{*6}	使用電池	電池寿命(連続使用)(h)
			最大音響利得		最大出力音圧レベル(dB)		誘導コイル感度(dB)	ボリューム ^{*4}	最大プログラム数 ^{*5}	適合聴力(平均dBまで)			
			1600Hz	ピーク	1600Hz	ピーク(以下)							
耳あな型 在庫僅少品です	Intuis INTUIS MC 【¥98,000】	軽 ▶ 中	54 ^{*1}	57	122 ^{*1}	129	—	—	1	60	2(+1)	PR536	約130
	INTUIS CT 【¥98,000】	軽 ▶ 中	50 ^{*1}	55	127 ^{*1}	134	—	オブ ^{*8}	4	70	2(+1)	PR41	約240
	INTUIS CT TWIN 【¥118,000】												
	INTUIS CTP 【¥108,000】	軽 ▶ 中	56 ^{*1}	61	127 ^{*1}	134	—	オブ ^{*8}	4	75	2(+1)	PR41	約240
	INTUIS CTP TWIN 【¥128,000】												
	INTUIS LS 【¥98,000】	中 ▶ 高	62 ^{*1}	66	130 ^{*1}	137	—	オブ	4	80	2(+1)	PR48	約460
	INTUIS LS TWIN 【¥118,000】												
	INTUIS LSP 【¥108,000】	中 ▶ 高	66 ^{*1}	70	130 ^{*1}	137	—	オブ	4	90	2(+1)	PR48	約460
	INTUIS LSP TWIN 【¥128,000】												
Lotus 在庫僅少品です	LOTUS CT ^{*2}	軽 ▶ 高	47	58	121	133	—	本	1	70	2(+1)	PR41	約200
	LOTUS LS ^{*2}	中 ▶ 高	60	68	128	138	—	本	1	80	2(+1)	PR48	約350
	LOTUS MC ^{*2}	軽 ▶ 中	42	48	114	125	—	本	1	60	2(+1)	PR536	約130
Nitro micon 7mi・3mi 共通性能 在庫僅少品です	NITRO 7mi MC	中 ▶ 高 重	74	76	135	142	—	—	6	100	2(+1)	PR536	約90
	NITRO 7mi CT(TWIN)	中 ▶ 高 重	74	78	137	142	—	オブ	6	100	2(+1)	PR41	約130
	NITRO 7mi LS(TWIN)	中 ▶ 高 重	78	78	137	142	—	オブ、リモ	6	100	2(+1)	PR48	約220
Pockettio	Pockettio DMP	軽 中 ▶ 高	58 ^{*1}	62	124 ^{*1}	138	—	本	3	85	2(+1)	R6P(単3形)	約700 ^{*7}
	Pockettio DHP	中 高 ▶ 重	78 ^{*1}	83	133 ^{*1}	146	—	本	3	100	2(+1)	R6P(単3形)	約700 ^{*7}

*1 規準周波数は2500Hzです *2 パワータイプの性能を表示しています *3 ()はライフチューブでの数値です
*4 ボリューム 本:補聴器本体にボリューム付き/オブ:本体オプションでボリューム取付可能/リモ:リモコンでボリューム利用可能

*5 最大プログラム数:本体のプッシュボタンやリモコンを利用した時に得られる最大プログラム数です
*6 保証期間:(+1)は弊社の「1年安心修理サービス」です。詳細は裏表紙をご覧ください *7 アルカリ電池 *8 Twinにはオプションが付けられません

■ 機能比較表 [Pure / Carat / Ace / Motion P / Motion S / Nitro / Insiol / Orion2 / Orion / Sirion2 / Intuis2 / Prompt / Fun / Intuis / Lotus 共通]

	機能	機能説明	primax シリーズ			bi	nax シリーズ		micon シリーズ			Orion Plus RIC	Orion2	Orion	Sirion2	Intuis2	Prompt	Fun	Intuis	Lotus
			7px	5px	3px	7bx	5bx	3bx	7mi	5mi	3mi									
聞こえ	スピーチマスター	全自動ダブルピント調整。相手の声がよく聞きやすい	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マルチチャンネル方式	聞こえの帯域を複数に分割、より細かい調整が可能	48ch	32ch	24ch	48ch	32ch	24ch	48ch	32ch	24ch	24ch	16ch	16ch	16ch	12ch	8ch	6ch	4ch	2ch
	自動音量調節	音の大きさに応じ、自動で音量を心地よい大きさに調節	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スピーチ&ノイズマネージメント eスピーチ処理システム	言葉を聞き取りやすくするように、周囲環境に応じて設定が自動で変化	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
雑音抑制	サウンドスムージング	突発的に響くような衝撃音を抑制	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	eウィンドスクリーン	風雑音を抑制	■	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ハウリングストッパー	不快なピーピー音(ハウリング)を抑制	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ハウリングキャンセラー	不快なピーピー音(ハウリング)を抑制	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
指向性	ビーム指向性	両耳装用で正面の音だけフォーカス	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	○※8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ワンマイク指向性	両耳装用で正面の音にフォーカス	○※16	—	—	○※16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	スピーチフォーカス	前後左右、声の方向に自動的にフォーカス	■※1	○※1	—	■※1	○※1	—	○※1	○※1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	トゥルーイヤール	耳介効果で裸耳に近い臨場感	○※21	○※21	○※21	○※21	○※21	○※21	○※21	○※21	○※21	○※21	○※21	○※21	○※21	○※21	○※21	○※21	○※21	○※21
	アダプティブ	移動する雑音も抑制して、より静かに	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
	マニュアル指向性(幅)	両耳使用時に指向性の幅を手動で調節	○※8	○※8	—	○※8	○※8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マニュアル指向性(方向)	両耳使用時に指向性の向きを手動調節(要easyTek boost)	■※8	○※8	—	■※8	○※8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	パワーエンハンス 固定指向性	後ろの雑音を抑えて静かに	○※1	○※1	—	○※1	○※1	—	—	—	—	—	○※1自動	○※1自動	○※1	○	—	—	○※11	—
高機能	エコーシールド	ワンワン響く反響をしっかり抑える	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ハイレゾ音楽	カラオケや、コンサートや、CD・レコードが、より聞きやすい	3モード	1モード	1モード	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	12kHz広帯域	12kHzまでの高音域を出力、より豊かな音色を実現	○	—	—	○	—	—	○※9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	周波数圧縮	高い音を聴野に入れて聞き取りやすくする	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	e2eワイヤレス	両耳が常に通信しあい、聞きやすくする	◎※2	◎※2	◎※2	◎※2	◎※2	◎※2	◎※2	◎※2	◎※2	◎	◎※2	◎※2	—	—	—	—	—	
	プログラム数	利用できる最大メモリー数(標準音、テレビ用等)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4
サウンドイコライザー	数パターンの音環境で最適な音質に自動切替	6環境	3環境	—	6環境	3環境	—	6環境	3環境	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
学習機能	サウンドラーニング 3	環境別に好みの音を記憶、自動再現	○※4	—	—	○※4	—	—	○※4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	サウンドラーニング 2	・サウンドラーニング3 : 18個の環境で再現	—	○※4	—	—	—	○※4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	サウンドラーニング	・サウンドラーニング2 : 9つの環境で再現	—	—	○※4	—	—	○※4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	データラーニング	・サウンドラーニング : 3つの環境で再現	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	データロギング	・データラーニング : ボリューム操作を自動再現	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
利便性	ツインフォン	受話器を補聴器に近づけると自動で電話用の聞こえに切り替え ※ 同梱のオートフォンマグネットが必要	○※15 ※20	○※15 ※20	○※15 ※20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	オートフォン™	受話器を補聴器に近づけると自動で電話用の聞こえに切り替え ※ 別売のオートフォンマグネットが必要	○※5	○※5	○※5	○※5	○※5	○※5	○※5	○※5	○※5	○※18	○※10	—	—	—	—	—	○※15	
	テレコイル	ループシステムに対応し、マイクを介さずに直接音声を受信	○※5	○※5	○※5	○※5	○※5	○※5	○※5	○※5	○※5	○※7	○※7	○※6	○※6	—	—	—	○※17	
	オーディオインプット	テレビ、ラジオ、聴覚機器などをつなぐ端子 ※ 別売のオーディオシュー、オーディオコードが必要	○※13	○※13	○※13	○※13	○※13	○※13	○※13	○※13	○※13	○※19	○※19	○※19	○※12	○※12	○※12	○※12	○※12	○※13
リモコン	easyTek boost	小型で簡単操作。TVや携帯とつながる(2台設定可)、FM接続可能	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	—	—	—	○※2	—	—	—	—	—	—	—	
	miniTek	TVや携帯とつながる(2台設定可)、FM接続可能	—	—	—	—	—	—	○※2	○※2	○※2	○	—	—	—	—	—	—	—	
	easyPocket	大きなボタンと液晶表示で使いやすい	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○	○※2	○※2	—	—	—	—	—	
	miniPocket	超小型の簡単リモコン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

※1 シングルマイクの耳あな型には非搭載
 ※2 ノンワイヤレス(小型)オプションとCICとAcelには搭載できません
 ※3 タイプによって異なります
 ※4 リモコンまたは本体ボリュームが必要(耳あな型はオプションで取付可能)
 ※5 PureとCarat, Orion Plus RIC, Motionは標準、Motion S(3px)は非搭載、Insiolはオプションで取付可能(COOL, COOL13とLSのみ)。
 ※6 耳かけ型MとPは標準。LSはオプション

※7 RICと耳かけ型MとPは標準。LSはオプション
 ※8 Twinマイク商品を両耳使用した場合のみ
 ※9 Nitroを除く
 ※10 耳かけ型は非搭載。耳あな型のLSとCOOL, COOL13にのみオプション対応
 ※11 シングルマイクの耳あな型には非搭載
 ※12 耳かけ型(Sを除く)に搭載

※13 耳かけ型のみ搭載
 ※14 プログラムは固定で、マイク、テレコイル、マイク+テレコイル/耳かけ型のみ
 ※15 耳あな型はオプションで取付可能(COOL, COOL13とLSのみ)
 ※16 シングルマイクの耳あな型のみ
 ※17 耳あな型はオプションで取付可能(LSのみ)
 ※18 RICは標準。LSとCOOL, COOL13はオプション

※19 耳かけ型P・SPのみ搭載
 ※20 耳かけ型はAceとMotionS 3pxを除く
 ※21 耳あな型には非搭載
 ■ 指向性マイク(Twinマイク)商品を両耳使用するとより強力な全自動ダブルピント、両耳eウィンドスクリーン、スピーチフォーカス360°になります(Aceを除く)
 ◎ より強力に機能が働きます

本日はご来店ありがとうございました。

様へのおすすめ補聴器

おすすめ補聴器

このカタログの

ページ

おすすめ理由

次回のご来店は、

年 月 日 ()

午前・午後 時 分

お客様担当

お待ちしております。



補聴器選びのポイント

チャンネル数が音質を左右します。
チャンネル数が多いほど、細かくより高度に調整できます。

詳しくはP.13へ

聞こえのイメージ

48ch
プレミアム7



32ch
アドバンス5



24ch
スタンダード3



16ch
ベーシック・
バリュー



シーメンス・シグニア補聴器なら！

ハウリングストッパー

シーメンス・シグニア補聴器は、どのクラスの器種でも*1不快なピーピー音を防ぐので、安心です。

OK!



*1 Prompt, Fun, Intuis, Lotus, Pockettioを除く

周波数圧縮

苦手な高い音を聞こえる周波数まで圧縮して聞き取りやすくします



*Intuis2, Prompt, Fun, Intuis, Lotus, Pockettioを除く