



Be
Brilliant™



signia

イヤフォン型補聴器

Signia Active Pro/Signia Active

2023年4月版





シグニアは、世界をリードする補聴器ブランドのひとつ。

私たちが目指すこと、それは補聴器の常識を変える技術革新で、人間のパフォーマンスを向上させること。

難聴だから人生が制限される、そんなことがないように。

Be Brilliant. シグニアで、もっと鮮やかに。

なぜ人々は今日の目まぐるしく変化する世界で快適さを探し求めるのか。

スマートフォンからスポーツシューズまで、

最適なアクセサリーを見つけることで、最高のパフォーマンスを発揮できる。

聞こえも同じ。最適な選択があなたを輝かせる。

革新的なイヤfon型補聴器Signia Active ProとSignia Activeは、

ノイズをカットし、より高いレベルの聞こえを実現。

会話を聞き漏らすかもという心配は、もう必要ない。



iFデザインアワード2021
受賞デザイン

カラーバリエーション

17mm



スノーホワイト /
ローズゴールド




ブラック /
シルバー



ブラック

実寸大

<販売名>補聴器 Signia Active

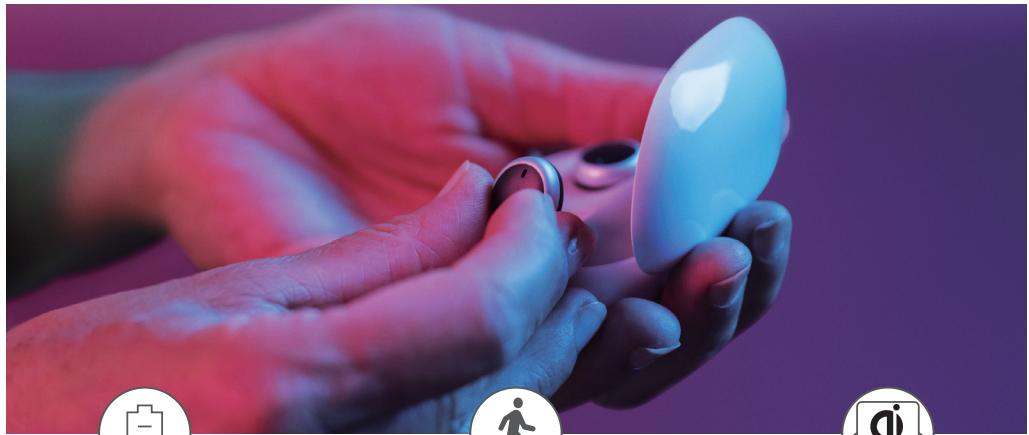

取り扱いやすい
充電式



持ち運び
充電可能



ワイヤレス充電
対応充電ケース

取り扱いやすい充電式

電池の入れ替え不要で手間いらず。
フル充電で26時間も使用可能、
一日中電池切れの心配がない。



持ち運び可能な充電ケースでいつでも安心

蓄電機能付きのポータブル充電ケースだから、
外出先でもケースだけでらくらく充電。
ケースだけで両耳3回フル充電可能。



Qi規格対応ケースでスマートに充電可能^{*2}

補聴器を充電ケースに入れて、
ケースごとQi充電パッドに置くだけで充電可能。
もちろんケースはUSBケーブルでの充電も可能。

補聴器の充電

充電時間

30分
スピード充電

4時間
フル充電

使用可能時間^{*1}

5時間

26時間

*1 Bluetooth機能を利用して音楽等を聞く場合(ストリーミング)、
使用可能時間はより短くなります

*2 市販のQi規格対応の充電パッドをご使用ください。
充電パッドをご使用の場合、ケースの充電時間の目安は5時間
ですが、ご使用の充電パッドの種類により異なる場合があります

ポータブル充電ケースの充電



USB充電
3時間



ワイヤレス充電
5時間^{*2}



鮮やかな音



会話がもっと鮮明に



自動で環境を認識



デザイン賞受賞の
スタイリッシュなデザイン

鮮やかな音

世界をリードする補聴器ブランドのひとつである、
シグニアの音声テクノロジーを惜しみなく搭載。
聴力に合わせて周波数帯ごとに音を細かく調整し、
あなたの聞こえに最適な音声処理を実現。

会話がもっと鮮明に

雑音をしっかりカットし、360°の音をよりクリアに、
よりリアルに。

自動で環境を認識


超広角の音響センサーが周囲の環境を把握し、
自動的に最適な音に調整。
50シーン対応あなたのチャレンジをサポート。

革新的なデザイン



「世界3大デザイン賞」の一つ、
「iF Design Award 2021」を受賞した
革新的で魅力的なデザイン。

ワイヤレスイヤフォンのような
スタイリッシュな形は、補聴器をもっと気軽に、
もっと楽しんで使える物へと変化させる。

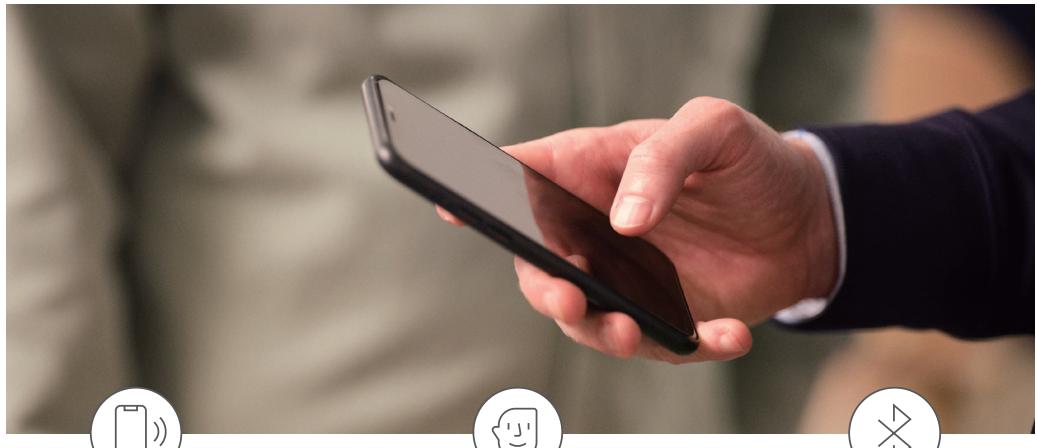

Signia app対応



Signia Assistant
でAIサポート



Bluetooth
機能搭載

周辺機器と接続して使い方がさらに広がる

スマートフォンの通話や音楽、テレビ^{*3}の音声をBluetoothで耳に直接お届け^{*4}、
自分の音量で楽しめる。



StreamLine TV
¥30,800 (税込)



StreamLine Mic
¥55,000 (税込)



ミニポケット
miniPockett
¥19,800 (税込)



シグニア アプリ

Signia appでスマートフォンがリモコンに

シグニア提供の無料アプリで、
スマートフォンが補聴器リモコンに早変わり、
さりげなく音量調節や補聴器の状態の確認ができる。



Signia app

インストールは
こちら

Available on the iPhone
App Store



シグニア アシスタント

Signia Assistantでいつでも聞こえをAIサポート

世界初!人工知能(AI)技術を活用した補聴器使用支援システム。
Signia appを開き、Signia Assistantと対話形式でやり取り
するだけで、あなたの好みや環境に合った音に調節可能。
24時間、365日自動対応でいつでも使えるから安心。

※Signia Assistantを使い始めるには、補聴器販売店で機能をONにする必要があります。

補聴器を購入した販売店にご相談ください

※定期的に販売店で聴力に合わせて補聴器を調整することをお勧めします

*3 TV視聴は別途StreamLine TVが必要。Androidスマートフォンの音声ストリーミングは別途StreamLine Micが必要

*4 miniPockett(リモコン)あるいはSignia appによるプログラム切替が必要



ANDROID APP ON
Google play





マスクモード対応

すぐにフィット

着け外し簡単でマスクの邪魔にならない

適度な大きさで、ワンアクションで着け外しできる。

マスクやメガネの邪魔にもなりにくくスマートに装用可能。



マスクモード搭載

Signia appのマスクモードをONにすれば

マスク越しの会話もより聞きやすい。




すぐにフィット

柔らかい素材のスリーブで快適なつけ心地。

どんな耳でもフィットしやすい4サイズから選べる。

耳あなごに沿ったカーブ形状でつけ心地抜群。

※同梱のスリーブはS(穴あり)、S(穴なし)、XS(穴あり)、XS(穴なし)の4種類です

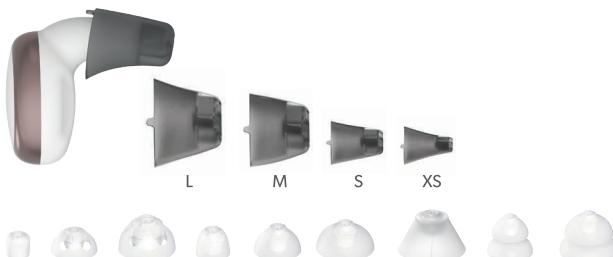

上記おすすめの4種類以外にも多種多様な耳栓が利用可能。



耳あなごとの間の自然な隙間で
こもりにくく、優しいつけ心地



防水・防塵
IP68^{*5}



耳鳴り治療機能搭載
※Signia Active Pro のみ

クラスと機能

搭載機能の違いによって2つのクラスに分かれている。
機能が多いほど、活用できる場面が広がる。

ハイエンドモデル

Signia Active Pro

スターターモデル

Signia Active

取り扱い方法は
動画でご確認
いただけます



搭載機能

機能	機能説明	Signia Active Pro	Signia Active
超広角センサー	超広角音響センサーはより多種多様な環境音を収集する	■■■■■	■■■■
チャンネル数	高いチャンネル数ほど静かではっきりとした音質に	48	16
プログラム数	利用できる最大メモリー数(標準音、テレビ用等)	6	4
12kHz広帯域	12kHzまでの高音域を出力し、より豊かな音色を実現	●	—
エコーシールド ^{*4}	ワンワン響く反響音をしっかり抑える	●	—
ハイレゾ音楽 ^{*4}	カラオケや、コンサートや、CD・レコードが、より聞きやすい	3モード	—
eウインドスクリーン	風雑音を抑制	●	—
スピーチ＆ノイズマネジメント	言葉を聞き取りやすくするように、周囲環境に応じて設定が自動で変化	●	●
サウンドスマージング	突発的に響くような衝撃音を抑制	●	—
ハウリングストッパー	不快なビービー音(ハウリング)を抑制	●	●
耳鳴り治療機能 TRT ^{*6}		●	—
保証	修理保証期間中は無料で修理 ^{*7} 保証期間後は定額修理スマートリペアプラン	2年修理保証 + 3ヶ月スマートリペア 1年保証	2年修理保証 + 3ヶ月スマートリペア

性能一覧

※このデータはJIS C 5512:2015 (2cmカプラで測定)で表示しています
※仕様は予告なく変更される場合があります
※数値は代表的な仕様によるものです

形 式	性 能			使用電池	電池寿命 ^{*8} (連続使用) (h)		
	最大音響利得 (dB)	90dB入力最大出力音圧レベル (dB)	適応聴力 (平均dBまで)				
	HFA-FOG (±5dB以内)	最大値 (+3dB以下)					
Signia Active Pro Signia Active	39	118	70	充電	フル充電約26		

*5 完全防水ではありません。 *6 耳鳴りの治療及び本機能の使用については、必ず耳鼻科専門医にご相談ください

*7 補聴器本体に自然故障が生じた場合 *8 電池寿命は使用状況によって変わります

<販売名>補聴器 Signia Active

シバントス株式会社 〒242-0007 神奈川県大和市中央林間7-10-1 三機大和ビル 6F

■個人のお客様専用窓口

「シグニア補聴器」お客様コールセンター

✉ sodan.jp@signia-hearing.com

Tel:0800-888-0303

Tel:046-289-0303 Fax:046-407-1133

※フリーコールはIP電話からはつながりません。

その場合は通常の電話番号までお問い合わせください。

営業時間 9:00-17:00(土・日・祝日 定休日)

■販売店様専用問合せ窓口

カスタマーサービス

✉ cs.jp@signia-hearing.com

Tel:0800-222-4133 Fax:0800-888-4133

Tel:046-409-4133 Fax:046-407-1133

販促物注文専用Fax:050-3730-5795

※フリーコールはIP電話からはつながりません。

その場合は通常の電話番号までお問い合わせください。

営業時間 9:00-17:00(日・祝日 定休日)

シグニア補聴器のご相談・ご用命は当店へ



個人のお客様向けサイト
www.signia.net/ja-jp/



SNS公式アカウント
メールマガジン登録はこちら



6月6日は補聴器の日

聞こえの詳細な検査は、耳鼻科専門医を受診してください。補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。このカタログと実際の製品の色・形状は、印刷等の関係で異なる場合があります。

医療機器製造販売業許可番号 14B2X000018 このカタログの内容は2023年4月時点のものです。価格や仕様は予告なく変更されることがあります。23.04.JP17001330

AndroidとGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。Apple App StoreはApple Inc.の商標です。Qi(チー)は、Wireless Power Consortiumの登録商標です。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有しており、Sivantosによるこれらのマークの使用は、ライセンス許諾されています。

その他の商標・商品名に関する権利は、それぞれの所有者に帰属します。